

3m+



Sonic Clean&Care



Approved by
AIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOMATRI
Italian Dental Association



Scopri di più
Más información
Find out more
En savoir plus
Erfahren Sie mehr
Descubra mais
Μάθετε περισσότερα.

- IT** Manuale di Istruzioni
- ES** Manual de Instrucciones
- EN** Instruction Manual
- FR** Manuel d'Instructions

- DE** Bedienungsanleitung
- PT** Manual de instruções
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών


DE Sonic Clean&Care

Elektrische Zahnbürste für Babys

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Produktes und heißen Sie willkommen bei Nuvita Baby! Entdecken Sie sämtliches kompatibles Zubehör und das Nuvita-Sortiment auf www.nuvitababy.com

Die Nuvita Sonic Clean&Care Elektrische Zahnbürste wurde speziell für die Mundpflege von Babys und Kindern entwickelt. Sie wurde vom italienischen Zahnarztverband AIO zugelassen und entspricht den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hinsichtlich Baby-Mundpflege.

Regelmäßiges Zähneputzen ist wichtig für Babys und Kinder. Es trägt zur Entfernung von Zahnbelag und Bakterien bei, die Karies und Parodontitis verursachen. Zahnärzte empfehlen, zweimal täglich Zähne zu putzen – morgens und abends vor dem Zubettgehen. Zähneputzen stimuliert außerdem das Zahnfleisch, was zur Gesunderhaltung der Zähne und zur Vorbeugung von Parodontitis beiträgt. Was als Spiel mit Ihrem Kind beginnt, wird zu einer gesunden Gewohnheit und trägt ein Leben lang zur Prophylaxe von Karies, Zahn- und Zahnfleischerkrankungen bei.

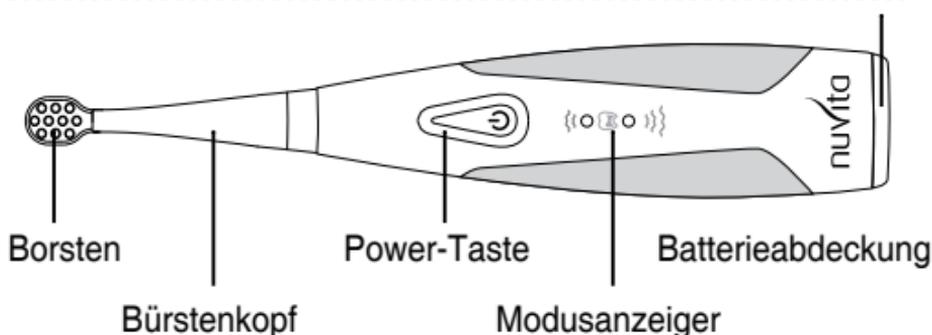


Packungsinhalt:

1. Handstück
2. 3 x 3m+ Bürstenköpfe
3. Bedienungsanleitung

Anleitung zum Zähneputzen:

1. Befeuchten Sie die Borsten und geben Sie eine ausreichende Menge Baby-Zahnpasta darauf, wenn Sie möchten (die Zahnbürste lässt sich auch ohne Zahnpasta benutzen).
2. Halten Sie die Zahnbürste in einem leicht schrägen Winkel zum Zahnfleischsaum an die Zähne
3. Drücken Sie die Power-Taste, um die Zahnbürste einzuschalten, und bewegen Sie die Zahnbürste sanft. So wählen Sie nach Wunsch Geschwindigkeit und Modus aus:
 - EINMAL DRÜCKEN
SANFT
 - ZWEIMAL DRÜCKEN
TIEFENREINIGUNG
 - DREIMAL DRÜCKEN
PULSIEREND-FUNKTION
4. Drücken Sie nach dem Zähneputzen erneut die Power-Taste, um die Baby-Zahnbürste auszuschalten, ansonsten schaltet sie sich nach 2 Minuten automatisch ab.

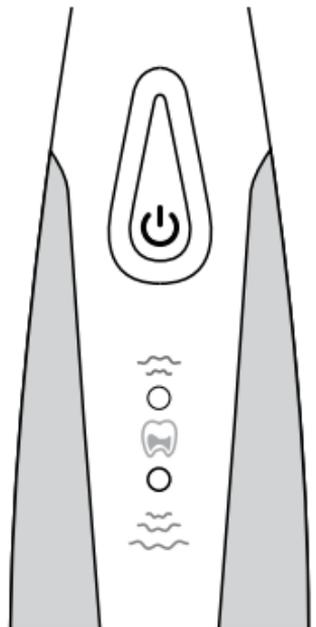

5. Die zuletzt verwendete Geschwindigkeit und der Modus werden bis zum nächsten Einschalten gespeichert.
6. Um Verspritzen zu vermeiden, schalten Sie Ihre Zahnbürste vor dem Entfernen aus dem Mund aus, indem Sie die Power-Taste drücken.


Bürstenköpfe wechseln:

Zahnärzte empfehlen, Bürstenköpfe spätestens alle 2 Monate zu wechseln, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Die Verwendung beschädigter oder kaputter Bürstenköpfe kann zu Verletzungen an Zahnfleisch und Zähnen führen. Verwenden Sie nur die Ersatz-Bürstenköpfe für Nuvita Sonic Clean&Care.

- Die kleine Größe ist geeignet für Kinder ab 3 Monaten (3 Stück enthalten)
- Die große Größe ist geeignet für Kinder ab 9 Monaten (im gut sortierten Handel erhältlich)

Anleitung:

1. Lockern und nehmen Sie den montierten Bürstenkopf ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und anschließend nach oben ziehen (2).
2. Stecken Sie den neuen Bürstenkopf in die Aussparung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis der Bürstenkopf einrastet.

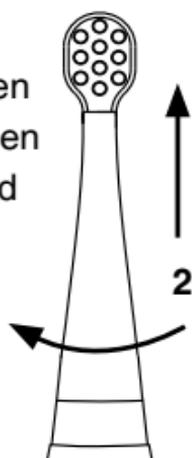

Reinigung:

Reinigen Sie Bürstenköpfe und Handstück nicht in der Spülmaschine oder in der Mikrowelle.

Handstück


1. Nehmen Sie den Bürstenkopf ab und spülen Sie den Schaftbereich vorsichtig unter fließendem warmem Wasser ab.
2. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die gesamte Oberfläche des Handstücks abzuwischen.

Bürstenkopf

1. Spülen Sie Bürstenkopf und Borsten nach jedem Gebrauch unter fließendem Wasser ab.
2. Nehmen Sie den Bürstenkopf vom Handstück ab und spülen Sie die Bürstenkopfverbindung mindestens einmal pro Woche unter fließendem warmem Wasser ab.

Batteriewechsel:

- Drehen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Handstücks mit einer Münze in Richtung (1).
2. Legen Sie 1 AAA-Alkalibatterie mit (+) nach außen zeigend ein
 3. Legen Sie die Batterieabdeckung auf und drehen Sie sie mit einer Münze in Richtung (2).

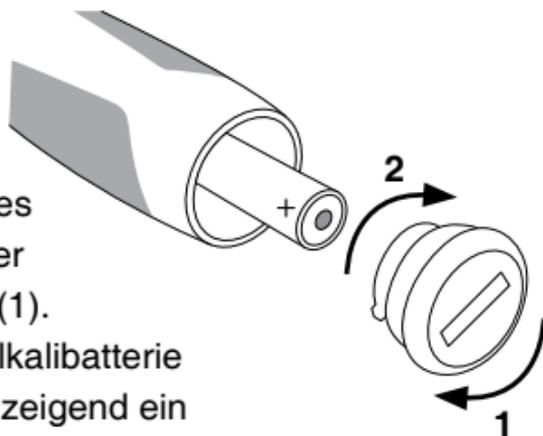

Spezifikationen:

Material Bürstenkopf und Borsten:	DuPont Nylon
Handstück:	ABS/TPE/PP
Stromzufuhr:	1 x AAA-Batterie
Vibrationstechnologie:	Schall
Frequenz:	16.000 / 22.000 Schwingungen pro Minute, vom Benutzer wählbar
Wasserdicht	
Batterielebensdauer:	bis zu 150 Tage
Produktabmessungen ohne Bürstenkopf:	105 x 25 x 25 mm
Produktstandard:	RoHS Directive 2011/65/EU 55014-1:2006+A1:2009 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Umweltschutz:

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie es bei einem offiziellen Recyclinghof ab. Damit tragen Sie zum Umweltschutz bei. Entfernen Sie vor dem Entsorgen stets die Batterie. Geben Sie die gebrauchte Batterie bei einer offiziellen Batteriesammelstelle ab.

Warnhinweise:

1. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen
2. Lassen Sie Ihr Kind nie mit einem dieser Zubehörteile in seinem Mund oder seiner Hand alleine. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
3. Dieses Produkt ist ausschließlich bestimmt für den Hausgebrauch zur Reinigung von Zähnen, Zahnfleisch und Zunge. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
4. Öffnen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht ohne Erlaubnis
5. Tauchen Sie das Produkt nicht für längere Zeit in Wasser
6. Das Produkt darf nicht hohen Temperaturen und direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden
7. Entnehmen Sie die Batterie, wenn Sie vorhaben, das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht zu verwenden.

8. Fragen Sie Ihren Zahnarzt vor Verwendung dieses Produkts, falls bei Ihrem Kind eine Mund- oder Zahnfleisch-OP durchgeführt wurde
 9. Verwenden Sie dieses Produkt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
 10. Verwenden Sie ausschließlich Bürstenköpfe, die von Nuvita und speziell für dieses Produkt hergestellt wurden.
-

GARANTIE – KONDITIONEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler. Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile). Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn: 1. Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einstimmung mit der Bedienungsanleitung ist. 2. Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert. 3. Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus). Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 monatigen Garantie: 1. Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts. 2. Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station. 3. Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist. 4. Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind. 5. Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben. Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht. Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvitababy.com