


DE Nuvita 1300 – Babywaage

1. Beschreibung

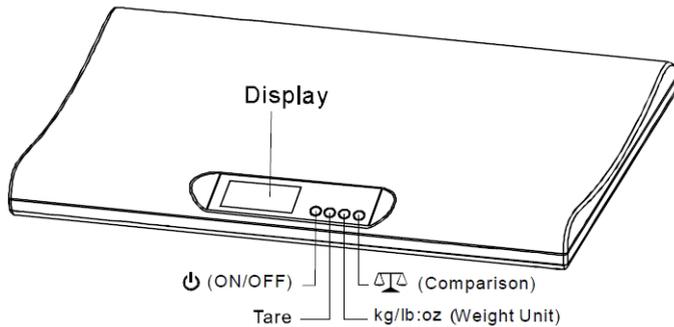

BILDSCHIRM:	Das Gewichts und weitere Informationen über das Gewicht des Babys werden angezeigt
AN/AUS TASTE	Taste zum Ein- und Ausschalten der Waage
[EIGENGEWICHT] Taste	Abziehen des Anfangsgewichts.
[Kg / lb:oz] Taste	Ändern der Gewichtseinheit
Taste	Vergleichsfunktion, Erklärung folgt in der Anleitung

2. Caratteristiche




Bereich:	von 0,02 Kg bis 18 Kg / von 1 oz bis 40 lbs
Abstufung:	5 gr. / 5 oz
Stromversorgung:	2 x Batterien AA (3,0 VDC)
Batterie Hinweise:	Das Batteriesymbol wird leuchten " " wenn die Batteriekraft gering ist
Bildschirm:	Hintergrundbeleuchtetes LCD Feld
Bildschirmabmessung:	69 x 32,5 mm
Abmessung:	540 x 345 x 57 mm
Eigengewicht:	1,95 Kg
Aufbewahrungsumfeld Temperatur:	-10°C – 55°C 10°C – 40°C
Genauigkeit des Gewichts:	4kg-9.995kg (0.010kg)
Messungen:	10kg-18kg (0.015kg)

3. Installation der Batterie

1. Drehen Sie die Waage und entfernen Sie den Deckel des Batteriefachs, welches sich unter der Waage befindet.
2. Setzen Sie 2 Standard Batterien Größe AA ein und beachten Sie bei der Einsetzung, die Polung der Batterien im Batteriefach.
3. Schließen Sie das Batteriefach und platzieren Sie die Waage auf einen flachen und harten Untergrund, um das Baby zu wiegen. Teppiche oder ein weicher Untergrund sind nicht geeignet für das Wiegen mit der Babywaage.
4. Stellen Sie vor dem Wiegen eines Babys sicher, dass der Untergrund der Waage komplett trocken und nicht rutschig ist.

4. Normale Wiegefunktion

1. Drücke Sie die Ein- und Ausschalttaste " " um die Waage einzuschalten. 4 Balken und das Batteriesymbol werden angezeigt. Dann wird das Bild auf dem Bildschirm zur Abb. 4.2 wechseln.
2. "0.000 Kg" und das Batteriesymbol werden zu sehen sein. "0:0 lb:oz" wird angezeigt, wenn die lb:oz Einheit eingestellt ist.
3. Legen Sie das Baby auf die Waage. Das Gewicht wird, wenn das Wort "Halten (hold)" erscheint, ermittelt.

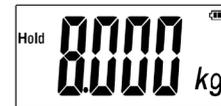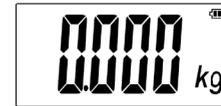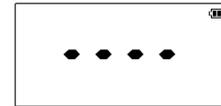

NOTIZ

Falls das Baby sich während der Wiegung bewegt, wird das Gewicht auf dem Bildschirm schwanken. Die Waage benötigt 15 Sekunden, um das Gewicht des Babys zu erfassen und dieses zu speichern. Das gespeicherte Gewicht wird 10 Sekunden auf dem Bildschirm zu sehen sein. Die Waage wird sich nach diesen 10 Sekunden automatisch ausschalten.


4. "Err" wird zu sehen sein, wenn die Waage überladen ist.




5. Eigengewichtsfunktion

Mit dieser Funktion wird ausschließlich das Gewicht des nackten Babys ermittelt, auch wenn sich ein Handtuch oder eine Decke auf der Waage befindet. Mit Hilfe der Eigengewichtsfunktion wird das Gewicht der Decke und des Handtuchs zuvor abgezogen.

1. Drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste " " um die Waage einzuschalten. 4 Balken und das Batteriesymbol werden angezeigt. Dann wird das Bild auf dem Bildschirm zur Abb. 5.2 wechseln.

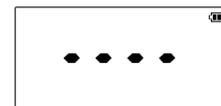

2. "0.000 Kg" und das Batteriesymbol werden zu sehen sein. "0:0 lb:oz" wird angezeigt, wenn die lb:oz Einheit eingestellt ist.

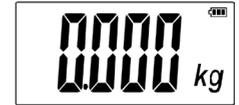

3. Legen Sie eine Decke auf die Waage. Es wird das Gewicht der Decke angezeigt.



4. Wenn das Wort "Halten (Hold)" erscheint, drücken Sie sofort die "Eigengewicht (Tare)"-Taste.




5. "0.000 Kg" (0:0 lb:oz wird angezeigt, wenn die Einheit eingestellt ist) Das Wort Eigengewicht (TARE)- und das Batteriesymbol werden zu sehen sein.



6. NOTIZ: Behalten Sie die Decke auf der Waage. Falls Sie die Decke herunter nehmen, erscheint auf dem Bildschirm ein negatives Gewicht.



7. Wickeln Sie ihr nacktes Baby in die Decke und legen Sie Ihr Baby auf die Waage. Nur das Eigengewicht des Babys wird, wenn "Halten (Hold)" erscheint, auf dem Bildschirm zu sehen sein. Die Waage wird sich automatisch nach 10 Sekunden ausschalten.

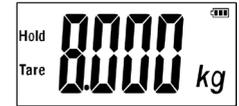


6. Einstellen der Gewichtseinheit

1. Drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste " " , um die Waage einzuschalten.
2. Bevor Sie Ihr Baby auf die Waage legen, drücken Sie die [Kg/lb:oz] Taste, um die Einheit des Gewichts auszuwählen.
3. Wenn Sie das nächste Mal die Waage benutzen, wird die eingestellte Gewichtseinheit ermittelt werden.

7. " " Vergleichsfunktion

1. Bevor Sie Ihr Baby füttern, wiegen Sie Ihr Baby (siehe Kapitel 4).
2. Das Gewicht des Babys wird gespeichert, wenn "Halten (Hold)" auf dem Bildschirm erscheint . Nehmen Sie Ihr Baby von der Waage und füttern Sie Ihr Baby.

3. Nach dem Füttern, drücken Sie die Vergleichstaste " " und die Waage wird sich einschalten. 4 Balken und das Batteriesymbol werden angezeigt und das Bild auf dem Bildschirm wird zur Abb. 7.4 wechseln.

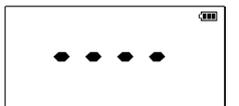

4. Das Gewicht des Babys vor der Fütterung wird zu sehen sein.
(NOTIZ: Es ist ein negativer Wert)



Fig. 7.4

5. Legen Sie Ihr gefüttertes Baby auf die Waage. Nur das Gewicht der Milch oder der Nahrung wird auf dem Bildschirm erscheinen.



Fig. 7.2

BEISPIEL

Wenn das Baby vor der Fütterung 8 Kg (ermittelt durch die normale Wiegefunktion, siehe Kapitel 4) wiegt, werden diese 8 Kg gespeichert. Wenn Sie die Vergleichstaste " " drücken wird "-8,000 Kg" (minus 8,0 Kg) auf dem Bildschirm zu sehen sein. Danach legen Sie das gefütterte Baby auf die Waage. Das Gewicht der Milch oder der Nahrung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Falls das Baby mit 320 gr. Milch gefüttert wurde, erscheint "0,320 Kg" auf dem Bildschirm. Das Gesamtgewicht des Babys mit der Milch ist:

$$8,000 \text{ Kg} + 0,320 \text{ Kg} = 8,320 \text{ Kg}$$

Die Waage wird sich nach 10 Sekunden automatisch ausschalten.

! Warnung and allgemeine Sicherheitsregeln

- Bevor Sie die Waage benutzen, lesen Sie bitte die Anleitung im Handbuch. Das Handbuch beinhaltet wichtige Informationen im Hinblick auf das Gerät und wichtige Sicherheitsvorschriften.
- Jeder nicht korrekte Betrieb oder nicht geeignete Nutzung können Schäden am Gerät verursachen oder eine Gefahr darstellen.
- Lassen Sie niemals Ihr Baby unbeaufsichtigt auf der Waage liegen
- Benutzen Sie die Waage nur zum Wiegen eines Babys im Rahmen des Maximalgewichts. Zu viel Gewicht auf der Waage kann ein Grund für Schäden und Gefahr sein.
- Um die Waage zu säubern, benutzen Sie weiche und angefeuchtete Tücher. Tauchen Sie die Waage nicht in Flüssigkeiten oder halten Sie die Waage nicht unter Wasser.
- Zum Säubern nehmen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Wenn Sie die Waage benutzen, bleiben sie von elektromagnetischen Wellen wie von Mikrowellen, Handys oder WLAN-Netzwerken fern.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss durch eine falsche Einsetzung der Batterien (Achten Sie auf die Polung)
- Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Lassen Sie ihre Kinder nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen. Besonders Plastiktüten können eine Gefahr von Ersticken darstellen .
- Im Fall einer elektrostatischen Störung, entfernen Sie

die genutzten Batterien, um wieder die normale Leistung aufzunehmen.

- Ist auf dem Bildschirm das Fehlerzeichen "Err" zu sehen , schalten Sie die Waage aus. Dann schalten Sie die Waage wieder ein und folgen Sie der Anleitung.
- Wenn Sie die Waage nicht nutzen, sollten sich keine Gegenstände auf der Fläche der Waage befinden.
- Die Waage ist nicht für eine anhaltende Belastung geeignet. Die Gewichtsermittlungsfunktion könnte beschädigt werden.
- Wenn Sie neue Batterien einsetzen wird das gespeicherte Gewicht gelöscht.
- Die Waage wird nach 1 Minute der nicht Nutzung sich automatisch ausschalten. Zum sofortigen Ausschalten der Waage, drücken Sie die Ein- und Ausschalttaste " " und halten Sie diese für eine halbe Sekunde.
- Vermeiden Sie schnelle Bewegungen der Waage und lassen Sie die Waage nicht fallen.
- Die Waage ist für den privaten Gebrauch und für die Ermittlung des Gewichts eines Babys geeignet. Es ist nicht erlaubt mit der Waage Medizin zu wiegen oder die Waage für einen weniger privaten Gebrauch zu nutzen.
- Die Waage ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und somit von der Verpflichtung der gesetzlichen Inspektion befreit. Dieses Gesetz gewährleistet den Schutz der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der regelmäßigen Vorgänge.

GARANTIE – KONDITIONEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten(gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstköpfe und Verschleißteile).

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

- Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einstimmung mit der Bedienungsanleitung ist.
 - Das Produkt wurde verändert und /oder manipuliert.
 - Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus).
- Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 Monatigen Garantie:
- Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
 - Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.

- Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist , der nicht in Einstimmung mit der Anleitung im Handbuch ist.
- Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
- Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite www.nuvtbaby.com