



# Primipoesi




Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Babywaage entschieden haben. Lesen Sie bitte diese Anweisungen mit Sorgfalt und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

## MERKMALE UND FUNKTIONEN


- Genaue Gewichtsmessung in 5-g-Schritten bis zu 20kg
- HALTEFUNKTION erfasst das genaue Gewicht eines aktiven Babys.
- TARA-FUNKTION zieht zusätzliches Gewicht von Windeln, Bekleidung oder Decken ab.
- Leicht lesbares LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
- Einzigartiges Design mit Touch-Button.
- Funktioniert mit 2 AAA-Batterien (nicht enthalten).
- Automatische Abschaltung und Anzeige für niedrigen Batteriestand.

## DISPLAY

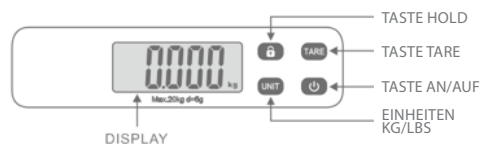

## STROMVERSORGUNG

Bitte legen Sie die Batterien ein und entfernen die Schutzfolie von den Batterien, bevor Sie diese benutzen. Wenn „Lo“ auf dem Display erscheint, müssen die Batterien gewechselt werden.

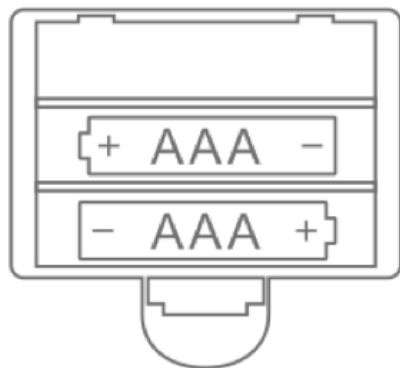

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Gewicht wird ab einem Mindestgewicht von 30 g in Schritten von 5 g angezeigt. Drücken Sie die Taste (⏻), um die Waage einzuschalten. Wenn „0.000kg“ auf dem Display erscheint, ist die Waage für die Messung bereit. Legen Sie das Baby vorsichtig auf die Waage. Achten Sie besonders auf den Kopf des Babys.

### Haltefunktion:

Die Waage verfügt über eine „HALTEFUNKTION“: **AUTOMATISCHES HALTEN** und **MECHANISCHES HALTEN**.

#### AUTOMATISCHES HALTEN:

Wenn das Baby auf der Wiegeplattform platziert wird, kann es sein, dass es sich bewegt. Wenn es still genug hält, wird die AUTOMATISCHE HALTEFUNKTION das Gewicht auf dem Display anzeigen. Das Zeichen (🔒) blinkt, und das Gewicht wird festgestellt.

#### MECHANISCHES HALTEN:

Wenn das Baby sich zu stark bewegt, können Sie durch Drücken der Taste (🔒) die MECHANISCHE HALTEFUNKTION auswählen.

Das Zeichen (🔒) blinkt und das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.

Das Zeichen (🔒) bleibt auf dem Display angezeigt, bis Sie die Taste (🔒) oder „TARA“ drücken. Dann erscheint „0.000kg“, was bedeutet, dass die Waage bereit für den nächsten Wiegevorgang ist.

### Tara-Funktion:

Wenn Sie ein Handtuch oder eine Decke auf die Waage legen möchten, um das Baby zu wiegen, tun Sie dies bitte, BEVOR Sie die Waage einschalten. Wenn das Handtuch oder die Decke mehr als 30 g wiegt, drücken Sie bitte die Taste „TARA“. „TARA“ wird dann auf dem Display angezeigt. Legen Sie das Baby dann auf das Handtuch oder die Decke. Das Gewicht des Babys wird jetzt angezeigt.

### Einheiten:

Die Waage kann die Einheiten Kilogramm (kg) und Pfund (lb) anzeigen. Zwischen diesen Einheiten kann gewechselt werden, indem Sie die Taste „UNIT“ drücken.

## AUSSCHALTEN

Nach Beendigung des Wiegevorgangs können Sie die Waage durch Drücken der Taste (⏻) ausschalten. Die Waage schaltet sich automatisch ab, wenn nach 180 Sekunden kein Wiegevorgang ausgeführt wurde.

## ÜBERLASTANZEIGE

Die Waage kann ein Maximalgewicht von 20 kg tragen. Bei Überlast erscheint die Anzeige „EEEE“ auf dem Display.

## PFLEGE UND SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie die Waage für die größte Genauigkeit auf eine harte, flache Oberfläche.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem feuchten Tuch und, falls erforderlich, ein wenig Spülmittel reinigen. Tauchen Sie die Waage niemals ins Wasser und halten Sie sie nicht unter einen laufenden Wasserstrahl.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und Wärmequellen.
- Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Entsorgen Sie alte Batterien NICHT im Feuer. Die Batterien können explodieren oder auslaufen. Recyceln Sie die Batterien oder entsorgen Sie sie als gefährliche Abfälle.
- Wenn die Waage für einen langen Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterien raus.

---

## GARANTIE – KUNDENBEDINGUNGEN UND BEDINGUNGEN

In Zustimmung mit laufenden Vorschriften hat das Produkt eine Garantie von 24 Monaten (gesetzliche Garantie). Die Garantie startet am Tag des Kaufdatums auf ihrem Beleg und haftet für Material- oder Produktionsfehler.

Ausgeschlossen der gesetzlichen 24 monatigen Garantie sind Verbrauchermaterialien (Bsp. Batterien, Bürstenköpfe und Verschleißteile).

Die gesetzliche Garantie von 24 Monaten erlischt wenn:

1. Das Produkt unzulässig verändert wurde und dadurch einen ästhetischen Schaden aufweist, der nicht in Einklang mit der Bedienungsanleitung ist.
2. Das Produkt wurde verändert und/oder manipuliert.
3. Die Störungsursache ist durch eine schlechte Behandlung des Gegenstandes entstanden. (Bsp. Oxidation oder die Farbe blättert auf Grund von Wassereinfluss oder anderen Flüssigkeitseinflüssen ab, Schmutz blockiert die Einheiten oder Batterieflüssigkeit läuft aus).

Die folgenden Punkte sind ausgeschlossen von der gesetzlichen 24 monatigen Garantie:

1. Die Kosten beziehen sich auf den Austausch oder auf die Reparatur von Verschleißteilen oder auf eine übliche Erhaltung des Produkts.
2. Die Ausgaben beziehen sich auf den Transport des Produkts zum oder vom Geschäft, wo das Produkt erworben wurde oder von der berechtigten Übergabe Station.

3. Ein Schaden, der das Ergebnis einer nicht zulässigen Installation oder einer unzulässigen Nutzung des Produkts ist, der nicht in Einklang mit der Anleitung im Handbuch ist.
4. Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder schlechte Bedienungen, die nicht vereinbar mit dem Produkt sind.
5. Nachlässige Fehler, die Auswirkungen auf die Produktleistung haben.

Der Hersteller, Händler und alle die am Verkauf beteiligt sind, übernehmen keine Haftung für Verluste oder wirtschaftlichen Schäden aus der Fehlfunktion des Produkts. In Übereinstimmung mit geltenden Vorschriften müssen der Hersteller, Händler und allen Beteiligten am Verkauf nicht in jedem Fall Schadensersatz übernehmen, einschließlich direkte oder indirekte Schäden, außerplanmäßige Minderungen, Verlust von Ersparnissen und zusätzliche Schäden oder andere Konsequenzen, die nicht die Garantie, Vertrag oder Haftung verletzen. Missverhalten, die Unfähigkeit das Produkt zu nutzen oder das Vernachlässigen von Papier- und digitalen Dokumenten, einschließlich der Mangel an Service verletzt die Garantie, den Vertrag und die Haftung nicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Hilfe-Service auf unserer Internetseite [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com).