



Primipoesi



Gentile Cliente,

Grazie per avere acquistato la bilancia elettronica Nuvita 1310. La preghiamo di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle per una eventuale consultazione futura.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Misura in modo preciso il peso fino ad un max di 20Kg in incrementi di 5 grammi.
- La funzione HOLD permette di misurare il peso anche quando il bambino si muove.
- La funzione TARA permette di sottrarre il peso, precedentemente aggiunto, di eventuali pannolini, copertine o indumenti al fine di ottenere un peso estremamente preciso.
- Display LCD retroilluminato per una chiara lettura dei numeri.
- Tasti a microcorsa per una migliore selezione delle funzioni.
- Utilizza 2 batterie AAA non incluse.
- Dotata di spegnimento automatico in caso di inattività e di indicatore di batteria scarica.

DISPLAY




PRIMA DI ACCENDERLA

Inserite le batterie nell'apposito scomparto. Attenzione: quando la scritta "Lo" appare sullo schermo sostituite le batterie.

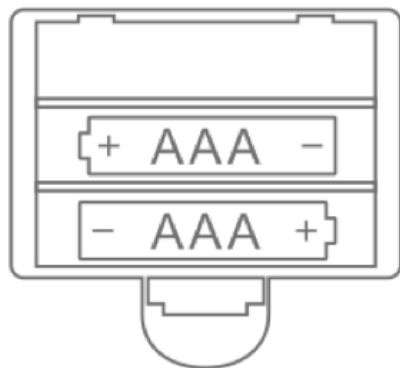

ISTRUZIONI PER L'USO


Il peso viene indicato in incrementi di 5g a partire da un minimo di 30g fino ad un massimo di 20Kg. Per accendere la bilancia premete il tasto  to switch on the scale.

Quando "0.000kg" appare sul display la bilancia è pronta per la misurazione. Appoggiate delicatamente il bambino sulla bilancia avendo particolare cura per la sua testa.




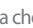
Funzione "Hold":

La bilancia è dotata della funzione **Hold** sia **AUTOMATICA** che **MANUALE**.

HOLD AUTOMATICA:

Quando il bambino è appoggiato sul piatto della bilancia, normalmente tende a muoversi; attraverso la funzione Hold Automatica la bilancia riesce a fermare la misurazione, in modo automatico, non appena il bambino resta fermo per un tempo sufficiente. Vedrete il simbolo  lampeggiare e ciò significa che il peso è stabilizzato.

HOLD MANUALE:

Se il bambino si muove in modo vigoroso e/o continuo sarà necessario stabilizzare il peso manualmente premendo il tasto . Quando vedrete il simbolo  lampeggiare significa che il peso è stabilizzato. Il simbolo  resta sul display fino a che non premete il tasto  o il tasto "TARA". Una volta premuto la bilancia si resetterà e mostrerà ancora l'indicazione "0.000kg" e sarà pronta per una nuova misurazione.

Funzione Tara:


Se desiderate porre una copertina od un asciugamano sul piatto della bilancia per appoggiare il Vostro bimbo su una superficie più morbida fatelo seguendo questo accorgimento:

PRIMA accendete la bilancia, se ciò che avete appoggiato pesa più di 30g, Premete il tasto TARA. Il simbolo TARA apparirà sullo schermo, Ora appoggiate il bambino sul piatto della bilancia. Il peso che vedrete verrà calcolato automaticamente sottraendo il peso della copertina o dell'asciugamano restituendovi il VERO peso del bambino.

Unita' di misura:

La bilancia può effettuare misurazioni in Kilogrammi o in Libbre. Per selezionare l'unità di misura desiderata premete il tasto "UNIT".

SPEGNIMENTO

Terminata la misurazione del peso potete spegnere la bilancia premendo il tasto . In alternativa la bilancia si spegnerà automaticamente se non utilizzata per 180 secondi.

INDICAZIONE DI SOVRACCARICO

La bilancia misura fino ad un massimo di 20 Kg. Superato tale peso "EEEE" comparirà sul display.

CURA E MANUTENZIONE

- Abbiate cura di porre la bilancia su una superficie piatta e rigida per assicurare la massima accuratezza di misurazione;
- Pulizia: pulite la bilancia con un panno umido ed aggiungete una piccola quantità di detergente se necessario. Non immergete mai la bilancia in acqua nè risciacquatela sotto l'acqua corrente.
- Proteggete la bilancia da urti, umidità, polvere, additivi chimici, cambi drastici della temperatura e campi elettromagnetici, tenetela lontana da fonti di calore.
- Tenete il materiale di imballaggio lontano dai bambini.
- NON gettate le batterie esauste nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere il liquido interno. Riciclatele negli appositi contenitori.
- Nel caso non utilizzate la bilancia per lunghi periodi abbiate cura di rimuovere le batterie.

GARANZIA - CONDIZIONI

Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino).

La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura).

La garanzia legale di 24 mesi non è valida qualora:

1. Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale .
2. Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso.
3. La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie).

Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia .

3. Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni .
4. Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto .
5. Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto .

Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto . In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causati dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio .

Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visitare il sito www.nuvitababy.com.