

# MATERNO TWIST

## Bomba de Extracção Manual

### Introdução


Caro Cliente, adquiriu uma das mais avançadas bombas para tirar leite atualmente disponíveis no mercado. Concebemos este dispositivo para que fosse o mais fácil possível de utilizar, mas, apesar disso, precisará ainda de dedicar algum tempo a ler estas instruções de forma a usufruir a 100% dos benefícios que este produto lhe pode proporcionar. Todas as mães precisam de uma boa bomba para tirar leite que seja perfeita para usar em diferentes situações. Esta bomba para tirar leite irá permitir-lhe extrair confortavelmente o seu leite materno quer esteja em sua casa ou em viagem.

**Por favor, guarde o guia num local seguro e seco para futura consulta.**

### Conteúdo da Embalagem



Caso um ou mais itens estejam em falta ou danificados, queira contactar a loja onde realizou a compra e pedir a substituição.

1. Tampa antipoeira
2. Copa de massagem de silicone
3. Corpo da Bomba para tirar leite incluindo a flange
4. Sucção do diafragma
5. Tampa da Bomba para tirar leite
6. Alça
7. Pistão com 2 Níveis
8. Válvula de Sucção
9. Biberão completo (150ml)
10. Base
11. Tampa antipoeira
12. Tetina
13. Anel
14. Disco de vedação
15. Corpo extra do biberão (150 ml) apenas
16. Saco de Veludo (não ilustrado no diagrama)

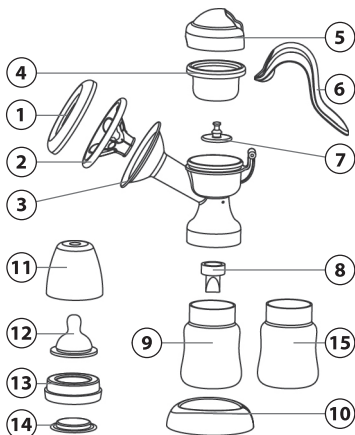

### Passos para montar a bomba de leite

1. Coloque firmemente o pistão dentro da sucção do diafragma.
2. Coloque a sucção do diafragma no corpo da bomba de tirar leite. Certifique-se de que a borda das pregas de silicone cobre a margem circular. Assegure-se de que fica perfeitamente encaixada.

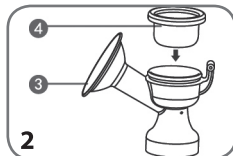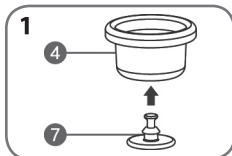

3. Coloque a copa de massagem de silicone com firmeza na flange.

4. Fixe a alça no pistão.






5. Ajuste a tampa da bomba de tirar leite corretamente.

6. Cubra a flange com a tampa antipoeira.

7. Instale lenta e firmemente a válvula de sucção.

8. Atarraxe firmemente o biberão no corpo da bomba de tirar leite.

9. Para concluir, pressione o corpo da bomba de tirar leite na base.

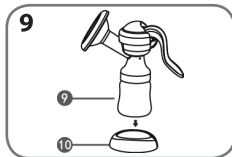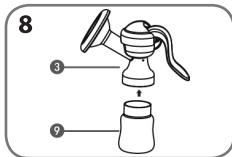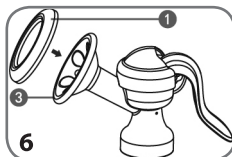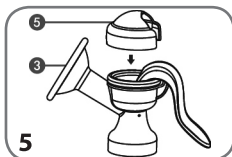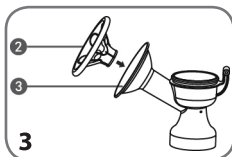

## Uso da bomba de tirar leite

1. Lave as mãos antes de usar a bomba de tirar leite.

2. Certifique-se de que todas as partes estão limpas, secas e devidamente montadas antes de qualquer utilização

3.

Relaxe enquanto sentada.

Pode conseguir um efeito mais adequado usando almofadas de gel térmico para o peito ou uma toalha quente antes da extração de leite. Dedique alguns momentos a estimular (cerca de 60-90 segundos) o peito através de massagem seguido de um rápido bombeamento suave usando o Nível 1 do pistão.

4.

Inicie o modo de expressão mudando para o Nível 2 do pistão e, de seguida, pressione a alça



com um apoio cómodo. Segure o peito com a outra mão de forma a garantir que não há fugas de ar e conseguir um estado de vácuo.

5. Este produto foi concebido com um sistema de rotação especial.

Rode a alça para um ângulo confortável para facilitar a posição de extração de leite.

6.

Separe o biberão do corpo da bomba de leite após a conclusão da expressão.

O leite materno extraído está cheio de elementos nutritivos. Guarde-o num recipiente adequado de forma a mantê-lo fresco – refrigere ou congele de imediato.

Para evitar a dor nos mamilos, deixe de bombear se não conseguir expressar o leite materno. Pare imediatamente a expressão de leite materno se estiver com dor nos dedos, mão ou pulso.

# Limpeza da bomba de tirar leite

**Por favor, após cada utilização limpe a bomba de tirar leite.**

Desmonte a bomba de tirar leite e lave todas as peças na máquina de lavar louça ou com água quente com detergente sem aroma, de seguida passe abundantemente por água. Recomendamos que, após cada utilização, esterilize as peças para evitar que fique qualquer odor nas mesmas. Os odores que ficam nas peças após a lavagem desencorajam o bebé de tomar o leite materno. Não use detergentes agressivos ou agentes antibacterianos.

## Serviço

Foram tomados todos os cuidados na execução dos produtos, acessórios e documentação fornecidos na embalagem, pelo que, em caso de problemas, é aconselhável que repita as operações seguindo fielmente as instruções contidas no manual.

Para obter mais informações sobre o serviço de assistência consulte o website: [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)



- Use apenas os acessórios fornecidos na embalagem.
- **Certifique-se de que o dispositivo não seja exposto a luz solar direta ou a calor excessivo.**

**Este dispositivo foi concebido e destina-se unicamente ao uso pessoal pelo que não é aconselhável partilhá-lo com outras pessoas. Se precisar de usar peças partilhadas com outras pessoas assegure-se de que todas tenham o seu próprio kit pessoal de elementos que entram em contacto com o corpo e com o leite (copa de silicone, biberão, etc.). Esterilize sempre todas as peças**

- **Não use o dispositivo em caso de sonolência ou outros sintomas semelhantes e adie a extração de leite para um momento mais favorável.**

## GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre o material e defeitos de fabricação, a partir da data de aquisição (ver recibo de venda).

A garantia de 24 meses, não inclui os danos causados pelo uso habitual de partes identificados como "consumíveis" (por exemplo, baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a usura).

A garantia legal de 24 meses é nula se:

1. Produto sofreu dano estético, devido ao uso inadequado não em conformidade com as instruções do manual.
2. Este produto foi modificado e / ou adulterados.
3. A causa da falha foi devido a falta de manutenção dos componentes e/ou acessórios e/ou materiais (por exemplo, de oxidação e/ou de escala individuais devido à retenção de água ou outros líquidos, os sedimentos bloqueando o sensor, vazamento de líquido corrosivo das baterias).

O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses:

1. Custos relacionados com as substituições e/ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos para a manutenção normal do produto.
2. Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para a loja onde comprou ou a o centro de recolha autorizado para receber os produtos dentro da garantia.
3. Danos causados por ou resultantes de instalação inadequada ou o uso indevido não de acordo com as instruções do manual de instruções.
4. Danos devido a desastres naturais, a eventos acidentais ou condições adversais não compatíveis com o produto.
5. Defeitos que têm um efeito insignificante no desempenho do produto.

O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumimos qualquer responsabilidade por perdas e danos económicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não estão respondendo em qualquer caso, por danos, incluindo, os diretos indiretos, perda de rendimento líquido, perda de poupanças e de dano adicional e outros detalhes consequências que vão além do danos causados pela violação da garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o produto e/ou documentos impressos e eletrónicos, incluindo a falta de serviço.

O produto cumpre todos os requisitos de migração gerais declarados na Diretiva da Comissão Europeia 2002/72/CE e 2007/19/CE e as suas alterações relacionadas com materiais plásticos e artigos destinados a entrarem em contacto com géneros alimentícios aquosos (PH > 4.5) e géneros alimentícios gordos.

O produto é compatível com as seguintes normas / padrões:

### EN-1186-3:2002

Materiais em contacto com alimentos, Plásticos, materiais de Embalagem, Recipientes, processos de produção Alimentar, tecnologia Alimentar, testes em Géneros Alimentícios, Migração (química), Contaminantes, determinação de Contaminantes (alimentar), análises e testes Químicos.

### EN-1186-2:2002

Materiais em contacto com alimentos, Plásticos, materiais de Embalagem, Recipientes, processos de produção Alimentar, tecnologia Alimentar, ensaios em Géneros Alimentícios, Azeite, óleos Vegetais, Migração (química), Contaminantes, análise e ensaios Químicos, determinação de Contaminantes (alimentares), Gorduras.