



IT Tiralatte Elettrico  
ES Sacaleche Eléctrico  
EN Electric Breast Pump  
FR Tire-Lait Électrique  
DE Elektrische Milchpumpe  
PT Bomba Eléctrica de Mama  
GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

# Materno Go



1282M

IT Manuale di Istruzioni  
ES Manual de Instrucciones  
EN Instruction Manual  
FR Manuel d'Instructions

DE Bedienungsanleitung  
PT Manual de instruções  
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

Αγαπητή Πελάτισσα, αγοράσατε μία από τις πιο αξιόπιστες αντλίες μαστού που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στην αγορά. Μελετήσαμε αυτή τη συσκευή για να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερη προς το χρήστη, αλλά, πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο ακόμα στην ανάγνωση αυτών των οδηγιών αλλιώς δεν θα λάβετε το 100% από τα οφέλη που μπορεί να σας δώσει αυτό το προϊόν. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AA, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε εν κινήσει.


## Προφυλάξεις

- Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικα, με πλήρη προσοχή σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
- Μην χρησιμοποιείτε άλλον μετασχηματιστή εκτός από τον παρεχόμενο
- Μην διπλώνετε ή δένετε τον σωλήνα σύνδεσης (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 10) κατά τη διαδικασία χρήσης
- Παρακαλούμε κρατήστε το προϊόν ή αποσυναρμολογημένα μέρη του μακριά από το μωρό
- Μην αποσυναρμολογείτε τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9) σε οποιαδήποτε περίπτωση, αυτή επισκευάζεται ή αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή επαγγελματία.

## Περιεχόμενο Συσκευασίας

Πριν από τη συναρμολόγηση και τη χρήση του ηλεκτρικού θήλαστρου βεβαιωθείτε ότι στο εσωτερικό της συσκευασίας υπάρχουν τα ακόλουθα εξαρτήματα, ανατρέξτε στο κατάστημά σας σε περίπτωση που τυχόν εξαρτήματα λείπουν:

1. Κάλυμμα ανθεκτικό στη σκόνη
2. Κύπελλο σιλικόνης
3. Σώμα μαστού
4. Αντι-διαρροή σιλικόνης
5. κάλυμμα έναντι διαρροών
6. Βαλβίδα Σιλικόνης
7. Μπιμπερό Mimic (150 ml.)
8. Μιμητική βαλβίδα φιάλης σιλικόνης
9. Μονάδα Ελέγχου Θήλαστρου
10. Συνδετικός Σωλήνας
11. Κάλυμμα φιάλης κατά της σκόνης
12. Μπιμπερό
13. Θηλή μπιμπερό
14. Τροφοδοτικό
15. Βελούδινη τσάντα (δεν υπάρχει στο σχήμα)
16. προσαρμογέα

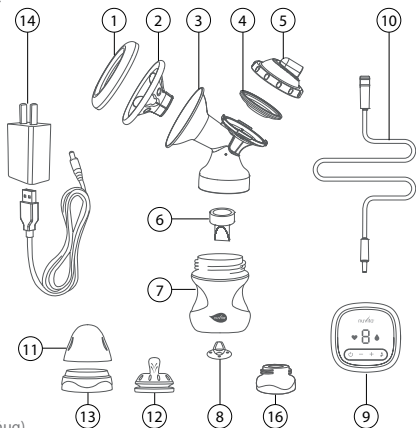

# Οδηγίες καθαρισμού

- Πριν τον καθαρισμό και την αποστείρωση, αποσυναρμολογήστε τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον μαστό ή το μητρικό γάλα, εκτός από τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9).
- Μην καθαρίζετε τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9) μέσα σε νερό.
- Μην αποστειρώνετε τη Μονάδα Ελέγχου Αντλίας Μαστού (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 9) με αποστειρωτή ατμού.
- Μην αποστειρώνετε με θερμότητα τον σωλήνα σύνδεσης (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 10). Μόνο ψυχρή αποστείρωση. Διαφορετικά, καθαρίστε με ζεστό σαπουνόνερο και στη συνέχεια ξεπλύνετε με αποστειρωμένο νερό.
- Καθαρίστε τα μέρη αμέσως μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε την εναπόθεση γάλακτος και την ανάπτυξη βακτηρίων.
- Τοποθετήστε τα καθαρισμένα μέρη σε στεγνή καθαρή πετσέτα σε σκιερό και δροσερό μέρος.

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος


Μοντέλο μονής επαναφορτιζόμενης ηλεκτρικής αντλίας μαστού για τη μεγιστοποίηση της διαδικασίας εξαγωγής γάλακτος. Είναι σχεδιασμένο για να προσομοιώνει το ρυθμό απορρόφησης του μωρού.


1. Αυτό το θήλαστρο χρησιμοποιεί Τεχνολογία 2 Φάσεων:
  - Φάση με 9 Αυτόματα επίπεδα προσομοίωσης για λειτουργία 2 λεπτών
  - Φάση με 9 Επιπέδα για καλύτερη δράση εξαγωγής
2. Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με ένα σύστημα προστασίας κατά της αντιρροής η οποία εμποδίζει το μητρικό γάλα από το να επιστρέψει στη μονάδα ελέγχου και να προκαλέσει ζημιές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής γάλακτος.
3. Το 1282Mb σας είναι εφοδιασμένο με λειτουργία μνήμης
4. Το 1282M είναι φορητό (AC/DC και λειτουργεί με μπαταρία) είναι κατάλληλο για ταξίδια και ιδανικό για εξαγωγή γάλακτος στην εργασία.


## Περιγραφή της Μονάδας Ελέγχου της Αντλίας

- |                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| A1. Κουμπί Ενεργοποίησης<br>Απενεργοποίησης | B1. Δείκτης επιπέδου                 |
| A2. Κουμπί Εναλλαγής Λειτουργιών            | B2. Ένδειξη λειτουργίας<br>διέγερσης |
| A3. Κουμπί Αύξησης Επιπέδου<br>Απορρόφησης  | B3. Ένδειξη λειτουργίας μάλαξης      |
| A4. Κουμπί Μείωσης Επιπέδου<br>Απορρόφησης  |                                      |

### Επίπεδα συχνότητας απορρόφησης του Nuvita 1282M:





 1 ΣΕ 9 Αυτή είναι η λειτουργία προσομοίωσης με γρήγορο και γρήγορο ρυθμό αναρρόφησης.

 1 ΣΕ 9 Αυτή είναι η λειτουργία Εξαγωγής. Προσομοιώνει την αναρρόφηση ενός μωρού. Ο ρυθμός αυτής της φάσης είναι πιο αργός, πιο βαθύς και διαρκεί περισσότερο.

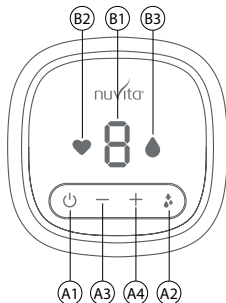



# Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε το κύπελλο σιλικόνης στο θήλαστρο, όπως φαίνεται στην εικόνα (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 2).
2. Τοποθετήστε τη σιλικόνη κατά της διαρροής (Περιεχόμενο Πακέτου Αρ.4) με το κάλυμμα κατά της διαρροής (Περιεχόμενο Πακέτου Αρ.5) όπως φαίνεται παρακάτω. Στοχεύστε στη μικρή εγκοπή και βιδώστε το κάλυμμα κατά της διαρροής, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Πιέστε σφιχτά τη βαλβίδα σιλικόνης στη βαλβίδα αναρρόφησης. Στερεώστε τη βαλβίδα αναρρόφησης στο κατώτερο άκρο του θήλαστρου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 6).
4. Για να συνδέσετε το πάνω μέρος του θήλαστρου με τον μακρύ λαϊμό της φιάλης, περιστρέψτε μέχρι να εφαρμοστεί στενά.
5. Τοποθετήστε το σωλήνα σύνδεσης μέσα στη διαχωριστική ζώνη του άνω καλύμματος κατά της έκχυσης (Περιεχόμενο Πακέτου Αριθμ. 10). Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα σύνδεσης μέσα στην υποδοχή αναρρόφησης της αντλίας. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα. Τοποθετήστε τη φιάλη στη βάση της.

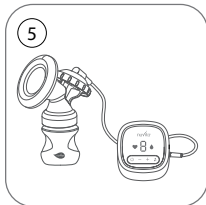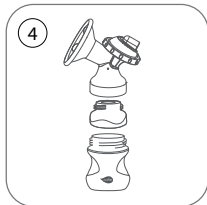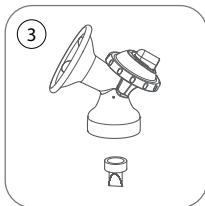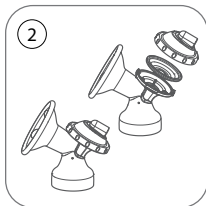

# Λειτουργία



1. Παρακαλούμε πλύντε τα χέρια σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του θήλαστρου είναι καθαρισμένα και έχουν συναρμολογηθεί σωστά βάση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου.
2. Καθίστε χαλαρά. Χρησιμοποιήστε ένα θερμικό επίθεμα στήθους από ζελέ ή μια ζεστή πετσέτα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εξαγωγής.
3. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να στοχεύσετε με τη θηλή το κέντρο του θήλαστρου και βεβαιωθείτε ότι ακουμπά σφιχτά και αεροστεγώς χωρίς να μπαίνει αέρας μέσα και έξω.
4. Για ενεργοποίηση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ενεργοποίησης. Η οθόνη της συσκευής θα πραγματοποιήσει αυτοέλεγχο και θα τρεμοπαιεί. Στη συνέχεια, η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία διέγερσης. Το εργοστασιακό προεπιλεγμένο επίπεδο είναι το επίπεδο 5. Μετά από 2 λεπτά διέγερσης, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε λειτουργία μάλαξης. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά λειτουργίας.
5. Κατά τη λειτουργία Εξαγωγής, πατήστε το κουμπί + ή το κουμπί - για να επιλέξετε επίπεδο από το L1 ως το L9. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με λειτουργία μνήμης. Στον επόμενο θηλασμό θα θυμάται το προηγούμενο επίπεδο που έχετε επιλέξει.
6. Αποσυναρμολογήστε, καθαρίστε και αποστειρώστε τα μη ηλεκτρονικά εξαρτήματα για την επόμενη χρήση.

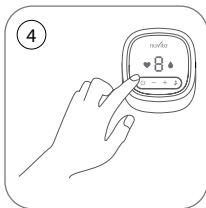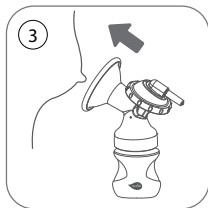

## Εγκατάσταση μετασηματιστή

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν συνδέσετε τον μετασηματιστή.

1. Τοποθετήστε το στρογγυλό φικς από τον μετασηματιστή στην αντίστοιχη πρίζα της Μονάδας Ελέγχου και τον μετασηματιστή στην πρίζα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
2. Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί, το ψηφίο στην οθόνη (ένδειξη στάθμης) θα τρεμοπαιζει, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί.
3. Κατά τη φόρτιση, η γραμμή του ψηφίου στην οθόνη θα κινείται δεξιόστροφα και θα τρεμοπαιζει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση φόρτισης όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

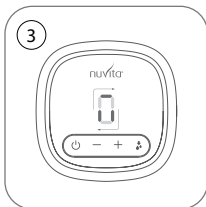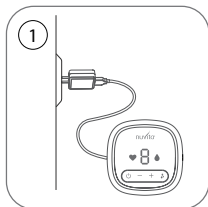

**ΣΕΡΒΙΣ:** Έχει ληφθεί κάθε φροντίδα στην υλοποίηση των προϊόντων, εξαρτημάτων που παρέχονται στο κουτί και στα έγγραφα που παρέχονται, και σε περίπτωση προβλημάτων είναι ενδεδειγμένο να επαναλάβετε τις κινήσεις ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία βοήθειας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: [www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

**ΕΓΓΥΗΣΗ- ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:** Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής παρέχει στον καταναλωτή μια νόμιμη εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. Εξαιρούνται από την εγγύηση τα "αναλώσιμα" μέρη (πχ μπαταρίες, βουρτσάκια ή μέρη που υπόκεινται σε φθορά). **Η νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών ακυρώνεται εάν:** 1) Το προϊόν έχει υποστεί αισθητή βλάβη εξαιτίας λανθασμένης χρήσης που δεν συνάδει με τις οδηγίες του χειριδίου. • Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί. • Αιτία της αποτυχίας χρήσης ήταν η ανεπαρκής συντήρηση των εξαρτημάτων/των μερών ( πχ οξείδωση ή σκουριασμά λόγω κατακράτησης νερού ή άλλων υγρών, κατακράθια που μπλοκάρουν τον αισθητήρα, διαρροή υγρού μπαταριών). **Εξαιρούνται τα παρακάτω από τη νόμιμη εγγύηση των 24 μηνών:** 1) Κόστος αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή κόστος κανονικής συντήρησης του προϊόντος. 2) Το κόστος και οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στη μεταφορά του προϊόντος από και προς το κατάστημα όπου αγοράστηκε για την παραλαβή των μερών που καλύπτονται από την εγγύηση. 3) Βλάβη που προκαλείται από λανθασμένη τοποθέτηση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης του χειριδίου. 4) Βλάβη εξαιτίας φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων ή δυσμενών συνθηκών που δεν είναι συμβατές με το προϊόν. 5) Ελαττώματα που έχουν ασημαντη επίδραση στην απόδοση του προϊόντος. Ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν φέρουν καμία ευθύνη για απώλειες ή οικονομική ζημία από την δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες, ο κατασκευαστής, ο διανεμητής και όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην πώληση δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων άμεσων ή έμμεσων, απώλεια καθαρών εσόδων ή οικονομικών και άλλων καταστάσεων που παραβιάζουν την εγγύηση, το συμβόλαιο, την αντικειμενική ευθύνη ή άλλους λόγους που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του προϊόντος και των χάρτινων και ηλεκτρονικών εγγράφων, περιλαμβανομένης της έλλειψης υπηρεσιών.



[www.nuvitababy.com](http://www.nuvitababy.com)

Imported/Distributed by  
Anteprima Brands International Ltd  
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia  
Malta - Europe