



IT Tiralatte Elettrico
ES Sacaleche Eléctrico
EN Electric Breast Pump
FR Tire-Lait Électrique
DE Elektrische Milchpumpe
PT Bomba Eléctrica de Mama
GR Ηλεκτρικό Θήλαστρο

Materno Go



1282M

IT Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Instruction Manual
FR Manuel d'Instructions

DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções
GR Εγχειρίδιο οδηγιών

Gentile Cliente, hai acquistato uno dei tiralatte più affidabili attualmente disponibili sul mercato. Abbiamo creato questo apparecchio per essere il più possibile facile da usare, ma le chiediamo di voler ancora investire una piccola quantità del suo tempo nella lettura di le istruzioni o non le sarà possibile ottenere il 100% dei vantaggi che questo prodotto può offrire. La preghiamo di conservare le manuale per ogni futura necessità. Si assicuri di avere con sé quattro batterie alcaline AA per l'uso in viaggio.


Precauzioni

- Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il prodotto
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo da adulti con la massima attenzione durante l'intero processo
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione diverso da quello fornito
- Non deformare o annodare il tubo di collegamento (*Contenuto della confezione n. 10*) durante il processo di utilizzo
- Si prega di tenere il prodotto o le parti smontate fuori dalla portata del bambino
- Non smontare l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) per nessun motivo; deve essere riparato o sostituito dal produttore o da un professionista.

Contenuto della confezione

Prima dell'assemblaggio e dell'uso del tiralatte elettrico, si assicuri che la confezione contenga i seguenti accessori; la preghiamo di rivolgersi al suo negoziante in caso di parti mancanti:

1. Copertura anti polvere
2. Coppa per massaggio in silicone
3. Corpo tiralatte
4. Membrana anti fuoriuscita in silicone
5. Coperchio anti fuoriuscita
6. Valvola aspirazione
7. Biberon Mimic (150 ml.)
8. Valvola in silicone per biberon Mimic
9. Centralina tiralatte
10. Tubo collegamento
11. Copertura anti polvere biberon
12. Tettarella biberon
13. Anello biberon
14. Adattatore di alimentazione
15. Sacchetto in velluto (non in figura)
16. Adattatore

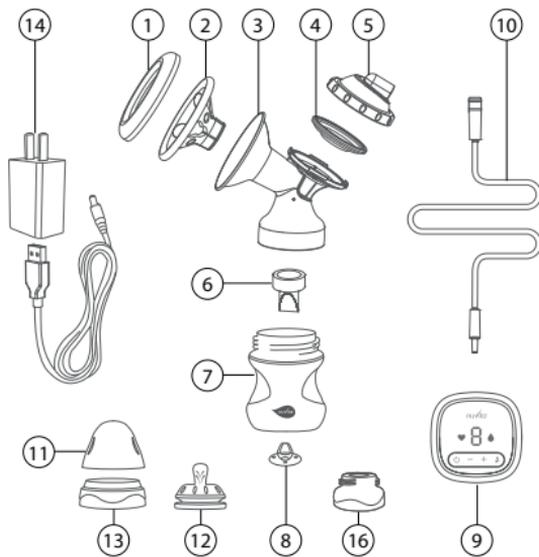

Istruzioni per la pulizia

- Prima della pulizia e della sterilizzazione, smontare le parti che vanno a contatto con il seno ed il latte materno (a parte l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*)).
- Non pulire l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) nell'acqua.
- Non sterilizzare l'unità di controllo del tiralatte (*Contenuto della confezione n. 9*) nello sterilizzatore a vapore.
- Non sterilizzare a caldo il tubo di collegamento. Solo sterilizzazione a freddo. Altrimenti pulire con acqua calda e sapone e poi risciacquare con acqua sterilizzata. (*Contenuto della confezione n. 10*).
- Pulire le parti immediatamente dopo ogni utilizzo per eliminare residui di latte e la formazione di batteri.
- Mettere le parti pulite su di un asciugamano pulito ed asciutto e lasciarle asciugare in un luogo fresco lontano dalla luce del sole o da fonti di calore.

Caratteristiche del prodotto

Un modello di tiralatte elettrico singolo ricaricabile per massimizzare il processo di estrazione del latte. È progettato per simulare il ritmo di suzione del bambino.

1. Questo tiralatte utilizza una tecnologia 2 fasi:
 - 1^ fase con 9 livelli di stimolazione automatici per un funzionamento di 2 minuti
 - 2^ fase con 9 livelli selezionabili per una migliore attività di estrazione
2. Questo dispositivo è dotato di un sistema di protezione anti-reflusso che impedisce al latte materno di tornare alla centralina e danneggiarla durante il processo di estrazione del latte.
3. È dotato di funzione di memoria
4. È portatile (funziona con AC / DC e batteria) è molto adatto all'uso in viaggio e perfetto per tirare il latte sul posto di lavoro.

Descrizione della centralina del tiralatte

A1. Interruttore di accensione On e Off

A2. Pulsante selezione di modalità

A3. Pulsante aumento livello di aspirazione

A4. Pulsante diminuzione livello di aspirazione

B1. Indicatore modalità normale

B2. Indicatore della modalità di stimolazione


B3. Indicatore della modalità di estrazione

Livelli di frequenza di

assorbimento di Nuvita 1282M:

 1 da 9 Questa è la modalità di stimolazione con ritmo di aspirazione rapido e breve.


 1 da 9 Questa è la modalità di estrazione. Simula la suzione del bambino. Il ritmo di questa fase è più lento, più profondo e più lungo.

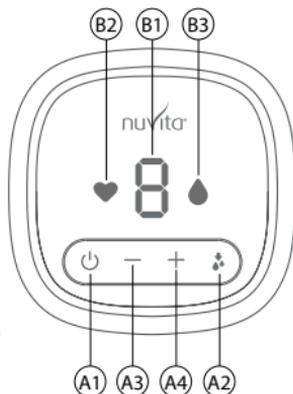

Montaggio

1. Inserire la coppa per massaggio (*Contenuto della confezione n. 2*) in silicone nel tiralatte, come mostrato in figura.
2. Montare il silicone antigoccia (*Contenuto della confezione n. 4*) con il coperchio antigoccia (*Contenuto della confezione n. 5*) come mostrato di seguito. Puntare alla fessura scorrevole e evitare il coperchio antigoccia come mostrato in figura.
3. Fissare la valvola di aspirazione (*Contenuto della confezione n. 6*) in corrispondenza dell'estremità inferiore del tiralatte. Vedere la figura seguente.
4. Collegare la parte superiore del tiralatte con il collo largo del biberon ruotando fino a chiuderlo.

- 5 Inserire il tubo di collegamento (*Contenuto della confezione n. 10*) nell'interfaccia del coperchio superiore anti-fuoriuscita. Inserire l'altra estremità del tubo di collegamento nella fessura di aspirazione della pompa. Fare riferimento al diagramma qui sotto. Fissare il biberon sulla sua base.

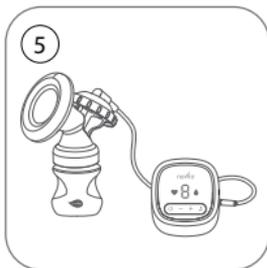

Funzionamento


1. Lavarsi le mani prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che le parti del tiralatte siano pulite e montate con precisione, come da istruzioni di questa guida.
2. Rilassarsi e mettersi a proprio agio stando normalmente seduti. Utilizzare un cuscinetto di gel termico o un asciugamano caldo prima di estrarre il latte.
3. Usare la mano per inserire il capezzolo al centro del tiralatte e assicurarsi che sia stretto e bloccato per garantire che non fuoriesca dell'aria.
4. Accendere, premendo a lungo il pulsante di accensione. Lo schermo della macchina si autoverifica e lampeggia. La macchina entrerà quindi in modalità di stimolazione. Il livello predefinito di fabbrica è il livello 5. Dopo 2 minuti di stimolazione, la macchina passerà automaticamente alla modalità di estrazione. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di funzionamento.
5. In modalità estrazione, premere il tasto + o - per selezionare qualsiasi livello da L1 a L9. Questo apparecchio è dotato della funzione Memory: la prossima operazione di allattamento, ricorderà il livello precedentemente selezionato.
6. Smontare, pulire e sterilizzare le parti non elettroniche per usarle successivamente.



Installazione dell'adattatore AC di corrente

IMPORTANTE: spegnere la macchina prima di collegarla con l'adattatore.

1. Inserire il pin rotondo CC dell'adattatore di alimentazione CA nella presa CC sull'unità di controllo e inserire l'adattatore di alimentazione CA nella presa di corrente come mostrato nel diagramma.
2. Quando la capacità della batteria è bassa, la cifra sullo schermo (indicatore di livello) lampeggerà, indicando che la batteria deve essere caricata.
3. Durante la ricarica, la linea della cifra sullo schermo si sposterà in senso orario e lampeggerà, indicando che la macchina è in modalità di ricarica come mostrato nel diagramma. Quando la macchina è completamente carica, si spegnerà automaticamente.

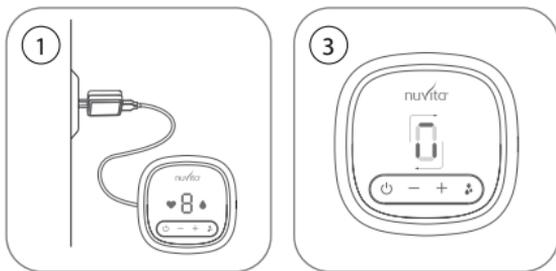

MANUTENZIONE: Ogni cura è stata posta nella realizzazione dei prodotti e degli accessori in dotazione nella scatola e nella documentazione fornita, quindi in caso di problemi si consiglia di ripetere le operazioni seguendo con attenzione le istruzioni riportate nel manuale. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza, visita il sito web: www.nuvitababy.com

GARANZIA - CONDIZIONI: Questo apparecchio beneficia di una garanzia di 24 mesi sui materiali e sui difetti di fabbricazione del prodotto, a partire dalla data di acquisto (vedi scontrino). La garanzia di 24 mesi non comprende i danni causati dal consueto uso di soggetti individuati come "materiale di consumo" (ad esempio, le batterie, le testine o le parti soggette ad usura). **La garanzia legale di 24 mesi è valida qualora:** 1) Il prodotto ha subito danni estetici dovuti ad un uso improprio non conforme alle istruzioni contenute nel manuale. 2) Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. 3) La causa del mal funzionamento è dovuta alla scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o ridimensionamento dovuto alla ritenzione di acqua o altri liquidi, residui che bloccano il sensore, perdita di liquido corrosivo dalle batterie). **Quello che segue è escluso dalla garanzia legale di 24 mesi:** 1) I costi relativi alla sostituzione e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. 2) I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio dove è stato acquistato o centro di raccolta altrimenti autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. 3) Causa da danni derivanti da un'errata installazione o da uso improprio o non in conformità con le istruzioni del manuale di istruzioni. 4) Danni dovuti a calamità naturali, accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. 5) Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici di qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In base alla normativa vigente, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in nessun caso per danni, vizi compresi, quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altri dettagli conseguenze che vanno al di là del danno causato dalla violazione della garanzia, contratto, responsabilità oggettiva, illecito o per altre cause, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di servizio.



www.nuvitababy.com

Imported/Distributed by
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe