



1287X24 1287X28



**IMPORTED / DISTRIBUTED BY:**

Anteprima Brands International Ltd  
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020  
Gwardamangia, Malta - Europe  
info@nuvitababy.com | www.nuvitababy.com  
All rights reserved


FR

LOT DE 2 TÉTERELLES

L'extraction du lait doit être une action agréable et la taille de la tétérèlle affecte grandement le type d'expérience vécue lors de l'utilisation du tire-lait. Les tétérèlles interchangeables Nuvita, compatibles avec tous les modèles de la gamme Materno Smart X, sont disponibles en 3 tailles : 20, 24 ou 28 mm.

**COMMENT CHOISIR LA BONNE TÉTERELLE :**

1. A l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban, mesurez le diamètre du mamelon (en mm), en passant par le centre et en excluant l'aréole.
2. Choisissez la tétérèlle la plus proche de la valeur mesurée.

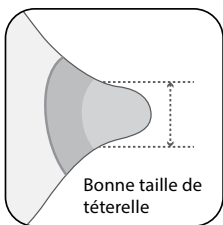


**TAILLE DU MAMELON**



**COMMENT COMPRENDRE LES TAILLES DE TÉTERELLE :**


**BON AJUSTEMENT**

Si le mamelon reste au centre lors de l'utilisation du tire-lait et qu'il bouge librement sans ressentir de gêne, la tétérèlle utilisée est de la bonne taille.

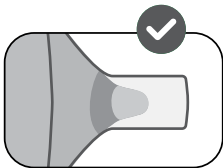


**TROP PETIT**

Si le mamelon frotte le long du tunnel, devient rouge et inconfortable, la tétérèlle est trop petite.

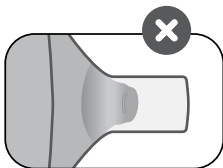

**TROP GRANDE**

Si le mamelon et l'aréole excessive sont tirés dans le tunnel et deviennent blanchâtres, la tétérèlle est trop grande.

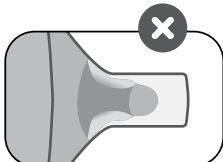

**MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- Vérifiez avant chaque utilisation.
- Jetez au premier signe de dommage ou d'usure.
- Si vous ressentez des douleurs, consultez votre médecin.

**ASSEMBLAGE ET UTILISATION**

- Connectez la tétérèlle au connecteur du tire lait Nuvita Materno Smart.
- Vérifiez que la tétérèlle et le connecteur soient solidement assemblés.

**NETTOYAGE**

- **Nettoyez la tétérèlle immédiatement après utilisation pour éviter le dessèchement des résidus de lait et pour éviter la formation de bactéries.**
- **Pour le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau potable.**
- **Si vous utilisez une brosse, veillez à ne pas endommager les composants.**
- **Trempez la tétérèlle dans de l'eau chaude pendant 2 minutes.**
- **Recommander la stérilisation à froid.**

**APRÈS CHAQUE UTILISATION**

- Rincez la tétérèlle à l'eau claire et froide.
- Nettoyez abondamment à l'eau tiède avec du liquide vaisselle.
- Rincez à l'eau froide propre.
- Essuyez avec un chiffon propre ou laissez sécher sur un chiffon propre.
- Conservez dans un sac de rangement propre, sur un chiffon ou du sopalin jusqu'à la prochaine utilisation.

**AVANT CHAQUE UTILISATION**

- Lavez-vous soigneusement les mains avec du savon et de l'eau propre avant de toucher vos seins.
- Nettoyez le sein et la zone environnante avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de savon ou d'alcool, car ils peuvent assécher la peau et provoquer des crevasses aux mamelons.