



1287X24 1287X28



IMPORTED / DISTRIBUTED BY:

Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020
Gwardamangia, Malta - Europe
info@nuvitababy.com | www.nuvitababy.com
All rights reserved

IT

SET COPPE PER IL SENO

L'estrazione del latte deve essere un'azione piacevole e la misura della coppa incide moltissimo sul tipo di esperienza che viene vissuta usando il tiralatte. Le coppe intercambiabili Nuvita, compatibili con tutti i modelli della linea Materno Smart X, sono disponibili in 3 misure: 20, 24 o 28 mm.

COME SCEGLIERE LA COPPA GIUSTA:

1. Con un semplice righello o metro a nastro misurare il diametro del capezzolo (in mm), passando per il centro ed escludendo l'areola.
2. In base ai mm rilevati, scegliere la coppa che più si avvicina al valore misurato.



MISURA DEL CAPEZZOLO

FINO A
16 mm

FINO A
20 mm

FINO A
24 mm

Ø 20 mm


Ø 24 mm

Ø 28 mm

COME VERIFICARE LA MISURA CORRETTA DELLA COPPA:


CORRETTA

Se azionando il tiralatte il capezzolo rimane al centro, si muove liberamente e non si prova alcun fastidio, la coppa utilizzata è corretta.

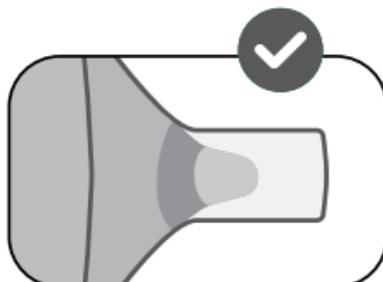


TROPPO PICCOLA

Se il capezzolo sfrega lungo le pareti del condotto, si arrossa e si sente fastidio, la coppa è troppo piccola.

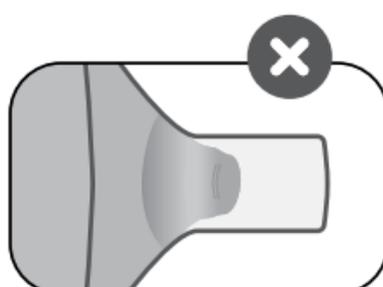

TROPPO GRANDE

Se il capezzolo ed il tessuto dell'areola sono attirati all'interno della coppa in modo eccessivo e diventano biancastri, la coppa è troppo grande.

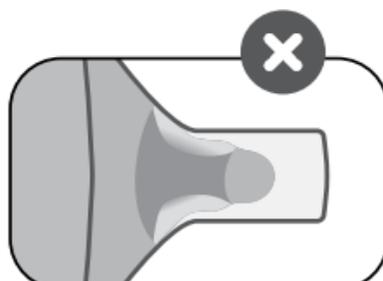

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

- Controllare prima di ogni utilizzo.
- Gettare al primo segnale di danneggiamento o usura.
- In caso di problemi o dolori, consultare il consulente per l'allattamento o il medico.

MONTAGGIO E USO

- Collegare la coppa per il seno al connettore del set per tiralatte Materno Smart di Nuvita.
- Verificare che coppa e connettore siano saldamente assemblati.

PULIZIA

- **Al primo utilizzo disinfettare la coppa per il seno e lavare subito dopo ogni uso per evitare l'essiccazione dei residui di latte e per prevenire la formazione di batteri.**
- **Per la pulizia, usare esclusivamente acqua potabile.**
- **Se si usa una scovolino, fare attenzione a non danneggiare i componenti.**
- **Pulire la coppa per il seno in acqua calda per 2 minuti.**
- **Non sterilizzare a caldo, ma disinfettare con appositi prodotti a freddo.**

DOPO OGNI UTILIZZO

- Risciacquare la coppa per il seno con acqua pulita tiepida.
- Pulire con abbondante acqua tiepida e detersivo per stoviglie.
- Risciacquare con acqua pulita tiepida.
- Asciugare con un panno pulito o lasciare asciugare su un panno pulito.
- Conservare in un sacchetto o contenitore sterile fino all'utilizzo successivo.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO

- Lavare a fondo le mani con sapone e acqua potabile prima di toccare il seno.
- Pulire il seno e l'area circostante con un panno umido.
- Non usare sapone o alcol, perché possono seccare la pelle e causare screpolature ai capezzoli.