

nuvitamed




- IT** Aspiratore nasale elettrico
- ES** Aspirador nasal eléctrico
- EN** Electric nasal aspirator
- FR** Aspirateur nasal électrique
- DE** Elektrischer Nasenansauger
- PT** Aspirador nasal eléctrico
- GR** Ηλεκτρική ρινική αναρρόφηση
- NO** Elektrisk neseaspirator
- DK** Elektrisk næsesuger
- AL** Aspirator elektrik nasal



2150

- IT** Manuale di istruzioni
- ES** Manual de instrucciones de uso
- EN** Instruction manual
- FR** Manuel d'instructions d'utilisation
- DE** Bedienungsanleitung

- PT** Manual de instruções de uso
- GR** Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
- NO** Bruksanvisning
- DK** Instruktionsmanual
- AL** Manuali i udhëzimeve

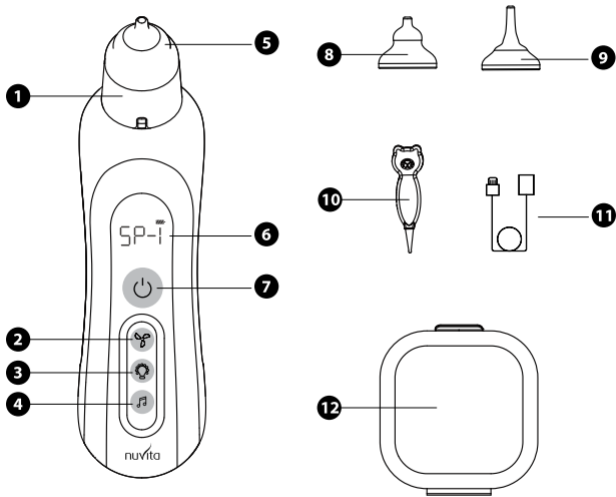

AVVERTENZE GENERALI



IMPORTANTE

- Non esporre questo prodotto ad alte temperature, elevata umidità o luce solare diretta per lungo tempo.
- Evitare pressioni eccessive, urti o cadute accidentali del prodotto a terra.
- Questo prodotto è adatto solo per aspirare le secrezioni nasali. Non usarlo per usi impropri.
- Quando l'aspirazione si riduce significativamente o il suono del motore diminuisce in modo evidente, ricaricare l'aspiratore tempestivamente.
- Durante l'uso, non far trattenere il respiro all'utente o ingoiare saliva e tenere la bocca del bambino aperta per evitare squilibri di pressione nell'orecchio.
- In caso di dolore o fastidio durante l'uso, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico.
- Non inserire la testina di aspirazione nella cavità nasale con eccessiva pressione.
- Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il dispositivo e conservarlo in un luogo sicuro per riferimento.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

I disegni associati sono mostrati a pagina 2.

- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|------------------------|
| 1. | Serbatoio di raccolta | 7. | Pulsante di accensione |
| 2. | Pulsante intensità di aspirazione | 8. | Ugello B |
| 3. | Pulsante luci colorate | 9. | Ugello C |
| 4. | Pulsante ninna nanna | 10. | Pinzette |
| 5. | Ugello A | 11. | Cavo di ricarica USB |
| 6. | Schermo LED | 12. | Custodia |

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

- **PULSANTE DI ACCENSIONE.** Premere il pulsante di accensione **(7)** per accendere l'aspiratore nasale.
- **PULSANTE INTENSITÀ DI ASPIRAZIONE.** L'aspirazione ha cinque livelli di intensità. Premere una volta il pulsante di intensità di aspirazione **(2)** per entrare nel livello 1. Ogni successiva pressione del pulsante di intensità di aspirazione passerà al livello successivo, fino al livello 5.
- **PULSANTE LUCI COLORATE.** Premere il pulsante delle luci colorate **(3)** per accendere le luci colorate e intrattenere il bambino durante l'aspirazione nasale, cambiano colore automaticamente.
- **PULSANTE NINNA NANNA.** Premere il pulsante ninna nanna **(4)** per riprodurre 3 ninne nanne rilassanti per favorire il relax e il comfort del bambino durante l'aspirazione nasale.

NOTE DI SICUREZZA




IMPORTANTE

- Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Non è incluso alcun adattatore di ricarica. Puoi utilizzare un comune adattatore di ricarica domestico (Ingresso 5V 1A; Uscita 3,7W).
- Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione sullo schermo LED **(6)** lampeggerà.
- Quando la batteria è carica, l'indicatore di alimentazione smetterà di lampeggiare.


PASSAGGIO 1

Inserire l'ugello in silicone **(5)**, **(8)** o **(9)** nel serbatoio di raccolta **(1)**.

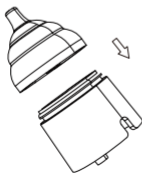


PASSAGGIO 2

Premere il serbatoio di raccolta con l'ugello nel corpo del dispositivo.

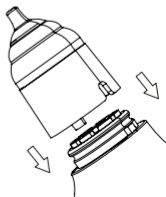


NOTE DI SICUREZZA

- Posizionare l'aspiratore nasale all'entrata della cavità nasale senza lasciare spazi vuoti, sarà più facile aspirare il muco nasale.
- Prima di aspirare secrezioni nasali secche o muco appiccicoso, ammorbidirlo applicando una salvietta calda sul naso o inumidendo con una normale soluzione salina.
- Prestare attenzione in ogni momento al serbatoio di raccolta del muco nasale. Se c'è troppo muco, potrebbe fuoriuscire.
- Spegnerne tempestivamente la macchina quando il serbatoio è pieno e pulirlo. Pulire il muco nasale nella porta di aspirazione e nella camera con un batuffolo di cotone.
- Svuotare l'acqua e asciugare l'ugello e la camera dopo la pulizia.
- Non immergere il corpo in acqua o altri liquidi.
- Utilizzare questo prodotto nella corretta postura.

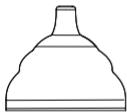

UGELLO A


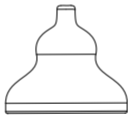


UGELLO B



UGELLO C


- **UGELLO A.** L'ugello più grande (**5**) può aiutare neonati e bambini ad aspirare il muco nasale di tipo denso.
- **UGELLO B.** Ugello di aspirazione in silicone a forma di zucca (**8**), adatto per aspirare il muco superficiale.
- **UGELLO C.** Ugello di aspirazione a imbuto (**9**), adatto per aspirare il muco in profondità.

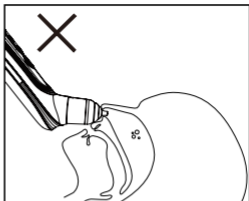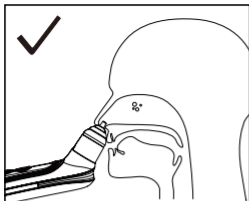

PULIZIA E MANUTENZIONE

Osservare le seguenti istruzioni per evitare rischi per la salute e danneggiamento del prodotto:

- Pulire il dispositivo prima di ogni utilizzo. Questo è importante per una migliore igiene, soprattutto in caso di infezioni batteriche e virali o quando i bambini sono molto piccoli.
- **Corpo:** Utilizzare un panno morbido asciutto (o leggermente umido) senza aggiungere detersivi.
- **Parti interne:** Questo dispositivo utilizza la più recente tecnologia anti-riflusso che consente all'acqua e a qualsiasi liquido di attraversare i collegamenti interni senza danneggiarli. È possibile inserire la punta dell'ugello in un contenitore con acqua tiepida e iniziare ad aspirarla per 30 secondi. L'acqua entrerà nelle parti interne e verrà espulsa di lato.
- **Ugelli e serbatoio:** Gli ugelli nasali e il serbatoio di raccolta del muco possono essere sciacquati con acqua corrente e sterilizzati a caldo (100°C) in acqua bollente o con uno sterilizzatore a vapore.
- Non mettere mai il corpo principale in lavastoviglie
- Non usare mai sostanze per la pulizia potenzialmente tossiche se entrano in contatto con pelle o mucose, o se ingerite o inalate.
- Non usare prodotti abrasivi e non immergere mai il dispositivo in acqua.
- Evitare la pulizia meccanica con spazzole o simili, poiché potrebbe causare danni irreparabili.

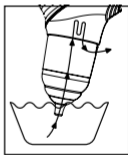

SMALTIMENTO

- Non riparare il dispositivo da soli. In tal caso, non è più garantito il corretto funzionamento.
- Non aprire il dispositivo. La mancata osservanza di questa istruzione invaliderà la garanzia.
- Le riparazioni devono essere effettuate solo dal Servizio Clienti o da rivenditori autorizzati.
- Per motivi ambientali, non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Smaltire il dispositivo presso un punto di raccolta o riciclaggio locale adatto nel proprio paese. Smaltire il dispositivo in conformità con la Direttiva CE - RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Per qualsiasi domanda, contattare le autorità locali responsabili dello smaltimento dei rifiuti.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo	Aspiratore nasale elettrico
Modello	2150
Potenza di aspirazione	1° livello: 25KPA, 2° livello: 35KPA, 3° livello: 45KPA, 4° livello: 55KPA, 5° livello: 65KPA
Tipo di batteria	Batteria ricaricabile al litio 3,7W; 450MAH; Voltaggio: 3,7V
Voltaggio di ricarica	5V; Funzionamento: 3,6~4,2V
Tempo di ricarica	3 ore
Durata di scarica	55 minuti
Livello di rumore	1° livello: 44DB, 2° livello: 50DB, 3° livello: 56DB, 4° livello: 60DB, 5° livello: 65DB
Sicurezza dei materiali	Senza BPA, ABS PC, silicone, atossico

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto beneficia di una garanzia di 24 mesi su difetti di materiale e fabbricazione, a partire dalla data di acquisto (vedere scontrino). La garanzia di 24 mesi non include danni causati dal normale utilizzo di parti identificate come "consumabili" (es. batterie, testine spazzolino o parti soggette a usura). La garanzia legale di 24 mesi decade se: **1.** Il prodotto ha subito danni estetici dovuti a un uso improprio non conforme alle istruzioni del manuale. **2.** Questo prodotto è stato modificato e/o manomesso. **3.** La causa del guasto è dovuta a scarsa manutenzione dei singoli componenti e/o accessori e/o forniture (es. ossidazione e/o incrostazioni dovute a ristagno di acqua o altri liquidi, sedimenti che bloccano il sensore, perdite di liquido corrosivo dalle batterie). Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi: **1.** Costi relativi a sostituzioni e/o riparazione di parti soggette ad usura o costi per la manutenzione ordinaria del prodotto. **2.** I costi e i rischi connessi al trasporto del prodotto da e verso il negozio in cui è stato acquistato o altro centro di raccolta autorizzato a ricevere i prodotti in garanzia. **3.** Danni causati da o derivanti da installazione impropria o uso improprio non conforme alle indicazioni del manuale di istruzioni. **4.** Danni dovuti a calamità naturali, eventi accidentali o condizioni avverse non compatibili con il prodotto. **5.** Difetti che hanno un effetto trascurabile sulle prestazioni del prodotto. Il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non si assumono alcuna responsabilità per perdite e danni economici derivanti da qualsiasi malfunzionamento del prodotto. In conformità con le normative vigenti, il produttore, distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita non rispondono in alcun caso di danni, inclusi quelli diretti, indiretti, perdita di reddito netto, perdita di risparmi e danni aggiuntivi e altre conseguenze dettagliate che vanno oltre il danno causato dalla violazione della garanzia, del contratto, della responsabilità oggettiva, dell'illecito o di altre cause, derivanti dall'uso o dall'incapacità di utilizzare il prodotto e/o documenti cartacei ed elettronici, compresa la mancanza di assistenza. Per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza visitare il sito web **www.nuvitababy.com**

ADVERTENCIAS GENERALES



IMPORTANTE

- No exponga este producto a altas temperaturas, humedad excesiva o luz solar directa durante mucho tiempo.
- Evite presión severa, colisiones o caídas accidentales de este producto al suelo.
- Este producto solo es adecuado para absorber secreciones nasales. No lo use inadecuadamente para absorber agua o en la piel.
- Cuando la succión disminuya considerablemente o el sonido del motor se reduzca significativamente, recargue la batería a tiempo.
- Al usarlo, no permita que el usuario contenga la respiración o trague saliva, y mantenga la boca del bebé abierta para evitar un desequilibrio de presión en el oído.
- Si siente dolor o molestia durante el uso, detenga su utilización inmediatamente y busque atención médica.
- No introduzca la boquilla de succión dentro de la cavidad nasal con excesiva presión.
- Lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Los dibujos asociados se muestran en la página 2.

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|------------------------|
| 1. | Tanque recolector | 7. | Botón de encendido |
| 2. | Botón de intensidad de succión | 8. | Boquilla B |
| 3. | Botón de luces de colores | 9. | Boquilla C |
| 4. | Botón de canciones de cuna | 10. | Pinzas |
| 5. | Boquilla A | 11. | Cable de carga USB |
| 6. | Pantalla LED | 12. | Caja de almacenamiento |

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- **BOTÓN DE ENCENDIDO.** Presione el botón de encendido **(7)** para encender el aspirador nasal.
- **BOTÓN DE INTENSIDAD DE SUCCIÓN.** La succión tiene cinco niveles de intensidad. Presione el botón de intensidad de succión **(2)** una vez para ingresar al nivel 1. Cada presión subsiguiente de este botón cambiará al siguiente nivel, hasta el nivel 5.
- **BOTÓN DE LUCES DE COLORES.** Presione el botón de luces de colores **(3)** para encender las luces de colores y entretener al bebé durante la succión nasal, cambiando automáticamente de color.
- **BOTÓN DE CANCIONES DE CUNA.** Presione el botón de canciones de cuna **(4)** para reproducir 3 canciones de cuna relajantes que ayuden a calmar y brindar comodidad al bebé durante la succión nasal.

NOTAS DE SEGURIDAD




IMPORTANTE

- Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo por primera vez.
- No hay ningún adaptador de carga incluido. Puedes usar un adaptador de carga doméstico normal (Entrada 5V 1A; Salida 3,7W).
- Durante la carga, el indicador de encendido en la pantalla LED **(6)** parpadeará.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador de encendido dejará de parpadear.


PASO 1

Presione la boquilla de silicona **(5)**, **(8)** o **(9)** en el tanque recolector **(1)**.

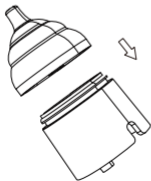

PASO 2

Presione el tanque recolector con la boquilla en el cuerpo del dispositivo.

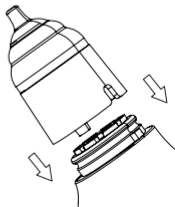

NOTAS DE SEGURIDAD

- Coloque el aspirador nasal cerca de la cavidad nasal sin dejar espacios, será más fácil aspirar las mucosidades nasales.
- Antes de aspirar secreciones nasales duras o mucosas pegajosas, abládelas aplicando una toalla caliente en la nariz o gotas de solución salina normal.
- Preste atención al tanque recolector de mucosidades en todo momento. Si hay demasiada mucosidad nasal, puede derramarse.
- Apague la máquina a tiempo cuando la cámara esté llena y límpiela. Limpie las mucosidades en el puerto de entrada y en la cámara con un hisopo de algodón.
- Después de limpiar, vacíe el agua y seque bien la boquilla y la cámara.
- No sumerja el cuerpo del dispositivo en agua u otros líquidos.
- Utilice este producto en la postura/método correcto para evitar que se aspire líquido al interior.



BOQUILLA A





BOQUILLA B



BOQUILLA C


- **Boquilla A.** La boquilla más grande (**5**) puede ayudar a aspirar mucosidad nasal tipo pus en bebés y niños.
- **Boquilla B.** Boquilla de succión de silicona tipo calabaza (**8**), adecuada para aspirar suciedad superficial.
- **Boquilla C.** Boquilla de succión tipo embudo (**9**), adecuada para aspirar suciedad profunda.

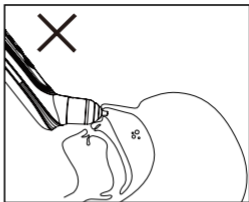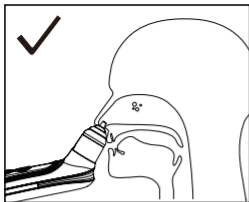

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga las siguientes instrucciones de higiene para evitar riesgos para la salud:

- Limpie el dispositivo antes de cada uso. Esto es importante para una mejor higiene, especialmente en caso de infecciones bacterianas o virales o cuando los niños son muy pequeños.
- **Cuerpo:** Use un paño suave seco (o ligeramente húmedo) sin agregar detergente.
- **Partes internas:** Este dispositivo utiliza la última tecnología anti-reflujo que permite que el agua y cualquier líquido pasen a través de las conexiones internas sin dañarlo. Puede insertar la punta de la boquilla en un recipiente con agua tibia y aspirar durante 30 segundos. El agua entrará en las partes internas y será expulsada por el costado.
- **Boquillas y tanque:** Las boquillas nasales y el tanque recolector de mucosidad pueden enjuagarse con agua corriente y esterilizarse a altas temperaturas (100°C) en agua hirviendo o en un esterilizador a vapor.
- Nunca coloque el cuerpo del dispositivo en el lavavajillas.
- Nunca use sustancias de limpieza potencialmente tóxicas si entran en contacto con la piel, membranas mucosas, se ingieren o inhalan.
- No use productos de limpieza abrasivos y nunca sumerja el dispositivo en agua.
- Evite la limpieza mecánica con cepillos o similares, ya que podría causar daños irreparables.

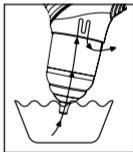

ELIMINACIÓN

- No repare ni ajuste el dispositivo usted mismo. En ese caso, ya no se puede garantizar un funcionamiento adecuado.
- No abra el dispositivo. El incumplimiento de esta instrucción anulará la garantía.
- Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por el Servicio al Cliente o minoristas autorizados.
- Por razones ambientales, no deseche el dispositivo en la basura doméstica al final de su vida útil. Deseche el dispositivo en un punto de recolección o reciclaje adecuado en su país. Deseche el dispositivo de acuerdo con la Directiva CE sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos). Si tiene alguna pregunta, comuníquese con las autoridades locales responsables de la eliminación de desechos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Aspirador nasal eléctrico
Modelo	2150
Potencia de succión	Nivel 1: 25 kPa, Nivel 2: 35 kPa, Nivel 3: 45 kPa, Nivel 4: 55 kPa, Nivel 5: 65 kPa
Tipo de batería	Batería de litio recargable 3.7W; 450MA
Voltaje de carga	5V; Funcionamiento: 3,6~4,2V
Tiempo de carga	3 horas
Duración de descarga	55 minutos
Nivel de ruido	Nivel 1: 44dB, Nivel 2: 50dB, Nivel 3: 56dB, Nivel 4: 60dB, Nivel 5: 65dB
Seguridad de materiales	Libre de BPA, ABS PC, silicona, no tóxico

GARANTÍA - TÉRMINOS Y CONDICIONES

Este producto tiene una garantía de 24 meses contra defectos de materiales y fabricación, a partir de la fecha de compra (ver recibo de compra). La garantía de 24 meses no cubre daños causados por el uso normal de las piezas identificadas como "consumibles" (por ejemplo, baterías, cabezales de cepillo o piezas sujetas a desgaste). La garantía legal de 24 meses quedará anulada si: **1.** El producto ha sufrido daños estéticos debido a un uso incorrecto, no acorde con las instrucciones del manual. **2.** Este producto ha sido modificado y/o alterado. **3.** La falla se debió a un mal mantenimiento de los componentes y/o accesorios (por ejemplo, oxidación/incrustaciones debido a la retención de agua u otros líquidos, sedimentos que bloquean el sensor, fuga de líquido corrosivo de las baterías). Se excluye de la garantía legal de 24 meses: **1.** Los costos relacionados con el reemplazo y/o reparación de piezas sujetas a desgaste o costos de mantenimiento ordinario del producto. **2.** Los costos y riesgos de transporte del producto hacia y desde la tienda donde se compró o un centro de recolección autorizado para recibir los productos bajo garantía. **3.** Daños causados por una instalación o uso incorrecto, no de acuerdo con las instrucciones del manual. **4.** Daños por desastres naturales, accidentes o condiciones adversas incompatibles con el producto. **5.** Defectos que tienen un efecto insignificante en el rendimiento del producto. El fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta no asumen ninguna responsabilidad por pérdidas y daños económicos derivados de un mal funcionamiento del producto. De acuerdo con la normativa vigente, el fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta no serán responsables en ningún caso de daños, incluidos directos, indirectos, pérdida de ingresos netos, pérdida de ahorros y daños accesorios y otras consecuencias que excedan el daño causado por el incumplimiento de garantía, contrato, responsabilidad estricta, agravio o por otras causas, resultantes del uso o imposibilidad de usar el producto y/o documentos impresos y electrónicos, incluida la falta de servicio. Para obtener más información sobre el servicio de ayuda, visite el sitio web www.nuvitababy.com

GENERAL WARNINGS



IMPORTANT

- Do not expose this product to high temperature, high humidity or direct sunlight for a long time.
- Please avoid severe pressure, collision or accidental fall of this product to the ground.
- This product is only suitable for absorbing nasal secretions. Do not use it for improper use such as absorbing water or skin.
- When the suction is significantly reduced or the motor sound is significantly reduced, please charge it in time.
- When using this product do not let the user hold his breath or swallow saliva and keep the baby's mouth open to avoid pressure imbalance in the ear.
- In case of any pain or discomfort during use, stop use immediately and seek medical attention.
- Do not put the suction head into the nasal cavity with excessive pressure.
- Please read the manual carefully before using the device and put it in a safe and secure place for reference.

DEVICE DESCRIPTION

The associated drawings are shown on page 2.

- | | | | |
|----|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. | Collecting tank | 7. | Power button |
| 2. | Suction intensity button | 8. | Nozzle B |
| 3. | Coloured lights button | 9. | Nozzle C |
| 4. | Lullaby Button | 10. | Tweezers |
| 5. | Nozzle A | 11. | USB charging cable |
| 6. | LED Screen | 12. | Storage box |

FUNCTION DESCRIPTION

- **POWER BUTTON.** Press the power button **(7)** to turn on the nasal aspirator.
- **SUCTION INTENSITY BUTTON.** The suction has five intensity levels. Press the suction intensity button **(2)** once to enter level 1. Each subsequent press of the suction intensity button will cycle through the next level, up to level 5.
- **COLOURED LIGHTS BUTTON.** Press the coloured lights button **(3)** to turn on the coloured lights to entertain the baby during nasal suction, changing colour automatically.
- **LULLABY BUTTON.** Press the lullaby button **(4)** to play 3 soothing lullabies to aid relaxation and comfort for the baby during nasal suctioning.

SAFETY NOTES




IMPORTANT

- Fully charge the device before using it for the first time.
- There is no charging adapter attached. You can use an ordinary household charging adapter (Input 5V 1A; Output 3.7W).
- When charging, the power indicator on the LED screen **(6)** will flash.
- When the battery is full, the power indicator will stop flashing.


STEP 1

Press the silicone nozzle **(5)**, **(8)** or **(9)** into the collecting tank **(1)**.

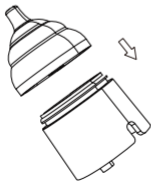


STEP 2

Press the collecting tank with nozzle into the body of the device.

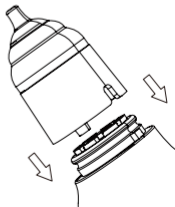


SAFETY NOTES

- Place the nasal aspirator close to the nasal cavity without leaving gaps, it will be easier to suck out nasal mucus.
- Before sucking hard nasal excrement or sticky nasal mucus, soften it, apply a hot towel to the nose or drip normal saline.
- Please pay attention to the nasal mucus collecting tank at any time. If there is too much nasal mucus some may overflow.
- Please shut down the machine in time when the mucus in chamber is full and clean it. Wipe the nasal mucus at the intake port and chamber with a cotton swab.
- Please empty the water and blow dry the nozzle and chamber after cleaning.
- Do not put the body into water or other liquids.
- Please use this product in the correct posture / method to avoid liquid being sucked into the host.

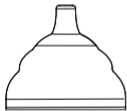

NOZZLE A


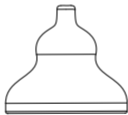


NOZZLE B



NOZZLE C

- **NOZZLE A.** The largest nozzle (5) can help infants and children suck pus type nasal mucus.
- **NOZZLE B.** Gourd type silicone suction nozzle (8), suitable for sucking shallow dirt.
- **NOZZLE C.** Funnel type suction nozzle (9), suitable for sucking deep dirt.

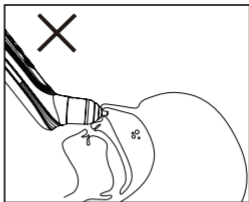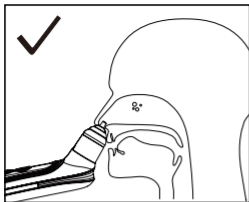

CLEANING AND MAINTENANCE


Observe the following hygiene instructions to avoid health risks:

- Clean the device before every use. This is important for the best hygiene especially in case of bacterial and viral infections or when the children are very young.

- **Body:** Use a soft dry (or slightly wet) cloth without adding any detergent.

- **Internal parts:** This device uses the latest anti back flow technology that allows the water and any liquid to go through the internal connections without damaging it. You can insert the tip of the nozzle in a container with some warm water and start to aspire it for 30 seconds. The water will go inside the internal parts and expelled aside.

- **Nozzles and Tank:** The nasal nozzles and the mucus collecting tank can be rinsed with running water and hot sterilised (100°C) in boiling water or with a steam sterilizer.

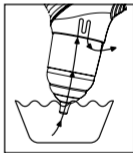

- Never put the body in the dishwasher
- Never use any substance for cleaning that could potentially be toxic if it came into contact with the skin or mucous membranes, or if it's swallowed or inhaled.
- Do not use any abrasive cleaning products and never submerge the device in water.
- Avoid mechanical cleaning with brushes or similar, as this could result in irreparable damage.

DISPOSAL

- Do not repair or adjust the device yourself. Proper operation can no longer be guaranteed in this case.
- Do not open the device. Failure to comply with this instruction will void the warranty.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorized retailers.
- For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive - WEEE (waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type	Electric nasal aspirator
Model	2150
Suction Power	1st level: 25KPA, 2nd level: 35KPA, 3rd level: 45KPA, 4th level: 55KPA, 5th level: 65KPA
Battery type	Rechargeable lithium battery 3.7V; 450MAH; Voltage: 3.7V
Charging voltage	5V; Operating: 3.6~4.2V
Charging time	3 hours
Discharge duration	55 minutes
Noise level	1st level: 44DB, 2nd level: 50DB, 3rd level: 56DB, 4th level: 60DB, 5th level: 65DB
Material safety	BPA-Free, ABS PC, silicone, Non-Toxic

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product benefits of a warranty of 24 months on material and manufacturing defects, starting from the date of purchase (see sales slip). The warranty of 24 months does not include damages caused by the usual use of parties identified as "consumable" (e.g., batteries, brush heads or parts subject to usury). The legal guarantee of 24 months is void if: **1.** The product has undergone aesthetic damage due to improper use not in accordance with instructions in the manual. **2.** This product has been modified and/or tampered with. **3.** The cause of the failure was due to poor maintenance of the individual components and/or accessories and/or supplies (e.g. oxidation and/or scaling due to the retention of water or other liquids, sediment blocking the sensor, leak of corrosive liquid from batteries). The following is excluded from the legal guarantee of 24 months: **1.** Costs related to replacements and/or repair of parts subject to wear or costs for ordinary maintenance of the product. **2.** The costs and risks involved in transporting the product to and from the store where you purchased or otherwise authorized collection centre to receive the products under warranty. **3.** Damage caused by or resulting from improper installation or improper use not in accordance with the directions in the instruction manual. **4.** Damage due to natural disasters, accidental events or adverse conditions not compatible with the product. **5.** Defects that have a negligible effect on product performance. The manufacturer, distributor and all the parties involved in the sale do not assume any liability for losses and economic damage from any malfunction of the product. In accordance with current regulations the manufacturer, distributor and all the parties involved in the sale are not responding in any case for damages, including direct, indirect ones, loss of net income, loss of savings and additional damage and other details consequences going beyond the damage caused by the breach of warranty, contract, strict liability, wrongdoing or due to other causes, resulting from the use or inability to use the product and/or paper and electronic documents, including the lack of service. For further information on the help service visit the website www.nuvitababy.com

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX



IMPORTANT

- Ne pas exposer ce produit à des températures élevées, à une humidité excessive ou aux rayons directs du soleil pendant une longue période.
- Évitez les chocs violents, les collisions ou les chutes accidentelles de ce produit.
- Ce produit convient uniquement pour aspirer les sécrétions nasales. Ne l'utilisez pas de manière inappropriée comme pour absorber de l'eau ou sur la peau.
- Lorsque l'aspiration diminue considérablement ou que le bruit du moteur faiblit, veuillez le recharger à temps.
- Lors de l'utilisation, ne laissez pas l'utilisateur retenir sa respiration ou avaler sa salive, et gardez la bouche du bébé ouverte pour éviter un déséquilibre de pression dans les oreilles.
- En cas de douleur ou d'inconfort pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin.
- N'insérez pas la tête d'aspiration trop profondément dans les narines.
- Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr pour vous y référer.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Les dessins associés se trouvent à la page 2.

- | | | | |
|----|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| 1. | Réservoir de collecte | 7. | Bouton d'alimentation |
| 2. | Bouton d'intensité d'aspiration | 8. | Embout B |
| 3. | Bouton pour les lumières colorées | 9. | Embout C |
| 4. | Bouton pour berceuses | 10. | Pince |
| 5. | Embout A | 11. | Câble de charge USB |
| 6. | Écran LED | 12. | Boîte de rangement |

DESCRIPTION DES FONCTIONS

- **BOUTON D'ALIMENTATION.** Appuyez sur le bouton d'alimentation **(7)** pour allumer l'aspirateur nasal.
- **BOUTON D'INTENSITÉ D'ASPIRATION.** L'aspiration a cinq niveaux d'intensité. Appuyez une fois sur le bouton d'intensité **(2)** pour passer au niveau 1. Chaque pression suivante fait défiler au niveau supérieur, jusqu'au niveau 5.
- **BOUTON LUMIÈRES COLORÉES.** Appuyez sur le bouton des lumières colorées **(3)** pour les allumer et divertir bébé pendant l'aspiration nasale avec un changement automatique des couleurs.
- **BOUTON BERCEUSES.** Appuyez sur le bouton berceuses **(4)** pour jouer 3 berceuses apaisantes pour aider à détendre et reconforter bébé pendant l'aspiration.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ




IMPORTANT

- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Aucun adaptateur de charge n'est fourni. Vous pouvez utiliser un adaptateur de charge domestique ordinaire (Entrée 5V 1A ; Sortie 3,7W).
- Pendant la charge, l'indicateur de charge sur l'écran LED **(6)** clignotera.
- Quand la batterie est pleine, l'indicateur de charge s'arrête de clignoter.


ÉTAPE 1

Appuyez sur l'embout en silicone **(5)**, **(8)** ou **(9)** dans le réservoir de collecte **(1)**.

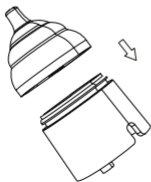

ÉTAPE 2

Appuyez le réservoir avec l'embout dans le corps de l'appareil.

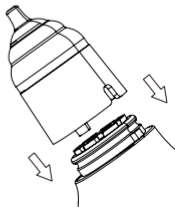

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Placez l'aspirateur près des narines sans laisser d'espace pour faciliter l'aspiration des mucosités.
- Avant d'aspirer des sécrétions nasales dures ou collantes, ramollissez-les en appliquant une serviette chaude sur le nez ou en instillant du sérum physiologique.
- Surveillez le réservoir de mucosités en permanence. S'il y en a trop, elles pourraient déborder.
- Éteignez la machine à temps quand le réservoir est plein et nettoyez-le. Essuyez les mucosités à l'entrée et dans le réservoir avec un coton-tige.
- Après le nettoyage, videz l'eau et séchez bien l'embout et le réservoir.
- Ne mettez pas le corps de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez ce produit dans la bonne position/méthode pour éviter que du liquide ne soit aspiré dans l'appareil.



EMBOUT A





EMBOUT B



EMBOUT C


- **Embout A.** Le plus grand embout (**5**) permet d'aspirer les mucosités épaisses chez les nourrissons et les enfants.
- **Embout B.** Embout d'aspiration en silicone en forme de gourde (**8**), adapté pour aspirer les saletés superficielles.
- **Embout C.** Embout d'aspiration en forme d'entonnoir (**9**), adapté pour aspirer les saletés profondes.

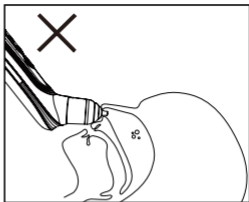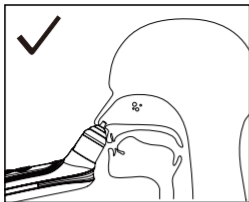

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Respectez les consignes d'hygiène suivantes pour éviter les risques sanitaires :

- Nettoyez l'appareil avant chaque utilisation. C'est important pour une meilleure hygiène, en cas d'infections bactériennes ou virales, ou quand les enfants sont très jeunes.
- **Corps :** Utilisez un chiffon doux sec (ou légèrement humide) sans ajouter de détergent.
- **Parties internes :** Cet appareil utilise la dernière technologie anti-refoulement qui permet à l'eau et aux liquides de passer dans les connexions internes sans l'endommager. Vous pouvez insérer l'embout dans un récipient d'eau chaude et aspirer pendant 30 secondes. L'eau passera dans les parties internes et ressortira sur le côté.
- **Embouts et réservoir :** Les embouts nasaux et le réservoir de mucosités peuvent être rincés à l'eau courante et stérilisés à chaud (100°C) dans l'eau bouillante ou au stérilisateur à vapeur.
- Ne mettez jamais le corps de l'appareil au lave-vaisselle.
- N'utilisez jamais de substances toxiques pour le nettoyage si elles entrent en contact avec la peau, les muqueuses, si elles sont avalées ou inhalées.
- N'utilisez pas de produits abrasifs et ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Évitez le nettoyage mécanique avec des brosses ou similaires, vous pourriez causer des dommages irréparables.

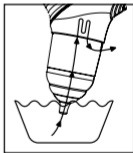

MISE AU REBUT

- Ne réparez ni n'ajustez l'appareil vous-même. Un fonctionnement correct ne peut plus être garanti dans ce cas.
- N'ouvrez pas l'appareil. Le non-respect de cette instruction annulera la garantie.
- Les réparations doivent être effectuées uniquement par le Service Clients ou des revendeurs agréés.
- Pour des raisons environnementales, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. Déposez-le dans un point de collecte ou de recyclage approprié dans votre pays. Mettez l'appareil au rebut conformément à la Directive CE sur les DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Pour toute question, contactez les autorités locales responsables de l'élimination des déchets.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	Aspirateur nasal électrique
Modèle	2150
Puissance d'aspiration	Niveau 1 : 25 kPa, Niveau 2 : 35 kPa, Niveau 3 : 45 kPa, Niveau 4 : 55 kPa, Niveau 5 : 65 kPa
Type de batterie	Batterie lithium-ion rechargeable 3,7 W ; 450 mAh ; Tension : 3,7 V
Tension de charge	5 V ; Fonctionnement : 3,6 ~ 4,2 V
Temps de charge	3 heures
Durée de décharge	55 minutes
Niveau sonore	Niveau 1 : 44 dB, Niveau 2 : 50 dB, Niveau 3 : 56 dB, Niveau 4 : 60 dB, Niveau 5 : 65 dB
Sécurité des matériaux	Sans BPA, ABS PC, silicone, non toxique

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois sur les défauts de matériaux et de fabrication, à compter de la date d'achat (voir ticket de caisse). La garantie de 24 mois ne couvre pas les dommages causés par l'usure normale des pièces identifiées comme "consommables" (piles, têtes de brosses ou pièces d'usure). La garantie légale de 24 mois est annulée si : **1.** Le produit a subi des dommages esthétiques dus à une utilisation incorrecte, non conforme au manuel d'instructions. **2.** Ce produit a été modifié et/ou altéré. **3.** La défaillance est due à un mauvais entretien des composants et/ou accessoires (ex : oxydation/entartrage dû à la rétention d'eau ou autres liquides, sédiments bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des piles). Sont exclus de la garantie légale de 24 mois : **1.** Les coûts liés au remplacement et/ou à la réparation des pièces d'usure ou les coûts d'entretien ordinaire du produit. **2.** Les coûts et risques de transport du produit vers et depuis le magasin d'achat ou un centre de collecte agréé pour la réparation sous garantie. **3.** Les dommages causés par une installation ou une utilisation incorrecte, non conforme au manuel d'instructions. **4.** Les dommages dus à des catastrophes naturelles, des accidents ou des conditions défavorables incompatibles avec le produit. **5.** Les défauts ayant un effet négligeable sur les performances du produit. Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente n'assument aucune responsabilité pour les pertes et dommages économiques résultant d'un dysfonctionnement du produit. Conformément à la réglementation en vigueur, le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente ne sont en aucun cas responsables des dommages, y compris les dommages directs, indirects, pertes de revenus nets, pertes d'économies et dommages accessoires et autres conséquences dépassant le dommage causé par la violation de garantie, contrat, responsabilité stricte, faute ou autre cause, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou les documents papier et électroniques, y compris le manque de service. Pour plus d'informations sur le service d'aide, visitez le site www.nuvitababy.com

ALLGEMEINE WARNHINWEISE



WICHTIG

- Setzen Sie dieses Produkt nicht über längere Zeit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Vermeiden Sie starken Druck, Zusammenstöße oder versehentliches Fallenlassen des Produkts auf den Boden.
- Dieses Produkt ist nur zum Absaugen von Nasenausscheidungen geeignet. Verwenden Sie es nicht unsachgemäß zum Aufsaugen von Wasser oder auf der Haut.
- Wenn die Saugkraft deutlich nachlässt oder sich das Motorengeräusch deutlich verringert, laden Sie es rechtzeitig auf.
- Lassen Sie den Benutzer während der Verwendung dieses Produkts nicht die Luft anhalten oder Speichel schlucken, und halten Sie den Mund des Babys offen, um einen Druckausgleich im Ohr zu vermeiden.
- Bei Schmerzen oder Unbehagen während der Anwendung brechen Sie den Gebrauch sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Führen Sie den Saugkopf nicht mit übermäßigem Druck in die Nasenhöhle ein.
- Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

GERÄTEBESCHREIBUNG

Die zugehörigen Zeichnungen befinden sich auf Seite 2.

- | | | | |
|----|-------------------------|-----|------------------|
| 1. | Auffangbehälter | 7. | Ein-/Austaste |
| 2. | Saugkrafttaste | 8. | Saugaufsatz B |
| 3. | Taste für bunte Lichter | 9. | Saugaufsatz C |
| 4. | Schlafliedtaste | 10. | Pinzette |
| 5. | Saugaufsatz A | 11. | USB-Ladekabel |
| 6. | LED-Bildschirm | 12. | Aufbewahrungsbox |

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- **EIN-/AUSTASTE:** Drücken Sie die Ein-/Austaste **(7)**, um den Nasenabsauger einzuschalten.
- **SAUGKRAFTTASTE:** Die Saugkraft hat fünf Intensitätsstufen. Drücken Sie die Saugkrafttaste **(2)** einmal, um in Stufe 1 zu gelangen. Jedes weitere Drücken der Saugkrafttaste wechselt zur nächsten Stufe bis Stufe 5.
- **TASTE FÜR BUNTE LICHTER:** Drücken Sie die Taste für bunte Lichter **(3)**, um die bunten Lichter einzuschalten, die das Baby während der Nasenabsaugung unterhalten und automatisch die Farbe wechseln.
- **SCHLAFLIEDTASTE:** Drücken Sie die Schlafliedertaste **(4)**, um 3 beruhigende Schlaflieder abzuspielen, die dem Baby während der Nasenabsaugung Entspannung und Komfort bieten.

SICHERHEITSHINWEISE




WICHTIG

- Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf.
- Es ist kein Ladegerät beigelegt. Sie können ein gewöhnliches Haushaltsladegerät verwenden (Eingang 5V 1A; Ausgang 3,7V).
- Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige auf dem LED-Bildschirm (6).
- Wenn der Akku voll aufgeladen ist, hört die Batterieanzeige auf zu blinken.


SCHRITT 1

Drücken Sie den Silikon Aufsatz **(5)**, **(8)** oder **(9)** in den Auffangbehälter **(1)**.

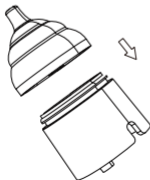


SCHRITT 2

Drücken Sie den Auffangbehälter mit Aufsatz in das Gerätegehäuse.

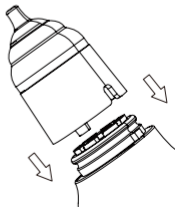

SICHERHEITSHINWEISE

- Platzieren Sie den Nasenabsauger nahe an der Nasenhöhle ohne Lücken, so lässt sich Nasenschleim leichter absaugen.
- Vor dem Absaugen von festem Nasensekret oder zähem Nasenschleim sollten Sie es mit einem warmen Tuch auf der Nase oder durch Einträufeln von Kochsalzlösung erst erweichen.
- Achten Sie jederzeit auf den Auffangbehälter für Nasensekrete. Bei zu viel Nasensekret kann etwas überlaufen.
- Schalten Sie die Maschine rechtzeitig aus, wenn die Kammer voll ist, und reinigen Sie sie. Wischen Sie Nasensekret an der Einsaugöffnung und in der Kammer mit einem Wattestäbchen ab.
- Entleeren Sie nach der Reinigung das Wasser, und blasen Sie den Aufsatz und die Kammer trocken.
- Tauchen Sie das Gerätegehäuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie dieses Produkt in der korrekten Körperhaltung/Methode, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in das Hauptgehäuse gelangt.

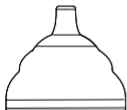

SAUGAUFSATZ A





SAUGAUFSATZ B



SAUGAUFSATZ C


- **Saugaufsatz A:** Der größte Aufsatz (5) kann Säuglingen und Kindern dabei helfen, eitrige Nasensekrete abzusaugen.
- **Saugaufsatz B:** Der Silikon-Saugaufsatz in Kürbisform (8) eignet sich zum Absaugen von Oberflächenschmutz.
- **Saugaufsatz C:** Der trichterförmige Saugaufsatz (9) eignet sich zum Absaugen von tiefer liegendem Schmutz.

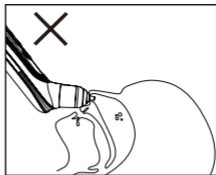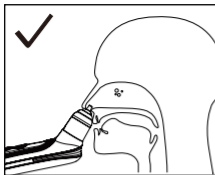

REINIGUNG UND WARTUNG

Beachten Sie diese Hygiene-Anweisungen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden:

- Reinigen Sie das Gerät vor jeder Verwendung. Dies ist wichtig für eine optimale Hygiene, besonders bei bakteriellen und viralen Infektionen oder wenn die Kinder sehr klein sind.
- **Gehäuse:** Verwenden Sie ein weiches, trockenes (oder leicht angefeuchtetes) Tuch ohne Reinigungsmittel.
- **Innere Teile:** Dieses Gerät verwendet die neueste Anti-Rückfluss-Technologie, die es dem Wasser und jeder Flüssigkeit ermöglicht, durch die internen Verbindungen zu fließen, ohne Schaden anzurichten. Sie können die Spitze des Aufsatzes in einen Behälter mit warmem Wasser stecken und 30 Sekunden lang absaugen. Das Wasser gelangt in die inneren Teile und wird seitlich ausgeleitet.
- **Düsen und Tank:** Die Nasenaufsätze und der Schleimsammelbehälter können unter fließendem Wasser abgespült und in kochendem Wasser (100°C) oder mit einem Dampfsterilisator heiß sterilisiert werden.
- Legen Sie das Gehäuse niemals in die Spülmaschine.
- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Substanzen, die möglicherweise giftig sind, wenn sie mit Haut oder Schleimhäuten in Berührung kommen oder verschluckt oder eingeatmet werden.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Vermeiden Sie die mechanische Reinigung mit Bürsten oder Ähnlichem, da dies zu irreparablen Schäden führen kann.

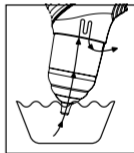

ENTSORGUNG

- Reparieren oder justieren Sie das Gerät nicht selbst. Ein ordnungsgemäßer Betrieb kann in diesem Fall nicht mehr gewährleistet werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.
- Entsorgen Sie das Gerät aus Umweltgründen am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den Hausmüll. Geben Sie es bei einer geeigneten örtlichen Sammel- oder Recyclingstelle in Ihrem Land ab. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der EG-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für die Abfallentsorgung zuständigen örtlichen Behörden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Typ	Elektrischer Nasenabsauger
Modell	2150
Saugkraft	1. Stufe: 25 kPa, 2. Stufe: 35 kPa, 3. Stufe: 45 kPa, 4. Stufe: 55 kPa, 5. Stufe: 65 kPa
Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithium-Akku 3,7 W; 450 mAh; Spannung: 3,7 V
Ladespannung	5 V; Betrieb: 3,6~4,2 V
Ladezeit	3 Stunden
Entladedauer	55 Minuten
Geräuschpegel	1. Stufe: 44 dB, 2. Stufe: 50 dB, 3. Stufe: 56 dB, 4. Stufe: 60 dB, 5. Stufe: 65 dB
Materialsicherheit	BPA-frei, ABS, PC, Silikon, Ungiftig

GARANTIE - BEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab Kaufdatum (siehe Kaufbeleg). Die 24-monatige Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden durch den üblichen Verschleiß von als "Verbrauchsmaterial" gekennzeichneten Teilen (z.B. Akkus, Bürstenköpfe oder verschleißanfällige Teile). Die gesetzliche 24-monatige Garantie erlischt, wenn: **1.** Das Produkt aufgrund unsachgemäßer, nicht den Anweisungen entsprechender Verwendung optische Schäden aufweist. **2.** Das Produkt modifiziert und/oder verändert wurde. **3.** Die Fehlerursache auf mangelhafte Wartung der einzelnen Komponenten und/oder Zubehörteile und/oder Verbrauchsmaterialien zurückzuführen ist (z.B. Oxidation und/oder Verkalkung durch Wasserrückstände oder andere Flüssigkeiten, Sensorblockade durch Ablagerungen, Auslaufen ätzender Flüssigkeiten aus Akkus). Folgendes ist von der gesetzlichen 24-monatigen Garantie ausgeschlossen: **1.** Kosten für Aus- und Einbau sowie Reparaturen von Verschleißteilen oder für die übliche Wartung des Produkts. **2.** Transport- und Transportkostenrisiken zwischen Verkaufsstelle oder autorisierter Sammelstelle und Garantieabnehmer. **3.** Schäden durch unsachgemäße Installation oder Verwendung entgegen den Anweisungen. **4.** Schäden durch Naturkatastrophen, Unfälle oder ungeeignete Bedingungen. **5.** Mängel mit vernachlässigbarer Auswirkung auf die Produktleistung. Hersteller, Vertrieb und alle am Verkauf beteiligten Parteien übernehmen keinerlei Haftung für Verluste und wirtschaftliche Schäden durch etwaige Produktfehlfunktionen. In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften haften Hersteller, Vertrieb und alle am Verkauf beteiligten Parteien in keinem Fall für direkte, indirekte Schäden, Ertragsausfälle, Einsparungsverluste und Folgeschäden, die über den Garantiebruch, Vertrag, strikte Haftung, Vergehen oder andere Ursachen hinausgehen und aus der Nutzung oder Nichtnutzung des Produkts und/oder Papier- und Elektronikdokumenten, einschließlich Serviceausfällen, resultieren. Weitere Informationen zum Kundendienst finden Sie auf der Website www.nuvitababy.com

AVISOS GERAIS



IMPORTANTE

- Não exponha este produto a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta por longos períodos.
- Evite pressão severa, colisões ou quedas acidentais deste produto no chão.
- Este produto é adequado apenas para sugar secreções nasais. Não o utilize para fins impróprios como sugar água ou na pele.
- Quando a sucção estiver significativamente reduzida ou o som do motor estiver significativamente reduzido, carregue-o atempadamente.
- Ao utilizar este produto, não deixe o utilizador prender a respiração ou engolir saliva e mantenha a boca do bebé aberta para evitar desequilíbrio de pressão no ouvido.
- Em caso de dor ou desconforto durante a utilização, interrompa imediatamente e procure assistência médica.
- Não insira o bocal de sucção na cavidade nasal com pressão excessiva.
- Leia atentamente o manual antes de utilizar o dispositivo e guarde-o num local seguro para referência futura.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Os desenhos associados encontram-se na página 2.

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|--------------------------|
| 1. | Reservatório coletor | 7. | Botão de alimentação |
| 2. | Botão de intensidade de sucção | 8. | Bocal B |
| 3. | Botão de luzes coloridas | 9. | Bocal C |
| 4. | Botão de música de embalar | 10. | Pinça |
| 5. | Bocal A | 11. | Cabo de carregamento USB |
| 6. | Ecrã LED | 12. | Caixa de armazenamento |

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

- **BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO:** Prima o botão de alimentação **(7)** para ligar o aspirador nasal.
- **BOTÃO DE INTENSIDADE DE SUÇÃO:** A sucção tem cinco níveis de intensidade. Prima o botão de intensidade de sucção **(2)** uma vez para entrar no nível 1. Cada pressão subsequente do botão de intensidade de sucção irá percorrer o próximo nível, até ao nível 5.
- **BOTÃO DE LUZES COLORIDAS:** Prima o botão de luzes coloridas **(3)** para ligar as luzes coloridas para entreter o bebé durante a sucção nasal, mudando automaticamente de cor.
- **BOTÃO DE MÚSICA DE EMBALAR:** Prima o botão de música de embalar **(4)** para tocar 3 músicas de embalar calmantes para ajudar a relaxar e confortar o bebé durante a sucção nasal.

NOTAS DE SEGURANÇA




IMPORTANTE

- Carregue totalmente o dispositivo antes de o utilizar pela primeira vez.
- Não há nenhum adaptador de carregamento incluído. Você pode usar um adaptador de carregamento doméstico comum (Entrada 5V 1A; Saída 3,7W).
- Durante o carregamento, o indicador de alimentação no ecrã LED **(6)** irá piscar.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de alimentação irá parar de piscar.


PASSO 1

Prima o bocal de silicone **(5)**, **(8)** ou **(9)** no reservatório coletor **(1)**.

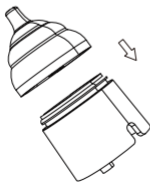

PASSO 2

Prima o reservatório com bocal no corpo do dispositivo.

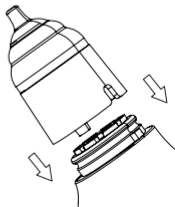

NOTAS DE SEGURANÇA

- Coloque o aspirador nasal próximo da cavidade nasal, sem deixar espaços, será mais fácil sugar as secreções nasais.
- Antes de sugar secreções nasais duras ou mucosas nasais espessas, amolecê-las, aplicando uma toalha quente no nariz ou pingando soro fisiológico.
- Esteja sempre atento ao reservatório coletor de secreções nasais. Se houver demasiadas secreções nasais, algumas podem transbordar.
- Desligue a máquina atempadamente quando a câmara estiver cheia e limpe-a. Limpe as secreções nasais na porta de entrada e na câmara com um cotonete.
- Esvazie a água e seque com ar o bocal e a câmara após a limpeza.
- Não coloque o corpo dentro de água ou outros líquidos.
- Utilize este produto na postura/método correto para evitar que entre líquido no corpo principal.



BOCAL A





BOCAL B



BOCAL C


- **Bocal A:** O maior bocal (5) pode ajudar bebês e crianças a sugar secreções nasais do tipo pus.
- **Bocal B:** O bocal de sucção de silicone em forma de abóbora (8) é adequado para sugar sujidade superficial.
- **Bocal C:** O bocal de sucção em forma de funil (9) é adequado para sugar sujidade mais profunda.

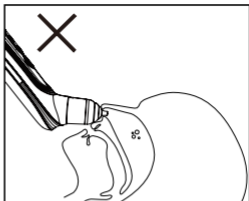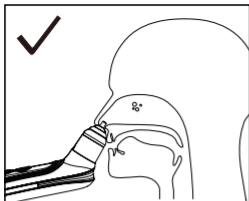

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Observe as seguintes instruções de higiene para evitar riscos para a saúde:

- Limpe o dispositivo antes de cada utilização. Isto é importante para a melhor higiene, especialmente em caso de infecções bacterianas e virais ou quando as crianças são muito pequenas.
- **Corpo:** Utilize um pano macio seco (ou ligeiramente húmido) sem adicionar qualquer detergente.
- **Partes internas:** Este dispositivo utiliza a mais recente tecnologia anti-refluxo que permite que a água e qualquer líquido passem pelas ligações internas sem o danificar. Pode inserir a ponta do bocal num recipiente com alguma água morna e começar a aspirar durante 30 segundos. A água irá entrar nas partes internas e ser expelida de lado.
- **Bocais e reservatório:** Os bocais nasais e o reservatório coletor de muco podem ser enxaguados com água corrente e esterilizados a vapor (100°C) em água a ferver ou com um esterilizador a vapor.
- Nunca coloque o corpo na máquina de lavar louça.
- Nunca utilize qualquer substância de limpeza que possa ser potencialmente tóxica se entrar em contacto com a pele ou membranas mucosas, ou se for engolida ou inalada.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos e nunca submerja o dispositivo na água.
- Evite a limpeza mecânica com escovas ou similares, pois pode resultar em danos irreparáveis.

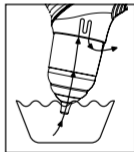

ELIMINAÇÃO

- Não repare ou ajuste o dispositivo você mesmo. O funcionamento correto não pode ser garantido neste caso.
- Não abra o dispositivo. O não cumprimento desta instrução anulará a garantia.
- As reparações só devem ser realizadas pelo Serviço de Apoio ao Cliente ou revendedores autorizados.
- Por razões ambientais, não elimine o dispositivo no lixo doméstico no final da sua vida útil. Elimine o dispositivo num ponto de recolha/reciclagem local apropriado no seu país. Elimine o dispositivo de acordo com a Diretiva CE - REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos). Se tiver alguma dúvida, contacte as autoridades locais responsáveis pela eliminação de resíduos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo	Aspirador nasal elétrico
Modelo	2150
Potência de sucção	1º nível: 25kPa, 2º nível: 35kPa, 3º nível: 45kPa, 4º nível: 55kPa, 5º nível: 65kPa
Tipo de bateria	Bateria recarregável de lítio 3,7W; 450MAH; Voltagem: 3,7V
Voltagem de carregamento	5V; Operacional: 3,6~4,2V
Tempo de carregamento	3 horas
Duração de descarga	55 minutos
Nível de ruído	1º nível: 44DB, 2º nível: 50DB, 3º nível: 56DB, 4º nível: 60DB, 5º nível: 65DB
Segurança do material	Sem BPA, ABS PC, Silicone, Não tóxico

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto beneficia de uma garantia de 24 meses sobre defeitos de material e fabrico, a partir da data de compra (ver talão de venda). A garantia de 24 meses não inclui danos causados pelo desgaste normal das partes identificadas como “consumíveis” (ex: baterias, cabeças de escova ou peças sujeitas a desgaste). A garantia legal de 24 meses é anulada se: **1.** O produto sofreu danos estéticos devido a utilização imprópria não conforme com as instruções no manual. **2.** Este produto foi modificado e/ou violado. **3.** A causa da falha se deveu à má manutenção dos componentes individuais e/ou acessórios (ex: oxidação e/ou acumulação devido à retenção de água ou outros líquidos, sedimentos bloqueando o sensor, fuga de líquido corrosivo de baterias). O seguinte é excluído da garantia legal de 24 meses: **1.** Custos relacionados com substituições e/ou reparação de peças sujeitas a desgaste ou custos de manutenção normal do produto. **2.** Os custos e riscos envolvidos no transporte do produto para e do estabelecimento onde o comprou ou ponto de recolha autorizado para receber produtos em garantia. **3.** Danos causados por ou resultantes de instalação incorreta ou utilização imprópria não de acordo com as instruções no manual de instruções. **4.** Danos devidos a catástrofes naturais, acidentes ou condições adversas não compatíveis com o produto. **5.** Defeitos que tenham um efeito negligenciável no desempenho do produto. O fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não assumem qualquer responsabilidade por perdas e danos económicos devido a qualquer mau funcionamento do produto. De acordo com os regulamentos atuais, o fabricante, distribuidor e todas as partes envolvidas na venda não são responsáveis em caso algum por danos, incluindo diretos, indiretos, perda de receita líquida, perda de poupanças e danos adicionais e outras consequências para além do dano causado pela violação da garantia, contrato, responsabilidade objetiva, negligência ou devido a outras causas, resultantes da utilização ou inabilidade de utilizar o produto e/ou documentos impressos e eletrónicos, incluindo a falta de serviço. Para mais informações sobre o serviço de apoio, visite www.nuvitababy.com

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποφύγετε σοβαρές προσκρούσεις, συγκρούσεις ή τυχαία πτώση του προϊόντος στο έδαφος.
- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για την απορρόφηση ρινικών εκκρίσεων. Μην το χρησιμοποιείτε για ακατάλληλη χρήση όπως απορρόφηση νερού ή στο δέρμα.
- Όταν η αναρρόφηση μειώνεται σημαντικά ή ο θόρυβος του μοτέρ ελαττώνεται, φορτίστε το εγκαίρως.
- Κατά τη χρήση, μην αφήνετε το χρήστη να κρατάει την αναπνοή του ή να καταπίνει σάλιο και διατηρείτε το στόμα του μωρού ανοιχτό για να αποφύγετε ανισορροπία πίεσης στο αυτί.
- Σε περίπτωση πόνου ή δυσφορίας κατά τη χρήση, διακόψτε αμέσως και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
- Μην εισάγετε το ρύγχος αναρρόφησης στη ρινική κοιλότητα με υπερβολική πίεση.
- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν τη χρήση και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι σχετικές εικόνες βρίσκονται στη σελίδα 2.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Δοχείο Συλλογής | 7. Κουμπί Λειτουργίας |
| 2. Κουμπί Έντασης Αναρρόφησης | 8. Ρύγχος Β |
| 3. Κουμπί Χρωματιστών Φώτων | 9. Ρύγχος Γ |
| 4. Κουμπί Ναουρίσματος | 10. Λαβίδα |
| 5. Ρύγχος Α | 11. Καλώδιο Φόρτισης USB |
| 6. Οθόνη LED | 12. Κουτί Αποθήκευσης |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- **ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.** Πατήστε το κουμπί λειτουργίας **(7)** για να ενεργοποιήσετε τον ρινικό αναρροφητήρα.
- **ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.** Η αναρρόφηση έχει 5 επίπεδα έντασης. Πατήστε μία φορά το κουμπί **(2)** για επίπεδο 1. Κάθε επόμενο πάτημα θα εναλλάσσει στο επόμενο επίπεδο έως το 5.
- **ΚΟΥΜΠΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΦΩΤΩΝ.** Πατήστε το κουμπί **(3)** για να ενεργοποιήσετε τα χρωματιστά φώτα που ψυχαγωγούν το μωρό κατά την αναρρόφηση, αλλάζοντας αυτόματα χρώμα.
- **ΚΟΥΜΠΙ ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΟΣ.** Πατήστε το κουμπί **(4)** για να παίξετε 3 ηρεμιστικά νανουρίσματα που χαλαρώνουν και ανακουφίζουν το μωρό κατά την αναρρόφηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
- Δεν περιλαμβάνεται φορτιστής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οικιακό φορτιστή (Είσοδος 5V 1A, Έξοδος 3,7W).
- Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη μπαταρίας στην οθόνη LED **(6)** θα αναβοσβήνει.
- Όταν η μπαταρία είναι πλήρης, η ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.


ΒΗΜΑ 1

Πιέστε το σιλικονούχο ρύγχος **(5)**, **(8)** ή **(9)** στο δοχείο συλλογής **(1)**.

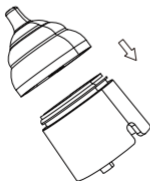


ΒΗΜΑ 2

Πιέστε το δοχείο με το ρύγχος στο σώμα της συσκευής.

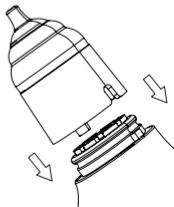


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τοποθετήστε τον αναρροφητήρα κοντά στη ρινική κοιλότητα χωρίς κενά, έτσι θα είναι πιο εύκολη η αναρρόφηση ρινικών εκκρίσεων.
- Πριν αναρροφήσετε σκληρές ρινικές εκκρίσεις ή κολλώδεις βλέννες, μαλακώστε τις πρώτα με ζεστή πετσέτα στη μύτη ή ρινικό διάλυμα.
- Προσέχετε συνεχώς το δοχείο συλλογής. Αν υπάρχουν πολλές εκκρίσεις, μπορεί να υπάρξει υπερχειλίση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή εγκαίρως όταν το δοχείο γεμίσει και καθαρίστε την. Σκουπίστε τις εκκρίσεις στο στόμιο και το δοχείο με βαμβάκι.
- Αδειάστε το νερό και στεγνώστε με φύσημα το ρύγχος και το δοχείο μετά τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με τη σωστή στάση/μέθοδο για να αποφύγετε την εισροή υγρών στη συσκευή.

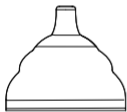

ΡΥΓΧΟΣ Α


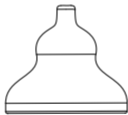


ΡΥΓΧΟΣ Β



ΡΥΓΧΟΣ Γ


- **ΡΥΓΧΟΣ Α.** Το μεγαλύτερο ρύγχος (**5**) μπορεί να βοηθήσει βρέφη και παιδιά να αναρροφήσουν πυώδεις ρινικές εκκρίσεις.
- **ΡΥΓΧΟΣ Β.** Το σιλικονούχο ρύγχος σχήματος κολοκύθας (**8**) είναι κατάλληλο για αναρρόφηση επιφανειακών ακαθαρσιών.
- **ΡΥΓΧΟΣ Γ.** Το ρύγχος σχήματος χωνιού (**9**) είναι κατάλληλο για αναρρόφηση βαθύτερων ακαθαρσιών.

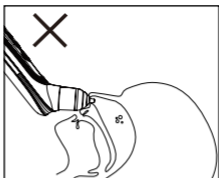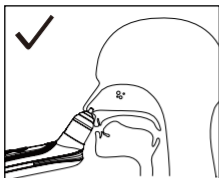

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες υγιεινής για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία:

- Καθαρίζετε τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Αυτό είναι σημαντικό για την καλύτερη υγιεινή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων ή όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά.
- **Σώμα:** Χρησιμοποιήστε μαλακό στεγνό (ή ελαφρώς υγρό) πανί χωρίς απορρυπαντικό.
- **Εσωτερικά Μέρη:** Η συσκευή διαθέτει την τελευταία τεχνολογία αντεπιστροφής ροής που επιτρέπει τη διέλευση νερού και υγρών στις εσωτερικές συνδέσεις χωρίς βλάβη. Μπορείτε να βυθίσετε το άκρο του ρύγχους σε δοχείο με χλιαρό νερό και να αναρροφήσετε για 30 δευτερόλεπτα. Το νερό θα περάσει από τα εσωτερικά μέρη και θα εξαχθεί στο πλάι.
- **Ρύγχη και Δοχείο:** Τα ρινικά ρύγχη και το δοχείο συλλογής μπορούν να ξεπλυθούν με τρεχούμενο νερό και να αποστειρωθούν (100°C) σε βραστό νερό ή ατμοκαθαριστή.
- Ποτέ μην βάζετε το σώμα στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες καθαρισμού που θα μπορούσαν να είναι τοξικές αν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, τους βλεννογόνους, αν καταποθούν ή εισπνευστούν.
- Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά και μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
- Αποφύγετε τον μηχανικό καθαρισμό με βουρτσάκια κλπ, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.

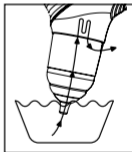

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

- Μην επισκευάζετε ή ρυθμίζετε μόνοι σας τη συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί η σωστή λειτουργία.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Η μη συμμόρφωση ακυρώνει την εγγύηση.
- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από την Εξυπηρέτηση Πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.
- Για περιβαλλοντικούς λόγους, μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος της ζωής της. Απορρίψτε την σε κατάλληλο τοπικό σημείο συλλογής/ανακύκλωσης της χώρας σας, σύμφωνα με την Οδηγία ΕΚ για Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος	Ηλεκτρικός Ρινικός Αναρροφητήρας
Μοντέλο	2150
Ισχύς Αναρρόφησης	1ο Επίπεδο: 25kPa, 2ο: 35kPa, 3ο: 45kPa, 4ο: 55kPa, 5ο: 65kPa
Τύπος Μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη Λιθίου 3.7W, 450mAh, Τάση: 3.7V
Τάση Φόρτισης	5V, Λειτουργίας: 3.6~4.2V
Χρόνος Φόρτισης	3 ώρες
Διάρκεια Αποφόρτισης	55 λεπτά
Επίπεδο Θορύβου	1ο: 44dB, 2ο: 50dB, 3ο: 56dB, 4ο: 60dB, 5ο: 65dB
Υλικά Κατασκευής	Απαλλαγμένα από BPA, ABS PC, Σιλικόνη, Μη Τοξικά

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα υλικών και κατασκευής, από την ημερομηνία αγοράς (βλ. απόδειξη πώλησης). Η 24μηνη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές από τη συνήθη φθορά των μερών που χαρακτηρίζονται ως "αναλώσιμα" (π.χ. μπαταρίες, κεφαλές βουρτσών ή εξαρτήματα που φθείρονται). Η 24μηνη νομική εγγύηση ακυρώνεται εάν: **1.** Το προϊόν έχει υποστεί αισθητικές ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του εγχειριδίου.

2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί ή παραβιαστεί. **3.** Η αιτία της βλάβης οφείλεται σε κακή συντήρηση των εξαρτημάτων και/ή παρελκομένων (π.χ. οξείδωση/άλατα από παραμονή νερού ή άλλων υγρών, ιζήματα που φράζουν τον αισθητήρα, διαρροή διαβρωτικών υγρών από μπαταρίες). Εξαιρούνται από τη 24μηνη νομική εγγύηση: **1.** Κόστη σχετικά με αντικατάσταση/επισκευή φθαρμένων εξαρτημάτων ή κόστη συνήθους συντήρησης. **2.** Έξοδα και κίνδυνοι μεταφοράς του προϊόντος προς/από το κατάστημα αγοράς ή εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για επισκευή. **3.** Ζημιές από εσφαλμένη εγκατάσταση ή χρήση που παρεκκλίνει από τις οδηγίες. **4.** Ζημιές από φυσικές καταστροφές, ατυχήματα ή ασύμβατες συνθήκες. **5.** Ελαττώματα με αμελητέα επίδραση στην απόδοση. Ο κατασκευαστής, ο διανομέας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεν φέρουν ευθύνη για απώλειες και οικονομικές ζημιές από τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο κατασκευαστής, ο διανομέας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων άμεσων, έμμεσων, απώλειας καθαρών εσόδων, απώλειας αποταμιεύσεων και επιπλέον ζημιών και άλλων παρεπόμενων συνεπειών που υπερβαίνουν τη ζημία που προκλήθηκε από παραβίαση της εγγύησης, σύμβασης, αυστηρής ευθύνης, αδικοπραξίας ή άλλης αιτίας, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος και/ή των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εξυπηρέτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.nuvitababy.com

GENERELLE ADVARSLER



VIKTIG

- Ikke utsett dette produktet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys over lengre tid.
- Unngå kraftige støt, kollisjoner eller at produktet ved et uhell faller i bakken.
- Dette produktet er kun egnet for å suge opp nesevisiv. Ikke bruk det til upassende formål som å suge opp vann eller på huden.
- Når sugeevnen reduseres betydelig eller motorlyden avtar betraktelig, må du lade enheten i tide.
- Når du bruker produktet, ikke la brukeren holde pusten eller svelge spytt, og hold babyens munn åpen for å unngå trykkubalanse i øret.
- Hvis det oppstår smerter eller ubehag under bruk, stopp bruken umiddelbart og oppsøk medisinsk hjelp.
- Ikke før sugehetten inn i nesen med for mye kraft.
- Les nøye gjennom manualen før du bruker enheten og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse.

BESKRIVELSE AV ENHETEN

De tilhørende illustrasjonene finnes på side 2.

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|------------------|
| 1. | Oppsamlingsbeholder | 7. | Av/på-knapp |
| 2. | Sugestykkeknapp | 8. | Munnstykke B |
| 3. | Knapp for fargede lys | 9. | Munnstykke C |
| 4. | Vuggeviseknapp | 10. | Pinsett |
| 5. | Munnstykke A | 11. | USB-ladekabel |
| 6. | LED-skjerm | 12. | Oppbevaringsboks |

FUNKSJONSBESKRIVELSE

- **AV/PÅ-KNAPP:** Trykk på av/på-knappen **(7)** for å slå på nesesugemaskinen.
- **SUGESTYRKEKNAPP:** Sugeevnen har fem intensitetsnivåer. Trykk på sugestyrkeknappen **(2)** én gang for nivå 1. Hvert påfølgende trykk på knappen vil sykle til neste nivå, opp til nivå 5.
- **KNAPP FOR FARGEDE LYS:** Trykk på knappen for fargede lys **(3)** for å slå på de fargede lysene som underholde babyen under nesesuging, lysene skifter automatisk farge.
- **VUGGEVISEKNAPP:** Trykk på vuggevisenknappen **(4)** for å spille av 3 beroligende vuggeviser som bidrar til avslapning og komfort for babyen under nesesuging.

SIKKERHETSINSTRUKSER




VIKTIG

- Lad enheten fullstendig før første gangs bruk.
- Det følger ikke med noen lader. Du kan bruke en vanlig husholdningslader (Inngang 5V 1A; Utgang 3,7W).
- Under lading vil batteriindikatoren på LED-skjermen **(6)** blinke.
- Når batteriet er fulladet, slutter batteriindikatoren å blinke.


TRINN 1

Trykk silikontuppene **(5)**, **(8)** eller **(9)** inn i oppsamlingsbeholderen **(1)**.

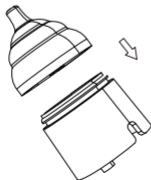

TRINN 2

Trykk beholderen med munnstykke inn i hoveddelen av enheten.

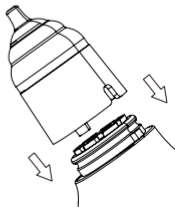

SIKKERHETSINSTRUKSER

- Plasser nesesugemaskinen tett inntil neseborene uten mellomrom, dette gjør det enklere å suge ut neseslim.
- Før du suger ut hard neseavføring eller seigt neseslim, må du mykgjøre det ved å legge en varm klut på nesen eller dryppe med saltvann.
- Følg nøye med på oppsamlingsbeholderen hele tiden. Hvis det er for mye neseslim, kan det renne over.
- Slå av maskinen i tide når kammeret er fullt og rengjør den. Tørk av neseslim ved inntaksåpningen og i kammeret med en bomullspinne.
- Tøm ut vannet og blås tørr munnstykket og kammeret etter rengjøring.
- Ikke legg hoveddelen i vann eller andre væsker.
- Bruk produktet i riktig stilling/posisjon for å unngå at væske suges inn i hoveddelen.



MUNNSTYKKE A





MUNNSTYKKE B



MUNNSTYKKE C


- **Munnstykke A:** Det største munnstykket (**5**) kan hjelpe spedbarn og barn å suge opp tykk, pussliknende neseavføring.
- **Munnstykke B:** Silikonmunnstykket i greskarform (**8**) egner seg for å suge opp overflattisk skitt.
- **Munnstykke C:** Traktformede munnstykket (**9**) egner seg for å suge opp dypere skitt.

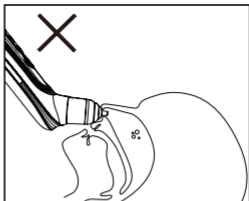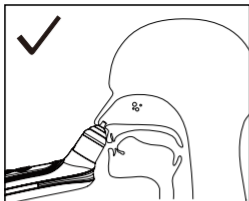

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Følg disse hygieneinstruksjonene for å unngå helseisiko:

- Rengjør enheten før hver bruk. Dette er viktig for best mulig hygiene, spesielt ved bakterielle og virale infeksjoner eller når barna er svært små.
- **Hoveddel:** Bruk en myk, tørr (eller lett fuktet) klut uten rengjøringsmiddel.
- **Innvendige deler:** Denne enheten bruker den nyeste teknologien mot tilbakestrømning som gjør at vann og væsker kan passere gjennom de innvendige koblingene uten å skade dem. Du kan sette tuppen av munnstykket i en beholder med varmt vann og starte sugingen i 30 sekunder. Vannet vil gå inn i de innvendige delene og strømme ut på siden.
- **Munnstykker og beholder:** Nesemunstykkene og oppsamlingsbeholderen kan skylles med rennende vann og varmesteriliseres (100 °C) i kokende vann eller dampsterilisator.
- Legg aldri hoveddelen i oppvaskmaskin.
- Bruk aldri rengjøringsmidler som kan være giftige ved kontakt med hud eller slimhinner, eller hvis de svelges eller innåndes.
- Ikke bruk slipende rengjøringsprodukter og legg aldri enheten i vann.
- Unngå mekanisk rengjøring med børster eller lignende, da dette kan føre til uopprettelig skade.

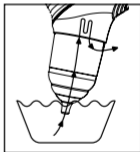

AVHENDING

- Ikke reparer eller juster enheten selv. Riktig drift kan da ikke lenger garanteres.
- Ikke åpne enheten. Manglende overholdelse av denne instruksjonen vil gjøre garantien ugyldig.
- Reparasjoner må kun utføres av kundeservice eller autoriserte forhandlere.
- Av miljøhensyn må du ikke kaste enheten i husholdningsavfallet når levetiden er over. Lever den inn på et egnet lokalt innsamlings- eller resirkuleringspunkt i landet ditt. Avhend enheten i henhold til EU-direktivet for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE). Kontakt lokale myndigheter ansvarlige for avfallshåndtering hvis du har spørsmål.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type	Elektrisk nesegemaskin
Modell	2150
Sugeeffekt	1. nivå: 25 kPa, 2. nivå: 35 kPa, 3. nivå: 45 kPa, 4. nivå: 55 kPa, 5. nivå: 65 kPa
Batteritype	Oppladbar litium 3,7 W, 450 mA
Ladespenning	5V, driftsspenning: 3,6–4,2V
Ladetid	3 timer
Driftstid	55 minutter
Støynivå	1. nivå: 44 dB, 2. nivå: 50 dB, 3. nivå: 56 dB, 4. nivå: 60 dB, 5. nivå: 65 dB
Materialer	Fri for BPA, ABS PC, silikon, ikke-toksisk

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet har 24 måneders garanti mot material- og produksjonsfeil fra kjøpsdato (se kvittering). 24-månedersgarantien dekker ikke skader forårsaket av normal slitasje på deler identifisert som "forbruksvarer" (f.eks. batterier, børstehoder eller deler utsatt for slitasje). Den 24 måneder lange lovbestemte garantien bortfaller hvis: **1.** Produktet har fått kosmetiske skader grunnet feil bruk som ikke samsvarer med instruksjonene i manualen. **2.** Dette produktet er modifisert og/eller tuklet med. **3.** Årsaken til feilen skyldes dårlig vedlikehold av individuelle komponenter og/eller tilbehør (f.eks. oksidering/kalkavleiringer grunnet oppbevaring av vann eller andre væsker, bunnfall som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batterier). Følgende er unntatt fra den 24 måneder lange lovbestemte garantien: **1.** Kostnader knyttet til utskifting og/eller reparasjon av slidedeler eller kostnader for ordinært vedlikehold. **2.** Kostnader og risikoer involvert i å frakte produktet til og fra butikken der du kjøpte det eller autorisert returpunkt for produkter under garanti. **3.** Skader forårsaket av eller som følge av feilaktig installasjon eller feil bruk som ikke samsvarer med instruksjonene i bruksanvisningen. **4.** Skader forårsaket av naturkatastrofer, uhell eller ugunstige forhold som ikke er compatible med produktet. **5.** Mangler som har liten effekt på produktytelsen. Produsenten, distributøren og alle parter involvert i salget påtar seg ikke noe ansvar for tap og økonomiske skader på grunn av eventuelle funksjonsfeil på produktet. I samsvar med gjeldende forskrifter er ikke produsenten, distributøren og alle parter involvert i salget under noen omstendigheter erstatningsansvarlige for skader, inkludert direkte, indirekte tap av nettoinntekt, tapt fortjeneste og ytterligere skader og andre følgeskader utover skaden forårsaket av brudd på garantien, kontraktsbrudd, objektivt ansvar, forsømmelser eller annet, som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller papir og elektroniske dokumenter, inkludert mangel på service. For mer informasjon om hjelp og service, besøk www.nuvitababy.com

GENERELLE ADVARSLER



VIGTIGT

- Udsæt ikke dette produkt for høje temperaturer, høj fugtighed eller direkte sollys i længere tid.
- Undgå kraftig tryk, kollisioner eller utilsigtet tab af produktet på gulvet.
- Dette produkt er kun egnet til at opsuge næsesekret. Brug det ikke til upassende formål som f.eks. at opsuge vand eller på huden.
- Når sugeevnen reduceres væsentligt, eller motorlyden bliver væsentligt svagere, skal du oplade det i tide.
- Under brug må brugeren ikke holde vejret eller sluge spyt, og hold babyens mund åben for at undgå trykubalance i øret.
- Stop øjeblikkeligt brugen ved smerte eller ubehag, og søg lægehjælp.
- Før ikke sugestudsens ind i næsehulen med for meget kraft.
- Læs venligst manualen omhyggeligt, før du bruger enheden, og opbevar den et sikkert sted til fremtidig reference.

ENHEDSBESKRIVELSE

De tilhørende illustrationer findes på side 2.

- | | | | |
|----|----------------------|-----|-----------------|
| 1. | Opsamlingsbeholder | 7. | Tænd/sluk-knap |
| 2. | Sugestykkeknop | 8. | Mundstykke B |
| 3. | Knap til farvede lys | 9. | Mundstykke C |
| 4. | Vuggeviseknap | 10. | Pincet |
| 5. | Mundstykke A | 11. | USB-opladekabel |
| 6. | LED-skærm | 12. | Opbevaringsboks |

FUNKTIONSBESKRIVELSE

- **TÆND/SLUK-KNAP:** Tryk på tænd/sluk-knappen **(7)** for at tænde næsesugeren.
- **SUGESTYRKEKNAP:** Sugeevnen har fem styrkeniveauer. Tryk én gang på sugestyreknappen **(2)** for at komme på niveau 1. Hvert efterfølgende tryk på knappen skifter til næste niveau op til niveau 5.
- **KNAP TIL FARVEDE LYS:** Tryk på knappen til farvede lys **(3)** for at tænde de farvede lys, som underholderbarnet under næsesugning, og som automatisk skifter farve.
- **VUGGEVISEKNAP:** Tryk på vuggeviseknappen **(4)** for at afspille 3 beroligende vuggevise, der hjælper med at slappe af og skabe komfort for barnet under næsesugning.

SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER




VIGTIGT

- Oplad enheden fuldt ud, før du bruger den for første gang.
- Der er ingen opladeradapter vedlagt. Du kan bruge en almindelig husholdningsoplader (Indgang 5V 1A; Udgang 3,7W).
- Under opladning vil batteriindikatoren på LED-skærmen **(6)** blinke.
- Når batteriet er fuldt opladet, holder batteriindikatoren op med at blinke.


TRIN 1

Tryk silikonemundstykkerne **(5)**, **(8)** eller **(9)** ind i opsamlingsbeholderen **(1)**.

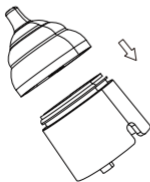


TRIN 2

Tryk beholderen med mundstykke ind i enhedens hoveddel.

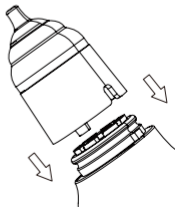


SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

- Placér næsesugeren tæt på næsehulen uden mellemrum, så er det nemmere at opsuge næsesekret.
- Før du opsuger hårde næsebobler eller sejt næsesekret, skal du blødgøre det først med en varm klud på næsen eller dryppe saltvand i næsen.
- Vær altid opmærksom på opsamlingsbeholderen til næsesekret. Hvis der er for meget næsesekret, kan noget flyde over.
- Sluk maskinen i tide, når kammeret er fyldt, og rengør den. Tør næsesekret ved indsugningsåbningen og i kammeret af med en vatpind.
- Tøm for vand, og blæs mundstykket og kammeret tørt efter rengøring.
- Læg ikke hoveddelen i vand eller andre væsker.
- Brug produktet i den korrekte stilling/metode for at undgå at væske suges ind i hoveddelen.

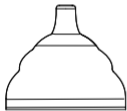

MUNDSTYKKE A


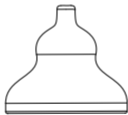


MUNDSTYKKE B



MUNDSTYKKE C


- **Mundstykke A:** Det største mundstykke (5) kan hjælpe spædbørn og børn med at opsuge tyk, suppurationsagtig næsesekret.
- **Mundstykke B:** Silikone-sugemundstykket i græskarform (8) er velegnet til at opsuge overfladisk snavs.
- **Mundstykke C:** Det tragtformede sugemundstykke (9) er velegnet til at opsuge dybere snavs.

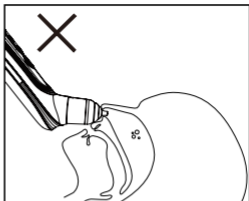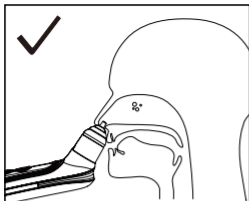

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Overhold følgende hygiejneinstruktioner for at undgå sundhedsrisici:

- Rengør enheden før hver brug. Dette er vigtigt for den bedste hygiejne, især i tilfælde af bakterielle og virale infektioner eller når børnene er meget små.
- **Hoveddel:** Brug en blød, tør (eller let fugtet) klud uden at tilsætte rengøringsmiddel.
- **Indvendige dele:** Denne enhed bruger den nyeste anti-tilbagestrømsteknologi, der gør det muligt for vand og væske at passere gennem de indvendige forbindelser uden at beskadige dem. Du kan sætte spidsen af mundstykket i en beholder med lunt vand og starte opugningen i 30 sekunder. Vandet vil gå ind i de indvendige dele og strømme ud ad siden.
- **Mundstykker og beholdere:** Næsemundstykkerne og beholderen til næsesekret kan skylles under rindende vand og dampsteriliseres (100°C) i kogende vand eller med en dampsterilisator.
- Læg aldrig hoveddelen i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig nogen form for rengøringsmiddel, der potentielt kan være giftigt ved kontakt med hud eller slimhinder eller ved at blive slugt eller indåndet.
- Brug ikke slibende rengøringsprodukter, og nedsænk aldrig enheden i vand.
- Undgå mekanisk rengøring med børster eller lignende, da dette kan medføre uoprettelig skade.

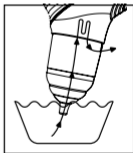

BORTSKAFFELSE

- Du må ikke selv reparere eller justere enheden. Korrekt drift kan ikke længere garanteres i så fald.
- Åbn ikke enheden. Manglende overholdelse af denne instruktion vil ugyldiggøre garantien.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.
- Af miljømæssige årsager må du ikke bortskaffe enheden med husholdningsaffaldet, når den er udtjent. Bortskaf enheden på et egnet lokalt indsamlings- eller genbrugssted i dit land. Bortskaf enheden i overensstemmelse med EF-direktiv - WEEE (Affald af elektrisk og elektronisk udstyr). Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte de lokale myndigheder ansvarlige for bortskaffelse af affald.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Elektrisk næsesugermaskine
Model	2150
Sugestyrke	1. niveau: 25 kPa, 2. niveau: 35 kPa, 3. niveau: 45 kPa, 4. niveau: 55 kPa, 5. niveau: 65 kPa
Batteritype	Genopladeligt lithium-batteri 3,7 W; 450 mAh; Spænding: 3,7 V
Opladningsspænding	5 V; Driftsspænding: 3,6~4,2 V
Opladningstid	3 timer
Afladningstid	55 minutter
Støjniveau	1. niveau: 44 dB, 2. niveau: 50 dB, 3. niveau: 56 dB, 4. niveau: 60 dB, 5. niveau: 65 dB
Materialesikkerhed	BPA-fri, ABS PC, silikone, ikke-toksisk

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af 24 måneders garanti på materiale- og produktionsfejl fra købsdatoen (se kvittering). 24-måneders garantien dækker ikke skader forårsaget af normal slid på dele, der identificeres som "forbrugsvarer" (f.eks. batterier, børstehovedr eller dele udsat for slid). Den lovbestemte 24-måneders garanti bortfalder, hvis: **1.** Produktet har lidt kosmetisk skade på grund af forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen. **2.** Dette produkt er blevet modificeret og/eller pillet ved. **3.** Årsagen til fejlen skyldtes dårlig vedligeholdelse af de enkelte komponenter og/eller tilbehørsdele (f.eks. oxidering og/eller kalkaflejringer på grund af ophobning af vand eller andre væsker, bundfald der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterier). Følgende er undtaget fra den lovbestemte 24-måneders garanti: **1.** Omkostninger relateret til udskiftning og/eller reparation af sliddele eller omkostninger til almindelig vedligeholdelse af produktet. **2.** Omkostninger og risici involveret i transport af produktet til og fra den butik, hvor du købte det, eller et autoriseret indleveringssted for at modtage produkter under garanti. **3.** Skader forårsaget af eller som følge af forkert installation eller forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i brugermanualen. **4.** Skader forårsaget af naturkatastrofer, ulykker eller ugunstige forhold, der ikke er compatible med produktet. **5.** Defekter, der har ubetydelig effekt på produktets ydeevne. Producenten, distributøren og alle parter involveret i salget påtager sig intet ansvar for tab og økonomisk skade fra eventuel funktionsfejl i produktet. I overensstemmelse med gældende regler hæfter producenten, distributøren og alle parter involveret i salget under ingen omstændigheder for skader, herunder direkte, indirekte, tab af nettoindtægt, tab af besparelser og yderligere skader og andre følgeskader ud over den skade, der er forvoldt ved brud på garanti, kontrakt, objektivt ansvar, forsømmelse eller af andre årsager, der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller papir og elektroniske dokumenter, inklusive manglende service. For yderligere information om hjælpetjenesten besøg venligst www.nuvitababy.com

PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME



E RËNDËSISHME

- Mos e ekspozoni këtë produkt ndaj temperaturave të larta, lagështisë së lartë ose dritës së diellit për një kohë të gjatë.
- Shmangni presionin e lartë, përplasjet ose rrëzimin aksidental të këtij produkti në tokë.
- Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për të thithur sekrecione të hundës. Mos e përdorni për qëllime të papërshtatshme si thithja e ujit ose në lëkurë.
- Kur fuqia thithëse ulet ndjeshëm ose zhurma e motorit zvogëlohet ndjeshëm, ju lutem ngarkojeni atë me kohë.
- Gjatë përdorimit të këtij produkti, mos e lini përdoruesin të mbajë frymën ose të qëlltisë pështymë dhe mbajeni gojën e fëmijës hapur për të shmangur çekuilibrin e presionit në vesh.
- Në rast dhimbje ose prehatie gjatë përdorimit, ndërpriteni menjëherë përdorimin dhe kërkoni ndihmë mjekësore.
- Mos e futni kokën thithëse në kavitetin e hundës me presion të tepërt.
- Ju lutem lexoni me kujdes manualin përpara se ta përdorni pajisjen dhe vendoseni në një vend të sigurt për t'iu referuar.

PËRSHKRIMI I PAJISJES

Vizatimet shoqëruese gjenden në faqen 2.

- | | | | |
|----|-------------------------------|-----|---------------------|
| 1. | Rezervuari grumbullues | 7. | Butoni i ndezjes |
| 2. | Butoni i intensitetit thithës | 8. | Gryka B |
| 3. | Butoni i dritave me ngjyra | 9. | Gryka C |
| 4. | Butoni i dërgimit në gjumë | 10. | Pinca |
| 5. | Gryka A | 11. | Kablli ngarkues USB |
| 6. | Ekrani LED | 12. | Kutia ruajtëse |

PËRSHKRIMI I FUNKSIONEVE

- **BUTONI I NDEZJES.** Shtypni butonin e ndezjes **(7)** për të ndezur aspiratorin e hundës.
- **BUTONI I INTENSITETIT THITHËS.** Fuqia thithëse ka pesë nivele intensiteti. Shtypni një herë butonin e intensitetit thithës **(2)** për të hyrë në nivelin 1. Çdo shtypje e mëtejshme e butonit do të kalojë në nivelin tjetër, deri në nivelin 5.
- **BUTONI I DRITAVE ME NGJYRA.** Shtypni butonin e dritave me ngjyra **(3)** për të ndezur dritët me ngjyra për të argëtuar fëmijën gjatë thithjes së hundës, duke ndryshuar automatikisht ngjyrën.
- **BUTONI I DËRGIMIT NË GJUMË.** Shtypni butonin e dërgimit në gjumë **(4)** për të luajtur 3 dërgime në gjumë qetësuese për të ndihmuar në relaksim dhe rehatinë e fëmijës gjatë thithjes së hundës.

SHËNIME SIGURIE




E RËNDËSISHME

- Ngarkojeni plotësisht pajisjen përpara se ta përdorni për herë të parë.
- Nuk është bashkëngjitur asnjë shtojcë karikimi. Mund të përdorni një shtojcë karikimi shtëpiake të zakonshme (Hyrije 5V 1A; Dalje 3,7W).
- Gjatë ngarkimit, treguesi i baterisë në ekranin LED **(6)** do të pulsojë.
- Kur bateria të jetë e ngarkuar plotësisht, treguesi i baterisë do të ndalojë së pulsuar.


HAPI 1

Shtypni grykën prej silikoni **(5)**, **(8)** ose **(9)** në rezervuarin grumbullues **(1)**.

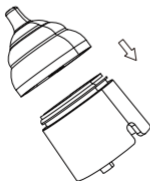


HAPI 2

Shtypni rezervuarin me grykën në trupin e pajisjes.

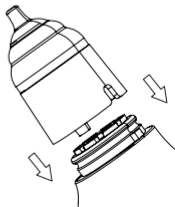


SHËNIME SIGURIE

- Vendosni aspiratorin e hundës pranë kavitetit të hundës pa lënë hapësira, do të jetë më e lehtë të thithet mosmiri i hundës.
- Përpara se të thithni mosmirin e hundës të ngurtë ose të ngjytshëm, butësojeni atë, aplikoni një peshqir të nxehtë te hunda ose piku kripë normale.
- Ju lutem kushtojini vëmendje rezervuarit grumbullues të mosmirës në çdo moment. Nëse ka shumë mosmirë, disa mund të derdhen.
- Ju lutem fikeni makinën me kohë kur kamarata të jetë e mbushur dhe pastrojini atë. Fshini mosmirën në grykëz dhe kamerë me një tampon pambuku.
- Ju lutem zbrazi ujin dhe thajeni me fryrje grykëzën dhe kamerën pas pastrimit.
- Mos e futni trupin në ujë ose lëngje të tjera.
- Ju lutem përdoreni këtë produkt në pozicionin/mënyrën e duhur për të shmangur thithjen e lëngjeve në trup.

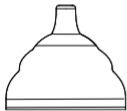

GRYKA A


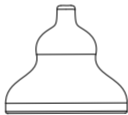


GRYKA B



GRYKA C

- **Gryka A.** Gryka më e madhe (**5**) mund t'i ndihmojë fëmijët e vegjël dhe fëmijët të thithin mosmirën e hundës të llojit pushor.
- **Gryka B.** Gryka thithëse prej silikoni në formë kungulli (**8**) është e përshtatshme për të thithur papastërtitë sipërfaqësore.
- **Gryka C.** Gryka thithëse në formë hingëllore (**9**) është e përshtatshme për të thithur papastërtitë e thella.

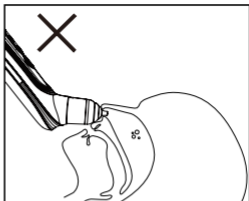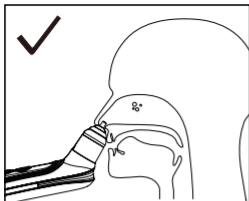

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Respektoni këto udhëzime higjienike për të shmangur rreziqet për shëndetin:

- Pastroni pajisjen para çdo përdorimi. Kjo është e rëndësishme për higjienën më të mirë, veçanërisht në raste infeksionesh bakteriale dhe virale ose kur fëmijët janë shumë të vegjël.
- **Trupi:** Përdorni një leckë të butë të thatë (ose pak të lagur) pa shtuar asnjë detergjent.

- **Pjesët e brendshme:** Kjo pajisje përdor teknologjinë më të fundit kundër rrjedhës së kthimit që lejon kalimin e ujit dhe çdo lëngu përmes lidhjeve të brendshme pa e dëmtuar atë. Mund ta fusni majën e grykës në një enë me pak ujë të ngrohtë dhe të filloni ta thithni për 30 sekonda. Uji do të hyjë në pjesët e brendshme dhe do të nxirret anash.


- **Grykëzat dhe Rezervuari:** Grykëzat e hundës dhe rezervuari grumbullues i mosmirës mund të shpëlahen me ujë rrjedhës dhe të sterilizohen me avull (100°C) në ujë vlues ose me një sterilizues avulli.

- Mos e vendosni kurrë trupin në enëlarëse.

- Mos përdorni kurrë asnjë substancë për pastrimin që mund të jetë potencialisht toksike nëse bie në kontakt me lëkurën ose mbaresat mukoze, ose nëse gëlltitet ose merret me frymë.

- Mos përdorni asnjë produkt pastrimi gërryes dhe mos e zhytni kurrë pajisjen në ujë.

- Shmangni pastrimin mekanik me furça ose të ngjashme, pasi kjo mund të rezultojë në dëmtim të pariparueshëm.

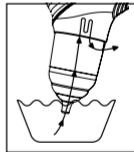

HEDHJA

- Mos e rregulloni ose ndryshoni vetë pajisjen. Funksionimi i duhur nuk mund të garantohet në këtë rast.
- Mos e hapni pajisjen. Mosrespektimi i këtij udhëzimi do të anulojë garancinë.
- Riparimet duhet të kryhen vetëm nga Shërbimi i Klientit ose shitës të autorizuar.
- Për arsye mjedisore, mos e hidhni pajisjen në mbeturinat shtëpiake në fund të jetës së saj të punës. Hidhni pajisjen në një pikë të përshtatshme lokale grumbullimi/riciklimi në vendin tuaj. Hidhni pajisjen në përputhje me Direktivën EC - WEEE (Mbetjet nga Pajisjet Elektrike dhe Elektronike). Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni autoritetet lokale përgjegjëse për hedhjen e mbetjeve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Lloji	Aspirator hundësh elektrik
Modeli	2150
Fuqia Thithëse	Niveli 1: 25kPa, Niveli 2: 35kPa, Niveli 3: 45kPa, Niveli 4: 55kPa, Niveli 5: 65kPa
Lloji i Baterisë	Bateri e ringarkueshme litium 3.7W; 450MAH; Tensioni: 3.7V
Tensioni i Ngarkimit	5V; Punues: 3.6~4.2V
Koha e Ngarkimit	3 orë
Kohëzgjatja e Shkarkimit	55 minuta
Niveli i Zhurmës	Niveli 1: 44DB, Niveli 2: 50DB, Niveli 3: 56DB, Niveli 4: 60DB, Niveli 5: 65DB
Siguria e Materialeve	Pa BPA, ABS PC, Silikon, Jo-Toksike

GARANCIA - TERMAT DHE KUSHTET

Ky produkt përfiton nga një garanci 24 muaj për defekte të materialeve dhe prodhimit, duke filluar nga data e blerjes (shiko kuponin e shitjes). Garancia 24 muaj nuk përfshin dëmet e shkaktuara nga përdorimi i zakonshëm i pjesëve të identifikuara si "të konsumueshme" (p.sh. bateritë, kokat e furçave ose pjesët që i nënshtrohen konsumit). Garancia ligjore 24 muaj është e pavlefshme nëse:

1. Produkti ka pësuar dëme estetike për shkak të përdorimit të papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet në manual. **2.** Ky produkt është modifikuar dhe/ose ndërhyrë. **3.** Shkaku i dëmtimit është për shkak të mirëmbajtjes së keqe të komponentëve individualë dhe/ose aksesorëve (p.sh. oksidimi dhe/ose grumbullimi për shkak të mbajtjes së ujit ose lëngjeve të tjera, mbetjet që bllokojnë sensorin, rrjedhja e lëngjeve korrozive nga bateritë). Përfshihet nga garancia ligjore 24 muaj: **1.** Kostot në lidhje me zëvendësimet dhe/ose riparimin e pjesëve që konsumohen ose kostot për mirëmbajtjen e zakonshme të produktit. **2.** Kostot dhe rreziqet e përfshira në transportimin e produktit në dhe nga dyqani ku e bletë ose pika e grumbullimit të autorizuar për të marrë produktet nën garanci. **3.** Dëmtimi i shkaktuar ose si rezultat i instalimit të gabuar ose përdorimit të papërshtatshëm që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e që nuk është në përputhje me udhëzimet në manualin e instructionit. **4.** Dëmtimi për shkak të fatkeqësive natyrore, ngjarjeve aksidentale ose kushteve të papërshtatshme që nuk janë të përputhshme me produktin. **5.** Defektet që kanë një efekt të parëndësishëm në performancën e produktit. Prodhuesi, distributorit dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk marrin përgjegjësi për humbjet dhe dëmet ekonomike nga çdo keqfunksionim i produktit. Në përputhje me rregulloret aktuale, prodhuesi, distributorit dhe të gjitha palët e përfshira në shitje nuk mbajnë përgjegjësi në asnjë rast për dëmet, duke përfshirë të drejtpërdrejtat, të tërthortat, humbjen e të ardhurave neto, humbjen e kursimeve dhe dëmet shtesë dhe pasojat e tjera që tejkalojnë dëmin e shkaktuar nga shkelja e garancisë, kontratës, përgjegjësisë strikte, neglizhencës ose për shkaqe të tjera, që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe/ose dokumentet me shkrim dhe elektronike, duke përfshirë mungesën e shërbimit. Për më shumë informacion rreth shërbimit të ndihmës, vizitoni www.nuvitababy.com



Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020

Gwardamangia MALTA - Europe,

www.nuvitababy.com. info@nuvitababy.com

All rights reserved

Made in China

2150_24_Gen_v1.0.0