





1205_25_Manual_v1.0.0

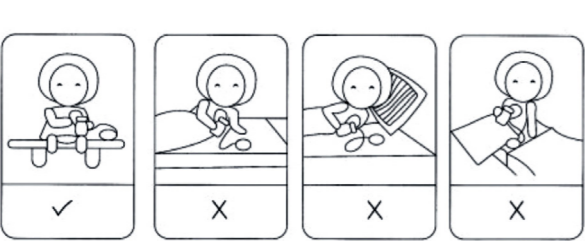

IMPORTED / DISTRIBUTED BY:
Anteprima Brands International Ltd
1, Ferris Bldg, St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia, Malta - Europe. info@nuvitababy.com | www.nuvitababy.com
All rights reserved

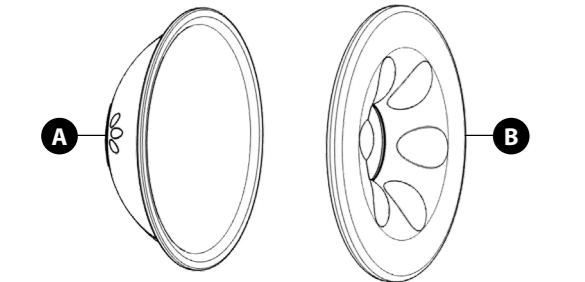

EN

1. INTRODUCTION

This manual breast milk collector offers a discreet milk drops collection sitting comfortably inside the bra with a soft silicone cover for a comfortable fit. Compact and portable, it's easy to carry for travel or work. All parts detach quickly for thorough cleaning and reliable hygiene.

2. PARTS

- A. Silicone cup x2
- B. Cup body x2

3. PREPARATION & USE

- NOTE:** Wash hands thoroughly and sterilize all components before use. Handle with care as parts may still be hot after sterilization.
- 1. Attach the silicone cup **(A)** to the cup body **(B)**, pressing firmly around the rim to ensure a full seal.
- 2. Confirm all parts are installed correctly before use.

4. TIPS FOR EFFECTIVE MILK COLLECTION

Choose a time when milk flow is naturally stronger, usually in the morning, before or after the first feeding. If you feel pain, stop and consult a lactation specialist.

5. CLEANING & STERILIZATION

- All parts can be sterilized. A professional sterilizer is recommended.
- Clean silicone parts with a soft sponge to avoid scratches.
- If boiling for sterilization, place parts in boiling water for 3 minutes. Prevent direct contact with the pot bottom to avoid damage.

6. STORAGE GUIDELINES

- Pour the collected milk in a clean baby bottle for storage.
- Gently swirl to mix separated fat.
- Do not heat breast milk with microwave or boiling water.

7. WARNING

- Intended for personal use only. Do not share with other users.
- Inspect all components before each use. Do not use if parts are damaged, deformed, cracked, or show signs of wear.
- Do not use while sleeping or during activities that may cause excessive pressure on the product.
- Discontinue use immediately if pain, irritation, redness, or discomfort occurs and consult a healthcare professional or lactation specialist.
- Do not modify the product or use non-original replacement parts.
- Keep away from open flames, heat sources, and direct sunlight.
- Sterilization and cleaning must follow the instructions provided. Incorrect sterilization may compromise product safety and hygiene.

1205

IT

1. INTRODUZIONE

Questo raccogliattre manuale offre una raccolta discreta delle gocce di latte, comodamente inserito all'interno del reggiseno, con una morbida copertura in silicone per una vestibilità confortevole. Compacto e portatile, è facile da trasportare in viaggio o al lavoro. Tutti i componenti si staccano rapidamente per una pulizia accurata e un'igiene affidabile.

2. COMPONENTI

- Coppetta in silicone x2
- Corpo della coppetta x2

3. PREPARAZIONE E USO

NOTA: Lavarsi accuratamente le mani e sterilizzare tutti i componenti prima dell'uso. Maneggiare con cura poiché i componenti potrebbero essere ancora caldi dopo la sterilizzazione.

- Attaccare la coppetta in silicone **(A)** al corpo della coppetta **(B)**, premendo con decisione lungo il bordo per garantire una tenuta perfetta.
- Verificare che tutti i componenti siano installati correttamente prima dell'uso.

4. CONSIGLI PER UNA RACCOLTA EFFICACE DEL LATTE

Scegliere un momento in cui il flusso di latte è naturalmente più forte, solitamente al mattino, prima o dopo la prima poppata. In caso di dolore, interrompere l'uso e consultare uno specialista dell'allattamento.

5. PULIZIA E STERILIZZAZIONE

- Tutti i componenti possono essere sterilizzati. Si consiglia l'uso di uno sterilizzatore professionale.
- Pulire le parti in silicone con una spugna morbida per evitare graffi.
- Se si desidera sterilizzarle in acqua bollente, immergere le parti in acqua bollente per 3 minuti. Evitare il contatto diretto con il fondo del contenitore per evitare danni.

6. ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Versare il latte raccolto in un biberon pulito per la conservazione.
- Agitare delicatamente per mescolare il grasso separato.
- Non riscaldare il latte materno nel microonde o in acqua bollente.

7. AVVERTENZA

- Destinato esclusivamente all'uso personale. Non condividere con altri utenti.
- Ispezionare tutti i componenti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se le parti sono danneggiate, deformate, incrinате, o mostrano segni di usura.
- Non utilizzare durante il sonno o durante attività che potrebbero causare una pressione eccessiva sul prodotto.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso di dolore, irritazione, arrossamento o fastidio e consultare un medico o uno specialista dell'allattamento.
- Non modificare il prodotto né utilizzare ricambi non originali.
- Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore e luce solare diretta.
- La sterilizzazione e la pulizia devono essere eseguite secondo le istruzioni fornite. Una sterilizzazione non corretta può compromettere la sicurezza e l'igiene del prodotto.

ES

1. INTRODUCCIÓN

Este recolector manual de leche materna ofrece una discreta recolección de gotas de leche, que se coloca cómodamente dentro del sujetador, con una suave cubierta de silicona para un ajuste cómodo. Compacto y portátil, es fácil de llevar de viaje o al trabajo. Todas las piezas se desmontan rápidamente para una limpieza profunda y una higiene fiable.

2. PIEZAS

- Copa de silicona x2
- Cuerpo de la copa x2

3. PREPARACIÓN Y USO

NOTA: Lávese bien las manos y esterilice todos los componentes antes de usar. Manipule con cuidado, ya que las piezas pueden estar calientes después de la esterilización.

- Coloque la copa de silicona **(A)** en el cuerpo de la copa **(B)**, presionando firmemente alrededor del borde para asegurar un sellado completo.
- Confirme que todas las piezas estén instaladas correctamente antes de usar.

4. CONSEJOS PARA UNA RECOLECCIÓN DE LECHE EFICAZ

Elija un momento en el que el flujo de leche sea naturalmente más intenso, generalmente por la mañana, antes o después de la primera toma. Si siente dolor, deténgase y consulte a un especialista en lactancia.

5. LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

- Todas las piezas se pueden esterilizar. Se recomienda un esterilizador profesional.
- Limpie las piezas de silicona con una esponja suave para evitar rayones.
- Si las va a hervir para esterilizar, coloque las piezas en agua hirviendo durante 3 minutos. Evite el contacto directo con el fondo del recipiente para evitar daños.

6. INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

- Vierta la leche recolectada en un biberón limpio para almacenarla.
- Remueva suavemente para mezclar la grasa separada.

- No caliente la leche materna en el microondas ni con agua hirviendo.

7. ADVERTENCIA

- Diseñado exclusivamente para uso personal. No compartir con otros usuarios.
- Inspeccione todos los componentes antes de cada uso. No lo utilice si las piezas están dañadas, deformadas, agrietadas o muestran signos de desgaste.
- No lo utilice mientras duerme ni durante actividades que puedan ejercer una presión excesiva sobre el producto.
- Suspenda su uso inmediatamente si experimenta dolor, irritación, enrojecimiento o molestias y consulte a un profesional de la salud o a un especialista en lactancia.
- No modifique el producto ni utilice piezas de repuesto que no sean originales.
- Manténgalo alejado de llamas abiertas, fuentes de calor y luz solar directa.
- La esterilización y la limpieza deben seguir las instrucciones proporcionadas. Una esterilización incorrecta puede comprometer la seguridad e higiene del producto.

FR

1. INTRODUCTION

Ce collecteur de lait maternel manuel permet de recueillir discrètement les gouttes de lait, confortablement installé dans le soutien-gorge grâce à sa housse en silicone souple. Compact et portable, il est facile à transporter en voyage ou au travail. Toutes les pièces se détachent rapidement pour un nettoyage complet et une hygiène optimale.

2. PIÈCES

- Coupe en silicone x2
- Corps de la coupelle x2

3. PRÉPARATION ET UTILISATION

REMARQUE : Lavez-vous soigneusement les mains et stérilisez tous les composants avant utilisation. Manipulez avec précaution car les pièces peuvent être chaudes après stérilisation.

- Fixez la coupelle en silicone **(A)** sur le corps de la coupelle **(B)** en appuyant fermement sur le bord pour assurer une étanchéité parfaite.
- Vérifiez que toutes les pièces sont correctement installées avant utilisation.

4. CONSEILS POUR UNE COLLECTE DE LAIT EFFICACE

Choisissez un moment où le flux de lait est naturellement plus important, généralement le matin, avant ou après la première tétée. En cas de douleur, arrêtez et consultez une consultante en lactation.

5. NETTOYAGE ET STÉRILISATION

- Toutes les pièces peuvent être stérilisées. L'utilisation d'un stérilisateur professionnel est recommandée.
- Nettoyez les pièces en silicone avec une éponge douce pour éviter les rayures.
- Pour la stérilisation, plongez les pièces dans l'eau bouillante pendant 3 minutes. Évitez tout contact direct avec le fond du récipient pour prévenir tout dommage.

6. CONSEILS DE CONSERVATION

- Verser le lait recueilli dans un biberon propre pour la conservation.
- Remuez délicatement pour mélanger la matière grasse.
- Ne chauffez pas le lait maternel au micro-ondes ni dans de l'eau bouillante.

7. AVERTISSEMENT

- Destiné à un usage personnel uniquement. Ne pas partager.
- Inspecter tous les composants avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont endommagées, déformées, fissurées ou présentent des signes d'usure.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil ou lors d'activités pouvant exercer une pression excessive sur le produit.
- Cesser immédiatement l'utilisation en cas de douleur, d'irritation, de rougeur ou d'inconfort et consulter un professionnel de la santé ou une consultante en lactation.
- Ne pas modifier le produit ni utiliser de pièces de rechange non originales.
- Tenir à l'écart des flammes nues, des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- La stérilisation et le nettoyage doivent être effectués conformément aux instructions fournies. Une stérilisation incorrecte peut compromettre la sécurité et l'hygiène du produit.

DE

1. EINLEITUNG

Dieser manuelle Muttermilchauffbehälter ermöglicht diskretes Auffangen von Milchtropfen und sitzt dank der weichen Silikonhülle angenehm im BH. Kompakt und tragbar, ist er ideal für Reisen oder die Arbeit. Alle Teile lassen sich für eine gründliche Reinigung und zuverlässige Hygiene schnell abnehmen.

2. LIEFERUMFANG

- Silikonbecher x2
- Behälterkörper x2

3. VORBEREITUNG & ANWENDUNG

HINWEIS: Waschen Sie Ihre Hände gründlich und sterilisieren Sie alle Teile vor Gebrauch. Seien Sie vorsichtig, da die Teile nach der Sterilisation noch heiß sein können.

- Setzen Sie den Silikonbecher **(A)** auf den Behälterkörper **(B)** und drücken Sie ihn am Rand fest an, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Teile korrekt angebracht sind.

4. TIPS FÜR EFFEKTIVES MILCHAUFFANGEN

Wählen Sie einen Zeitpunkt, an dem der Milchfluss von Natur aus stärker ist, in der Regel morgens, vor oder nach dem ersten Stillen. Bei Schmerzen brechen Sie den Vorgang ab und wenden Sie sich an eine Stillberaterin.

5. REINIGUNG & STERILISATION

- Alle Teile können sterilisiert werden. Ein professioneller Sterilisator wird empfohlen.
- Reinigen Sie die Silikonteile mit einem weichen Schwamm, um Kratzer zu vermeiden.
- Zum Sterilisieren die Teile 3 Minuten in kochendes Wasser legen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit dem Topfboden, um Beschädigungen zu verhindern.

6. AUFBEWAHRUNGSHINWEISE

- Füllen Sie die aufgefängene Milch zur Aufbewahrung in eine saubere Babyflasche.
- Streuen Sie die Flasche leicht, um das abgesetzte Fett zu lösen.
- Erwärmen Sie Muttermilch nicht in der Mikrowelle oder in kochendem Wasser.

7. WARNUNG

- Nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Nicht mit anderen teilen.
- Prüfen Sie alle Komponenten vor jedem Gebrauch. Nicht verwenden, wenn Teile beschädigt, verformt, rissig sind oder Gebrauchsspuren aufweisen.
- Nicht im Schlaf oder bei Aktivitäten verwenden, die zu starkem Druck auf das Produkt führen können.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Schmerzen, Reizungen, Rötungen oder Unbehagen auftreten, und konsultieren Sie einen Arzt oder eine Stillberaterin.
- Verändern Sie das Produkt nicht und verwenden Sie keine nicht originalen Ersatzteile.
- Von offenem Feuer, Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Sterilisation und Reinigung müssen gemäß der beiliegenden Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Sterilisation kann die Produktsicherheit und Hygiene beeinträchtigen.

PT

1. INTRODUÇÃO

Este corpo manual de leite materno oferece uma recolha discreta de gotas de leite, encaixando confortavelmente dentro do soutien com uma capa de silicone macia para um ajuste confortável. Compacto e portátil, é fácil de transportar em viagens ou no trabalho. Todas as peças desmontam-se rapidamente para uma limpeza completa e uma higiene fiável.

2. PEÇAS

- Corpo de silicone x2
- Corpo do corpo x2

3. PREPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO

NOTA: Lave bem as mãos e esterilize todos os componentes antes de utilizar. Manuseie com cuidado, pois as peças podem estar quentes após a esterilização.

- Encaixe o corpo de silicone **(A)** no corpo do corpo **(B)**, pressionando firmemente à volta do rebordo para garantir uma vedação completa.
- Confirme se todas as peças estão instaladas corretamente antes de utilizar.

4. DICAS PARA UMA COLHEITA DE LEITE EFICAZ

Escolha um horário em que o fluxo de leite seja naturalmente mais forte, geralmente de manhã, antes ou depois da primeira mamada. Se sentir dor, pare e consulte um especialista em lactação.

5. LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

- Todas as peças podem ser esterilizadas. Recomenda-se a utilização de um esterilizador profissional.
- Limpe as peças de silicone com uma esponja macia para evitar riscos.
- Se optar por esterilizar a ferver, coloque as peças em água a ferver durante 3 minutos. Evite o contacto direto com o fundo da panela para evitar danos.

6. INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Deite o leite materno recolhido numa mamadeira limpa para armazenamento.
- Agite suavemente para misturar a gordura separada.
- Não aqueça o leite materno no micro-ondas ou em água a ferver.

7. AVISO

- Destinado apenas a uso pessoal. Não partilhe com outros utilizadores.
- Inspeccione todos os componentes antes de cada utilização. Não utilize se as peças estiverem danificadas, deformadas, rachadas ou apresentarem sinais de desgaste.

- Não utilize enquanto estiver a dormir ou durante atividades que possam causar pressão excessiva sobre o produto.
- Interrompa imediatamente a utilização se ocorrer dor, irritação, vermelhidão ou desconforto e consulte um profissional de saúde ou especialista em lactação.
- Não modifique o produto nem utilize peças de substituição não originais.
- Mantenha afastado de chamas, fontes de calor e luz solar direta.
- A esterilização e a limpeza devem seguir as instruções fornecidas. A esterilização incorreta pode comprometer a segurança e a higiene do produto.

4. TIPS FOR EFFEKTIV MELKOPPLING

Vælg et tidspunkt når melkestrommen er naturlig sterkere, vanligvis om morgenen, før eller etter første amning. Hvis du føler smerte, stopp og kontakt en ammespesialist.

5. RENGJØRING OG STERILISERING

- Alle deler kan steriliseres. En profesjonell sterilisator anbefales.
- Rengjør silikonedelene med en myk svamp for å unngå riper.
- Hvis du skal koke for sterilisering, legg delene i kokende vann i 3 minutter. Unngå direkte kontakt med bunnen av kjelen for å unngå skade.

6. OPBEVARINGSRETNINGSLINJER

- Hell den oppsamlede melken i en ren tåteflaske for oppbevaring.
- Svirl forsiktig for å blande det separerte fettet.
- Ikke varm opp mormelk i mikrobølgeovn eller kokende vann.

7. ADVARSEL

- Kun beregnet for personlig bruk. Ikke del med andre brukere.
- Inspisér alle komponenter før hver bruk. Ikke bruk hvis delene er skadet, deformert, sprukne eller viser tegn til slitasje.
- Ikke bruk mens du sover eller under aktiviteter som kan forårsake for høyt trykk på produktet.
- Avbryt bruken umiddelbart hvis smerte, irritasjon, rødhet eller ubehag oppstår, og kontakt helsepersonell eller ammespesialist.
- Ikke modifier produktet eller bruk uoriginale reservedeler.
- Hold unna åpen ild, varmekilder og direkte sollys.
- Sterilisering og rengjøring må følge instruksjonene som er gitt. Feil sterilisering kan sette produktets sikkerhet og hygiene i fare.

2. ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- Κύπελλο σιλικόνης x2
- Σώμα κύπελλου x2

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΧΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πλύνετε καλά τα χέρια σας και αποστειρώστε όλα τα εξαρτήματα πριν από τη χρήση. Χειριστείτε με προσοχή, καθώς τα εξαρτήματα μπορεί να είναι ακόμα ζεστά μετά την αποστείρωση.

- Συνδέστε το κύπελλο σιλικόνης **(Α)** στο σώμα του κύπελλου **(Β)**, πιέζοντας σταθερά γύρω από το χείλος για να εξασφαλίσετε πλήρη σφράγιση.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν εγκατασταθεί σωστά πριν από τη χρήση.

4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Επιλέξτε μια ώρα που η ροή του γάλακτος είναι φυσικά ισχυρότερη, συνήθως το πρωί, πριν ή μετά το πρώτο τσίμα. Εάν αισθανθείτε πόνο, σταματήστε και συμβουλευτείτε έναν ειδικό γαλουχίας.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

- Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αποστειρωθούν. Συνιστάται ένας επαγγελματίας αποστειρωτής.
- Καθαρίστε τα σιλικονούχα μέρη με ένα μαλακό σφουγγάρι για να αποφύγετε γρατσουνιές.
- Αν τα βράζετε για αποστείρωση, τοποθετήστε τα μέρη σε βραστό νερό για 3 λεπτά. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τον άπο της κατασράλας για να αποφύγετε ζημιές.

6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Ρίξτε το συλλεγμένο γάλα σε ένα καθαρό μπιμπερό για αποθήκευση.
- Ανακινήστε απαλά για να αναμειχθεί το διαχωρισμένο λίπος.
- Μην ζεσταίσετε το μητρικό γάλα με φούorno μικροκυμάτων ή βραστό νερό.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση. Μην το μοιράζετε με άλλους χρήστες.
- Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν τα εξαρτήματα είναι κατεστραμμένα, παραμορφωμένα, ραγισμένα ή παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.
- Μην το χρησιμοποιείτε κατά τον ύπνο ή κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική πίεση στο προϊόν.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν εμφανιστεί πόνος, ερυθρίαός, ερυθρότητα ή δυσφορία και συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας ή ειδικό γαλουχίας.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν ή χρησιμοποιείτε μη γνήσια ανταλλακτικά.
- Φυλάσσετε μακριά από υμνικές φλόγες, πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως.
- Η αποστείρωση και ο καθαρισμός πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που παρέχονται. Η λανθασμένη αποστείρωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγιεινή του προϊόντος.

NO

1. INNLEDNING

Denne manuelle oppsamleren for brystmelk tilbyr en diskret oppsamling av melkedråper som sitter komfortabelt inni BH-en med et mykt silikonrekk for komfortabel passform. Kompakt og bærbar, enkel å bære med seg på reise eller jobb. Alle deler løses raskt for grundig rengjøring og pålitelig hygiene.

2. DELER

- Silikonkopp x2
- Koppkropp x2

3. FORBEREDELSE OG BRUK

- MERK:** Vask hendene grundig og steriliser alle komponenter før bruk. Hånder forsiktig, da delene fortsatt kan være varme etter sterilisering.
- 1. Fest silikonkoppen **(A)** til koppkroppen **(B)**, og trykk godt rundt kanten for å sikre full forseingling.
- 2. Bekreft at alle deler er riktig installert før bruk.

4. TIPS FOR EFFEKTIV MELKOPPLING

Vælg et tidspunkt når melkestrommen er naturlig sterkere, vanligvis om morgenen, før eller etter første amning. Hvis du føler smerte, stopp og kontakt en ammespesialist.

5. RENGJØRING OG STERILISERING

- Alle deler kan steriliseres. En profesjonell sterilisator anbefales.
- Rengjør silikonedelene med en myk svamp for å unngå riper.
- Hvis du skal koke for sterilisering, legg delene i kokende vann i 3 minutter. Unngå direkte kontakt med bunnen av kjelen for å unngå skade.

6. OPBEVARINGSRETNINGSLINJER

- Hell den oppsamlede melken i en ren tåteflaske for oppbevaring.
- Svirl forsiktig for å blande det separerte fettet.
- Ikke varm opp mormelk i mikrobølgeovn eller kokende vann.

7. ADVARSEL

- Kun beregnet for personlig bruk. Ikke del med andre brukere.
- Inspisér alle komponenter før hver bruk. Ikke bruk hvis delene er skadet, deformert, sprukne eller viser tegn til slitasje.
- Ikke bruk mens du sover eller under aktiviteter som kan forårsake for høyt trykk på produktet.
- Avbryt bruken umiddelbart hvis smerte, irritasjon, rødhet eller ubehag oppstår, og kontakt helsepersonell eller ammespesialist.
- Ikke modifier produktet eller bruk uoriginale reservedeler.
- Hold unna åpen ild, varmekilder og direkte sollys.
- Sterilisering og rengjøring må følge instruksjonene som er gitt. Feil sterilisering kan sette produktets sikkerhet og hygiene i fare.

DA

1. INTRODUKTION

Denne manuelle brystmælksopsamler tilbyder en diskret opsamling af mælkedråber, der sidder komfortabelt inde i bh'en med et blødt silikoneovertræk for en behagelig passform. Den er kompakt og bærbar, så den er nemt at have med på rejser eller arbejde. Alle dele kan hurtigt afmonteres for grundig rengøring og pålidelig hygiejne.

2. DELE

- Silikonekop x2
- Kophus x2

3. FORBEREDELSE OG BRUG

- BEMÆRK:** Vask hænderne grundigt, og steriliser alle komponenter før brug. Håndteres forsigtigt, da delene stadig kan være varme efter sterilisering.
- 1. Sæt silikonekoppen **(A)** på kophuset **(B)** og tryk godt fast rundt om kanten for at sikre en fuldstændig forseingling.
- 2. Bekræft, at alle dele er installeret korrekt før brug.

4. TIPS TIL EFFEKTIV MÆLKOPSAMLING

Vælg et tidspunkt, hvor melkestrommen er naturlig sterkere, normalt om morgenen, før eller efter den første amning. Hvis du føler smerter, skal du stoppe og kontakte en ammespecialist.

5. RENGØRING OG STERILISERING

- Alle dele kan steriliseres. En professionel sterilisator anbefales.
- Rengør silikonedelene med en blød svamp for at undgå ridser.
- Hvis delene skal koges for at steriliseres, skal de placeres i kogende vand i 3 minutter. Undgå direkte kontakt med bunden af gryden for at undgå skader.

6. OPBEVARINGSRETNINGSLINJER

- Hæld den opsamlede mælk i en ren sutteflaske til opbevaring.
- Hvirvl forsigtigt rundt for at blande det separerede fedt.
- Varm ikke modermælk op i mikrobølgeovn eller kogende vand.

5. ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE

- Všechny součásti lze sterilizovat. Doporučuje se profesionální sterilizátor.
- Silikonové díly čistěte měkkou houbovkou, abyste zabránili poškořabání.
- Pokud sterilizujete vařením, vložte díly za 3 minuty do vroucí vody. Zabráňte přímému kontaktu se dnem nádoby, abyste předešli poškození.

6. POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

Nalijte shromážděné mléko do čistě kojenecké lahve pro skladování.

Jemně promíchejte, aby se promíchaly oddělený tuk.

Mateřské mléko neohřívajte v mikrovlnné troubě ani v vroucí vodě.

7. VAROVÁNÍ

- Určeno pouze pro osobní použití. Nesdílejte s jinými uživateli.
- Před každým použitím zkontrolujte všechny součásti. Nepoužívejte, pokud jsou součásti poškozené, deformované, prasklé nebo vykazují známky opotřebení.
- Nepoužívejte během spánku nebo během činnosti, které mohou způsobit nadměrný tlak na výrobek.
- Pokud se objeví bolest, podráždění, zarudnutí nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se zdravotníkem nebo specialistou na laktaci.
- Neupravujte výrobek ani nepoužívejte neoriginální náhradní díly.
- Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
- Sterilizace a čištění musí probíhat podle pokynů. Nesprávná sterilizace může ohrozit bezpečnost a hygienu výrobku.

SI

1. UVOD

Ta roční zbiralnik materinega mleka ponuja diskreten zbiralnik kapljic mleka, ki se udobno namestijo v modrček, z mehkim silikonskim pokrovom za udobno prilaganje. Kompakten in prenosen, ga je enostavno prenašati na potovanja ali v službo. Vsi deli se hitro snamejo za temeljito čiščenje in zanesljivo higieno.

2. DELI

- Silikonska skodelica x2
- Telo skodelice x2

3. PRIPRAVA IN UPORABA

OPOMBA: Pred uporabo si temeljito umijte roke in sterilizirajte vse komponente. Ravnajte previdno, saj so deli po sterilizaciji lahko še vedno vroči.

- Silikonsko skodelico (A) pritrdite na telo skodelice (B) in jo trdno pritisnite okoli roba, da zagotovite popolno tesnjenje.
- Pred uporabo se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni.

4. NASVETI ZA UČINKOVITO ZBRANJE MLEKA

Izberite čas, ko je pretok mleka naravno močnejši, običajno zjutraj, pred ali po prvem hranjenju. Če čutite bolečino, prenehajte in se posvetujte s strokovnjakom za dojenje.

5. ČIŠČENJE IN STERILIZACIJA

- Vse dele je mogoče sterilizirati. Priporočamo uporabo profesionalnega sterilizatorja.
- Silikonske dele očistite z mehko gobico, da preprečite praske.
- Če kuhate za sterilizacijo, dele za 3 minute postavite v vrelo vodo. Izogibajte se neposrednemu stiku z dnom posode, da preprečite poškodbe.

6. NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

- Zbrano mleko nalijte v čisto stekleničko za dojenčke za shranjevanje.
- Nežno zavrite, da premešate ločeno maščobo.
- Materinega mleka ne segrevajte v mikrovvalnovi pečici ali vreli vodi.

7. OPOZORILO

- Namenjen samo za osebno uporabo. Ne delite z drugimi uporabniki.
- Pred vsako uporabo preglejte vse komponente. Ne uporabljajte, če so deli poškodovani, deformirani, razpokani ali kažejo znake obrabe.
- Ne uporabljajte med spanjem ali med dejavnostmi, ki lahko povzročijo prekomerni pritisk na izdelek. Takoj prenehajte z uporabo, če se pojavi bolečina, draženje, rdečina ali nelagodje, in se posvetujte z zdravstvenim delavcem ali specialistom za dojenje.
- Izdelka ne spreminjajte in ne uporabljajte neoriginalnih nadomestnih delov.
- Hranite ločeno od odprtega ognja, virov toplote in neposredne sončne svetlobe.
- Sterilizacija in čiščenje morata potekati v skladu z navodili. Nepravilna sterilizacija lahko ogrozi varnost in higieno izdelka.

HU

1. BĚVEDĚNIJE

Tози ръчен колектор за кърма предлага дискретно събиране на капки мляко, удобно разположени в сутинена, с мек силиконов капак за комфортно прилягане. Компактен и преносим, той е лесен за носене при пътуване или работа. Всички части се отделят бързо за цялостно почистване и надеждна хигиена.

2. ЧАСТИ

- Силиконова чашка x2
- Корпус на чашката x2

3. ПОДГОТОВКА И УПОТРЕБА

ЗАБЕЛЕЖКА: Измийте добре ръцете си и стерилизирайте всички компоненти преди употреба. Работете внимателно, тъй като частите може да са все още горещи след стерилизацията.

- Прикрепете силиконовата чашка (A) към тялото на чашката (B), като притиснете здраво около ръба, за да осигурите пълно уплътнение.
- Уверете се, че всички части са правилно поставени преди употреба.

4. СЪВЕТИ ЗА ЕФЕКТИВНО СЪБИРАНЕ НА КЪРМА

Изберете време, когато потокът на мляко е естествено по-силен, обикновено сутрин, преди или след първото хранене. Ако усетите болка, спрете и се консултирайте със специалист по кърмене.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

- Всички части могат да бъдат стерилизирани. Препоръчва се професионален стерилзатор.
- Почистете силиконовите части с мека гъба, за да избегнете надраскане.
- Ако варите за стерилизация, поставете частите във вряща вода за 3 минути. Избягвайте директен контакт с дното на съда, за да избегнете повреда.

6. УКАЗАНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

- Изсипете събраното мляко в чисто бебешко шише за съхранение.
- Разбъркайте внимателно, за да смесите отделената мазнина.
- Не затопляйте кърмата с микровълнова фурна или вряща вода.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Предназначено само за лична употреба. Не споделяйте с други потребители.
- Проверявайте всички компоненти преди всяка употреба. Не използвайте, ако частите са повредени, деформирани, напукани или показват признаци на износване.
- Не използвайте, докато спите или по време на дейности, които могат да причинят прекомерен натиск върху продукта.
- Прекратете употребата незабавно, ако се появи болка, раздразнение, зачервяване или дискомфорт, и се консултирайте със здравен специалист или специалист по кърмене.
- Не модифицирайте продукта и не използвайте неоригинални резервни части.
- Пазете от открит пламък, източници на топлина и пряка слънчева светлина.
- Стерилизацията и почистването трябва да се извършват съгласно предоставените инструкции. Неправилната стерилизация може да компрометира безопасността и хигиената на продукта.

SK

1. ÚVOD

Táto manuálna odsávačka materského mlieka ponúka diskrétny zber kvapiek mleka, ktorý sa pohodlne zmesťi do podprsenky vďaka mäkkému silikónovému krytu pre pohodlné nosenie. Je kompaktná a prenosná, ľahko sa prenáša na cesty alebo do práce. Všetky časti sa dajú rýchlo oddeliť pre dôkladné čistenie a spoľahlivú hygienu.

2. ČASTI

- Silikónový pohár x2
- Telo pohára x2

3. PRÍPRAVA A POUŽITIE

POZNÁMKA: Pred použitím si dôkladne umyte ruky a sterilizujte všetky komponenty. Zaobchádzajte opatrne, pretože po sterilizácii môžu byť časti stále horúce.

- Pripevnite silikónový pohár (A) k telu pohára (B) a pevne ho pritlačte po okraji, aby ste zabezpečili úplné utesnenie.
- Pred použitím sa uistite, že všetky časti sú správne nainštalované.

4. TYPY NA EFEKTÍVNY ZBER MLEKA

Výberte si čas, keď je tok mlieka prirodzene silnejší, zvyčajne ráno, pred alebo po prvom kŕmení. Ak cítite bolesť, prestaňte a poraďte sa s laktáčnym špecialistom.

5. ČISTENIE A STERILIZÁCIA

- Všetky časti je možné sterilizovať. Odporúča sa profesionálny sterilizátor.
- Silikónové časti čistite mäkkou špongiou, aby ste predišli poškriabaniu.
- Ak varíte na sterilizáciu, vložte časti do vriacej vody na 3 minúty. Zabráňte priamemu kontaktu s dnom nádoby, aby ste predišli poškodeniu.

6. POKYNY NA SKLADOVANIE

Nalajte zachytené mlieko do čistej detskej fľaše na uskladnenie. Jemne premiešajte, aby sa premiešala oddelený tuk. Materské mlieko neohrievajte v mikrovlnnej rúre ani vriacej vode.

7. UPOZORNENIE

- Určené len na osobné použitie. Nezdíľajte s inými používateľmi.
- Pred každým použitím skontrolujte všetky komponenty. Nepoužívajte, ak sú časti poškodené, deformované, prasknuté alebo vykazujú známky opotrebovania.
- Nepoužívajte počas spánku alebo počas činnosti, ktoré môžu spôsobiť nadmerný tlak na výrobok.
- Ak sa objaví bolesť, podráždenie, začervanenie alebo nepohodlie, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa z zdravotníckym pracovníkom alebo špecialistom na laktáciu.
- Neupravujte výrobok ani nepoužívajte neoriginálne náhradné diely.

- Uchovávejte mimo dosahu otvoreného ohňa, zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Sterilizácia a čistenie sa musia vykonávať podľa priložených pokynov. Nesprávna sterilizácia môže ohrozit bezpečnosť a hygienu výrobku.

RO

1. INTRODUCERE

Accest collector manual de lapte matern oferă o colectare discretă a picăturilor de lapte, așezându-se confortabil în interiorul sutienului, cu un carac moale din silicon pentru o potrivire confortabilă. Compact și portabil, este ușor de transportat pentru călătoriile sau serviciu. Toate componentele se detașează rapid pentru o curățare temeinică și o igienă fiabilă.

2. PIESE

- A. Cupă de silicon x2
- B. Corp cupă x2

3. PREGĂTIRE ȘI UTILIZARE

NOTĂ: Spălați-vă bine pe mâini și sterilizați toate componentele înainte de utilizare. Manipulați cu grijă, deoarece componentele pot fi încă fierbinți după sterilizare.

- Atașați cupa de silicon (A) la corpul cupei (B), apăsând ferm în jurul marginii pentru a asigura o etanșare completă.
- Confirmați că toate componentele sunt instalate corect înainte de utilizare.

4. SFATURI PENTRU O COLECTARE EFICIENTĂ A LAPTELUI

Alegeți un moment în care fluxul de lapte este în mod natural mai puternic, de obicei dimineața, înainte sau după prima alăptare. Dacă simțiți durere, opriți-vă și consultați un specialist în alăptare.

5. CURĂȚARE ȘI STERILIZARE

- Toate componentele pot fi sterilizate. Se recomandă utilizarea unui sterilizator profesional.
- Curățați piesele din silicon cu un burete moale pentru a evita zgărieturile.
- Dacă fierbeți pentru sterilizare, puneți piesele în apă clocotită timp de 3 minute. Evitați contactul direct cu fundul vasului pentru a evita deteriorarea.

6. INSTRUCȚIUNI DE DEPOZITARE

- Turnați laptele colectat într-un biberon curat pentru depozitare.
- Agitați ușor pentru a amesteca grăsimea separată.
- Nu încălziți laptele matern la microunde sau cu apă clocotită.

7. AVERTISMENT

- Destinat exclusiv uzului personal. Nu îl împărtășiți cu alți utilizatori.
- Inspectați toate componentele înainte de ficcare utilizare. Nu utilizați dacă piesele sunt deteriorate, deformate, crăpate sau prezintă semne de uzură.
- Nu utilizați în timpul somnului sau în timpul activităților care pot cauza o presiune excesivă asupra produsului.
- Interperuți imediat utilizarea dacă apare durere, iritație, roșeață sau disconfort și consultați un profesionist din domeniul sănătății sau un specialist în alăptare.
- Nu modificați produsul și nu utilizați piese de schimb neoriginale.
- A se păstra departe de flăcări deschise, surse de căldură și lumina directă a soarelui.
- Sterilizarea și curățarea trebuie să respecte instrucțiunile furnizate. Sterilizarea incorectă poate compromite siguranța și igiena produsului.

HR

1. UVOD

Ovaj ručni sakupljač majčinog mlijeka nudi diskretno sakupljanje kapi mlijeka koje udobno sjedaju unutar grudnjaka s mekim silikonskim poklopcem za udobno prijanjanje. Kompaktan i prenosiv, jednostavan je za nošenje na putovanja ili posvi. Svi dijelovi se brzo odvajaju za temeljito čišćenje i pouzdanu higijenu.

2. DIJELOVI

- Silikonova čašica x2
- Tijelo čašice x2

3. PRIPREMA I UPORABA

NAPOМЕНА: Prije upotrebe temeljito operite ruke i sterilizirajte sve komponente. Pažljivo rukujte jer dijelovi mogu biti još uvijek vrući nakon sterilizacije.

- Pričvrstite silikonsku čašicu (A) na tijelo čašice (B), čvrsto pritisajući oku ruba kako biste osigurali potpuno brtvljenje.
- Prije upotrebe provjerite jesu li svi dijelovi ispravno postavljeni.

4. SAVJETI ZA UČINKOVITO SAKUPLJAVANJE MLIJEKA

Odaberite vrijeme kada je protok mlijeka prirodno jači, obično ujutro, prije ili nakon prvog hranjenja. Ako osjetite bol, prestanite i posavjetujte se sa stručnjakom za laktaciju.

5. ČIŠĆENJE I STERILIZACIJA

- Svi dijelovi mogu se sterilizirati. Preporučuje se profesionalni sterilizator.
- Silikonske dijelove čistite mekom spužvom kako biste izbjegli ogrebotine.
- Ako kuhate za sterilizaciju, dijelove stavite u kipuću vodu na 3 minute. Spriječite izravan kontakt s dnom posude kako biste izbjegli oštećenja.

6. UPUTE ZA ČUVANJE

Sključeno mlijeko ulijte u čistu bočicu za bebe radi čuvanja. Lagano promiješajte kako biste pomiješali odvojenu masnoću. Ne zagrijavajte majčino mlijeko u mikrovatnoj pečnici ili kipućoj vodi.

7. UPOZORENJE

- Namijenjeno samo za osobnu upotrebu. Ne dijelite s drugim korisnicima.
- Prije svake upotrebe provjerite sve komponente. Ne koristite ako su dijelovi oštećeni, deformirani, napuknuti ili pokazuju znakove habanja.
- Ne koristite dok spavate ili tijekom aktivnosti koje mogu uzrokovati pretjerani pritisk na proizvod.
- Odmah prekinite upotrebu ako se pojavi bol, iritacija, crvenilo ili nelagodje i posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom ili stručnjakom za dojenje.
- Ne modificirajte proizvod niti koristite neoriginalne zamjenske dijelove.
- Držite podalje od otvorenog plamena, izvora toplote i izravne sunčeve svjetlosti.
- Sterilizacija i čišćenje moraju se provoditi prema priloženim uputama. Nepravilna sterilizacija može ugroziti sigurnost i higijenu proizvoda.

LT

1. ĮVADAS

Šis rankinis motinos pieno surinktuvas patogiai įsitaiso liemenėlis viduje ir diskretiškai surenka pieno lašus, uždenantis minkštą silikonių dangtelį. Kompaktiškas ir nešiojamas, jį lengva nešiotis kelionėse ar darbe. Visos dalys greitai nuimamos, kad būtų galima kruopščiai išvalyti ir užtikrinti patikimą higieną.

2. DALYS

- Silikono puodelis x2
- Puodelio korpusas x2

3. PARUOŠIMAS IR NAUDOJIMAS

PASTABA: Prieš naudojimą kruopščiai nusiplaukite rankas ir sterilizuokite visus komponentus. Išklaikite atsargiai, nes po sterilizavimo dalys gali būti karštos.

- Privirtinkite silikoninį puodelį (A) prie puodelio korpuso (B), tvirtai prispausdami aplink kraštą, kad užtikrintumėte visišką sandarumą.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad visos dalys tinkamai sumontuotos.

4. PATARIMAI, KAIP EFEKTYVIAI SURINKTI PIENĄ

Pasirinkite laiką, kai pieno tekėjimas natūraliai stipresnis, paprastai rytę, prieš arba po pirmojo maitinimo. Jei jaučiate skausmą, nutraukite maitinimą ir pasitarkite su laktacijos specialistu.

5. VALYMAS IR STERILIZAVIMAS

- Visas dalis galima sterilizuoti. Rekomenduojamas profesionalus sterilizatorius.
- Silikonines dalis valykite minkšta kempine, kad nesubraižytumėte.
- Jei sterilizavimui verdate, 3 minutėms įdėkite dalis į verdantį vandenį. Venkite tiesioginio šilumos su puodo dugnu, kad nepažeistumėte.

6. LAIKYMO INSTRUKCIJOS

- Suvalykite surinktą pieną į švarų kūdikio buteliuką laikymui.
- Švelniai pasukite, kad sumaišytumėte atskyrusius riebalus.
- Nešiškite motinos pieno mikrobangų krosnelėje ar verdančiame vandenyje.

7. ĮSPĖJIMAS

- Skirta tik asmeniniam naudojimui. Nesidalinkite su kitais vartotojais.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite visus komponentus. Nenaudokite, jei dalys yra pažeistos, deformuotos, įtrūkusios arba turi nusidėvėjimo požymius.
- Nenaudokite miegodami arba užsiimdami veikla, kuri gali sukelti per didelį spaudimą gaminiui.
- Nedelsdami nutraukite naudojimą, jei atsiranda skausmas, dirginimas, paraudimas ar diskomfortas, ir pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu arba žindyvio specialistu.
- Nekeiskite gaminio ir nenaudokite neoriginalių pakeičiųjų dalių.
- Laikykite atokiau nuo atviro liepsnos, šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Sterilizavimas ir valymas turi atitikti pateiktas instrukcijas. Neteisinga sterilizacija gali pakenkti gaminio saugumui ir higienai.

PL

1. WSTĘP

Ten ręczny odciągacz pokarmu zapewnia dyskretne zbieranie kropelek mleka, wygodnie umieszczonych wewnątrz biustonosza, dzięki miękkiej silikonowej osłonce, zapewniającej wygodne dopasowanie. Kompaktowy i przenośny, można go łatwo zabrać w podróż lub do pracy. Wszystkie części można szybko zdemontować, co zapewnia dokładne czyszczenie i higienę.

2. CZĘŚCI

- Silikonowy kubek x 2
- Korpus kubeczka x 2

3. PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE

UWAGA: Przed użyciem dokładnie umyj ręce i wysterylizuj wszystkie elementy. Zachowaj ostrożność, ponieważ części mogą być nadal gorące po sterylizacji.

- Zalóż silikonowy kubek (A) na korpus kubeczka (B), mocno dociskając wokół krawędzi, aby zapewnić szczelność.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamontowane.

4. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO ZBIÓRKI MLEKA

Wybierz porę, w której przepływ mleka jest naturalnie silniejszy, zazwyczaj rano, przed lub po pierwszym karmieniu. Jeśli odczuwasz ból, przerwij i skonsultuj się ze specjalistą laktacyjnym.

5. CZYSZCZENIE I STERYLIZACJA

- Wszystkie części można sterylizować. Zaleca się użycie profesjonalnego sterylizatora.
- Czyszć silikonowe części miękką gąbką, aby uniknąć zarysowań.
- W przypadku sterylizacji wrzątkiem, umieść części we wrzącej wodzie za 3 minuty. Unikaj bezpośredniego kontaktu z dnem naczynia, aby uniknąć uszkodzeń.

6. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

- Przelej zebrane mleko do czystej butelki dla niemowląt w celu przechowywania.
- Delikatnie zamieszaj, aby wymieszać oddzielną tłuszc.
- Nie podgrzewaj mleka matki w kuchence mikrofalowej ani wrzącej wodzie.

7. OSTRZEŻENIE

- Przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego. Nie udostępniać innym użytkownikom.
- Sprawdź wszystkie elementy przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli części są uszkodzone, zdeformowane, pęknięte lub noszą ślady zużycia.
- Nie używaj podczas snu ani podczas czynności, które mogą powodować nadmierny nacisk na produkt.
- W przypadku wystąpienia bólu, podrażnienia, zaczerwienienia lub dyskomfortu natychmiast przerwij stosowanie i skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą ds. laktacji. Nie należy modyfikować produktu ani używać nieoryginalnych części zamiennych.
- Trzymać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
- Sterylizację i czyszczenie należy przeprowadzać zgodnie z dołączoną instrukcją. Nieprawidłowa sterylizacja może zagrozić bezpieczeństwu i higienie produktu.

SB

1. UVOD

Ova ručna posuda za sakupljaње majčinog mleka nudi diskretno sakupljaње kapi mleka koje se udobno smestaju unutar grudnjaka, a meka silikonska navlaka pruža udobno prijaње. Kompaktna i prenosiva, laka je za nošenje na putovanja ili posao. Svi delovi se brzo odvajaju radi temeljnog čišćenja i pouzdanе higijene.

2. ДЕЛОВИ

- Silikonska čašica x2
- Telo čašice x2

3. ПРИПРЕМА И УПОТРЕБА

НАПОМЕНА: Употребите уметопне руке и стерилишите све компоненте пре употребе. Паажљиво рукujte јер делови могу бити врући након стерилизације.

- Причврстите силиконску чашицу (А) на тело чашице (Б), чврсто притискајући око обода како бисте осигурали потпуно затпиавање.
- Пре употребе проверите да ли су сви делови правилно постављени.

4. САВЕТИ ЗА ЕФИКАСНО САКУПЉАЊЕ МЛЕКА

Изаберите време када је проток mleka природно јачи, обично ујутру, пре или после првог хрњањења. Ако осетите бол, престаните и консултујте се са специјалистом за лактацију.

5. ЧИШЋЕЊЕ И СТЕРИЛИЗАЦИЈА

- Сви делови се могу стерилисати. Препоручује се професионални стерилзатор.
- Очистите силиконске делове меким сунђером да бисте избегли огреботине.

- Ако кувате ради стерилизације, ставите делове у кључалу воду на 3 минута. Спречите директан контакт са дном посуде да бисте избегли оштећења.

6. УПУТСТВО ЗА ЧУВАЊЕ

Сипајте сакупљено mleко у чисту флашу или за бебе ради чувања. Нежно промешајте да бисте помешали одвојену масноћу. Не загревајте мајчино mleко микроталасном пећицом или кључалом водом.

7. УПОЗОРЕЊЕ

- Намењено само за личну употребу. Не делите са другим корисницима.
- Прегледајте све компоненте пре сваке употребе. Не користите ако су делови оштећени, деформисани, напукали или показују знаке хабања.
- Не користите док спавате или током активности које могу изазвати прекомерни притисак на производ.
- Одмах прекините употребу ако се јави бол, иритација, црвенило или nelagodnost и консултујте се са здравственим радником или специјалистом за лактацију.

- Не модификујте производ или