


nuvitamum

MATERNO COMFORT

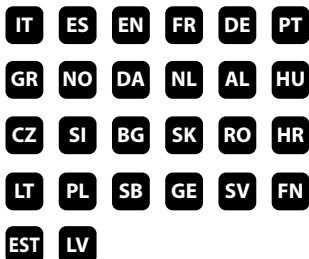

1260W

- IT** Manuale istruzioni d'uso
ES Manual de instrucciones de uso
EN Instruction manual
FR Manuel d'instructions
DE Bedienungsanleitung
PT Manual de instruções de uso
GR Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
NO Bruksanvisning
DA Brugsanvisning
NL Gebruiksaanwijzing
AL Manual udhëzimesh
HU Használati útmutató
CZ Návod k použití
SI Navodila za uporabo
BG Ръководство за употреба
SK Návod na použitie
RO Manual de instrucțiuni
HR Priručnik s uputama
LT Naudojimo instrukcija
PL Instrukcja obsługi
SB Упутство за употребу
GE ინსტრუქცია
SV Bruksanvisning
FN Käyttöohje
EST Kasutusjuhend
LV Lietošanas instrukcija



INDEX

IT	3	HR	156
ES	12	LT	165
EN	21	PL	174
FR	30	SB	183
DE	39	GE	192
PT	48	SV	201
GR	57	FN	210
NO	66	EST	219
DA	75	LV	228
NL	84		
AL	93		
HU	102		
CZ	111		
SI	120		
BG	129		
SK	138		
RO	147		

Grazie per aver acquistato il tiralatte elettrico indossabile Nuvita 1260W. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTO MANUALE RIGUARDANO LA SALUTE E LA SICUREZZA PER TE E PER IL TUO BAMBINO. TI PREGHIAMO DI RISPETTARE SCRUPolosAMENTE QUANTO INDICATO

AVVERTENZE

1. Non utilizzare il tiralatte in ambienti umidi o durante la doccia o il bagno.
2. Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
3. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta e alle alte temperature.
4. Non utilizzare il dispositivo se è visibilmente danneggiato. Contattare il servizio Clienti.
5. Tenere le parti non utilizzate fuori dalla portata dei bambini per evitare soffocamenti o altri incidenti.

PERICOLO

1. Non caricare né utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o in ambienti con temperature superiori a 45°C.
2. Non immergere l'unità principale o il cavo USB in acqua, bevande o altri liquidi.
3. Non incenerire né esporre l'unità principale a fiamme libere.
4. Tenere gli imballaggi in plastica lontani dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.

NOTA

- Caricare completamente il dispositivo prima del primo utilizzo.
- Assemblare sempre i componenti seguendo le Istruzioni di Montaggio.
- Regolare la forza di estrazione in base al comfort e alla tolleranza personale.
- Non inclinare né riempire eccessivamente la coppa raccogliatore oltre il limite indicato.
- Verificare sempre la temperatura del latte prima di allattare per evitare scottature.
- In caso di scarsa produzione di latte, utilizzare il prodotto sotto controllo medico.
- Non usare eccessivamente il tiralatte per evitare lesioni al capezzolo.
- Interrompere l'uso e consultare un professionista sanitario in caso di dolore o irritazione.
- Non condividere tra utenti i componenti del dispositivo che entrano in contatto con il latte.
- Non utilizzare il tiralatte durante la gravidanza, poiché può causare contrazioni uterine.

- Interrompere l'estrazione se entro 5 minuti non viene espresso latte.
- Utilizzare questo prodotto solo come descritto nel manuale.

INFORMAZIONI

Il Nuvita 1260W Materno Comfort è progettato per supportare le mamme che allattano, simulando il ritmo naturale di suzione del bambino. Questo tiralatte elettrico indossabile è specificamente pensato per aiutare le mamme a estrarre il latte materno in modo efficiente e confortevole anche fuori casa, offrendo un'esperienza di raccolta del latte efficace e confortevole. Dispone di 9 livelli di intensità regolabile, della tecnologia Careflo® a 3 fasi e della funzione NipFit®.



CORREZIONE

La modalità di correzione aiuta a trattare capezzoli introflessi o piatti attraverso cicli di aspirazione delicata.



COPPETTA IN SILICONE DELICATA SULLA PELLE

Dotata di una coppetta in silicone morbido da 24 mm che si adatta delicatamente al seno per una vestibilità sicura e confortevole.



SISTEMA ANTI-RIFLUSSO

Previene il riflusso del latte verso il motore, garantendo igiene e prolungando la durata del prodotto.

TECNOLOGIA CAREFLO®:

A differenza dei tiralatte tradizionali a 2 fasi, Careflo® introduce, oltre alla fase di Stimolazione ed Estrazione anche una terza fase drenante anti-stasi per:

- favorire una produzione di latte più regolare
- prevenire gli ingorghi mammari e le mastiti
- alleviare la tensione e la pienezza mammaria
- dare maggiore continuità all'allattamento materno



FUNZIONE NIPFIT®:

Correzione del capezzolo piatto o introflesso.

Questa funzione è progettata per aiutare a correggere capezzoli piatti o introflessi e supportare l'estrazione del latte attraverso una stimolazione delicata e progressiva:

- Aiuta la protrusione del capezzolo verso l'esterno.
- Facilita l'attacco del bambino al seno.
- Supporta l'avvio e la continuità dell'allattamento.



CONTROINDICAZIONI

Non usare la funzione NipFit® se:

1. Hai ferite aperte, ragadi, lesioni o infezioni attive al capezzolo o all'areola.
2. Hai avuto un intervento chirurgico recente al seno.
3. Hai una condizione diagnosticata di introversione del capezzolo causata da malattia o trauma, non congenita. In questo caso, consulta prima il medico.
4. Avverti dolore acuto fin dalla prima applicazione. Interrompi immediatamente l'utilizzo.
5. Hai una pelle particolarmente sensibile o soffri di condizioni dermatologiche locali, come eczema o psoriasi.
6. Sei in gravidanza. L'aspirazione può stimolare contrazioni.



ATTENZIONE

La funzione NipFit® è indicata esclusivamente per il periodo post-partum. Non usare durante la gravidanza.


AVVERTENZE DURANTE L'USO

- Inizia sempre dal livello minimo, Livello 1. Non aumentare l'intensità prima che il capezzolo si sia adattato gradualmente, anche se la sensazione è confortevole.
- Non superare i 5-10 minuti di utilizzo continuativo della funzione NipFit® per sessione, soprattutto nelle prime settimane.
- Non eseguire più di 2 sessioni di correzione al giorno. Un uso eccessivo può causare irritazione, edema o microlesioni al capezzolo.
- Interrompi immediatamente l'utilizzo in caso di dolore acuto, rossore anormale, gonfiore persistente, comparsa di vesciche o perdite di liquido diverse dal latte.
- Questo dispositivo non è un dispositivo medico certificato per terapia clinica e non sostituisce il consulto con un'ostetrica, un medico o una consulente IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant.
- Un capezzolo introflesso di grado 3, severamente aderente, richiede valutazione medica prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di correzione.
- L'uso prolungato ad alta intensità può causare edema dell'areola, rendendo temporaneamente più difficile l'attacco del neonato. Questo può generare un effetto opposto a quello desiderato.

ISTRUZIONI PER UN USO SICURO:

- Assicurarsi che la coppa in silicone sia della misura corretta, flangia 24 mm o riduttori 20/22 mm inclusi, prima di attivare la funzione NipFit®. Una coppa troppo grande può amplificare l'aspirazione sull'areola in modo non controllato.
- Prima della sessione, applicare qualche goccia di latte materno o crema alla lanolina pura per ammorbidire l'area.
- Durante la sessione NipFit®, il capezzolo deve essere centrato nella coppa. Una posizione scorretta può causare aspirazione asimmetrica e irritazione.
- Se dopo 4-6 settimane di utilizzo corretto non si nota alcun miglioramento, consultare un professionista sanitario.


COMPONENTI DEL PRODOTTO

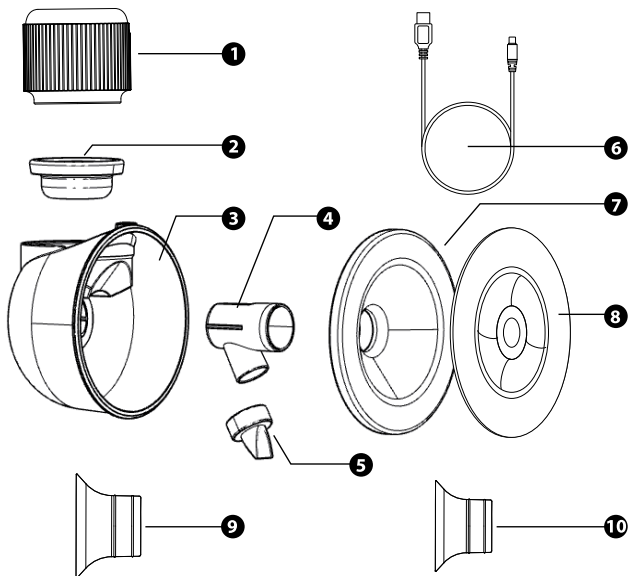

NO.	NOME	MATERIALE	QUANTITA
1	Unità principale	\	1
2	Diaframma in silicone	Silicone	1
3	Corpo della coppa	Polipropilene	1
4	Connettore	Polipropilene	1
5	Valvola	Silicone	1
6	Cavo USB	\	1
7	Coppa in silicone	Silicone	1
8	Coperchio antipolvere	Polipropilene	1
9	Flangia in silicone da 22 mm	Silicone	1
10	Flangia in silicone da 20 mm	Silicone	1

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Inserire la valvola nel connettore e assicurarsi che sia ben fissata.
2. Collegare il connettore al corpo della coppa.
3. Posizionare il diaframma in silicone sopra il corpo della coppa e premere finché non è sigillato su tutti i lati.
4. Fissare saldamente la coppa in silicone al corpo della coppa.
5. Collegare l'unità principale al diaframma in silicone fino a sentire un clic.

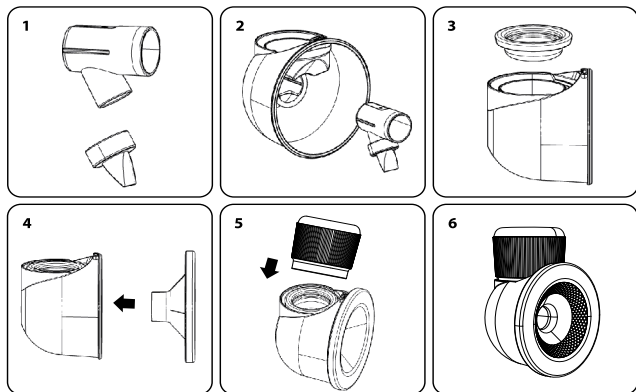


METODO DI RICARICA

USA IL CAVO USB FORNITO PER RICARICARE IL TIRALATTE:

- Compatibile con: porte USB del computer, adattatori di alimentazione o power bank.
- Utilizzare solo power bank con uscita non superiore a **5V/3A**.
- L'icona LED della batteria indica lo stato di carica:
 - Se il simbolo **(B6)** lampeggia, il dispositivo è in carica.
 - Se il simbolo è acceso ma non lampeggia, il dispositivo è completamente carico.

NOTA: Spegnere sempre l'apparecchio prima di ricaricarlo.

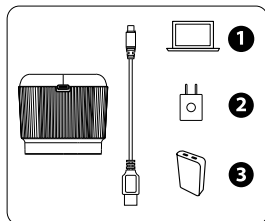

DESCRIZIONE DEL PANNELLO

A1: Pulsante di accensione (Tenere premuto per accendere/spegnere)

A2: Diminuisce livello di aspirazione

A3: Aumenta livello di aspirazione

A4: Cambio modalità (Stimolazione / Estrazione / Antistasi / Correttiva)

A5: Pausa / Continua

B1: Indicatore modalità Stimolazione

B2: Indicatore modalità Estrazione

B3: Indicatore modalità Antistasi


B4: Indicatore modalità Correttiva

B5: Livello di funzionamento / Visualizzazione tempo

B6: Indicatore livello batteria

B7: Tempo (minuti)

B1+B3: Funzione NipFit® attivata

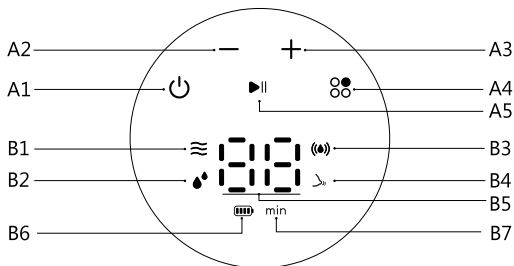

MODALITÀ STIMOLAZIONE (LIVELLO 1~9): In questa modalità, il tiralatte genera un ritmo di suzione relativamente rapido con una bassa potenza di estrazione. In questo modo stimola delicatamente il seno e favorisce l'eiezione del latte imitando la suzione superficiale iniziale del bambino. Si consiglia di utilizzare questa modalità prima di passare ad altre.


MODALITÀ ESTRAZIONE (LIVELLO 1~9): Questa modalità imita il ritmo di suzione più profondo e lento di un bambino durante la poppata. La forza di suzione è maggiore e la frequenza è più bassa rispetto alla modalità stimolazione. È pensata per facilitare l'estrazione efficace del latte una volta avviato il riflesso di eiezione del latte.

MODALITÀ ANTI-STASI (LIVELLO 1~9): Fornisce un ritmo di suzione pulsato per rimuovere a fondo il latte residuo dal seno dopo l'estrazione. L'uso regolare può aiutare a prevenire la stasi latte, ridurre il rischio di dotti ostruiti e mantenere il flusso di latte.

FUNZIONE NIPFIT®: Per attivare la funzione di correzione del capezzolo, premere il pulsante modalità fino a quando le icone (B1) e (B3) iniziano a lampeggiare. La funzione dispone di 3 livelli di intensità.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1. PREPARAZIONE:** Prima di utilizzare Nuvita 1260W Materno Comfort, lavarsi accuratamente le mani. Assicurarsi che tutti i componenti siano puliti e assemblati correttamente secondo le Istruzioni di Montaggio. Evitare di assemblare l'unità principale e il cavo USB durante la pulizia.
- 2. POSIZIONAMENTO:** Trovare un luogo tranquillo e confortevole dove sedersi. Utilizzare un poggiatesta se necessario per mantenere una postura rilassata e verticale. Prima dell'estrazione, è possibile massaggiare delicatamente il seno con un asciugamano caldo per stimolare il flusso del latte.
- 3. APPLICAZIONE:** Posizionare la coppa in silicone sul capezzolo e assicurarsi che aderisca bene al seno, senza spazi d'aria. Tenere l'unità con una mano e sostenere il seno con l'altra.

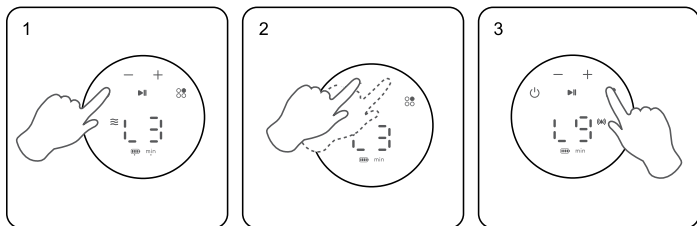

- 4. ACCENSIONE:** Premere e tenere premuto il pulsante **(A1)** per accendere il dispositivo. La luce ambientale lampeggerà e il display mostrerà il livello di suzione corrente. Il tiralatte si avvia in **Modalità stimolazione**.
- 5. REGOLAZIONE DELL'INTENSITA':** Usare **(A2)** per diminuire e **(A3)** per aumentare il livello di suzione in qualsiasi momento.
- 6. CAMBIO MODALITÀ:** Per cambiare modalità (Stimolazione, Estrazione, Anti-stasi, Correzione), premere il pulsante **(A4)**. Le modalità cambiano in sequenza, confermate dalla spia corrispondente.
- 7. PAUSA/CONTINUA:** Per mettere in pausa o riprendere il funzionamento, premere il pulsante **(A5)**.
- 8. FINE SESSIONE:** Quando si termina, tenere premuto il pulsante per spegnere il dispositivo. Scollegare e iniziare le procedure di pulizia.

NOTA: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti. Salva la modalità e il livello di suzione utilizzati per l'uso successivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

A. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Smontare tutte le parti lavabili e pulire accuratamente (esclusa l'unità principale e il cavo).

B. DOPO OGNI UTILIZZO

Smontare e risciacquare tutte le parti (esclusa l'unità principale) in acqua fredda per rimuovere i residui di latte. Parti da pulire: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DISINFEZIONE QUOTIDIANA

- Lavare prima le mani.
- Separare tutte le parti rilevanti.
- Utilizzare acqua bollente o uno sterilizzatore a vapore per 5 minuti.
- **NON** bollire le parti **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Le parti **(3, 4, 8)** non devono toccare superfici metalliche calde.

STOCCAGGIO: Asciugare completamente all'aria e conservare in un luogo pulito e asciutto.

PRECAUZIONI PER LA PULIZIA

- Smontare tutti gli accessori che entrano in contatto con il seno o il latte materno (eccetto l'unità principale).
- Dopo l'uso, pulire immediatamente le parti per evitare residui e proliferazione batterica.
- Assicurarsi di montare/smontare ogni accessorio come da istruzioni.
- Non perdere nessuna parte durante il montaggio e smontaggio.
- Tutti i componenti in silicone possono essere sterilizzati (eccetto l'unità principale).
- **Valvole:** non bollire o sterilizzare a vapore per più di 3 minuti.
- **Biberon:** non bollire o sterilizzare a vapore per più di 5 minuti.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione in ingresso:	DC 5V
Potenza nominale:	6W
Temperatura operativa:	15~30°C
Umidità operativa:	50% - 80%
Contenuto della confezione:	11 parti
Paese di origine:	PRC

GARANZIA - TERMINI E CONDIZIONI

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione, a partire dalla data di acquisto comprovata da scontrino o ricevuta. In caso di acquisto con fattura, la garanzia legale si riduce a 12 mesi. La garanzia di 24 mesi **non include** danni derivanti dalla normale usura del prodotto, danni estetici, accessori o materiali di consumo (ad esempio batterie, testine o componenti soggetti a usura). **Le batterie sono garantite per un periodo di 6 mesi.**

DECADENZA DELLA GARANZIA

La garanzia legale di 12/24 mesi decade nei seguenti casi:

1. Il prodotto è stato danneggiato a causa di un uso improprio non conforme alle istruzioni riportate nel manuale.
2. Il prodotto è stato modificato, manomesso o aperto.
3. Il malfunzionamento è causato da una manutenzione insufficiente dei componenti, accessori o forniture (ad esempio ossidazione, immersione in liquidi delle parti elettriche, residui che bloccano il sensore, perdite di liquido corrosivo dalle batterie).

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

Sono esclusi dalla garanzia legale di 24 mesi:

1. I costi per la sostituzione o riparazione di parti soggette a usura e quelli relativi alla manutenzione ordinaria del prodotto.
2. I costi e i rischi legati al trasporto del prodotto da e verso il punto vendita o il centro autorizzato per la gestione della garanzia.
3. Danni derivanti da un'installazione errata o da un utilizzo improprio non conforme alle istruzioni del manuale.
4. Danni causati da calamità naturali, cadute, urti accidentali o condizioni ambientali incompatibili con il prodotto.
5. Difetti che influiscono in modo trascurabile sulle prestazioni del prodotto.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ:

Il produttore, il distributore e tutte le parti coinvolte nella vendita del prodotto non sono responsabili per perdite economiche o danni derivanti dal malfunzionamento del prodotto. Ai sensi della normativa vigente, essi non rispondono per danni diretti, indiretti, perdita di reddito, risparmi o altre conseguenze derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto e/o la documentazione associata (cartacea o elettronica), inclusa l'assenza di servizio.

Per maggiori dettagli sul servizio di assistenza, si invita a consultare le Condizioni di Vendita disponibili sul sito **www.nuvitababy.com**.

Gracias por adquirir el sacaleches eléctrico portátil Nuvita 1260W. Lea atentamente el manual antes de usarlo y consérvelo para futuras referencias.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR LA SEGURIDAD Y LA SALUD SUYA Y DE SUS HIJOS, TODO EL CONTENIDO DE ESTE PROYECTO ESTÁ RELACIONADO CON LA SEGURIDAD. POR FAVOR, ASEGÚRESE DE CUMPLIRLO.

ADVERTENCIA

1. No use el sacaleches mientras se baña o en ambientes húmedos.
2. Mantenga este producto fuera del alcance de niños y mascotas.
3. Evite la exposición directa a la luz solar y altas temperaturas.
4. No use el dispositivo si está visiblemente dañado. Contacte al fabricante o a un técnico autorizado.
5. Mantenga las piezas usadas fuera del alcance de los niños para evitar atragantamientos u otros accidentes.

PELIGRO

1. No cargue ni use el producto cerca de llamas abiertas o en ambientes superiores a 45°C.
2. No sumerja la unidad principal ni el cable USB en agua, bebidas u otros líquidos.
3. No incinere ni exponga la unidad principal a llamas.
4. Mantenga los envoltorios plásticos alejados de los niños para evitar riesgo de asfixia.

AVISO

- Ensamble siempre los componentes siguiendo las Instrucciones de Montaje.
- Ajuste la fuerza de succión según la comodidad y tolerancia personal.
- No incline ni llene demasiado el recipiente más allá del límite.
- Pruebe siempre la temperatura de la leche antes de alimentar.
- Si tiene poca producción de leche, utilice el producto bajo guía médica.
- No sobreutilice el sacaleches para evitar lesiones en los pezones.
- Deje de usarlo y consulte a un profesional si siente dolor o irritación.
- No comparta los componentes que entran en contacto con la leche.
- No utilice el sacaleches durante el embarazo, ya que puede inducir contracciones.
- Interrumpa el uso si no se extrae leche en 5 minutos.
- Use este producto solo como se describe en el manual.

INFORMACIÓN

El Nuvita 1260W Materno Comfort está diseñado para acompañar a las mamás durante la lactancia, imitando el ritmo natural de succión del bebé. Este extractor de leche eléctrico y manos libres está pensado específicamente para que puedas extraer leche de forma cómoda y eficiente incluso fuera de casa, garantizando una experiencia práctica y sin molestias. Cuenta con 9 niveles de intensidad regulables, la función NipFit® y la tecnología de 3 fases Careflo®.



CORRECCIÓN

La modalidad de corrección ayuda a trattare capezzoli introflessi o piatti attraverso cicli di aspirazione delicata.



COPA DE SILICONA DELICADA CON LA PIEL

Equipada con una copa de silicona blanda de 24 mm que se adapta al pecho para un ajuste seguro y cómodo.



SISTEMA ANTI-RETORNO

Evita el reflujo de la leche hacia el motor, manteniendo la higiene y prolongando la vida útil del producto.



TECNOLOGÍA CAREFLO®:

A diferencia de los extractores tradicionales de 2 fases, el sistema Careflo® añade una tercera fase de drenaje anticongestión a las etapas habituales de estimulación y extracción. Sus beneficios incluyen:

- Estimular una producción de leche más constante.
- Prevenir la obstrucción de los conductos y la mastitis.
- Aliviar la tensión y la sensación de pecho lleno.
- Favorecer una lactancia materna más prolongada y sin interrupciones.



FUNCIÓN NIPFIT®:

Corrección del pezón plano o invertido. Esta función está diseñada para ayudar a corregir los pezones planos o invertidos. Facilita la extracción de leche mediante una estimulación suave y progresiva que:

- Ayuda a conseguir la protrusión del pezón hacia el exterior.
- Facilita el agarre del bebé al pecho.
- Favorece el inicio y la continuidad de la lactancia.

CONTRAINDICACIONES

No utilice la función NipFit® si:

1. Tiene llagas abiertas, grietas, lesiones o infecciones activas en el pezón o la areola.
2. Se ha sometido recientemente a una cirugía de mama.
3. Tiene un diagnóstico de inversión del pezón causado por una enfermedad o traumatismo, no congénito. En ese caso, consulte primero a su médico.
4. Experimenta dolor agudo con la primera aplicación. Suspenda su uso inmediatamente.
5. Tiene la piel especialmente sensible o padece afecciones dermatológicas locales, como eccema o psoriasis.
6. Está embarazada. La succión puede estimular las contracciones.



ADVERTENCIA

La función NipFit® está diseñada únicamente para uso posparto. No la utilice durante el embarazo.


ADVERTENCIAS DURANTE EL USO

- Comience siempre con el nivel más bajo, Nivel 1. No aumente la intensidad hasta que el pezón se haya adaptado gradualmente, incluso si la sensación es cómoda.
- No exceda los 5-10 minutos de uso continuo de la función NipFit® por sesión, especialmente durante las primeras semanas.
- No realice más de 2 sesiones de corrección al día. El uso excesivo puede causar irritación, hinchazón o microdesgarros en el pezón.
- Suspenda su uso inmediatamente si experimenta dolor agudo, enrojecimiento anormal, hinchazón persistente, ampollas o secreción de líquido que no sea leche.
- Este dispositivo no es un dispositivo médico certificado para terapia clínica y no reemplaza la consulta con una matrona, un médico o un consultor internacional certificado en lactancia (IBCLC).
- Un pezón invertido de grado 3, con adherencia severa, requiere evaluación médica antes de usar cualquier dispositivo de corrección.
- El uso prolongado y de alta intensidad puede causar hinchazón de la areola, lo que dificulta temporalmente que el bebé se agarre al pecho. Esto puede tener el efecto contrario al deseado.

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO:

- Asegúrese de que la copa de silicona sea del tamaño correcto, incluyendo el embudo de 24 mm o los reductores de 20/22 mm, antes de activar la función NipFit®. Una copa demasiado grande puede aumentar la succión en la areola de forma descontrolada.
- Antes de la sesión, aplique unas gotas de leche materna o crema de lanolina pura para suavizar la zona.
- Durante la sesión con NipFit®, el pezón debe estar centrado en la copa. Una posición incorrecta puede causar succión asimétrica e irritación.
- Si no observa ninguna mejoría después de 4 a 6 semanas de uso correcto, consulte a un profesional de la salud.


COMPONENTES DEL PRODUCTO

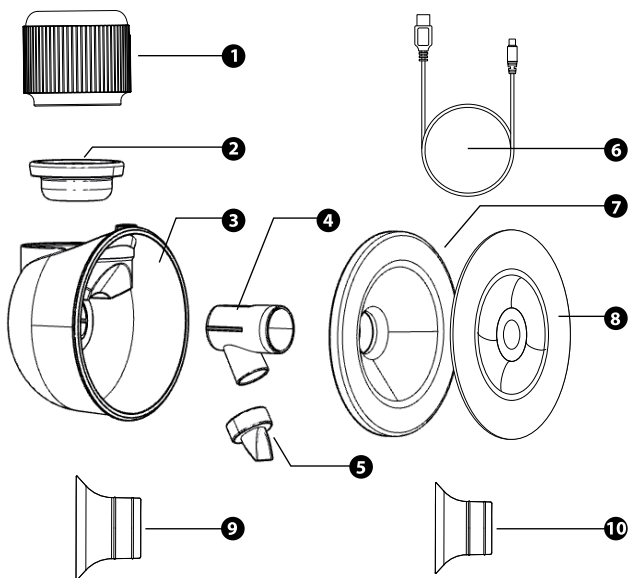

NO.	NOMBRE	MATERIAL	CANTIDAD
1	Unidad principal	\	1
2	Diafragma de silicona	Silicona	1
3	Cuerpo del recipiente	Polipropileno	1
4	conector	Polipropileno	1
5	Válvula	Silicona	1
6	Cable USB	\	1
7	Copa para el pecho de silicona	Silicona	1
8	Tapa antipolvo	Polipropileno	1
9	Inserto de silicona de 22 mm	Silicona	1
10	Inserto de silicona de 20 mm	Silicona	1

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Inserte la válvula en el conector y asegúrese de que quede bien ajustada.
2. Conecte el conector al cuerpo de la copa.
3. Coloque el diafragma de silicona sobre el cuerpo de la copa y presione hasta que quede sellado por todos los lados.
4. Coloque firmemente la copa de silicona sobre el cuerpo de la copa.
5. Conecte la unidad principal al diafragma de silicona hasta que haga clic.

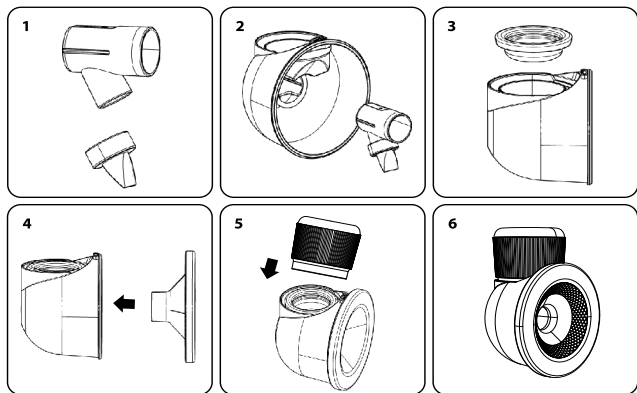


MÉTODO DE CARGA

UTILICE EL CABLE USB PROPORCIONADO PARA CARGAR EL EXTRACTOR:

- Compatible con: puertos USB de computadoras, adaptadores de corriente o power banks.
- Use solo power banks con una salida que no exceda **5V/3A**.
- El icono LED de la batería indica el estado de carga:
 - Si el símbolo **(B6)** parpadea, el dispositivo se está cargando.
 - Si el símbolo está encendido sin parpadear, el dispositivo está completamente cargado.

NOTA: Apague siempre el extractor antes de cargarlo.

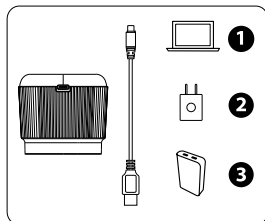

DESCRIPCIÓN DEL PANEL

A1: Botón de encendido (Mantenga presionado para encender/apagar)

A2: Disminuir nivel de succión

A3: Aumentar nivel de succión

A4: Cambio de modo (Estimulación / Extracción / Antiestasis / Corrección)

A5: Pausar / Continuar

B1: Indicador de modo Estimulación

B2: Indicador de modo Extracción

B3: Indicador de modo Antiestasis


B4: Indicador de modo Corrección

B5: Nivel de funcionamiento / Visualización de tiempo

B6: Indicador del nivel de batería

B7: Visualización de unidad de tiempo (minutos)

B1+B3: Función NipFit® activada

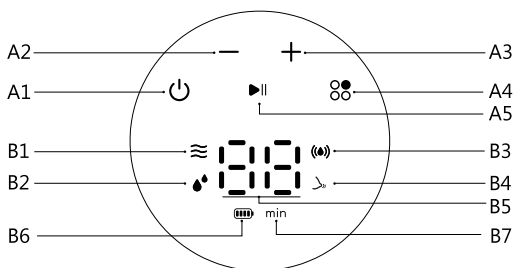

MODO ESTIMULACIÓN (NIVEL 1~9): En este modo, la bomba genera un ritmo de succión relativamente rápido con baja potencia. Está diseñado para estimular suavemente el pecho e imitar la succión superficial inicial del bebé. Se recomienda usarlo antes de otros modos.


MODO DE EXTRACCIÓN (NIVEL 1~9): Este modo imita la succión más profunda y lenta de un bebé cuando bebe leche. La fuerza de succión es mayor y la frecuencia más lenta que en el modo estimulación. Está diseñado para facilitar la extracción de leche una vez que ha comenzado el reflejo de bajada.

MODO ANTI-ESTASIS (NIVEL 1~9): Ofrece un patrón de succión pulsante para eliminar completamente la leche restante. Su uso regular ayuda a prevenir la estasis de leche, reducir el riesgo de obstrucciones y mantener el flujo lácteo.

FUNCIÓN NIPFIT®: Para activar la función de corrección de pezones, pulse el botón de modo hasta que los iconos (B1) y (B3) empiecen a parpadear. La función tiene 3 niveles de intensidad.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- 1. PREPARACIÓN:** Antes de usar el Nuvita 1260W Materno Comfort, lávese bien las manos. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y ensamblados correctamente según las instrucciones. Evite ensamblar la unidad principal y el cable USB durante la limpieza.
- 2. POSICIONAMIENTO:** Busque un lugar cómodo y tranquilo para sentarse. Use un reposapiés si lo necesita para mantener una postura relajada y erguida. Antes de extraer, puede estimular suavemente sus senos con una toalla tibia para estimular el flujo de leche.
- 3. APLICACIÓN:** Centre la copa de silicona en el pezón y asegúrese de que selle bien el pecho

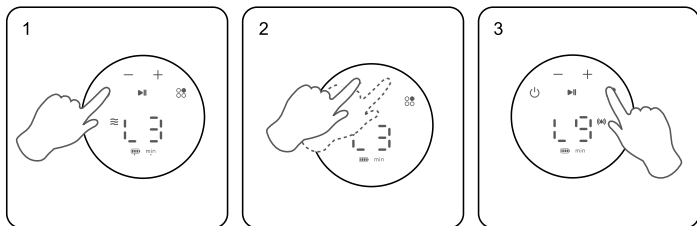

sin espacios de aire. Sostenga la unidad con una mano y sujete el pecho con la otra.

- 4. ENCENDIDO:** Mantenga presionado el botón **(A1)** para encender el dispositivo. La luz ambiental parpadeará y la pantalla mostrará el nivel de succión actual. La bomba comenzará en Modo Estimulación.
 - 5. AJUSTE DE INTENSIDAD:** Use **(A2)** para disminuir y **(A3)** para aumentar el nivel de succión en cualquier momento.
 - 6. CAMBIO DE MODO:** Para cambiar de modo (Estimulación, Extracción, Antiestasis, Corrección), presione el botón **(A4)**. El modo cambiará en secuencia y la luz indicadora confirmará la selección.
 - 7. PAUSAR/CONTINUAR:** Para pausar o reanudar la operación, presione el botón **(A5)**.
 - 8. FINALIZAR SESIÓN:** Cuando termine, mantenga presionado el botón para apagar el dispositivo. Desconéctelo e inicie el procedimiento de limpieza.
- NOTA:** El dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos. Guarda el último modo y nivel de succión utilizados para el próximo uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A. ANTES DEL PRIMER USO

Desmante todas las piezas lavables y límpielas bien (excepto la unidad principal y el cable).

B. DESPUÉS DE CADA USO

Desmante y enjuague todas las piezas (excepto la unidad principal) con agua fría para eliminar residuos de leche. Piezas a limpiar: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DESINFECCIÓN DIARIA

- Lávese las manos primero.
- Separe todas las piezas necesarias.
- Utilice agua hirviendo o esterilizador a vapor durante 5 minutos.
- **NO** hierva las piezas **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Las piezas **(3, 4, 8)** no deben tocar superficies metálicas calientes.

ALMACENAMIENTO: Seque bien al aire y guarde en un lugar limpio y seco.

PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA

- Desmante todos los accesorios en contacto con el pecho o la leche materna (excepto la unidad principal).
- Limpie inmediatamente después del uso para evitar residuos y bacterias.
- Asegúrese de montar/desmontar cada accesorio según las instrucciones.
- No pierda ninguna pieza al montar o desmontar.
- Todos los componentes de silicona pueden esterilizarse (excepto la unidad principal).
- **Válvulas:** no hervir o esterilizar por más de 3 minutos.
- **Biberones:** no hervir o esterilizar por más de 5 minutos.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Voltaje de entrada:	DC 5V
Potencia nominal:	6W
Temperatura de funcionamiento:	15~30°C
Humedad de funcionamiento:	50% - 80%
Contenido del paquete:	11 partes
Origen:	PRC

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses contra defectos de fabricación, a partir de la fecha de compra acreditada mediante recibo o factura. En caso de compra con factura, la garantía legal se reduce a 12 meses. La garantía de 24 meses **no incluye** daños resultantes del uso y desgaste normal del producto, daños estéticos, accesorios o consumibles (por ejemplo, baterías, cabezales o componentes sujetos a desgaste). **Las baterías tienen una garantía de 6 meses.**

NULIDAD DE LA GARANTÍA

La garantía legal de 12/24 meses caduca en los siguientes casos:

1. El producto ha sido dañado debido a un uso inadecuado no conforme con las instrucciones del manual.
2. El producto ha sido modificado, manipulado o abierto.
3. El mal funcionamiento se debe a un mantenimiento insuficiente de los componentes, accesorios o suministros (por ejemplo, oxidación, inmersión de partes eléctricas en líquidos, residuos que bloquean el sensor, fugas de líquido corrosivo de las baterías).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Quedan excluidos de la garantía legal de 24 meses:

1. Los costes de sustitución o reparación de piezas sujetas a desgaste y los relativos al mantenimiento ordinario del producto.
2. Los costes y riesgos asociados al transporte del producto hasta y desde el punto de venta o el centro autorizado para la gestión de la garantía.
3. Daños resultantes de una instalación incorrecta o un uso indebido no conforme con las instrucciones del manual.
4. Daños causados por desastres naturales, caídas, impactos accidentales o condiciones ambientales incompatibles con el producto.
5. Defectos que tienen un impacto insignificante en el rendimiento del producto.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD:

El fabricante, el distribuidor y todas las partes involucradas en la venta del producto no son responsables de ninguna pérdida o daño económico resultante del mal funcionamiento del producto. De acuerdo con la legislación aplicable, no son responsables de daños directos o indirectos, pérdida de ingresos, ahorros u otras consecuencias derivadas del uso o de la imposibilidad de usar el producto y/o la documentación asociada (papel o electrónica), incluida la falta de servicio.

Para más detalles sobre el servicio de asistencia, consulte las Condiciones de Venta disponibles en el sitio web **www.nuvitababy.com**.

Thank you for purchasing the Nuvita 1260W Wearable Electric Breast Pump. Please read the manual carefully before use and keep it for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR THE SAFETY AND HEALTH OF YOU AND YOUR CHILDREN, ALL THE CONTENTS OF THIS PROJECT ARE RELATED TO SAFETY. PLEASE BE SURE TO ABIDE BY THEM.

WARNING

1. Do not use the breast pump while bathing or in wet environments.
2. Keep this product out of the reach of children and pets.
3. Avoid exposure to direct sunlight and high temperatures.
4. Do not use the device if it is visibly damaged. Contact the manufacturer or authorized personnel for repairs.
5. Keep unused parts out of children's reach to avoid choking or other accidents.

DANGER

1. Do not charge or use the product near open flames or in environments above 45°C.
2. Do not immerse the main unit or USB cable in water, beverages, or other liquids.
3. Never incinerate or expose the main unit to open flames.
4. Keep plastic packaging away from children to avoid risk of suffocation.

NOTICE

- Charge the device fully before first use.
- Always assemble components following the Assembly Instructions.
- Adjust suction strength based on comfort and personal tolerance.
- Do not tilt or overfill the milk collection cup beyond the marked limit.
- Always test milk temperature before feeding to avoid burns.
- If you have low milk supply, use the product under medical guidance.
- Do not overuse the pump to avoid nipple injury.
- Stop use and consult a healthcare professional if pain or irritation occurs.
- Do not share the device components that contact milk between users.
- Do not use the pump during pregnancy as it may cause uterine contractions.
- Stop pumping if no milk is expressed within 5 minutes.
- Use this product only as described in the manual.

INFORMATION

The Nuvita 1260W Materno Comfort is designed to support breastfeeding mothers by mimicking a baby's natural nursing rhythm. This wearable electric breast pump is specifically engineered to help moms express breast milk efficiently and comfortably on the go, ensuring a seamless and pain-free pumping experience. It features 9 adjustable intensity levels, NipFit® functionality, and 3-phase Careflo® technology.



CORRECTION

The correction mode helps address inverted or flat nipples through cycles of gentle suction.



ALL-SILICONE BREAST SHIELD

Skin-friendly and gentle on the skin, offers a soft and comfortable fit for effective suction.



ANTI-BACKFLOW SYSTEM

Prevents milk from flowing back into the motor unit, ensuring hygiene and longevity of the product.



CAREFLO® TECHNOLOGY:

Unlike traditional 2-phase breast pumps, Careflo® introduces a third anti-stasis drainage phase alongside the standard stimulation and expression stages. This helps to:

- Promote a more consistent milk supply.
- Prevent clogged ducts and mastitis.
- Relieve breast tension and engorgement.
- Support a smoother, uninterrupted breastfeeding journey.



NIPFIT® FUNCTION:

Correction of flat or inverted nipples.

This function is designed to help correct flat or inverted nipples and support milk extraction through gentle, progressive stimulation:

- It helps the nipple protrude outward.
- It facilitates the baby's latch on to the breast.
- It supports the initiation and continuation of breastfeeding.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the NipFit® feature if:

1. You have open sores, cracks, lesions, or active infections on your nipple or areola.
2. You have had recent breast surgery.
3. You have a diagnosed condition of nipple inversion caused by disease or trauma, not congenital. If this is the case, consult your doctor first.
4. You experience sharp pain from the first application. Discontinue use immediately.
5. You have particularly sensitive skin or suffer from local dermatological conditions, such as eczema or psoriasis.
6. You are pregnant. Suctioning may stimulate contractions.



WARNING

The NipFit® feature is intended for postpartum use only. Do not use during pregnancy.


WARNINGS DURING USE

- Always start at the lowest level, Level 1. Do not increase the intensity until the nipple has gradually adapted, even if the sensation is comfortable.
- Do not exceed 5-10 minutes of continuous use of the NipFit® feature per session, especially in the first few weeks.
- Do not perform more than 2 correction sessions per day. Excessive use may cause irritation, swelling, or micro-tears to the nipple.
- Discontinue use immediately if you experience sharp pain, abnormal redness, persistent swelling, blisters, or discharge of fluid other than milk.
- This device is not a certified medical device for clinical therapy and does not replace consultation with a midwife, physician, or International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- A Grade 3, severely adherent inverted nipple requires medical evaluation before using any correction device.
- Prolonged, high-intensity use may cause swelling of the areola, temporarily making it more difficult for the baby to latch on. This can have the opposite effect to the desired one.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE:

- Make sure the silicone cup is the correct size, including the 24 mm flange or 20/22 mm reducers, before activating the NipFit® feature. A cup that is too large can amplify the suction on the areola in an uncontrolled manner.
- Before the session, apply a few drops of breast milk or pure lanolin cream to soften the area.
- During the NipFit® session, the nipple should be centered in the cup. An incorrect position can cause asymmetric suction and irritation.
- If you do not notice any improvement after 4-6 weeks of proper use, consult a healthcare professional.


PRODUCT COMPONENTS

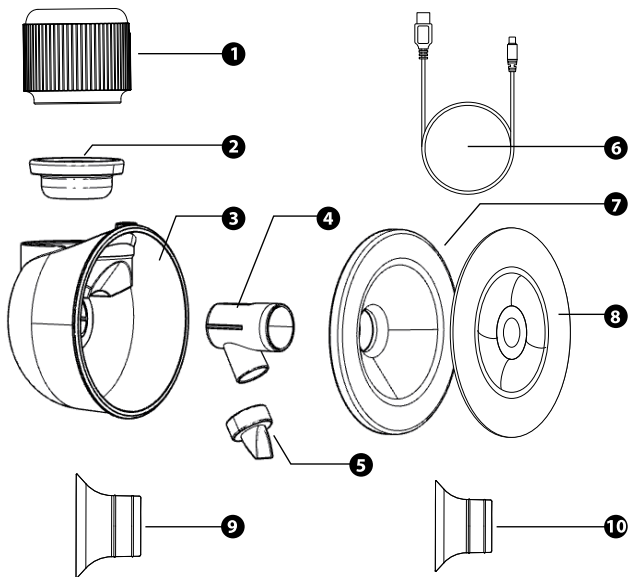

NO.	NAME	MATERIAL	QUANTITY
1	Main unit	\	1
2	Silicone diaphragm	Silicone	1
3	Cup body	Polypropylene	1
4	Connector	Polypropylene	1
5	Valve	Silicone	1
6	USB cable	\	1
7	Silicone breast shield	Silicone	1
8	Dust-proof cover	Polypropylene	1
9	22mm silicone insert	Silicone	1
10	20mm silicone insert	Silicone	1

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the valve into the connector and ensure a tight fit.
2. Attach the connector to the cup body.
3. Place the silicone diaphragm on top of the cup body and press down until sealed on all sides.
4. Fit the silicone breast shield securely on the cup body.
5. Attach the main unit to the silicone diaphragm until it clicks.

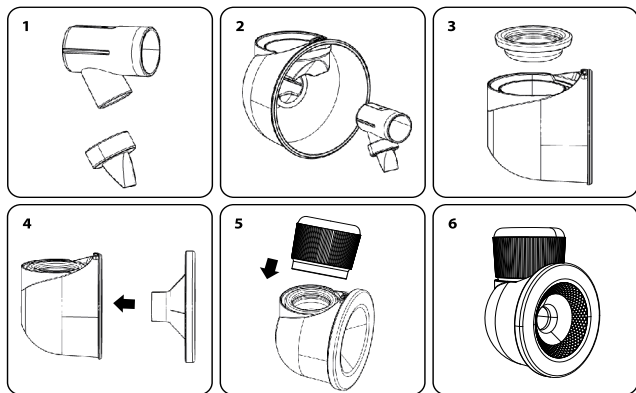


CHARGING METHOD

USE THE PROVIDED USB CABLE TO CHARGE THE PUMP:

- Compatible with: computer USB ports, power adapters, or power banks.
- Use only power banks with an output not exceeding **5V/3A**.
- The LED battery icon indicates charging status:
 - If the symbol **(B6)** is flashing the device is charging
 - If the symbol is not flashing and ON the device is fully charged

NOTE: Always turn off the pump before charging.

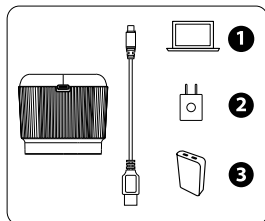

DESCRIPTION OF PANEL

A1: Power button (Press and hold to turn ON/OFF)

A2: Decrease Suction Level

A3: Increase Suction Level

A4: Phase Switch (Stimulation / Expression / Anti-stasis / Correction)

A5: Pause/Continue

B1: Stimulation Phase Indicator

B2: Expression Phase Indicator

B3: Anti-stasis Phase Indicator


B4: Correction phase indicator

B5: Working Level / Time Display

B6: Battery Level Indicator

B7: Time Unit Display (minutes)

B1+B3: NipFit® function activated

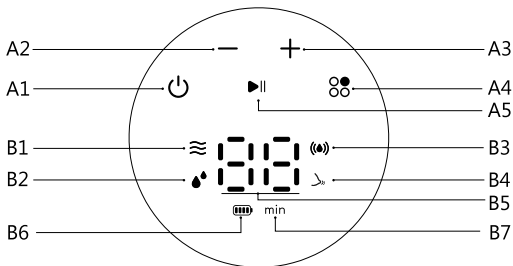

STIMULATION PHASE (LEVEL 1~9): In this phase, the pump generates a relatively fast suction rhythm with low suction power. It is designed to gently stimulate the breast tissue and promote milk ejection by imitating the initial shallow sucking behavior of a baby. It is recommended to use this phase before switching to other phases.




EXPRESSION PHASE (LEVEL 1~9): This phase mimics the deeper and slower suction rhythm of a baby when actively drinking milk. The suction force is higher, and the frequency is slower compared to stimulation phase. This setting is intended to help extract milk more effectively once the let-down reflex has started.

ANTI-STASIS SUCTION PHASE (LEVEL 1~9): This phase provides a pulsating suction pattern aimed at thoroughly removing remaining milk in the breast after expression. Regular use may help prevent milk stasis, reduce the risk of clogged ducts, and maintain milk flow.

NIPFIT® FUNCTION: To activate the nipple correction function, press the mode button until the (B1) and (B3) icons start flashing. The function has 3 intensity levels.

OPERATING INSTRUCTIONS

- 1. PREPARATION:** Before using the Nuvita 1260W Materno Comfort, wash your hands thoroughly. Make sure that all components are clean and assembled correctly according to the Assembly Instructions. Avoid assembling the main unit and USB cable when cleaning.
- 2. POSITIONING:** Find a quiet and comfortable place to sit. Use a footrest if needed to maintain a relaxed, upright posture. Before pumping, you can gently stimulate your breasts with a warm towel to stimulate milk flow.
- 3. APPLICATION:** Center the silicone breast shield on your nipple and ensure it seals tightly around your breast with no air gaps. Hold the unit gently with one hand and support the breast with the other to keep it steady.

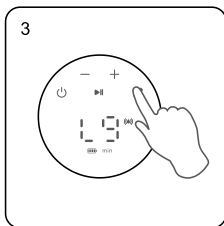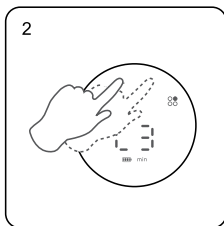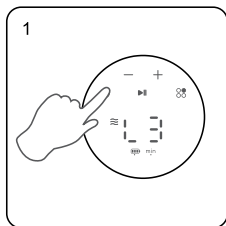

- 4. POWERING ON:** Press and hold the **(A1)** button to start the device. The ambient light will flash, and the screen will display the current suction level. The pump begins in **Stimulation Phase**.
- 5. ADJUSTING INTENSITY:** Use **(A2)** to decrease and **(A3)** to increase the suction level at any time during operation.
- 6. SWITCHING PHASES:** To change the working phase (Stimulation, Expression, Anti-stasis, Correction), press the **(A4)** button. The phase will switch in sequence, and the selected phase is confirmed by the corresponding indicator light.
- 7. PAUSE/CONTINUE:** To pause or resume operation, press the **(A5)** button.
- 8. ENDING THE SESSION:** When finished, press and hold the button to power off the device. Disconnect the unit and begin cleaning procedures.

NOTE: The device will automatically shut off after 30 minutes. It saves the last used phase and suction level for your next use.

CLEANING AND MAINTENANCE

A. BEFORE FIRST USE

Disassemble all washable parts and clean thoroughly (except the main unit and cable).

B. AFTER EACH USE

Disassemble and rinse all parts (excluding the main unit) in cold water to remove milk residue.

Parts to clean: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DAILY DISINFECTION

- Wash hands first.
- Separate all relevant parts.
- Use boiling water or steam sterilizer for **5 minutes**.
- **DO NOT** boil parts **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Parts **(3, 4, 8)** must not touch hot metal surfaces.

STORAGE: Air dry thoroughly and store in a clean, dry place.

PRECAUTIONS FOR CLEANING

- Disassemble all accessories that come into contact with breast or breast milk. (except main unit)
- After use, clean the parts immediately to avoid milk residue and bacterial growth.
- Ensure that you assemble/disassemble each accessory according to the assembly instructions.
- Do not lose any of the parts when assembling and disassembling
- All silicone components can be put into the sterilizer for disinfection (except the main unit).
- **Precautions for valve disinfection:** Do not boil and steam disinfect for a longer than 3 minutes.
- **Precautions for bottle disinfection:** Do not boil and steam disinfect for longer than 5 minutes.

PRODUCT SPECIFICATION

Input Voltage:	DC 5V
Rated Power:	6W
Operating temperature:	15~30°C
Operating humidity:	50% - 80%
Package Content:	11 parts
Place of Origin:	PRC

WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS

This product is covered by a 24-month warranty for manufacturing defects, starting from the date of purchase proven by receipt or invoice. In case of purchase with invoice, the legal warranty is reduced to 12 months. The 24-month warranty **does not include** damage resulting from normal wear and tear of the product, aesthetic damage, accessories or consumables (for example batteries, heads or components subject to wear). **Batteries are guaranteed for a period of 6 months.**

INVALID WARRANTY

The 12/24-month legal warranty lapses in the following cases:

1. The product has been damaged due to improper use not in accordance with the instructions in the manual.
2. The product has been modified, tampered with or opened.
3. The malfunction is caused by insufficient maintenance of the components, accessories or supplies (e.g. oxidation, immersion of electrical parts in liquids, residues blocking the sensor, leakage of corrosive liquid from the batteries).

WARRANTY EXCLUSIONS

The following are excluded from the 24-month legal warranty:

1. The costs for the replacement or repair of parts subject to wear and those relating to ordinary maintenance of the product.
2. The costs and risks associated with transporting the product to and from the point of sale or the authorised centre for warranty management.
3. Damage resulting from incorrect installation or improper use not in accordance with the instructions in the manual.
4. Damage caused by natural disasters, falls, accidental impacts or environmental conditions incompatible with the product.
5. Defects that have a negligible impact on product performance.

LIMITATIONS OF LIABILITY:

The manufacturer, distributor and all parties involved in the sale of the product are not responsible for economic losses or damages resulting from the malfunction of the product. In accordance with the current legislation, they are not liable for direct, indirect, loss of income, savings or other consequences resulting from the use or inability to use the product and/or associated documentation (paper or electronic), including the lack of service.

For further details on the assistance service, please consult the Conditions of Sale available on the website **www.nuvitababy.com**.

Vielen Dank für den Kauf der tragbaren elektrischen Milchpumpe Nuvita 1260W. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE VOS ENFANTS, TOUT LE CONTENU DE CE PRODUIT CONCERNE LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ VOUS Y CONFORMER.

AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas le tire-lait sous la douche ou dans un environnement humide.
2. Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux.
3. Évitez l'exposition directe au soleil et aux températures élevées.
4. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé. Contactez le fabricant ou un réparateur agréé.
5. Gardez les pièces usagées hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

DANGER

1. Ne chargez pas et n'utilisez pas le produit près d'une flamme nue ou dans un environnement à plus de 45°C.
2. Ne plongez pas l'appareil principal ou le câble USB dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne jetez pas l'unité principale au feu.
4. Tenez les sacs plastiques hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'asphyxie.

REMARQUE

- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation.
- Assemblez toujours les composants selon les instructions.
- Réglez la puissance d'aspiration selon votre confort et tolérance.
- Ne penchez pas l'appareil ni ne dépassez la capacité maximale.
- Vérifiez toujours la température du lait avant de nourrir.
- Si vous avez une faible production de lait, utilisez l'appareil sous avis médical.
- Ne pas surutiliser l'appareil pour éviter les blessures aux mamelons.
- Arrêtez l'utilisation et consultez un professionnel de santé si vous ressentez une douleur ou une irritation.
- Ne partagez pas les composants en contact avec le lait.
- Ne pas utiliser pendant la grossesse car cela peut provoquer des contractions.
- Arrêtez l'extraction si aucun lait n'est exprimé après 5 minutes.

- Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans le manuel.

INFORMATIONS

Le Nuvita 1260W Materno Comfort est conçu pour accompagner les mamans pendant l'allaitement en imitant le rythme de succion naturel du bébé. Ce tire-lait électrique portable et mains libres est spécifiquement pensé pour vous permettre de tirer votre lait de manière efficace et confortable, même en déplacement, vous garantissant ainsi une expérience pratique et sans douleur. Il dispose de 9 niveaux d'intensité réglables, de la fonction NipFit® et de la technologie Careflo® à 3 phases.



DE CORRECTION

La correction est conçue pour traiter les mamelons plats ou ombiliqués grâce à des cycles d'aspiration douce.



COUPELLE EN SILICONE DOUCE POUR LA PEAU

Dotée d'une coupelle en silicone souple de 24 mm qui s'adapte délicatement au sein pour un ajustement sûr et confortable.



SYSTÈME ANTI-RETOUR

Empêche le lait de refluer vers le moteur, garantissant hygiène et longévité du produit.

TECHNOLOGIE CAREFLO® :

Contrairement aux tire-lait traditionnels à 2 phases, le système Careflo® intègre une troisième phase de drainage anti-stase en plus des étapes habituelles de stimulation et d'expression. Cela permet de :

- Favoriser une production de lait plus régulière.
- Prévenir les engorgements et les mastites.
- Soulager la tension mammaire et la sensation de seins lourds.
- Assurer un allaitement plus serein et sans interruption.



FONCTION NIPFIT® :

Correction des mamelons plats ou ombiliqués.

Cette fonction est conçue pour corriger les mamelons plats ou ombiliqués et favoriser l'extraction du lait grâce à une stimulation douce et progressive :

- Elle aide le mamelon à ressortir.
- Elle facilite la prise du sein par le bébé.
- Elle soutient l'initiation et la poursuite de l'allaitement.



CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas la fonction NipFit® si :

1. Vous avez des plaies ouvertes, des crevasses, des lésions ou une infection active au niveau du mamelon ou de l'aréole.
2. Vous avez subi une intervention chirurgicale mammaire récemment.
3. Vous souffrez d'une inversion du mamelon diagnostiquée, d'origine pathologique ou traumatique, et non congénitale. Dans ce cas, consultez d'abord votre médecin.
4. Vous ressentez une douleur aiguë dès la première application. Arrêtez immédiatement l'utilisation.
5. Vous avez la peau particulièrement sensible ou souffrez d'affections dermatologiques localisées, telles que l'eczéma ou le psoriasis.
6. Vous êtes enceinte. L'aspiration peut provoquer des contractions.



AVERTISSEMENT

Le dispositif NipFit® est conçu exclusivement pour un usage post-partum. Ne pas utiliser pendant la grossesse.


AVERTISSEMENTS LORS DE L'UTILISATION

- Commencez toujours par le niveau le plus bas, le niveau 1. N'augmentez pas l'intensité tant que le mamelon ne s'est pas progressivement adapté, même si la sensation est agréable.
- N'utilisez pas la fonction NipFit® pendant plus de 5 à 10 minutes d'affilée par séance, surtout pendant les premières semaines.
- Ne faites pas plus de 2 séances de correction par jour. Une utilisation excessive peut provoquer une irritation, un gonflement ou des micro-déchirures du mamelon.
- Cessez immédiatement l'utilisation en cas de douleur aiguë, de rougeur anormale, de gonflement persistant, d'ampoules ou d'écoulement d'un liquide autre que du lait.
- Cet appareil n'est pas un dispositif médical certifié pour un usage clinique et ne remplace pas la consultation d'une sage-femme, d'un médecin ou d'une consultante en lactation certifiée IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant).
- Un mamelon ombiliqué de grade 3 (mamelon adhérent sévère) nécessite une évaluation médicale avant l'utilisation de tout appareil de correction.
- Une utilisation prolongée et intense peut provoquer un gonflement de l'aréole, rendant temporairement la prise du sein plus difficile pour le bébé. Cela peut avoir l'effet inverse de celui recherché.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:

- Avant d'activer la fonction NipFit®, assurez-vous que la ventouse en silicone est de la bonne taille, y compris la collerette de 24 mm ou les réducteurs de 20/22 mm. Une ventouse trop grande peut amplifier la succion sur l'aréole de manière incontrôlée.
- Avant la séance, appliquez quelques gouttes de lait maternel ou de crème à la lanoline pure pour assouplir la zone.
- Pendant la séance NipFit®, le mamelon doit être centré dans la ventouse. Un mauvais positionnement peut entraîner une succion asymétrique et des irritations.
- Si vous ne constatez aucune amélioration après 4 à 6 semaines d'utilisation correcte, consultez un professionnel de santé.


COMPOSANTS DU PRODUIT

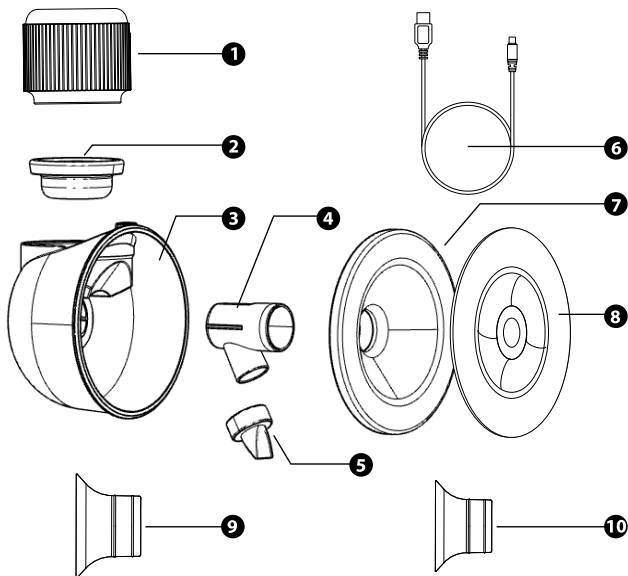

NO.	NOM	MATÉRIAU	QUANTITÉ
1	Unité principale	\	1
2	Membrane en silicone	Silicone	1
3	Corps de la coupelle	Polypropylène	1
4	Connecteur	Polypropylène	1
5	Valve	Silicone	1
6	Câble USB	\	1
7	Coquille mammaire en silicone	Silicone	1
8	Couvercle anti-poussière	Polypropylène	1
9	Insert en silicone de 22 mm	Silicone	1
10	Insert en silicone de 20 mm	Silicone	1

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


1. Insérez la valve dans le connecteur et assurez-vous qu'elle est bien fixée.
2. Fixez le connecteur au corps de la coupelle.
3. Placez la membrane en silicone sur le corps de la coupelle et appuyez jusqu'à ce qu'elle soit bien scellée de tous les côtés.
4. Fixez solidement la tétérille en silicone sur le corps de la coupelle.
5. Fixez l'unité principale à la membrane en silicone jusqu'à entendre un clic.

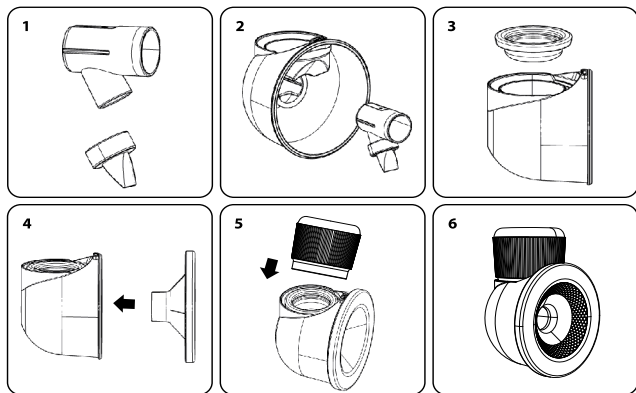

MÉTHODE DE CHARGEMENT

UTILISEZ LE CÂBLE USB FOURNI POUR RECHARGER LE TIRE-LAIT :

- Compatible avec : ports USB d'ordinateur, adaptateurs secteur ou batteries externes.
- Utilisez uniquement des batteries externes avec une sortie ne dépassant pas **5V/3A**.
- L'icône LED de la batterie indique l'état de charge :
 - Si le symbole **(B6)** clignote, l'appareil est en cours de chargement.
 - Si le symbole reste allumé sans clignoter, l'appareil est complètement chargé.

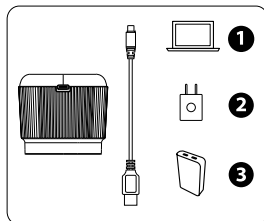

REMARQUE: Éteignez toujours le tire-lait avant de le charger.

DESCRIPTION DU PANNEAU

A1: Bouton d'alimentation (Appuyez longuement pour allumer/éteindre)

A2: Diminuer le niveau d'aspiration

A3: Augmenter le niveau d'aspiration

A4: Sélecteur de phase (Stimulation / Expression / Antistase / Correction)

A5: Pause / Reprendre

B1: Indicateur du phase Stimulation

B2: Indicateur du phase Expression

B3: Indicateur du phase Antistase


B4: Indicateur du phase Correction

B5: Niveau de fonctionnement / Affichage du temps

B6: Indicateur du niveau de batterie

B7: Affichage de l'unité de temps (minutes)

B1+B3: Fonction NipFit® activée

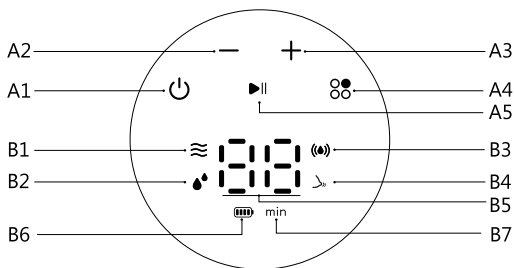

PHASE STIMULATION (NIVEAU 1~9) : Ce phase génère un rythme de succion rapide avec une faible puissance. Il est conçu pour stimuler doucement la poitrine et favoriser l'éjection du lait en imitant la succion initiale superficielle du bébé. Il est recommandé de l'utiliser avant les autres phases.


PHASE EXPRESSION (NIVEAU 1~9) : Ce phase imite la succion plus lente et plus profonde d'un bébé qui boit activement. La force de succion est plus élevée et la fréquence plus faible que dans le phase stimulation. Il aide à extraire le lait plus efficacement après le réflexe d'éjection.

PHASE ANTI-STASE (NIVEAU 1~9) : Fournit une succion pulsée pour éliminer le lait restant dans le sein. Une utilisation régulière peut aider à prévenir la stase lactée, réduire le risque de canaux bouchés et maintenir le flux de lait.

FONCTION NIPFIT® : Pour activer la fonction de correction des mamelons, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que les icônes (B1) et (B3) clignotent. Cette fonction propose 3 niveaux d'intensité.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1. PRÉPARATION:** Avant d'utiliser le Nuvita 1260W Materno Comfort, lavez-vous soigneusement les mains. Assurez-vous que tous les composants sont propres et correctement assemblés conformément aux instructions. N'assemblez pas l'unité principale et le câble USB pendant le nettoyage.
- 2. POSITIONNEMENT:** Installez-vous dans un endroit calme et confortable. Utilisez un repose-pieds si nécessaire pour adopter une posture droite et détendue. Avant le pompage, vous pouvez masser doucement vos seins avec une serviette chaude pour stimuler l'écoulement du lait.
- 3. APPLICATION:** Placez l'embout en silicone sur le mamelon et assurez-vous qu'il scelle correctement sans espace d'air. Tenez l'appareil avec une main et soutenez le sein avec

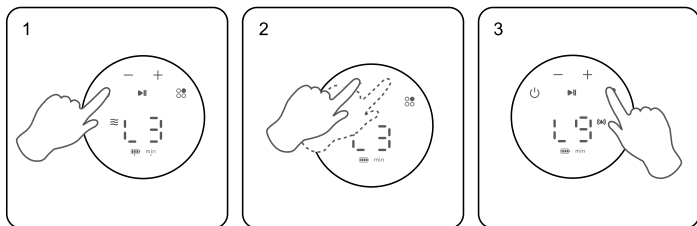

l'autre.

- 4. MISE EN MARCHÉ:** Appuyez longuement sur le bouton **(A1)** pour démarrer l'appareil. La lumière ambiante clignotera et l'écran affichera le niveau de succion actuel. L'appareil démarre en **Phase Stimulation**.
- 5. RÉGLAGE DE LA INTENSITA:** Utilisez **(A2)** pour diminuer et **(A3)** pour augmenter le niveau de succion à tout moment.
- 6. CHANGEMENT DE PHASE:** Pour changer de phase (Stimulation, Expression, Antistase, Correction), appuyez sur le bouton **(A4)**. Le phase change en séquence, confirmé par le voyant lumineux correspondant.
- 7. PAUSE/REPRISE:** Pour mettre en pause ou reprendre, appuyez sur le bouton **(A5)**.
- 8. FIN DE LA SESSION:** Lorsque vous avez terminé, maintenez le bouton enfoncé pour éteindre l'appareil. Débranchez-le et commencez le nettoyage.

REMARQUE: L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes. Il mémorise le dernier phase et niveau de succion utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

A. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Démontez toutes les pièces lavables et nettoyez-les soigneusement (sauf l'unité principale et le câble).

B. APRÈS CHAQUE UTILISATION

Démontez et rincez toutes les pièces (sauf l'unité principale) à l'eau froide pour enlever les résidus de lait. **Pièces à nettoyer: (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10).**

C. DÉSINFECTION QUOTIDIENNE

- Se laver les mains avant.
- Séparer toutes les pièces concernées.
- Utiliser de l'eau bouillante ou un stérilisateur vapeur pendant 5 minutes.
- **NE PAS** faire bouillir les pièces **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Les pièces **(3, 4, 8)** ne doivent pas toucher les surfaces métalliques chaudes.

STOCKAGE: Sécher à l'air libre et conserver dans un endroit propre et sec.

PRÉCAUTIONS DE NETTOYAGE

- Démontez tous les accessoires en contact avec le sein ou le lait maternel (sauf l'unité principale).
- Nettoyez immédiatement après usage pour éviter les résidus de lait et la prolifération bactérienne.
- Suivez les instructions pour l'assemblage/démontage de chaque accessoire.
- Ne perdez aucune pièce.
- Tous les composants en silicone peuvent être stérilisés (sauf l'unité principale).
- **Soupapes:** ne pas bouillir ou stériliser plus de 3 minutes.
- **Biberons:** ne pas bouillir ou stériliser plus de 5 minutes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée:	DC 5V
Puissance nominale:	6W
Température de fonctionnement:	15~30°C
Humidité de fonctionnement:	50% - 80%
Contenu de l'emballage:	11 parties
Pays d'origine:	Chine

GARANTIE – TERMES ET CONDITIONS

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication, à compter de la date d'achat prouvée par reçu ou facture. En cas d'achat avec facture, la garantie légale est réduite à 12 mois. La garantie de 24 mois **ne couvre pas** les dommages résultant de l'usure normale du produit, les dommages esthétiques, les accessoires ou les consommables (par exemple les batteries, les têtes ou les composants sujets à usure). **Les batteries sont garanties pour une durée de 6 mois.**

ANNULATION DE LA GARANTIE

La garantie légale de 12/24 mois expire dans les cas suivants :

1. Le produit a été endommagé en raison d'une utilisation inappropriée et non conforme aux instructions du manuel.
2. Le produit a été modifié, altéré ou ouvert.
3. Le dysfonctionnement est dû à un entretien insuffisant des composants, accessoires ou fournitures (par exemple, oxydation, immersion de pièces électriques dans des liquides, résidus bloquant le capteur, fuite de liquide corrosif des batteries).

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Sont exclus de la garantie légale de 24 mois :

1. Les frais de remplacement ou de réparation des pièces d'usure et ceux relatifs à l'entretien ordinaire du produit.
2. Les coûts et risques liés au transport du produit vers et depuis le point de vente ou le centre agréé de gestion de la garantie.
3. Dommages résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux instructions du manuel.
4. Dommages causés par des catastrophes naturelles, des chutes, des chocs accidentels ou des conditions environnementales incompatibles avec le produit.
5. Défauts ayant un impact négligeable sur les performances du produit.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ :

Le fabricant, le distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente du produit ne sont pas responsables des pertes économiques ou des dommages résultant du dysfonctionnement du produit. Conformément à la législation applicable, ils ne sont pas responsables des dommages directs ou indirects, de la perte de revenus, d'économies ou d'autres conséquences découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou la documentation associée (papier ou électronique), y compris le manque de service.

Pour plus de détails sur le service d'assistance, veuillez consulter les Conditions de Vente disponibles sur le site **www.nuvitababy.com**.

Thank you for purchasing the Nuvita 1260W Wearable Electric Breast Pump. Please read the manual carefully before use and keep it for future reference.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ZUM SCHUTZ IHRER UND DER GESUNDHEIT IHRER KINDER SIND ALLE INHALTE DIESES PRODUKTS AUF SICHERHEIT AUSGERICHTET. BITTE HALTEN SIE SICH DARAN.

WARNUNG

1. Verwenden Sie die Milchpumpe nicht beim Baden oder in feuchten Umgebungen.
2. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
3. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Kontaktieren Sie den Hersteller oder autorisiertes Personal.
5. Bewahren Sie gebrauchte Teile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

GEFAHR

1. Laden oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe offener Flammen oder in Umgebungen mit Temperaturen über 45 °C.
2. Tauchen Sie das Hauptgerät oder das USB-Kabel nicht in Wasser, Getränke oder andere Flüssigkeiten.
3. Verbrennen Sie das Hauptgerät niemals und setzen Sie es keinen offenen Flammen aus.
4. Halten Sie Plastikverpackungen von Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

NOTICE

- Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Bauen Sie die Komponenten immer gemäß der Montageanleitung zusammen.
- Passen Sie die Saugstärke nach Komfort und persönlicher Toleranz an.
- Neigen oder überfüllen Sie den Milchbehälter nicht über die maximale Füllmenge.
- Überprüfen Sie stets die Temperatur der Milch vor dem Füttern.
- Bei geringer Milchmenge nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Verwenden Sie die Pumpe nicht übermäßig, um Verletzungen an den Brustwarzen zu vermeiden.
- Brechen Sie die Nutzung ab und suchen Sie medizinischen Rat bei Schmerzen oder Reizungen.
- Teilen Sie keine Teile, die mit Milch in Kontakt kommen.

- Verwenden Sie die Pumpe nicht während der Schwangerschaft, da dies Wehen auslösen kann.
- Beenden Sie das Abpumpen, wenn nach 5 Minuten keine Milch kommt.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie im Handbuch beschrieben.

INFORMATIONEN

Der Nuvita 1260W Materno Comfort wurde entwickelt, um stillende Mütter optimal zu unterstützen, indem er den natürlichen Saugrhythmus des Babys imitiert. Diese tragbare elektrische Milchpumpe wurde speziell für das effiziente und komfortable Abpumpen von Muttermilch von unterwegs entwickelt – für ein schmerzfreies und angenehmes Anwendungserlebnis. Sie verfügt über 9 einstellbare Intensitätsstufen, die NipFit®-Funktion sowie die 3-Phasen-Careflo®-Technologie.



KORREKTUR

Die Korrektur hilft bei der Behandlung von Hohl- oder Flachwarzen durch sanfte Saugzyklen.



HAUTFREUNDLICHER SILIKON-BRUSTAUFSATZ

Ausgestattet mit einem 24 mm Silikonaufsatz, der sich sanft an die Brust anpasst und für sicheren und bequemen Sitz sorgt.



ANTI-RÜCKFLUSS-SYSTEM

Verhindert den Rückfluss der Milch in den Motor, sorgt für Hygiene und verlängert die Lebensdauer des Produkts.



CAREFLO®-TECHNOLOGIE:

Im Gegensatz zu herkömmlichen 2-Phasen-Milchpumpen bietet Careflo® neben der üblichen Stimulations- und Abpumpphase eine dritte Phase:

- Das entlastende Entleeren zur Vermeidung von Milchstau.
- Dies hilft: Eine gleichmäßigere Milchbildung zu fördern.
- Milchstau und Brustdrüsenentzündungen (Mastitis) vorzubeugen. Spannungsgefühle und schmerzhaft pralle Brüste zu entlasten.
- Eine harmonische, ununterbrochene Stillzeit zu unterstützen.



NIPFIT®-FUNKTION:

Korrektur von Flach- oder Hohlwarzen.

Diese Funktion dient der Korrektur von Flach- oder Hohlwarzen und unterstützt die Milchbildung durch sanfte, progressive Stimulation:

- Sie hilft der Brustwarze, sich nach außen zu wölben.
- Sie erleichtert dem Baby das Anlegen an die Brust.
- Sie unterstützt den Beginn und die Fortsetzung des Stillens.

KONTRAINDIKATIONEN

Verwenden Sie die NipFit®-Funktion nicht, wenn:

1. Sie offene Wunden, Risse, Läsionen oder aktive Infektionen an Ihrer Brustwarze oder Ihrem Warzenhof haben.
2. Sie sich kürzlich einer Brustoperation unterzogen haben.
3. Bei Ihnen eine diagnostizierte, durch Krankheit oder Trauma bedingte, nicht angeborene Brustwarzenretraktion vorliegt. Konsultieren Sie in diesem Fall bitte zuerst Ihren Arzt/Ihre Ärztin.
4. Sie bei der ersten Anwendung starke Schmerzen verspüren. Brechen Sie die Anwendung sofort ab.
5. Sie besonders empfindliche Haut haben oder an lokalen Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Psoriasis leiden.
6. Sie schwanger sind. Das Saugen kann Wehen auslösen.



WARNUNG

Die NipFit®-Funktion ist ausschließlich für die Anwendung nach der Geburt bestimmt. Nicht während der Schwangerschaft anwenden.


WARNHINWEISE WÄHREND DER VERWENDUNG

- Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe, Stufe 1. Erhöhen Sie die Intensität erst, wenn sich die Brustwarze allmählich daran gewöhnt hat, auch wenn sich das Gefühl angenehm anfühlt.
- Verwenden Sie die NipFit®-Funktion nicht länger als 5–10 Minuten pro Anwendung, insbesondere in den ersten Wochen.
- Führen Sie nicht mehr als zwei Korrekturanwendungen pro Tag durch. Übermäßige Anwendung kann zu Reizungen, Schwellungen oder Mikroverletzungen der Brustwarze führen.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie starke Schmerzen, ungewöhnliche Rötungen, anhaltende Schwellungen, Blasenbildung oder den Austritt von Flüssigkeiten außer Milch bemerken.
- Dieses Gerät ist kein zugelassenes Medizinprodukt für die klinische Therapie und ersetzt nicht die Beratung durch eine Hebamme, einen Arzt oder eine international zertifizierte Stillberaterin (IBCLC).
- Bei einer stark verklebten Hohlwarze (Grad 3) ist vor der Anwendung eines Korrekturgeräts eine ärztliche Untersuchung erforderlich.
- Längere, intensive Anwendung kann zu Schwellungen des Warzenhofs führen und das Anlegen für das Baby vorübergehend erschweren. Dies kann den gegenteiligen Effekt zum gewünschten Ergebnis haben.

HINWEISE ZUR SICHEREN ANWENDUNG:

- Stellen Sie vor der Aktivierung der NipFit®-Funktion sicher, dass die Silikon-Brustwarze die richtige Größe hat, einschließlich des 24-mm-Flansches oder der 20/22-mm-Reduzierstücke. Eine zu große Brustwarze kann den Sog auf die Brustwarze unkontrolliert verstärken.
- Tragen Sie vor der Anwendung einige Tropfen Muttermilch oder reine Lanolincreme auf, um die Haut zu beruhigen.
- Während der NipFit®-Anwendung sollte die Brustwarze mittig in der Brustwarze positioniert sein.
- Eine falsche Position kann zu ungleichmäßigem Sog und Hautreizungen führen.
- Wenn Sie nach 4–6 Wochen korrekter Anwendung keine Besserung feststellen, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachkraft.


PRODUKTBESTANDTEILE

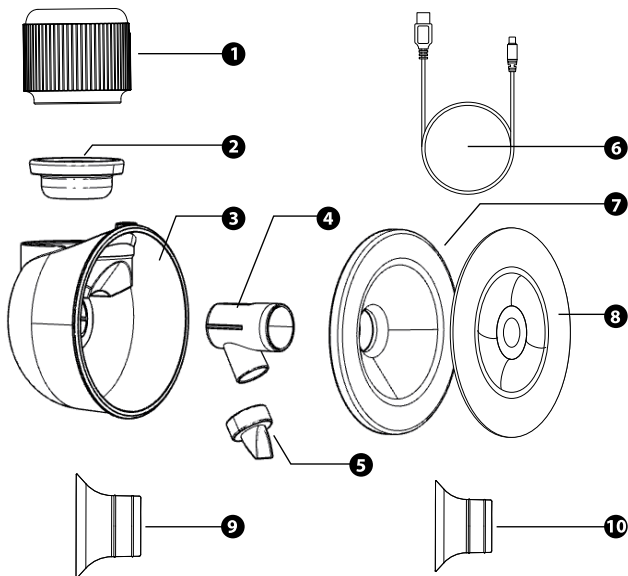

NO.	NAME	MATERIAL	MENGE
1	Haupteinheit	\	1
2	Silikonmembran	Silikon	1
3	Behälter	Polypropylen	1
4	Verbindungsteil	Polypropylen	1
5	Ventil	Silikon	1
6	USB-Kabel	\	1
7	Brusthaube aus Silikon	Silikon	1
8	Staubschutzdeckel	Polypropylen	1
9	22 mm Silikoneinsatz	Silikon	1
10	20 mm Silikoneinsatz	Silikon	1

MONTAGEANLEITUNG


1. Setzen Sie das Ventil in den Verbindung ein und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
2. Befestigen Sie den Verbindung am Becherkörper.
3. Legen Sie die Silikonmembran auf den Becherkörper und drücken Sie sie fest, bis sie rundum abdichtet.
4. Bringen Sie den Silikon-Brustaufsatz sicher am Becherkörper an.
5. Befestigen Sie die Haupteinheit an der Silikonmembran, bis ein Klick zu hören ist.

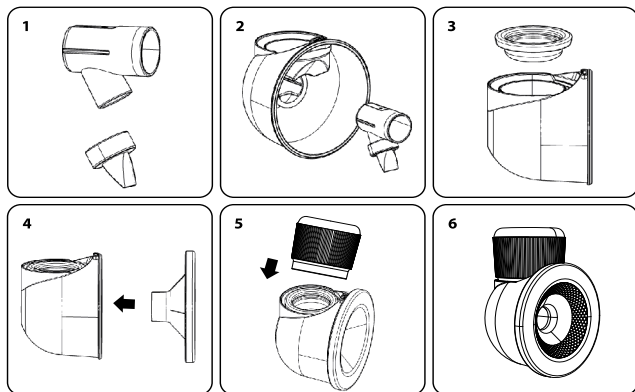

LADEMETHODE

VERWENDEN SIE DAS MITGELIEFERTE USB-KABEL, UM DIE PUMPE ZU LADEN:

- Kompatibel mit: USB-Anschlüssen am Computer, Netzteilen oder Powerbanks.
- Verwenden Sie nur Powerbanks mit einer Ausgangsleistung von maximal **5V/3A**.
- Die LED-Batterieanzeige zeigt den Ladezustand an:
 - Wenn das Symbol **(B6)** blinkt, wird das Gerät geladen.
 - Wenn das Symbol leuchtet und nicht blinkt, ist das Gerät vollständig geladen.

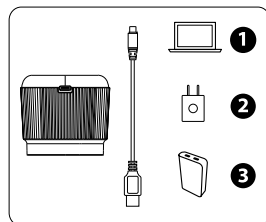

HINWEIS: Schalten Sie die Pumpe vor dem Laden immer aus.

BESCHREIBUNG DES PANELS

A1: Ein-/Ausschalter (Zum Ein-/Ausschalten gedrückt halten)

A2: Saugstärke verringern

A3: Saugstärke erhöhen

A4: Modus wechseln (Stimulation / Abpumpen / Antistau / Korrektur)

A5: Pause / Fortsetzen

B1: Anzeige für Stimulation-Modus

B2: Anzeige für Abpump-Modus

B3: Anzeige für Antistau-Modus


B4: Anzeige für Korrekturmodus

B5: Arbeitsstufe / Zeitanzeige

B6: Batterieanzeige

B7: Anzeige der Zeiteinheit (Minuten)

B1+B3: NipFit®-Funktion aktiviert

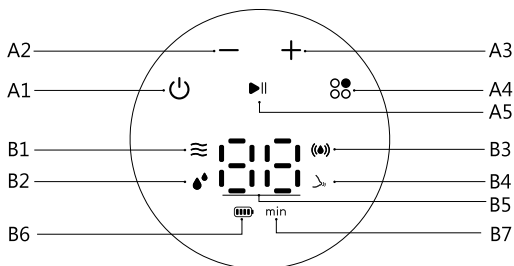

STIMULATIONSMODUS (STUFE 1~9): In diesem Modus erzeugt die Pumpe einen relativ schnellen Saugzyklus mit geringer Saugkraft. Sie soll den Milchfluss durch sanfte Stimulation fördern und das anfängliche Saugen eines Babys imitieren. Empfohlen vor dem Wechsel in andere Modi.

ABPUMPMODUS (STUFE 1~9): Dieser Modus imitiert das tiefere und langsamere Saugen eines Babys beim Trinken. Die Saugkraft ist stärker, die Frequenz langsamer als im Stimulationmodus. Unterstützt effektives Abpumpen nach dem Milchspendereflex.

ANTI-STAU-MODUS (STUFE 1~9): Bietet ein pulsierendes Saugmuster zur gründlichen Entfernung von Restmilch. Regelmäßige Anwendung kann Milchstau verhindern, verstopfte Milchkanäle reduzieren und den Milchfluss fördern.


NIPFIT®-FUNKTION: Um die Brustwarzenkorrekturfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Modustaste, bis die Symbole (B1) und (B3) blinken. Die Funktion verfügt über 3 Intensitätsstufen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG: Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie den Nuvita 1260W Materno Comfort verwenden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und gemäß den Montageanweisungen korrekt zusammengebaut sind. Bauen Sie das Hauptgerät und das USB-Kabel während der Reinigung nicht zusammen.

POSITIONIERUNG: Suchen Sie sich einen ruhigen und bequemen Platz zum Sitzen. Verwenden Sie bei Bedarf eine Fußstütze für eine entspannte, aufrechte Haltung. Vor dem Abpumpen können Sie die Brust mit einem warmen Handtuch massieren, um den Milchfluss anzuregen.

ANWENDUNG: Zentrieren Sie die Silikonbrusthaube auf der Brustwarze und stellen Sie sicher, dass sie dicht anliegt, ohne Luftspalte. Halten Sie das Gerät mit einer Hand und stützen Sie die Brust mit der anderen.

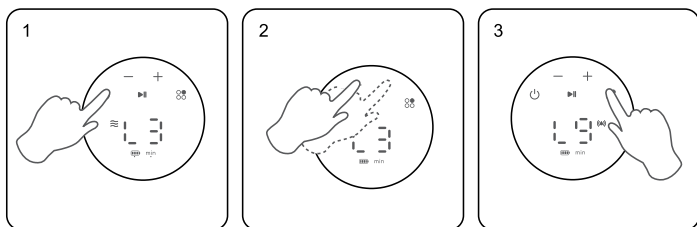

EINSCHALTEN: Drücken und halten Sie die **(A1)**-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Umgebungslicht blinkt und das Display zeigt den aktuellen Saugpegel an. Das Gerät startet im **Stimulation-Modus**.

SAUGSTÄRKE EINSTELLEN: Verwenden Sie **(A2)** zum Verringern und **(A3)** zum Erhöhen der Saugstärke.

MODUSWECHSEL: Zum Wechseln des Modus (Stimulation, Expression, Anti-Stase, Korrektur) drücken Sie die **(A4)**-Taste. Die Modi wechseln in Reihenfolge und werden durch ein entsprechendes Lämpchen bestätigt.

PAUSE/FORTSETZEN: Zum Pausieren oder Fortsetzen drücken Sie die **(A5)**-Taste.

BEENDEN DER SITZUNG: Zum Ausschalten die Taste gedrückt halten. Gerät trennen und mit der Reinigung beginnen.

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus. Es speichert den zuletzt verwendeten Modus und Saugpegel.

REINIGUNG UND WARTUNG

A. VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Zerlegen Sie alle waschbaren Teile und reinigen Sie sie gründlich (außer dem Hauptgerät und Kabel).

B. NACH JEDEM GEBRAUCH

Zerlegen und spülen Sie alle Teile (außer dem Hauptgerät) mit kaltem Wasser ab, um Milchreste zu entfernen. ZU REINIGENDE TEILE: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. TÄGLICHE DESINFEKTION

Hände waschen.

Alle relevanten Teile trennen.

Mit kochendem Wasser oder Dampf für 5 Minuten desinfizieren.

Teile **(2, 5, 7, 9, 10)** NICHT abkochen.

Teile **(3, 4, 8)** dürfen keine heißen Metallflächen berühren.

AUFBEWAHRUNG: Gut an der Luft trocknen lassen und an einem sauberen, trockenen Ort lagern.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR REINIGUNG

- Zerlegen Sie alle Teile, die mit Brust oder Milch in Kontakt kommen (außer dem Hauptgerät).
- Reinigen Sie alle Teile sofort nach Gebrauch, um Milchreste und Bakterienwachstum zu vermeiden.
- Befolgen Sie die Montage-/Demontageanweisungen genau.
- Keine Teile verlieren.
- Silikonteile können sterilisiert werden (außer dem Hauptgerät).
- Ventile: Nicht länger als 3 Minuten abkochen oder dampfdesinfizieren.
- Flaschen: Nicht länger als 5 Minuten abkochen oder dampfdesinfizieren.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eingangsspannung:	DC 5V
Nennleistung:	6W
Betriebstemperatur:	15~30°C
Betriebsfeuchtigkeit:	50% - 80%
Verpackungsinhalt:	11 Einheiten
Herkunftsland:	PRC

GARANTIE - ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie auf Herstellungsfehler, beginnend ab dem durch Quittung oder Rechnung nachgewiesenen Kaufdatum. Beim Kauf auf Rechnung verkürzt sich die gesetzliche Gewährleistung auf 12 Monate. Von der 24-monatigen Garantie **ausgeschlossen sind** Schäden, die auf normale Abnutzung des Produkts, kosmetische Schäden, Zubehör oder Verbrauchsmaterialien (z. B. Batterien, Köpfe oder Verschleißteile) zurückzuführen sind. **Für Batterien gilt eine Garantie von 6 Monaten.**

ERLÖSCHEN DER GARANTIE

Die gesetzliche Garantie von 12/24 Monaten erlischt in den folgenden Fällen:

1. Das Produkt wurde durch unsachgemäßen Gebrauch, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht, beschädigt.
2. Das Produkt wurde verändert, manipuliert oder geöffnet.
3. Die Fehlfunktion ist auf eine unzureichende Wartung der Komponenten, Zubehörteile oder Verbrauchsmaterialien zurückzuführen (z. B. Oxidation, Eintauchen elektrischer Teile in Flüssigkeiten, Rückstände, die den Sensor blockieren, Austreten ätzender Flüssigkeit aus den Batterien).

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Von der 24-monatigen gesetzlichen Gewährleistung sind folgende Leistungen ausgeschlossen:

1. Die Kosten für den Ersatz oder die Reparatur von Verschleißteilen sowie die Kosten für die normale Wartung des Produkts.
2. Die Kosten und Risiken im Zusammenhang mit dem Transport des Produkts zur und von der Verkaufsstelle oder dem autorisierten Zentrum für das Garantiemanagement.
3. Schäden, die durch falsche Installation oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen, der nicht den Anweisungen im Handbuch entspricht.
4. Schäden, die durch Naturkatastrophen, Stürze, versehentliche Stöße oder mit dem Produkt unvereinbare Umweltbedingungen verursacht wurden.
5. Mängel, die einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Produktleistung haben.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN:

Der Hersteller, der Händler und alle am Verkauf des Produkts beteiligten Parteien haften nicht für wirtschaftliche Verluste oder Schäden, die aus einer Fehlfunktion des Produkts resultieren. Gemäß der geltenden Gesetzgebung haften sie nicht für direkte oder indirekte Schäden, Einkommensverluste, entgangene Einsparungen oder andere Folgen, die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts und/oder der zugehörigen Dokumentation (in Papierform oder elektronisch) ergeben, einschließlich mangelnder Serviceleistungen.

Weitere Einzelheiten zum Kundendienst finden Sie in den Verkaufsbedingungen auf der Website **www.nuvitababy.com**.

Obrigado por adquirir a bomba tira-leite elétrica vestível Nuvita 1260W. Leia atentamente o manual antes de usar e guarde-o para consultas futuras.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

PARA A SEGURANÇA E SAÚDE SUA E DOS SEUS FILHOS, TODO O CONTEÚDO DESTES PRODUTOS DIZ RESPEITO À SEGURANÇA. CERTIFIQUE-SE DE SEGUIR AS INSTRUÇÕES.

AVISOS

1. Não use a bomba tira-leite durante o banho ou em ambientes úmidos.
2. Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais.
3. Evite exposição direta à luz solar e altas temperaturas.
4. Não utilize o aparelho se estiver visivelmente danificado. Contacte o fabricante ou assistência técnica autorizada.
5. Mantenha as peças usadas fora do alcance das crianças para evitar engasgamento ou outros acidentes.

PERIGO

1. É proibido usar ou carregar o produto perto de chamas abertas ou em ambientes com temperatura superior a 45°C.
2. Não mergulhe a unidade principal ou o cabo USB em água, bebidas ou outros líquidos.
3. Não jogue a unidade principal no fogo nem a exponha a chamas abertas.
4. Mantenha as embalagens plásticas fora do alcance de crianças para evitar risco de sufocamento.

NOTA

- Carregue o dispositivo completamente antes do primeiro uso.
- Monte sempre os componentes conforme o Manual de Montagem.
- Ajuste a sucção com base no conforto e tolerância pessoal.
- Não incline ou encha demais o coletor de leite além do limite.
- Teste sempre a temperatura do leite antes de alimentar.
- Em caso de baixa produção de leite, use sob orientação médica.
- Não use a bomba em excesso para evitar lesões nos mamilos.
- Interrompa o uso e consulte um profissional de saúde se houver dor ou irritação.
- Não compartilhe componentes que entram em contato com o leite.
- Não utilize durante a gravidez, pois pode causar contrações uterinas.

- Pare de bombear se o leite não for extraído em 5 minutos.
- Use este produto apenas conforme descrito no manual.

INFORMAÇÕES

O Nuvita 1260W Materno Comfort foi desenvolvido para apoiar as mães durante a amamentação, imitando o ritmo natural de sucção do bebé. Esta bomba tira-leite elétrica e usável (mãos livres) foi pensada especificamente para extrair o leite materno de forma eficiente e confortável mesmo fora de casa, garantindo uma experiência prática e sem dor. Conta com 9 níveis de intensidade reguláveis, a função NipFit® e a tecnologia Careflo® de 3 fases.



CORREÇÃO

A correção ajuda a tratar mamilos invertidos ou planos através de ciclos de sucção suaves.



COPO DE SILICONE SUAVE PARA A PELE

Equipado com um copo de silicone macio de 24 mm que se adapta delicadamente ao seio para um encaixe seguro e confortável.



SISTEMA ANTI-RETORNO

Evita o refluxo do leite para o motor, garantindo higiene e prolongando a vida útil do produto.



TECNOLOGIA CAREFLO®:

Ao contrário das bombas tira-leite tradicionais de 2 fases, o sistema Careflo® introduz uma terceira fase de drenagem anticongestão, além das etapas habituais de estimulação e extração. Os seus benefícios incluem:

- Estimular uma produção de leite mais regular e constante.
- Prevenir a obstrução dos canais e a mastite.
- Aliviar a tensão e a sensação de peito cheio.
- Favorecer uma amamentação mais prolongada e sem interrupções.



FUNÇÃO NIPFIT®:

Correção de mamilos planos ou invertidos.

Esta função foi desenvolvida para ajudar a corrigir os mamilos planos ou invertidos e auxiliar na extração de leite através de uma estimulação suave e progressiva:

- Ajuda o mamilo a projetar-se para fora.
- Facilita a pega correta do bebé à mama.
- Auxilia no início e na continuidade da amamentação.

CONTRAINDICAÇÕES

Não utilize a funcionalidade NipFit® se:

1. Tem feridas abertas, fissuras, lesões ou infecções ativas no mamilo ou na aréola.
2. Fez cirurgia mamária recentemente.
3. Tem um diagnóstico de inversão do mamilo causada por doença ou trauma, e não congênita. Nesse caso, consulte primeiro o seu médico.
4. Sente dor aguda desde a primeira aplicação. Interrompa o uso imediatamente.
5. Tem uma pele particularmente sensível ou sofre de problemas dermatológicos locais, como eczema ou psoríase.
6. Está grávida. A sucção pode estimular as contrações.



AVISO

A funcionalidade NipFit® destina-se apenas ao uso pós-parto. Não utilize durante a gravidez.


AVISOS DURANTE A UTILIZAÇÃO

- Comece sempre no nível mais baixo, Nível 1. Não aumente a intensidade até que o mamilo se adapte gradualmente, mesmo que a sensação seja confortável.
- Não exceda 5 a 10 minutos de utilização contínua da funcionalidade NipFit® por sessão, especialmente nas primeiras semanas.
- Não realize mais de 2 sessões de correção por dia. O uso excessivo pode causar irritação, inchaço ou microlesões no mamilo.
- Interrompa imediatamente a utilização se sentir dor aguda, vermelhidão anormal, inchaço persistente, bolhas ou secreção de outro fluido que não seja leite.
- Este dispositivo não é um dispositivo médico certificado para terapia clínica e não substitui a consulta com uma parteira, médico ou Consultor Internacional de Lactação Certificado (IBCLC).
- Um mamilo invertido de Grau 3, severamente aderente, requer avaliação médica antes da utilização de qualquer dispositivo de correção.
- O uso prolongado e de alta intensidade pode provocar o inchaço da aréola, dificultando temporariamente a pega do bebé. Isto pode ter o efeito oposto ao desejado.

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA:

- Certifique-se de que o copo de silicone tem o tamanho correto, incluindo a flange de 24 mm ou os redutores de 20/22 mm, antes de ativar a funcionalidade NipFit®. Um copo demasiado grande pode amplificar a sucção na aréola de forma descontrolada.
- Antes da sessão, aplique algumas gotas de leite materno ou creme de lanolina pura para suavizar a zona.
- Durante a sessão NipFit®, o mamilo deve estar centrado no copo. Uma posição incorreta pode provocar sucção assimétrica e irritação.
- Se não notar melhorias após 4 a 6 semanas de utilização correta, consulte um profissional de saúde.


COMPONENTES DO PRODUTO

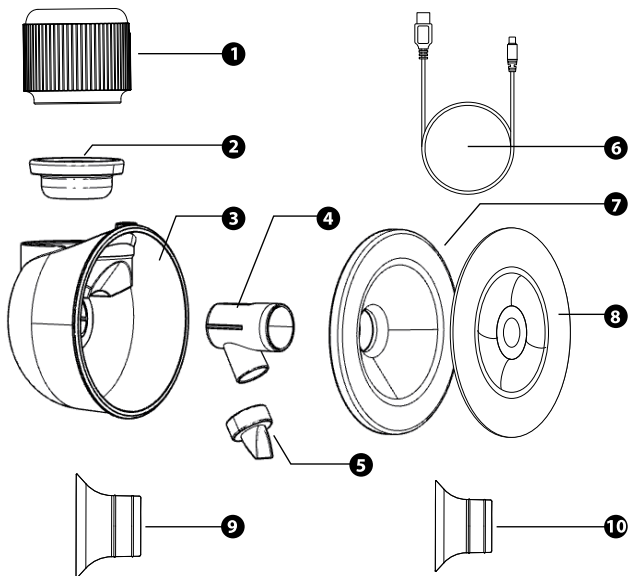

NO.	NOME	MATERIAL	QUANTIDADE
1	Unidade principal	\	1
2	Diafragma de silicone	Silicone	1
3	Corpo do copo	Polipropileno	1
4	Conector	Polipropileno	1
5	Válvula	Silicone	1
6	Cabo USB	\	1
7	Concha de silicone	Silicone	1
8	Tampa antipó	Polipropileno	1
9	Inserto de silicone de 22 mm	Silicone	1
10	Inserto de silicone de 20 mm	Silicone	1

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1. Insira a válvula no conector e certifique-se de que está bem fixada.
2. Conecte o conector ao corpo do copo.
3. Posicione o diafragma de silicone sobre o corpo do copo e pressione até que esteja totalmente vedado em todos os lados.
4. Fixe firmemente a concha de silicone ao corpo do copo.
5. Conecte a unidade principal ao diafragma de silicone até ouvir um clique.

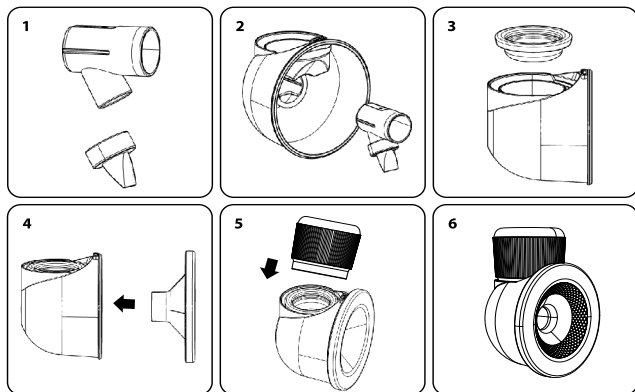


MÉTODO DE CARREGAMENTO

USE O CABO USB FORNECIDO PARA CARREGAR A BOMBA TIRA-LEITE:

- Compatível com: portas USB do computador, adaptadores de energia ou power banks.
- Use apenas power banks com saída não superior a **5V/3A**.
- O ícone LED da bateria indica o estado de carga:
 - Se o símbolo **(B6)** estiver piscando, o dispositivo está carregando.
 - Se o símbolo estiver aceso e não estiver piscando, o dispositivo está totalmente carregado.

NOTA: Desligue a bomba tira-leite antes de carregá-la.

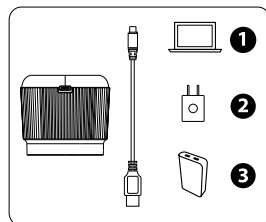

DESCRIÇÃO DO PAINEL

A1: Botão de ligar/desligar (pressione e segure para ligar/desligar)

A2: Diminuir nível de sucção

A3: Aumentar nível de sucção

A4: Trocar modo (Stimulationm / Extração / Antiestase / Corretiva)

A5: Pausar / Continuar

B1: Indicador do modo Stimulationm

B2: Indicador do modo Extração

B3: Indicador do modo Antiestase


B4: Indicador do modo Corretiva

B5: Nível de funcionamento / Visualização do tempo

B6: Indicador do nível da bateria

B7: Unidade de tempo exibida (minutos)

B1+B3: Função NipFit® ativada

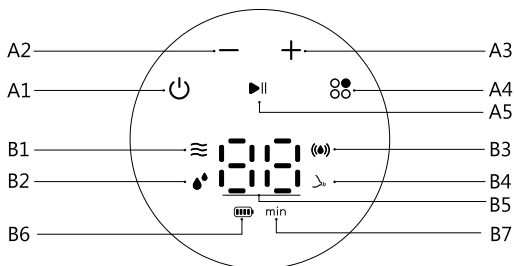

MODO STIMULATIONM (NÍVEL 1~9): Neste modo, a bomba gera um ritmo de sucção relativamente rápido com baixa potência de sucção. É projetado para estimular suavemente o seio e ajudar na ejeção do leite, imitando a sucção superficial inicial do bebê. É recomendado usar este modo antes de alternar para outros.


MODO EXTRAÇÃO (NÍVEL 1~9): Este modo imita o ritmo de sucção profundo e lento de um bebê que está ativamente ingerindo leite. A força de sucção é maior e a frequência mais baixa em comparação ao modo stimulationm. É indicado para facilitar a extração eficaz do leite após o reflexo de ejeção ter sido ativado.

MODO ANTIESTASE (NÍVEL 1~9): Fornece um ritmo de sucção pulsante para remover o leite residual profundo do seio após a extração. O uso regular pode ajudar a prevenir estase do leite, reduzir o risco de dutos obstruídos e manter o fluxo de leite.

FUNÇÃO NIPFIT®: Para ativar a função de correção dos mamilos, pressione o botão de modo até que os ícones (B1) e (B3) comecem a piscar. A função tem 3 níveis de intensidade.

INSTRUÇÕES DE USO

- 1. PREPARAÇÃO:** Antes de utilizar o Nuvita 1260W Materno Comfort, lave bem as mãos. Certifique-se de que todos os componentes estejam limpos e corretamente montados conforme as Instruções de Montagem. Evite montar a unidade principal e o cabo USB durante a limpeza.
- 2. POSICIONAMENTO:** Escolha um local tranquilo e confortável para se sentar. Use uma almofada de apoio, se necessário, para manter uma postura relaxada e ereta. Antes da extração, você pode stimulationar suavemente os seios com uma toalha morna para estimular o fluxo do leite.

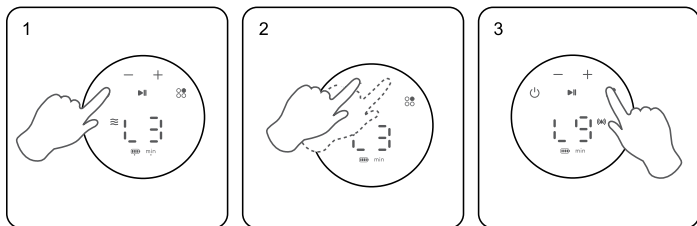

- 3. APLICAÇÃO:** Posicione a concha de silicone sobre o mamilo e certifique-se de que ela esteja bem aderida ao seio, sem entrada de ar. Segure a unidade com uma mão e apoie o seio com a outra.
- 4. LIGAR:** Pressione e segure o botão **(A1)** para ligar o dispositivo. A luz ambiente piscará e o visor mostrará o nível atual de sucção. A bomba inicia no Modo Stimulationm.
- 5. AJUSTE DA INTESITA:** Use o botão **(A2)** para diminuir e o **(A3)** para aumentar o nível de sucção a qualquer momento.
- 6. MUDAR MODO:** Para alterar os modos (Stimulationm, Extração, Antiestase, Corretivo), pressione o botão **(A4)**. Os modos mudam em sequência, com confirmação por meio do ícone correspondente.
- 7. PAUSAR/CONTINUAR:** Para pausar ou retomar o funcionamento, pressione o botão **(A5)**.
- 8. ENCERRAR SESSÃO:** Ao terminar, mantenha pressionado o botão de desligar. Desconecte o dispositivo e inicie os procedimentos de limpeza.

NOTA: O dispositivo desliga automaticamente após 30 minutos. Ele salva o modo e o nível de sucção utilizados para o próximo uso.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A. ANTES DO PRIMEIRO USO

Desmonte todas as partes laváveis e limpe cuidadosamente (exceto a unidade principal e o cabo).

B. APÓS CADA USO

Desmonte e enxágue todas as partes (exceto a unidade principal) em água fria para remover resíduos de leite. Partes a serem limpas: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DESINFECÇÃO DIÁRIA

- Lave bem as mãos.
- Separe todas as partes relevantes.
- Use água fervente ou um esterilizador a vapor por 5 minutos.
- **NÃO** ferva as partes **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- As partes **(3, 4, 8)** não devem tocar superfícies metálicas quentes.

ARMAZENAMENTO: Secar completamente ao ar e guardar em local limpo e seco.

PRECAUÇÕES DE LIMPEZA

- Desmonte todos os acessórios que entram em contato com o seio ou leite materno (exceto a unidade principal).
- Após o uso, limpe imediatamente as peças para evitar resíduos e proliferação de bactérias.
- Certifique-se de montar/desmontar cada peça conforme as instruções.
- Não perca nenhuma peça durante a montagem e desmontagem.
- Todas as peças de silicone podem ser esterilizadas (exceto a unidade principal).
- Válvulas: não ferver ou esterilizar a vapor por mais de 3 minutos.
- Mamadeira: não ferver ou esterilizar a vapor por mais de 5 minutos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de entrada:	DC 5V
Potência nominal:	6W
Temperatura de operação:	15~30°C
Umidade operacional: 50% – 80%	50% - 80%
Conteúdo da embalagem:	11 part
País de origem:	PRC

GARANTIA – TERMOS E CONDIÇÕES

Este produto está coberto por uma garantia de 24 meses por defeitos de fabricação, a partir da data de compra comprovada por recibo ou nota fiscal. Em caso de compra com nota fiscal, a garantia legal é reduzida para 12 meses. A garantia de 24 meses **não inclui** danos decorrentes do desgaste normal do produto, danos estéticos, acessórios ou materiais de consumo (como baterias, peças de reposição ou componentes sujeitos a desgaste). **As baterias têm garantia por um período de 6 meses.**

PERDA DA GARANTIA

A garantia legal de 12/24 meses será anulada nos seguintes casos:

1. O produto foi danificado por uso inadequado ou em desacordo com as instruções do manual.
2. O produto foi modificado, violado ou aberto.
3. O mau funcionamento foi causado por manutenção inadequada dos componentes, acessórios ou peças (como oxidação, imersão de partes elétricas em líquidos, resíduos que bloqueiem sensores, vazamentos de líquidos corrosivos das baterias).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

Estão excluídos da garantia legal de 24 meses:

4. Custos para substituição ou reparo de peças sujeitas a desgaste e os relacionados à manutenção ordinária do produto.
5. Custos e riscos associados ao transporte do produto de/para o ponto de venda ou centro autorizado para a gestão da garantia.
6. Danos causados por instalação incorreta ou uso inadequado em desacordo com o manual de instruções.
7. Danos causados por desastres naturais, quedas, impactos acidentais ou condições ambientais incompatíveis com o produto.
8. Defeitos que afetam de forma irrelevante o desempenho do produto.

LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE:

O fabricante, o distribuidor e todas as partes envolvidas na venda do produto não são responsáveis por perdas econômicas ou danos causados pelo mau funcionamento do produto. De acordo com a legislação vigente, não se responsabilizam por danos diretos ou indiretos, perda de receita, economia ou outras consequências decorrentes do uso ou da impossibilidade de usar o produto e/ou a documentação associada (em papel ou eletrônica), incluindo a ausência de serviço.

Para mais informações sobre o serviço de assistência, consulte os Termos de Venda disponíveis no site **www.nuvitababy.com**.

ευχαριστούμε που αγοράσατε το φορέσιμο ηλεκτρικό θηλαστρο pivita 1260w. διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ, ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε το θηλαστρο κατά τη διάρκεια του μπάνιου ή σε υγρά περιβάλλοντα.
2. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια.
3. Αποφύγετε την έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως και υψηλές θερμοκρασίες.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι ορατά κατεστραμμένα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
5. Κρατήστε χρησιμοποιημένα εξαρτήματα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε πνιγμό ή άλλα ατυχήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1. Μην φορτίζετε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγες ή σε περιβάλλον πάνω από 45°C.
2. Μην βυθίζετε τη μονάδα ή το καλώδιο USB σε νερό ή άλλα υγρά.
3. Μην καίτε ή εκθέτετε τη μονάδα σε φλόγες.
4. Κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από παιδιά για να αποφύγετε πνιγμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.
- Συναρμολογείτε πάντα τα εξαρτήματα σύμφωνα με τις Οδηγίες Συναρμολόγησης.
- Ρυθμίστε την ένταση αναρρόφησης ανάλογα με την άνεση και την ανοχή σας.
- Μην γέρνετε ή υπερχειλίζετε το δοχείο.
- Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν από τη σίτιση.
- Εάν έχετε μικρή παραγωγή γάλακτος, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με ιατρική καθοδήγηση.
- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά για να αποφύγετε τραυματισμούς στις θηλές.
- Διακόψτε και συμβουλευτείτε γιατρό αν εμφανιστεί πόνος ή ερεθισμός.
- Μην μοιράζετε εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με γάλα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά την εγκυμοσύνη.
- Διακόψτε την άντληση αν δεν υπάρχει ροή γάλακτος εντός 5 λεπτών.

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Nuvita 1260W Materno Comfort είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τις μητέρες που θηλάζουν, μιμούμενο τον φυσικό ρυθμό θηλασμού του μωρού. Αυτό το φορητό ηλεκτρικό θηλάστρο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθά τις μαμάδες να αντλούν το μητρικό γάλα αποτελεσματικά και άνετα ακόμη και εκτός σπιτιού, εξασφαλίζοντας μια εύκολη και ανώδυνη εμπειρία. Διαθέτει 9 ρυθμιζόμενα επίπεδα έντασης, τη λειτουργία NipFit® και την τεχνολογία 3 φάσεων Careflo®.



ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ

Η φάση διόρθωσης βοηθά στην αντιμετώπιση επίπεδων ή εισέχοντων θηλών μέσω απαλών κύκλων αναρρόφησης.



ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

Διαθέτει μαλακό κύπελλο σιλικόνης 24 mm που προσαρμόζεται απαλά στο στήθος για ασφαλή και άνετη εφαρμογή.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Αποτρέπει την επιστροφή του γάλακτος στον κινητήρα, διασφαλίζοντας την υγιεινή και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ CAREFLO®:

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά θηλάστρα 2 φάσεων, το Careflo® εισάγει μια τρίτη φάση αποστράγγισης κατά της στάσης του γάλακτος, πέρα από τα συνήθη στάδια διέγερσης και άντλησης. Αυτό βοηθά στην:

- Προώθηση μιας πιο σταθερής παραγωγής γάλακτος.
- Πρόληψη της απόφραξης των πόρων και της μαστίτιδας.
- Ανακούφιση από την τάση και την αίσθηση πληρότητας στο στήθος.
- Υποστήριξη ενός πιο ομαλού θηλασμού χωρίς διακοπές.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NIPFIT®:

Διόρθωση επίπεδων ή ανεστραμμένων θηλών.

Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να βοηθά στη διόρθωση επίπεδων ή ανεστραμμένων θηλών και να υποστηρίξει την εξαγωγή γάλακτος μέσω απαλής, προοδευτικής διέγερσης:

- Βοηθά τη θηλή να προεξέχει προς τα έξω.
- Διευκολύνει το μωρό να πιάνει το στήθος.
- Υποστηρίζει την έναρξη και τη συνέχιση του θηλασμού

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NipFit® εάν:

1. Έχετε ανοιχτές πληγές, ρωγμές, αλλοιώσεις ή ενεργές μολύνσεις στη θηλή ή την θηλαία άλω.
2. Έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στο στήθος.
3. Έχετε διαγνωσμένη πάθηση αναστροφής θηλής που προκαλείται από ασθένεια ή τραύμα, όχι συγγενή. Εάν συμβαίνει αυτό, συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας.
4. Αισθάνεστε οξύ πόνο από την πρώτη εφαρμογή. Διακόψτε αμέσως τη χρήση.
5. Έχετε ιδιαίτερα ευαίσθητο δέρμα ή πάσχετε από τοπικές δερματολογικές παθήσεις, όπως έκζεμα ή ψωρίαση.
6. Είστε έγκυος. Η αναρρόφηση μπορεί να διεγείρει συσπάσεις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η λειτουργία NipFit® προορίζεται μόνο για χρήση μετά τον τοκετό. Μην το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ξεκινάτε πάντα από το χαμηλότερο επίπεδο, Επίπεδο 1. Μην αυξάνετε την ένταση μέχρι η θηλή να προσαρμοστεί σταδιακά, ακόμα κι αν η αίσθηση είναι άνετη.
- Μην υπερβαίνετε τα 5-10 λεπτά συνεχούς χρήσης της λειτουργίας NipFit® ανά συνεδρία, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες.
- Μην εκτελείτε περισσότερες από 2 συνεδρίες διόρθωσης την ημέρα. Η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, πρήξιμο ή μικροσχίματα στη θηλή.
- Διακόψτε αμέσως τη χρήση εάν αισθανθείτε οξύ πόνο, ασυνήθιστη ερυθρότητα, επίμονο πρήξιμο, φουσκάλες ή έκκριση υγρού εκτός από γάλα.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι πιστοποιημένη ιατρική συσκευή για κλινική θεραπεία και δεν αντικαθιστά τη συμβουλή μαιάς, γιατρού ή Διεθνώς Πιστοποιημένου Συμβούλου Γαλουχίας (IBCLC).
- Μια ανεστραμμένη θηλή Βαθμού 3, με έντονη προσκόλληση, απαιτεί ιατρική αξιολόγηση πριν από τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής διόρθωσης.
- Η παρατεταμένη χρήση υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο της θηλαίας άλω, καθιστώντας προσωρινά πιο δύσκολο για το μωρό να πιάσει τη θηλή. Αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ:


- Βεβαιωθείτε ότι το κύπελλο σιλικόνης έχει το σωστό μέγεθος, συμπεριλαμβανομένης της φλάντζας 24 mm ή των μειωτήρων 20/22 mm, πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NipFit®. Ένα κύπελλο που είναι πολύ μεγάλο μπορεί να ενισχύσει την αναρρόφηση στην θηλαία άλω με ανεξέλεγκτο τρόπο.
- Πριν από τη συνεδρία, εφαρμόστε μερικές σταγόνες μητρικού γάλακτος ή κρέμας καθαρής λανολίνης για να μαλακώσετε την περιοχή.
- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας NipFit®, η θηλή πρέπει να είναι κεντραρισμένη στο κύπελλο. Μια λανθασμένη θέση μπορεί να προκαλέσει ασύμμετρη αναρρόφηση και ερεθισμό.
- Εάν δεν παρατηρήσετε καμία βελτίωση μετά από 4-6 εβδομάδες σωστής χρήσης, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας.

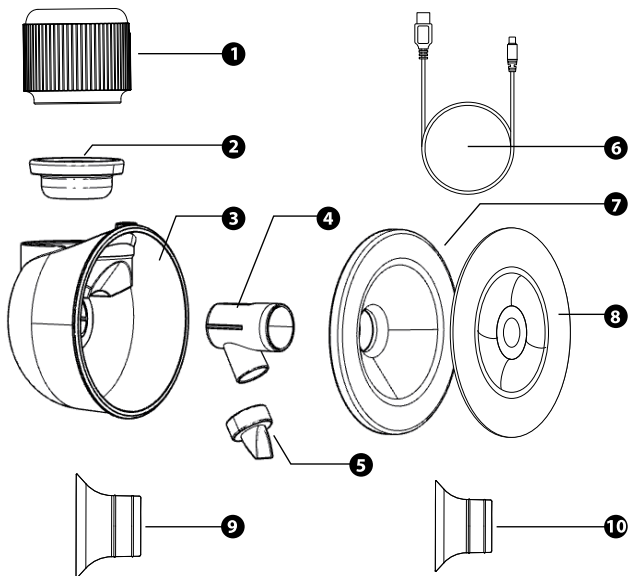

ΑΡ.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Κύρια μονάδα	\	1
2	Διάφραγμα σιλικόνης	Σιλικόνη	1
3	Σώμα κυπέλλου	Πολυπροπυλένιο	1
4	Σώμα συνδετήρα	Πολυπροπυλένιο	1
5	Βαλβίδα	Σιλικόνη	1
6	Καλώδιο USB	\	1
7	Κύπελλο σιλικόνης	Σιλικόνη	1
8	Καπάκι προστασίας από τη σκόνη	Πολυπροπυλένιο	1
9	Εισαγωγή σιλικόνης 22 mm	Σιλικόνη	1
10	Εισαγωγή σιλικόνης 20 mm	Σιλικόνη	1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


1. Εισάγετε τη βαλβίδα στο σώμα του συνδέσμου και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά στερεωμένη.
2. Συνδέστε το σώμα του συνδέσμου με το σώμα του κυπέλλου.
3. Τοποθετήστε τη σιλικονούχα μεμβράνη πάνω στο σώμα του κυπέλλου και πιέστε μέχρι να εφαρμόσει σωστά από όλες τις πλευρές.
4. Εφαρμόστε καλά το σιλικονούχο κύπελλο στο σώμα του κυπέλλου.
5. Συνδέστε τη βασική μονάδα στη σιλικονούχα μεμβράνη μέχρι να ακουστεί ένα "κλικ".

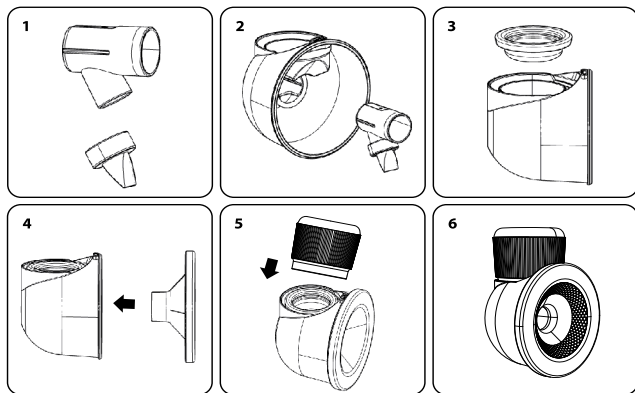

ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ:

- Συμβατό με: θύρες USB υπολογιστή, φορτιστές ρεύματος ή power bank.
- Χρησιμοποιείτε μόνο power bank με έξοδο που δεν υπερβαίνει τα **5V/3A**.
- Το LED ένδειξης της μπαταρίας δείχνει την κατάσταση φόρτισης:
 - Αν το σύμβολο **(B6)** αναβοσβήνει, η συσκευή φορτίζει.
 - Αν το σύμβολο παραμένει σταθερά αναμμένο, η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.

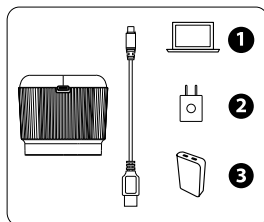

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να απενεργοποιείτε το θήλαστρο πριν το φορτίσετε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

A1: Κουμπί ενεργοποίησης (Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)

A2: Μείωση επιπέδου αναρρόφησης

A3: Αύξηση επιπέδου αναρρόφησης

A4: Αλλαγή λειτουργίας (Διέγερση / Εκθλιψη / Αντι-στάση / Διόρθωση)

A5: Παύση / Συνέχιση

B1: Ένδειξη λειτουργίας Διέγερση

B2: Ένδειξη λειτουργίας Εκθλιψη

B3: Ένδειξη λειτουργίας Αντι-στάσης


B4: Ένδειξη λειτουργίας Διορθωτικής

B5: Επίπεδο λειτουργίας / Ένδειξη χρόνου

B6: Ένδειξη στάθμης μπαταρίας

B7: Ένδειξη μονάδας χρόνου (λεπτά)

B1+B3: Η λειτουργία NipFit® ενεργοποιήθηκε

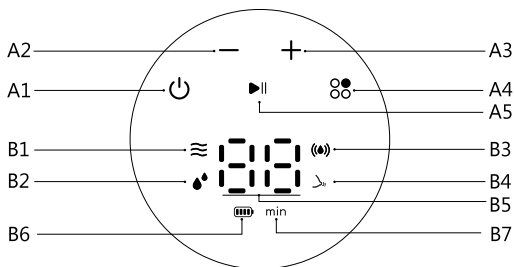

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣΑΖ (ΕΠΙΠΕΔΑ 1~9): Σε αυτή τη λειτουργία, η αντλία δημιουργεί έναν σχετικά γρήγορο ρυθμό αναρρόφησης με χαμηλή ισχύ. Έχει σχεδιαστεί για να διεγείρει απαλά το στήθος και να διευκολύνει την έξοδο του γάλακτος, μιμούμενη την επιφανειακή αναρρόφηση του μωρού στην αρχή. Συνιστάται η χρήση αυτής της λειτουργίας πριν τη μετάβαση σε άλλες.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΛΙΨΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΑ 1~9): Αυτή η λειτουργία μιμείται τον πιο βαθύ και αργό ρυθμό αναρρόφησης ενός μωρού που πίνει ενεργά. Η ισχύς αναρρόφησης και η συχνότητα είναι μεγαλύτερες από τη λειτουργία Διέγερση. Σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την αποτελεσματική εξαγωγή του γάλακτος όταν ξεκινήσει η ροή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙ-ΣΤΑΣΗΣ (ΕΠΙΠΕΔΑ 1~9): Παρέχει παλμικό ρυθμό αναρρόφησης για να απομακρύνει το υπόλοιπο γάλα από το στήθος μετά την άντληση. Η τακτική χρήση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της στασιμότητας του γάλακτος, μειώνοντας τον κίνδυνο απόφραξης των πόρων και διατηρώντας τη ροή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NIPFIT®: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης θηλών, πατήστε το κουμπί λειτουργίας μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα εικονίδια (B1) και (B3). Η λειτουργία έχει 3 επίπεδα έντασης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:** Πριν χρησιμοποιήσετε το Nuvita 1260W Materno Comfort, πλύνετε καλά τα χέρια σας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καθαρά και συναρμολογημένα σωστά σύμφωνα με τις Οδηγίες Συναρμολόγησης. Αποφύγετε τη συναρμολόγηση της κύριας μονάδας και του καλωδίου USB κατά τον καθαρισμό.
- 2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ:** Βρείτε έναν ήσυχο και άνετο χώρο για να καθίσετε. Χρησιμοποιήστε μαξιλάρι στήριξης αν χρειάζεται για να διατηρήσετε όρθια και χαλαρή στάση. Πριν την άντληση, μπορείτε να κάνετε απαλό Διέγερση στο στήθος με μια ζεστή πετσέτα για να τονώσετε τη ροή του γάλακτος.

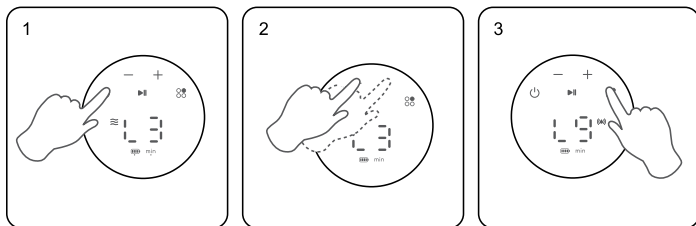

- 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ:** Τοποθετήστε το κύπελλο σιλικόνης στη θηλή και βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά στο στήθος, χωρίς κενά αέρα. Κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι και στηρίξτε το στήθος με το άλλο.
- 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **(A1)** για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το φως περιβάλλοντος θα αναβοσβήσει και η οθόνη θα εμφανίσει το επίπεδο αναρρόφησης. Η αντλία ξεκινά σε λειτουργία Διέγερση.
- 5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ:** Χρησιμοποιήστε το **(A2)** για να μειώσετε ή το **(A3)** για να αυξήσετε το επίπεδο αναρρόφησης οποιαδήποτε στιγμή.
- 6. ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:** Για να αλλάξετε λειτουργία (Διέγερση, Έκθλιψη, Αντι-στάση, Διόρθωση), πατήστε το κουμπί **(A4)**. Οι λειτουργίες αλλάζουν διαδοχικά, επιβεβαιώνονται από το αντίστοιχο φως ένδειξης.
- 7. ΠΑΥΣΗ / ΣΥΝΕΧΕΙΑ:** Για παύση ή επανεκκίνηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί **(A5)**.
- 8. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ:** Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε και ξεκινήστε τη διαδικασία καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Αποθηκεύει τη λειτουργία και το επίπεδο αναρρόφησης που χρησιμοποιήθηκε για την επόμενη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

A. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αποσυναρμολογήστε όλα τα πλενόμενα μέρη και καθαρίστε τα καλά (εκτός από την κύρια μονάδα και το καλώδιο).

B. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Αποσυναρμολογήστε και ξεπλύνετε όλα τα μέρη (εκτός από την κύρια μονάδα) με κρύο νερό για να αφαιρέσετε υπολείμματα γάλακτος. Μέρη για καθαρισμό: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

- Πλύνετε τα χέρια σας πρώτα.
- Διαχωρίστε όλα τα σχετικά μέρη.
- Χρησιμοποιήστε βραστό νερό ή αποστειρωτή ατμού για 5 λεπτά.
- **ΜΗ** βράζετε τα μέρη **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Τα μέρη **(3, 4, 8)** δεν πρέπει να αγγίζουν μεταλλικές θερμές επιφάνειες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Αφήστε τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς στον αέρα και αποθηκεύστε τα σε καθαρό και στεγνό μέρος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το στήθος ή το μητρικό γάλα (εκτός από την κύρια μονάδα).
- Καθαρίστε τα μέρη αμέσως μετά τη χρήση για να αποφύγετε υπολείμματα και την ανάπτυξη βακτηρίων.
- Βεβαιωθείτε ότι συναρμολογείτε/αποσυναρμολογείτε σωστά κάθε εξάρτημα σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην χάσετε κανένα μέρος κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση.
- Όλα τα εξαρτήματα σιλικόνης μπορούν να αποστειρωθούν (εκτός της κύριας μονάδας).
- **Βαλβίδες:** ΜΗΝ τις βράζετε ή αποστειρώνετε με ατμό για περισσότερο από 3 λεπτά.
- **Μπιμπερό:** ΜΗΝ το βράζετε ή αποστειρώνετε με ατμό για περισσότερο από 5 λεπτά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση εισόδου:	DC 5V
Ονομαστική ισχύς:	6W
Θερμοκρασία λειτουργίας:	15~30°C
Υγρασία λειτουργίας:	50% - 80%
Περιεχόμενα συσκευασίας:	11 πλήρη
Χώρα προέλευσης:	Κίνα

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών για ελαττώματα κατασκευής, αρχίζοντας από την ημερομηνία αγοράς, όπως αποδεικνύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο. Σε περίπτωση αγοράς με τιμολόγιο, η νόμιμη εγγύηση μειώνεται σε 12 μήνες. Η εγγύηση 24 μηνών **δεν περιλαμβάνει** ζημιές που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά του προϊόντος, αισθητικές φθορές, αξεσουάρ ή αναλώσιμα υλικά (π.χ. μπαταρίες, κεφαλές ή εξαρτήματα υποκείμενα σε φθορά από χρήση). **Οι μπαταρίες καλύπτονται από εγγύηση για περίοδο 6 μηνών.**

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η νόμιμη εγγύηση 12/24 μηνών ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις:

1. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιά λόγω κακής ή μη σύμφωνης με τις οδηγίες χρήσης.
2. Το προϊόν έχει τροποποιηθεί, παραβιαστεί ή ανοιχτεί.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ανεπαρκή συντήρηση εξαρτημάτων, αξεσουάρ ή προμηθειών (όπως οξείδωση, υγρασία σε ηλεκτρικά μέρη, υπολείμματα που φράζουν τον αισθητήρα, διαρροή διαβρωτικού υγρού από τις μπαταρίες).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Δεν καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση 24 μηνών:

4. Τα κόστη αντικατάστασης ή επισκευής μερών που υπόκεινται σε φθορά ή σχετίζονται με την κανονική συντήρηση του προϊόντος.
5. Τα κόστη και οι κίνδυνοι μεταφοράς του προϊόντος από και προς το κατάστημα ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τη διαχείριση της εγγύησης.
6. Ζημιές από λανθασμένη εγκατάσταση ή από ακατάλληλη χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
7. Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, πτώσεις, ατυχήματα ή ασυμβίβατες περιβαλλοντικές συνθήκες.
8. Ελαττώματα που επηρεάζουν αμελητέα την απόδοση του προϊόντος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Ο κατασκευαστής, ο διανομέας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην πώληση του προϊόντος δεν φέρουν ευθύνη για οικονομικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από δυσλειτουργία του προϊόντος. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές, απώλεια εσόδων, αποταμιεύσεων ή άλλες συνέπειες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή/και των σχετικών εγγράφων (έντυπων ή ηλεκτρονικών), συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εξυπηρέτησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εξυπηρέτηση, συμβουλευτείτε τους Όρους Πώλησης στην ιστοσελίδα: **www.nuvitababy.com**

Takk for at du har kjøpt Nuvita 1260W bærbar elektrisk brystpumpe. Vennligst les brukerveiledningen nøye før bruk og oppbevar den for fremtidig referanse.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

FOR DIN OG DINE BARNES SIKKERHET OG HELSE, ER ALT INNHOLD I DETTE PROSJEKTET RELATERT TIL SIKKERHET. VENNLIGST SØRG FOR Å OVERHOLDE DEM.

WARNING

1. Ikke bruk brystpumpen mens du bader eller i fuktige omgivelser.
2. Hold dette produktet utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr.
3. Unngå eksponering for direkte sollys og høye temperaturer.
4. Ikke bruk enheten hvis den er synlig skadet. Kontakt produsenten eller autorisert personell for reparasjoner.
5. Hold ubrukte deler utenfor barns rekkevidde for å unngå kvelning eller andre ulykker.

FARE

6. Ikke lad eller bruk produktet i nærheten av åpen ild eller i omgivelser over 45°C.
7. Ikke senk hovedenheten eller USB-kabelen ned i vann, drikkevarer eller andre væsker.
8. Aldri brenn eller utsett hovedenheten for åpen ild.
9. Hold plastemballasje borte fra barn for å unngå risiko for kvelning.

MERK

- Lad enheten helt opp før første gangs bruk.
- Sett alltid sammen komponentene i henhold til monteringsinstruksjonene.
- Juster sugestyrken basert på komfort og personlig toleranse.
- Ikke vipp eller overfyll melkesamlebegeret utover den merkede grensen.
- Test alltid melketemperaturen før mating for å unngå brannskader.
- Hvis du har lav melkeproduksjon, bruk produktet under medisinsk veiledning.
- Ikke overbruk pumpen for å unngå skade på brystet.
- Stopp bruken og konsulter helsepersonell hvis smerte eller irritasjon oppstår.
- Ikke del enhetskomponenter som kommer i kontakt med melk mellom brukere.
- Ikke bruk pumpen under graviditet da det kan forårsake livmortrekninger.
- Stopp pumpingen hvis ingen melk kommer ut innen 5 minutter.
- Bruk kun dette produktet som beskrevet i brukerveiledningen.

Nuvita 1260W Materno Comfort er utviklet for å støtte ammende mødre ved å etterligne babyens naturlige sugerytme. Denne bærbare, elektriske brystpumpen er spesielt designet for at mødre skal kunne pumpe morsmelk effektivt og komfortabelt, selv når de er på farten. Den sikrer en smertefri og praktisk pumpeopplevelse, og har 9 justerbare intensitetsnivåer, NipFit®-funksjon samt 3-faset Careflo®-teknologi.



KORRIGERING

Korrigeringsmodus hjelper til med å håndtere inverterte eller flate brystvorter gjennom sykluser av forsiktig sug.



ALL-SILIKON BRYSTSKJOLD

Hudvennlig og skånsom mot huden, tilbyr en myk og komfortabel passform for effektiv sug.



ANTI-TILBAKESTRØMSSYSTEM

Forhindrer at melk renner tilbake til motorenheten, og sikrer hygiene og lang levetid for produktet.



CAREFLO®-TEKNOLOGI:

I motsetning til tradisjonelle 2-fasede brystpumper, introduserer Careflo® en tredje dreneringsfase mot melkestau, i tillegg til de vanlige stimulerings- og utpumpingstrinnene. Dette bidrar til å:

- Fremme en mer stabil og jevn melkeproduksjon.
- Forebygge tette melkeganger og brystbetennelse (mastitt).
- Lindre spenning, spenning og følelsen av tunge bryster.
- Støtte en mer harmonisk og uavbrutt ammeperiode.



NIPFIT®-FUNKSJON:

Korrigerer av flate eller innovervendte brystvorter.

Denne funksjonen ble utviklet for å korrigere flate eller innovervendte brystvorter og hjelpe til med melkeutvinning gjennom skånsom og progressiv stimulering:

- Hjelper brystvorten med å stikke utover.
- Forenkler korrekt feste av babyen til brystet.
- Hjelper med å starte og fortsette ammingen.

KONTRAINDIKASJONER

Ikke bruk NipFit®-funksjonen hvis:

1. Du har åpne sår, sprekker, lesjoner eller aktive infeksjoner på brystvorten eller areolaen.
2. Du har nylig gjennomgått en brystoperasjon.
3. Du har en diagnostisert tilstand med brystvorteinversjon forårsaket av sykdom eller traume, ikke medfødt. Hvis dette er tilfelle, kontakt legen din først.
4. Du opplever skarp smerte fra første påføring. Avbryt bruken umiddelbart.
5. Du har spesielt sensitiv hud eller lider av lokale dermatologiske tilstander, som eksem eller psoriasis.
6. Du er gravid. Sugning kan stimulere rier.



ADVARSEL

NipFit®-funksjonen er kun beregnet for bruk etter fødsel. Skal ikke brukes under graviditet.


ADVARSLER UNDER BRUK

- Start alltid på det laveste nivået, nivå 1. Ikke øk intensiteten før brystvorten gradvis har tilpasset seg, selv om følelsen er behagelig.
- Ikke bruk NipFit®-funksjonen kontinuerlig i mer enn 5–10 minutter per økt, spesielt de første ukene.
- Ikke utfør mer enn 2 korreksjonsøkter per dag. Overdreven bruk kan forårsake irritasjon, hevelse eller mikrorifter i brystvorten.
- Avbryt bruken umiddelbart hvis du opplever skarp smerte, unormal rødhet, vedvarende hevelse, blemmer eller utskillelse av annen væske enn melk.
- Denne enheten er ikke et sertifisert medisinsk utstyr for klinisk behandling og erstatter ikke konsultasjon med jordmor, lege eller International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- En grad 3, alvorlig fastklebende invertert brystvorte krever medisinsk evaluering før bruk av korreksjonsutstyr.
- Langvarig bruk med høy intensitet kan forårsake hevelse i areolaen, noe som midlertidig gjør det vanskeligere for babyen å feste seg. Dette kan ha motsatt effekt av den ønskede.

INSTRUKSJONER FOR SIKKER BRUK:

- Sørg for at silikonkoppen har riktig størrelse, inkludert 24 mm flens eller 20/22 mm reduksjonsstykker, før du aktiverer NipFit®-funksjonen. En kopp som er for stor kan forsterke sugekraften på areolaen på en ukontrollert måte.
- Før behandlingen, påfør noen dråper morsmelk eller ren lanolinkrem for å myke opp området.
- Under NipFit®-behandlingen skal brystvorten være sentrert i koppen.
- Feil posisjon kan forårsake asymmetrisk sugekraft og irritasjon.
- Hvis du ikke merker noen forbedring etter 4–6 uker med riktig bruk, bør du kontakte helsepersonell.


PRODUKTKOMPONENTER

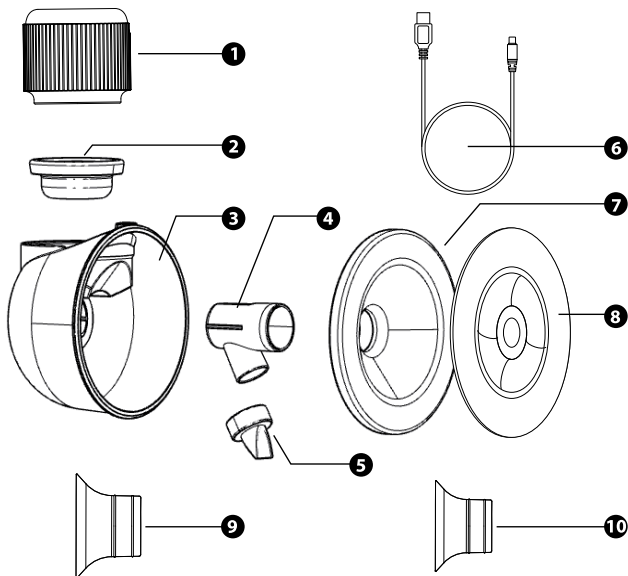

NR	NAVN	MATERIALE	ANTALL
1	Hovedenhet	\	1
2	Silikon membran	Silikon	1
3	Begerkorpus	Polypropylen	1
4	Koblingsstykke	Polypropylen	1
5	Ventil	Silikon	1
6	USB-kabel	\	1
7	Silikon brystskjold	Silikon	1
8	Støvbeskyttelsesdeksel	Polypropylen	1
9	22mm silikon innlegg	Silikon	1
10	20mm silikon innlegg	Silikon	1

MONTERINGSINSTRUKSJONER


1. Sett ventilen inn i koblingsstykket og sørg for god passform.
2. Fest koblingsstykket til begerkorpusen.
3. Plasser silikon membranen på toppen av begerkorpusen og trykk ned til den er forseglet på alle sider.
4. Fest silikon brystskjoldet sikkert på begerkorpusen.
5. Fest hovedenheten til silikon membranen til den klikker på plass.

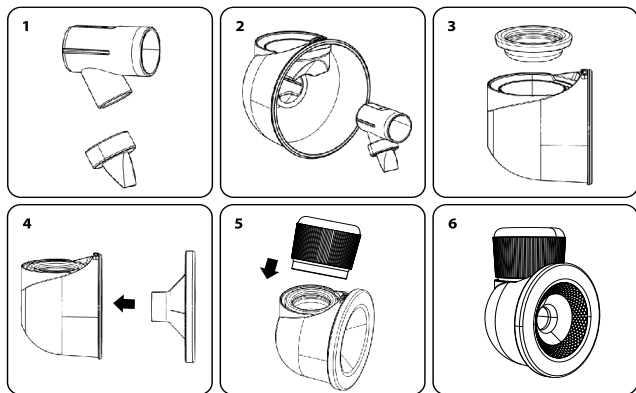

LADEMETODE

BRUK DEN MEDFØLGENDE USB-KABELEN FOR Å LADE PUMPEN:

- Kompatibel med: datamaskinens USB-porter, strømadaptore eller powerbanker.
- Bruk kun powerbanker med en utgang som ikke overstiger **5V/3A**.
- LED-batterikonet indikerer ladestatus:
 - Hvis symbolet **(B6)** blinker, lades enheten
 - Hvis symbolet ikke blinker og er PÅ, er enheten fulladet

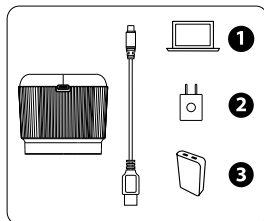

MERK: Slå alltid av pumpen før lading.

BESKRIVELSE AV KONTROLLPANEL

A1: Strømknapp (Trykk og hold inne for å slå PÅ/AV)

A2: Reduser sugenivå

A3: Øk sugenivå

A4: Fasebryter (Stimulering / Uttrykk / Anti-stase / Korrigering)

A5: Pause/Fortsett

B1: Stimuleringsfase-indikator

B2: Uttrykksfase-indikator

B3: Anti-stase fase-indikator


B4: Korrigeringsfase-indikator

B5: Arbeidsnivå / Tidsvisning

B6: Batterinivå-indikator

B7: Tidsenhet visning (minutter)

B1+B3: NipFit®-funksjonen er aktivert

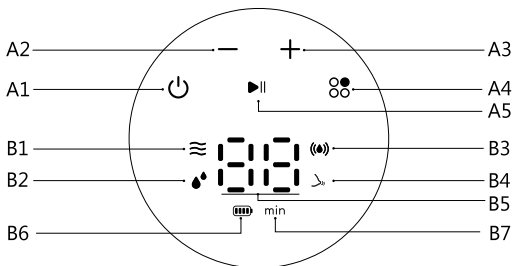

STIMULERINGSFASE (NIVÅ 1~9): I denne fasen genererer pumpen en relativt rask sugerytme med lav sugekraft. Den er designet for å forsiktig stimulere brystvevet og fremme melkeutskillelse ved å imitere den første grunne sugeadferden til en baby. Det anbefales å bruke denne fasen før bytte til andre faser.




UTTRYKKSFASE (NIVÅ 1~9): Denne fasen imiterer den dypere og langsommere sugerytmen til en baby når den aktivt drikker melk. Sugkraften er høyere, og frekvensen er langsommere sammenlignet med stimuleringsfasen. Denne innstillingen er ment å hjelpe med å trekke ut melk mer effektivt når nedstrømmingsrefleksen har startet.

ANTI-STASE SUGEFASE (NIVÅ 1~9): Denne fasen gir et pulserende sugemønster som tar sikte på å grundig fjerne gjenværende melk i brystet etter uttrykk. Regelmessig bruk kan bidra til å forhindre melkestase, redusere risikoen for tette melkeganger og opprettholde melkestrømmen.

NIPFIT®-FUNKSJON: For å aktivere funksjonen for brystvorte korrigering, trykk på modusknappen til ikonene (B1) og (B3) begynner å blinke. Funksjonen har 3 intensitetsnivåer.

BRUKSINSTRUKSJONER

- 1. FORBEREDELSE:** Før du bruker Nuvita 1260W Materno Comfort, vask hendene dine grundig. Sørg for at alle komponenter er rene og korrekt montert i henhold til monteringsinstruksjonene. Unngå å montere hovedenheten og USB-kabelen ved rengjøring.
- 2. POSISJONERING:** Finn et rolig og komfortabelt sted å sitte. Bruk en fotskammel om nødvendig for å opprettholde en avslappet, oppreist holdning. Før pumping kan du forsiktig stimulere brystene dine med et varmt håndkle for å stimulere melkestrømmen.
- 3. PÅFØRING:** Sentrer silikon brystskjoldet på brystvorte og sørg for at det forsegler tett rundt brystet uten luftspalter. Hold enheten forsiktig med den ene hånden og støtt brystet med den andre for å holde det stabilt.

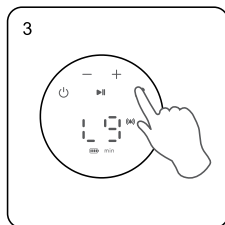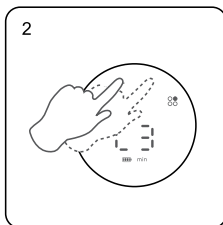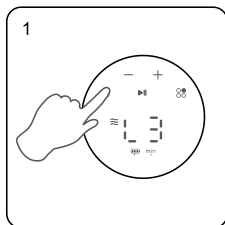

- 4. SLÅ PÅ:** Trykk og hold inne **(A1)**-knappen for å starte enheten. Omgivelseslyset vil blinke, og skjermen vil vise gjeldende sugenivå. Pumpen starter i stimuleringsfase.
- 5. JUSTERING AV INTENSITET:** Bruk **(A2)** for å redusere og **(A3)** for å øke sugenivået når som helst under drift.
- 6. BYTTE FASER:** For å endre arbeidsfase (Stimulering, Uttrykk, Anti-stase, Korrigering), trykk på **(A4)**-knappen. Fasen vil bytte i rekkefølge, og den valgte fasen bekreftes av tilhørende indikatorlys.
- 7. PAUSE/FORTSETT:** For å pause eller gjenoppta driften, trykk på **(A5)**-knappen.
- 8. AVSLUTTE ØKTEN:** Når du er ferdig, trykk og hold inne knappen for å slå av enheten. Koble fra enheten og start rengjøringsprosedyrer.

MERK: Enheten slår seg automatisk av etter 30 minutter. Den lagrer den sist brukte fasen og sugenivået for neste bruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

A. FØR FØRSTE GANGS BRUK

Demonter alle vaskbare deler og rengjør grundig (unntatt hovedenheten og kabelen).

B. ETTER HVER BRUK

Demonter og skyll alle deler (unntatt hovedenheten) i kaldt vann for å fjerne melkerester. Deler som skal rengjøres: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DAGLIG DESINFEKSJON

- Vask hender først.
- Skill alle relevante deler.
- Bruk kokende vann eller dampsterilisator i 5 minutter.
- **IKKE** kok deler **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Deler **(3, 4, 8)** må ikke berøre varme metalloverflater.

OPPBEVARING: Lufttørk grundig og oppbevar på et rent, tørt sted.

FORHOLDSREGLER VED RENGJØRING

- Demonter alt tilbehør som kommer i kontakt med bryst eller brystmelk. (unntatt hovedenhet)
- Etter bruk, rengjør delene umiddelbart for å unngå melkerester og bakterievekst.
- Sørg for at du monterer/demonterer hvert tilbehør i henhold til monteringsinstruksjonene.
- Ikke mist noen av delene ved montering og demontering.
- Alle silikonkomponenter kan legges i sterilisator for desinfeksjon (unntatt hovedenheten).
- **Forholdsregler for ventildesinfeksjon:** Ikke kok og dampdesinfiser i lengre enn 3 minutter.
- **Forholdsregler for flaskedesinfeksjon:** Ikke kok og dampdesinfiser i lengre enn 5 minutter.

PRODUKTSPEKIFIKASJON

Inngangsspenning:	DC 5V
Nominell effekt:	6W
Driftstemperatur:	15~30°C
Driftsfuktighet:	50% - 80%
Pakkeinnhold:	11 deler
Opprinnelsessted:	Kina

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produktet er dekket av 24 måneders garanti mot produksjonsfeil, fra kjøpsdatoen som er oppgitt på kvittering eller faktura. Ved kjøp med faktura reduseres den lovfestede garantien til 12 måneder. 24-månedersgarantien **dekker ikke** skader som følge av normal slitasje på produktet, estetiske skader, tilbehør eller forbruksvarer (for eksempel batterier, hoder eller komponenter som er utsatt for slitasje). **Batterier har en garanti på 6 måneder.**

GARANTIE UGYLDIG: Den lovbestemte garantien på 12/24 måneder bortfaller i følgende tilfeller:

- Produktet har blitt skadet på grunn av feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i håndboken.
- Produktet har blitt modifisert, tuklet med eller åpnet.
- Feilen skyldes utilstrekkelig vedlikehold av komponenter, tilbehør eller forsyninger (f.eks. oksidasjon, nedsenking av elektriske deler i væsker, rester som blokkerer sensoren, lekkasje av etsende væske fra batteriene).

GARANTIUNNTAK: Følgende er unntatt fra den 24 måneder lange juridiske garantien:

- Kostnadene for utskifting eller reparasjon av deler som er utsatt for slitasje og de som er knyttet til vanlig vedlikehold av produktet.
- Kostnadene og risikoene forbundet med transport av produktet til og fra salgsstedet eller det autoriserte senteret for garantihåndtering.
- Skade som følge av feil installasjon eller feil bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene i håndboken.
- Skader forårsaket av naturkatastrofer, fall, utilsiktede støt eller miljøforhold som er uforenlige med produktet.
- Feil som har ubetydelig innvirkning på produktets ytelse.

ANSVARSBEGRENSNINGER:

Produsenten, distributøren og alle parter involvert i salget av produktet er ikke ansvarlige for økonomiske tap eller skader som følge av produktets funksjonsfeil. I samsvar med gjeldende lovgivning er de ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tap av inntekt, besparelser eller andre konsekvenser som følge av bruk eller manglende evne til å bruke produktet og/eller tilhørende dokumentasjon (papir eller elektronisk), inkludert manglende service.

For ytterligere informasjon om assistansetjenesten, se salgsbetingelsene som er tilgjengelige på nettstedet **www.nuvitababy.com**.

Tak fordi du har købt Nuvita 1260W bærbar elektrisk brystpumpe. Læs venligst vejledningen omhyggeligt før brug og gem den til fremtidig reference.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

FOR DIN OG DINE BØRNS SIKKERHED OG SUNDHED ER ALT INDHOLD I DETTE PROJEKT RELATERET TIL SIKKERHED. SØRG VENLIGST FOR AT OVERHOLDE DEM.

ADVARSEL

1. Brug ikke brystpumpen under badning eller i fugtige omgivelser.
2. Hold dette produkt uden for børns og kæledyrs rækkevidde.
3. Undgå eksponering for direkte sollys og høje temperaturer.
4. Brug ikke enheden, hvis den er synligt beskadiget. Kontakt producenten eller autoriseret personale for reparationer.
5. Hold ubrugte dele uden for børns rækkevidde for at undgå kvælning eller andre ulykker.

FARE

1. Oplad eller brug ikke produktet i nærheden af åben ild eller i omgivelser over 45°C.
2. Nedsænk ikke hovedenheden eller USB-kablet i vand, drikkevarer eller andre væsker.
3. Forbrænd aldrig hovedenheden eller udsæt den for åben ild.
4. Hold plastemballage væk fra børn for at undgå risiko for kvælning.

BEMÆRK

- Oplad enheden fuldt før første brug.
- Samle altid komponenter i overensstemmelse med samlevejledningen.
- Juster sugkraften baseret på komfort og personlig tolerance.
- Vip ikke eller overfyld mælkeopsamlingsbægeret ud over den markerede grænse.
- Test altid mælken temperatur før fodring for at undgå forbrændinger.
- Hvis du har lav mælkeproduktion, brug produktet under medicinsk vejledning.
- Overbenyt ikke pumpen for at undgå brystvorte skader.
- Stop brugen og konsulter en sundhedsperson, hvis der opstår smerte eller irritation.
- Del ikke enhedskomponenter, der kommer i kontakt med mælk mellem brugere.
- Brug ikke pumpen under graviditet, da det kan forårsage livmodersammentrækninger.
- Stop med at pumpe, hvis der ikke kommer mælk inden for 5 minutter.
- Brug kun dette produkt som beskrevet i vejledningen.

INFORMATION

Nuvita 1260W Materno Comfort er designet til at støtte ammende mødre ved at efterligne barnets naturlige sugerytme. Denne bærbare, elektriske brystpumpe er specielt udviklet til at hjælpe mødre med mælkeknudsprocessen på en effektiv og behagelig måde – også på farten. Den sikrer en smertefri og bekvem oplevelse og har 9 justerbare intensitetsniveauer, NipFit®-funktion samt 3-faset Careflo®-teknologi.



KORREKTION

Korrektionsfunktionen hjælper med at adressere inverterede eller flade brystvorter gennem cyklusser af blid sugning.



HEL-SILIKONE BRYSTVOLD

Hudvenlig og blid mod huden, tilbyder en blød og komfortabel pasform for effektiv sugning.



ANTI-TILBAGELØBSSYSTEM

Forhindrer mælk i at løbe tilbage i motorenheden, hvilket sikrer hygiejne og lang levetid for produktet.



CAREFLO®-TEKNOLOGI:

I modsætning til traditionelle 2-fasede brystpumper introducerer Careflo® en tredje dræningsfase mod mælkestau, udover de sædvanlige stimulerings- og udmalkningstrin. Dette hjælper med at:

- Fremme en mere regelmæssig mælkeproduktion.
- Forebygge tilstoppede mælkegange og brystbetændelse (mastitis).
- Lindre spændinger og følelsen af overfyldte bryster.
- Understøtte et mere flydende og uafbrudt ammeforløb.



NIPFIT®-FUNKTION:

Korrektion af flade eller indadvendte brystvorter.

Denne funktion blev udviklet til at korrigere flade eller indadvendte brystvorter og fremme mælkeudvinding gennem blid og progressiv stimulering:

- Hjælper brystvorten med at stikke frem.
- Fremmer korrekt fastgørelse af barnet til brystet.
- Hjælper med at starte og fortsætte amning.

KONTRAINDIKATIONER

Brug ikke NipFit®-funktionen, hvis:

1. Du har åbne sår, revner, læsioner eller aktive infektioner på din brystvorte eller areola.
2. Du har for nylig gennemgået en brystoperation.
3. Du har en diagnosticeret tilstand med brystvorteinversion forårsaget af sygdom eller traume, ikke medfødt. Hvis dette er tilfældet, skal du først kontakte din læge.
4. Du oplever skarpe smerter fra første påføring. Stop brugen med det samme.
5. Du har særlig følsom hud eller lider af lokale dermatologiske tilstande, såsom eksem eller psoriasis.
6. Du er gravid. Sugning kan stimulere veer.



ADVARSEL

NipFit®-funktionen er kun beregnet til brug efter fødslen. Må ikke bruges under graviditet.


ADVARSLER UNDER BRUG

- Start altid på det laveste niveau, niveau 1. Øg ikke intensiteten, før din brystvorte gradvist har tilpasset sig, selvom følelsen er behagelig.
- Brug ikke NipFit®-funktionen kontinuerligt i mere end 5-10 minutter pr. session, især i de første par uger.
- Udfør ikke mere end 2 korrektionssessioner om dagen. Overdreven brug kan forårsage irritation, hævelse eller mikrorifter i brystvorten.
- Stop brugen med det samme, hvis du oplever skarpe smerter, unormal rødme, vedvarende hævelse, blærer eller udskillelse af anden væske end mælk.
- Denne enhed er ikke et certificeret medicinsk udstyr til klinisk behandling og erstatter ikke konsultation med en jordemoder, læge eller International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- En grad 3, alvorligt inverteret brystvorte kræver medicinsk evaluering, før du bruger et korrektionsudstyr.
- Langvarig brug ved høj intensitet kan forårsage hævelse af areolaen, hvilket midlertidigt gør det vanskeligere for din baby at få fat.
- Dette kan have den modsatte effekt af den ønskede.

INSTRUKTIONER TIL SIKKER BRUG:

- Sørg for, at silikonekoppen har den korrekte størrelse, inklusive 24 mm flange eller 20/22 mm reduktionsstykker, før du aktiverer NipFit®-funktionen. En kop, der er for stor, kan øge sugningen på areolaen på en ukontrolleret måde.
- Før behandlingen skal du påføre et par dråber modermælk eller ren lanolincreme for at blødgøre området.
- Under NipFit®-behandlingen skal brystvorten være centreret i koppen.
- Forkert placering kan forårsage asymmetrisk sugning og irritation.
- Hvis du ikke bemærker nogen forbedring efter 4-6 ugers korrekt brug, bør du kontakte din læge eller sundhedsplejerske.


PRODUKTKOMPONENTER

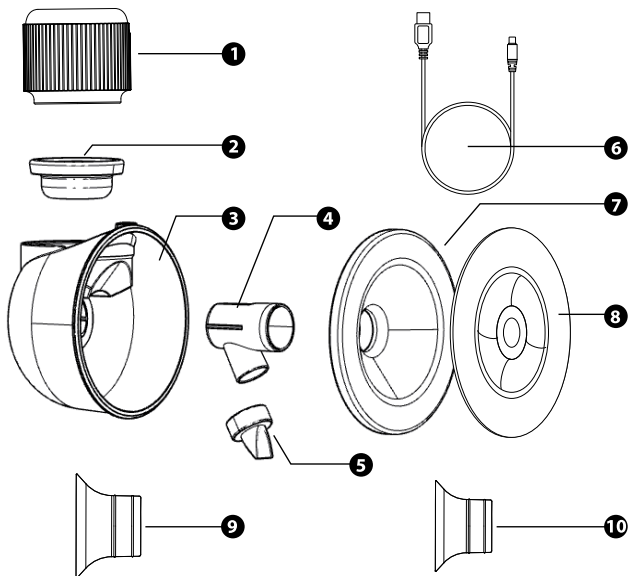

NR	NAVN	MATERIALE	ANTALL
1	Hovedenhed	\	1
2	Silikone membran	Silikone	1
3	Bægerkrop	Polypropylen	1
4	Forbindelse	Polypropylen	1
5	Ventil	Silikone	1
6	USB-kabel	\	1
7	Silikone brystvold	Silikone	1
8	Støvbeskyttelsesdæksel	Polypropylen	1
9	22mm silikone indsats	Silikone	1
10	20mm silikone indsats	Silikone	1

SAMLEVEJLEDNING


1. Indsæt ventilen i forbindelsen og sørg for en tæt pasform.
2. Fastgør forbindelsen til bægerkroppen.
3. Placer silikonemembranen oven på bægerkoppen og tryk ned, indtil den er forseglet på alle sider.
4. Monter silikone brystvolden sikkert på bægerkoppen.
5. Fastgør hovedenheden til silikonemembranen, indtil den klikker.

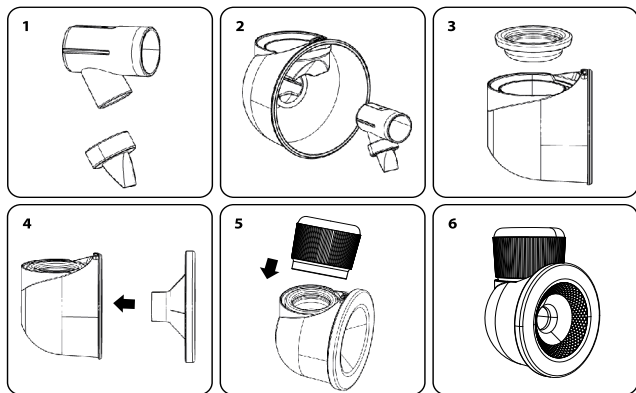

OPLADNINGSMETODE

BRUG DET MEDFØLGENDE USB-KABEL TIL AT OPLADE PUMPEN:

- Kompatibel med: computer USB-porte, strømadaptere eller powerbanks.
- Brug kun powerbanks med en output, der ikke overstiger **5V/3A**.
- LED-batteriikonet angiver opladningsstatus:
 - Hvis symbolet **(B6)** blinker, oplades enheden
 - Hvis symbolet ikke blinker og er TÆNDT, er enheden fuldt opladet

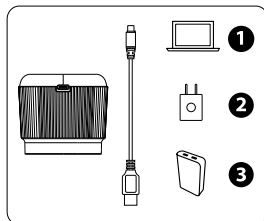

BEMÆRK: Sluk altid pumpen før opladning.

BESKRIVELSE AF PANEL

A1: Tænd/sluk-knap (Tryk og hold for at tænde/slukke)

A2: Reducer sugeniveau

A3: Forøg sugeniveau

A4: Faseskift (Stimulering / Udtrykning / Anti-stase / Korrektion)

A5: Pause/Fortsæt

B1: Stimuleringsfase-indikator

B2: Udtrykningsfase-indikator

B3: Anti-stase fase-indikator


B4: Korrektionsfase-indikator

B5: Arbejdsniveau / Tidsvisning

B6: Batteriniveau-indikator

B7: Tidsenhed visning (minutter)

B1+B3: NipFit®-funktionen er aktiveret

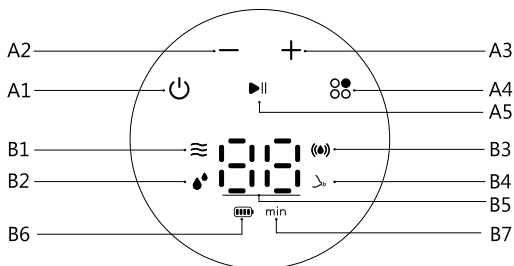

STIMULERINGSFASE (NIVEAU 1~9)

I denne fase genererer pumpen en relativt hurtig sugerytme med lav sugekraft. Den er designet til blidt at stimulere brystvævet og fremme mælkeudskillelse ved at efterligne babyens indledende overfladiske dieopførsel. Det anbefales at bruge denne fase før skift til andre faser.

UDTRYKNINGSFASE (NIVEAU 1~9)

Denne fase efterligner den dybere og langsommere sugerytme hos en baby, når den aktivt drikker mælk. Sugekraften er højere, og frekvensen er langsommere sammenlignet med stimuleringsfasen. Denne indstilling er beregnet til at hjælpe med at udtrække mælk mere effektivt, når reflexen er startet.




ANTI-STASE SUGEFASE (NIVEAU 1~9)

Denne fase giver et pulserende sugemønster, der har til formål grundigt at fjerne resterende mælk i brystet efter udtrykning. Regelmæssig brug kan hjælpe med at forhindre mælkestase, reducere risikoen for tilstoppede mælkegange og opretholde mælkeflow.

NIPFIT®-FUNKTION: For at aktivere funktionen til korrektion af brystvorter skal du trykke på tilstandsknappen, indtil ikonerne (B1) og (B3) begynder at blinke. Funktionen har 3 intensitetsniveauer.

BETJENINGSVEJLEDNING

- 1. FORBEREDELSE:** Før brug af Nuvita 1260W Materno Comfort, vask dine hænder grundigt. Sørg for, at alle komponenter er rene og samlet korrekt i henhold til samlevejledningen. Undgå at samle hovedenheden og USB-kablet ved rengøring.
- 2. POSITIONERING:** Find et stille og komfortabelt sted at sidde. Brug en fodskammel, hvis det er nødvendigt for at opretholde en afslappet, oprejst stilling. Før pumpning kan du forsigtigt stimulere dine bryster med et varmt håndklæde for at stimulere mælkeflow.
- 3. ANVENDELSE:** Centrér silikone brystvolden på din brystvort, og sørg for, at den forsegles tæt omkring dit bryst uden lufthuller. Hold enheden forsigtigt med den ene hånd og støt brystet med den anden for at holde det stabilt.

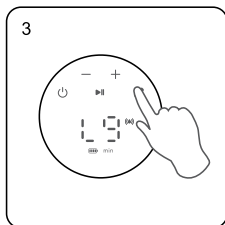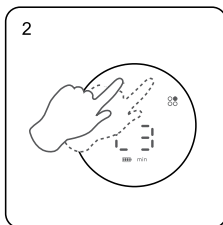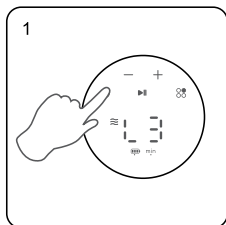

- 4. TÆNDING:** Tryk og hold **(A1)** knappen nede for at starte enheden. Omgivelseslyset vil blinke, og skærmen vil vise det aktuelle sugeniveau. Pumpen starter i stimuleringsfasen.
- 5. JUSTERING AF INTENSITET:** Brug **(A2)** til at reducere og **(A3)** til at øge sugeniveauet når som helst under drift.
- 6. Skift af faser:** For at ændre arbejdsfasen (Stimulering, Udtrykning, Anti-stase, Korrektion), tryk på **(A4)** knappen. Fasen skifter i rækkefølge, og den valgte fase bekræftes af det tilsvarende indikatorlys.
- 7. Pause/Fortsæt:** For at sætte på pause eller genoptage drift, tryk på **(A5)** knappen.
- 8. Afslutning af session:** Når du er færdig, tryk og hold knappen nede for at slukke enheden. Afbryd enheden og begynd rengøringsprocedurer.

Bemærk: Enheden slukkes automatisk efter 30 minutter. Den gemmer den sidst anvendte fase og sugeniveau til din næste brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

A. FØR FØRSTE BRUG

Adskil alle vaskbare dele og rengør grundigt (undtagen hovedenheden og kablet).

B. EFTER HVER BRUG

Adskil og skyl alle dele (undtagen hovedenheden) i koldt vand for at fjerne mælkerester.

Dele der skal rengøres: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10).**

C. DAGLIG DESINFEKTION

- Vask hænder først.
- Adskil alle relevante dele.
- Brug kogende vand eller dampsterilisator i 5 minutter.
- Kog **IKKE** delene **(2, 5, 7, 9, 10).**
- Delene **(3, 4, 8)** må ikke røre varme metaloverflader.

OPBEVARING: Lufttør grundigt og opbevar på et rent, tørt sted.

FORHOLDSREGLER FOR RENGØRING

- Adskil alt tilbehør, der kommer i kontakt med bryst eller modermælk (undtagen hovedenheden).
- Efter brug, rengør delene straks for at undgå mælkerester og bakterievækst.
- Sørg for, at du samler/adskiller hvert tilbehør i henhold til samlevejledningen.
- Tab ikke nogen af delene, når du samler og adskiller.
- Alle silikonekomponenter kan lægges i sterilisator til desinfektion (undtagen hovedenheden).
- **Forholdsregler for ventildesinfektion:** Kog og dampdesinficér ikke i længere end 3 minutter.
- **Forholdsregler for flaskedesinfektion:** Kog og dampdesinficér ikke i længere end 5 minutter.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Indgangsspænding:	DC 5V
Nominel effekt:	6W
Driftstemperatur:	15~30°C
Driftsfugtighed:	50% - 80%
Pakkeindhold:	11 dele
Oprindelsessted:	Kina

GARANTI - VILKÅR OG BETINGELSER

Dette produkt er dækket af en 24-måneders garanti mod fabrikationsfejl, startende fra købsdatoen, der er angivet på kvittering eller faktura. Ved køb med faktura reduceres den lovpligtige garanti til 12 måneder. 24-måneders garantien **dækker ikke** skader som følge af normal slitage på produktet, æstetiske skader, tilbehør eller forbrugsvarer (f.eks. batterier, hoveder eller komponenter, der er udsat for slid). **Batterier er garanteret i en periode på 6 måneder.**

GARANTI UGYLDIGHED: Den lovpligtige garanti på 12/24 måneder bortfalder i følgende tilfælde:

- Produktet er blevet beskadiget på grund af forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
- Produktet er blevet modificeret, manipuleret med eller åbnet.
- Fejlen skyldes utilstrækkelig vedligeholdelse af komponenter, tilbehør eller forbrugsstoffer (f.eks. oxidation, nedsækning af elektriske dele i væsker, rester der blokerer sensoren, lækage af ætsende væske fra batterierne).

GARANTIUNDTAGELSER: Følgende er undtaget fra den 24-måneders lovpligtige garanti:

- Omkostningerne til udskiftning eller reparation af slidte dele og omkostningerne ved almindelig vedligeholdelse af produktet.
- Omkostningerne og risiciene forbundet med transport af produktet til og fra salgsstedet eller det autoriserede center for garantihåndtering.
- Skader som følge af forkert installation eller forkert brug, der ikke er i overensstemmelse med instruktionerne i manualen.
- Skader forårsaget af naturkatastrofer, fald, utilsigtede stød eller miljøforhold, der er uforenelige med produktet.
- Fejl, der har ubetydelig indflydelse på produktets ydeevne.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER:

Producenten, distributøren og alle parter involveret i salget af produktet er ikke ansvarlige for økonomiske tab eller skader som følge af produktets funktionsfejl. I overensstemmelse med gældende lovgivning er de ikke ansvarlige for direkte, indirekte, tab af indkomst, opsparing eller andre konsekvenser som følge af brugen eller manglende evne til at bruge produktet og/eller tilhørende dokumentation (papir eller elektronisk), herunder manglende service.

For yderligere oplysninger om assistancetjenesten, se venligst salgsbetingelserne på hjemmesiden **www.nuivitababy.com**.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Nuvita 1260W draagbare elektrische borstkolf. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze voor later gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

MET HET OOG OP DE VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN U EN UW KINDEREN HEEFT ALLES IN DIT PROJECT BETREKKING OP VEILIGHEID. ZORG ER DAAROM VOOR DAT U ZICH HIERAAN HOUDT.

WAARSCHUWING

1. Gebruik de borstkolf niet tijdens het baden of in een natte omgeving.
2. Bewaar dit product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
3. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en hoge temperaturen.
4. Gebruik het apparaat niet als het zichtbare schade vertoont. Neem voor reparaties contact op met de fabrikant of bevoegd personeel.
5. Bewaar ongebruikte onderdelen buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar of andere ongelukken te voorkomen.

GEVAAR

1. Laad het product niet op en gebruik het niet in de buurt van open vuur of in omgevingen waar de temperatuur hoger is dan 45 °C.
2. Dompel het hoofdaparaat of de USB-kabel niet onder in water, dranken of andere vloeistoffen.
3. Verbrand het hoofdaparaat nooit en stel het nooit bloot aan open vuur.
4. Houd plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

MEDEDELING

- Laad het apparaat volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt.
- Monteer de onderdelen altijd volgens de montagehandleiding.
- Pas de zuigkracht aan op basis van comfort en persoonlijke tolerantie.
- Kantel de melkopvangbeker niet en vul deze niet verder dan de aangegeven limiet.
- Controleer altijd de temperatuur van de melk voordat u uw kind voedt, om brandwonden te voorkomen.
- Als u een lage melkproductie heeft, gebruik het product dan onder medisch toezicht.
- Gebruik de pomp niet te vaak om letsel aan de tepel te voorkomen.
- Stop met het gebruik en raadpleeg een arts of apotheker als er pijn of irritatie optreedt.
- De onderdelen van het apparaat die in contact komen met melk mogen niet tussen gebruikers worden uitgewisseld.
- Gebruik de pomp niet tijdens de zwangerschap, aangezien dit baarmoedercontracties kan veroorzaken.
- Stop met kolven als er binnen 5 minuten geen melk wordt afgekolfd.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals beschreven in de handleiding.

De Nuvita 1260W Materno Comfort is ontworpen om moeders die borstvoeding geven te ondersteunen door het natuurlijke zuigritme van een baby na te bootsen. Deze draagbare elektrische borstkolf is speciaal ontwikkeld om moeders te helpen onderweg efficiënt en comfortabel moedermelk af te kolven, waardoor een soepele en pijnloze kolfervaring wordt gegarandeerd. Het apparaat beschikt over 9 instelbare intensiteitsniveaus, NipFit®-functionaliteit en 3-fasen Careflo®-technologie.



CORRECTIE

De correctiemodus helpt bij het behandelen van ingetrokken of platte tepels door middel van cycli van zachte zuigkracht.



BORSTSCHEM

VOLLEDIG VAN SILICONEN: huidvriendelijk en zacht voor de huid, zorgt voor een zachte en comfortabele pasvorm voor een effectieve zuigkracht.



HET TERUGSTROOMSYSTEEM

voorkomt dat melk terugstroomt naar de motorunit, waardoor de hygiëne en de levensduur van het product worden gewaarborgd.



CAREFLO®-TECHNOLOGIE:

In tegenstelling tot traditionele tweefasige borstkolven introduceert Careflo® naast de standaard stimulatie- en afkolffasen een derde, anti-stasis-afvoerfase. Dit helpt om:

- Zorg voor een gelijkmatiger melkproductie.
- Voorkom verstopte melkkanalen en mastitis.
- Verlicht spanning en stuwung in de borsten.
- Zorg voor een soepeler en ongestoord verloop van de borstvoedingsperiode.



FUNCTIE VAN NIPFIT®:

Correctie van platte of ingetrokken tepels.

Deze functie is bedoeld om platte of ingetrokken tepels te corrigeren en het afkolven te ondersteunen door middel van zachte, geleidelijke stimulatie:

- Het zorgt ervoor dat de tepel naar buiten steekt.
- Het helpt de baby om goed aan de borst aan te leggen.
- Het ondersteunt het opstarten en voortzetten van borstvoeding.

CONTRA-INDICATIES

Gebruik de NipFit®-functie niet als:

1. U heeft open wonden, scheurtjes, laesies of actieve infecties aan uw tepel of tepelhof.
2. U hebt onlangs een borstoperatie ondergaan.
3. Er is bij u een diagnose gesteld van ingetrokken tepels als gevolg van een ziekte of letsel; het gaat niet om een aangeboren aandoening. Als dit het geval is, raadpleeg dan eerst uw arts.
4. Vanaf de eerste toepassing voelt u een scherpe pijn. Stop onmiddellijk met het gebruik.
5. U hebt een bijzonder gevoelige huid of u lijdt aan plaatselijke huidaandoeningen, zoals eczeem of psoriasis.
6. Je bent zwanger. Afzuigen kan weeën opwekken.



WAARSCHUWING

De NipFit®-functie is uitsluitend bedoeld voor gebruik na de bevalling. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap.


WAARSCHUWINGEN TIJDENS HET GEBRUIK

- Begin altijd op het laagste niveau, niveau 1. Verhoog de intensiteit pas als de tepel zich geleidelijk heeft aangepast, ook al voelt het prettig aan.
- Gebruik de NipFit®-functie niet langer dan 5-10 minuten achter elkaar per sessie, vooral niet in de eerste paar weken.
- Voer niet meer dan 2 correctiesessies per dag uit. Overmatig gebruik kan irritatie, zwelling of microscheurtjes aan de tepel veroorzaken.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u scherpe pijn, abnormale roodheid, aanhoudende zwelling, blaren of afscheiding van andere vloeistoffen dan melk ervaart.
- Dit apparaat is geen gecertificeerd medisch hulpmiddel voor klinische behandeling en vormt geen vervanging voor een consult bij een verloskundige, arts of International Board Certified Lactation Consultant (IBCLC).
- Een ernstig ingetrokken tepel van graad 3 moet medisch worden onderzocht voordat een correctiehulpmiddel wordt gebruikt.
- Langdurig gebruik met hoge intensiteit kan zwelling van de tepelhof veroorzaken, waardoor het voor de baby tijdelijk moeilijker wordt om aan te happen. Dit kan het tegenovergestelde effect hebben van wat je wilt bereiken.

AANWIJZINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK:

- Zorg ervoor dat de siliconencup de juiste maat heeft, inclusief de flens van 24 mm of de verloopstukken van 20/22 mm, voordat u de NipFit®-functie activeert. Een te grote cup kan de zuigkracht op het tepelhof op een ongecontroleerde manier versterken.
- Breng vóór de behandeling een paar druppels moedermelk of pure lanolinecrème aan om het gebied zachter te maken.
- Tijdens de NipFit®-sessie moet de tepel in het midden van de cup zitten. Een verkeerde positie kan leiden tot asymmetrische zuigkracht en irritatie.
- Als u na 4 tot 6 weken correct gebruik geen verbetering merkt, raadpleeg dan een arts of andere zorgverlener.


PRODUCTONDERDELEN

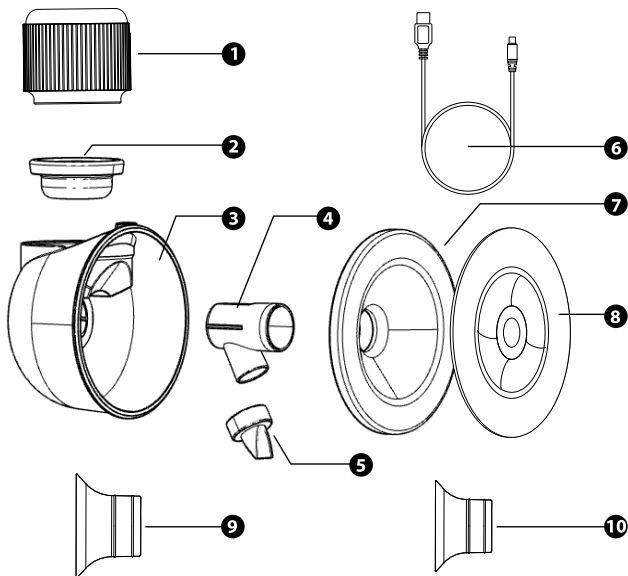

NEE.	NAAM	MATERIAAL	AANTAL
1	Hoofdunit	\	1
2	Siliconenmembraan	Siliconen	1
3	Bekerlichaam	Polypropyleen	1
4	Connector	Polypropyleen	1
5	Klep	Siliconen	1
6	USB-kabel	\	1
7	Siliconen borstscherm	Siliconen	1
8	Stofbestendige hoes	Polypropyleen	1
9	siliconen inzetstuk van 22 mm	Siliconen	1
10	siliconen inzetstuk van 20 mm	Siliconen	1

MONTAGEHANDLEIDING


1. Steek de klep in de aansluiting en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
2. Bevestig de aansluiting aan de behuizing van de beker.
3. Plaats het siliconenmembraan bovenop de beker en druk het naar beneden totdat het aan alle kanten goed aansluit.
4. Bevestig het siliconen borstschild stevig op de beker.
5. Bevestig het hoofdapparaat op het siliconenmembraan totdat het vastklikt.

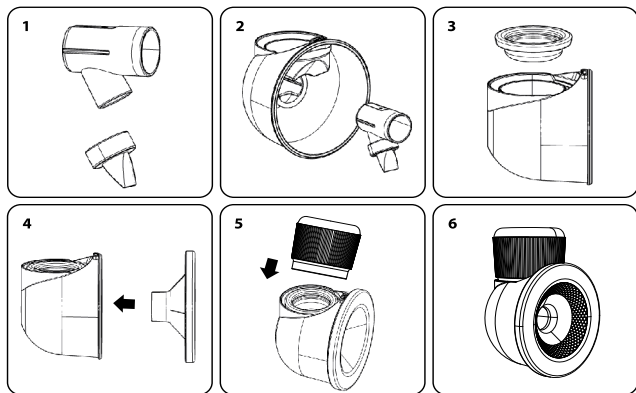

OPLAADMETHODE

GEbruik DE MEEGELEVERDE USB-KABEL OM DE POMP OP TE LADEN:

- Geschikt voor: USB-poorten van computers, stroomadapters of powerbanks.
- Gebruik uitsluitend powerbanks met een uitgangsvermogen van maximaal **5 V/3 A**.
- Het LED-batterijpictogram geeft de oplaadstatus aan:
 - Als het symbool **(B6)** knippert, wordt het apparaat opgeladen
 - Als het symbool niet knippert en AAN staat, is het apparaat volledig opgeladen

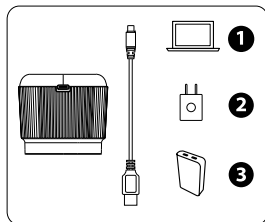

OPMERKING: Schakel de pomp altijd uit voordat u deze oplaadt.

BESCHRIJVING VAN HET PANEEL

A1: Aan/uit-knop (ingedrukt houden om in of uit te schakelen)

A2: Verlaag het zuigniveau

A3: Verhoog het zuigniveau

A4: Fase-schakelaar (Stimulatie / Afvoer / Anti-stasis / Correctie)

A5: Pauzeren/Doorgaan

B1: Indicator voor de stimulatiefase

B2: Indicator voor de expressiefase

B3: Indicator voor de antistasefase


B4: Indicator voor de correctiefase

B5: Werkniveau / Tijdweergave

B6: Indicator batterijniveau

B7: Weergave tijdseenheid (minuten)

B1+B3: NipFit®-functie geactiveerd

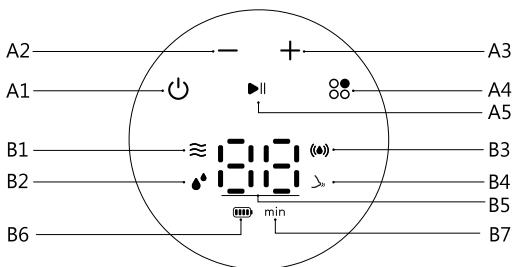

STIMULATIEFASE (NIVEAU 1-9): In deze fase produceert de pomp een relatief snel zuigritme met een lage zuigkracht. Deze fase is bedoeld om het borstweefsel zachtjes te stimuleren en de melkafgifte te bevorderen door het aanvankelijke, oppervlakkige zuiggedrag van een baby na te bootsen. Het wordt aanbevolen om deze fase te gebruiken voordat u overschakelt naar andere fasen.


EXPRESSIEFASE (NIVEAU 1-9): Deze fase boost het diepere en langzamere zuigritme na van een baby die actief melk drinkt. De zuigkracht is groter en de frequentie is lager dan in de stimulatiefase. Deze instelling is bedoeld om de melk effectiever af te kolven zodra de toeschietreflex is ingezet.

ANTI-STASIS-ZUIGFASE (NIVEAU 1-9): Deze fase biedt een pulserend zuigpatroon dat bedoeld is om de resterende melk in de borst na het afkolven grondig te verwijderen. Regelmatig gebruik kan helpen om melkstagnatie te voorkomen, het risico op verstopte melkkanalen te verminderen en de melkstroom op peil te houden.

NIPFIT®-FUNCTIE: Om de tepelcorrectiefunctie te activeren, drukt u op de modusknop totdat de pictogrammen (B1) en (B3) gaan knipperen. De functie heeft 3 intensiteitsniveaus.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1. VOORBEREIDING:** Was je handen grondig voordat je de Nuvita 1260W Materno Comfort gaat gebruiken. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon zijn en correct zijn gemonteerd volgens de montagehandleiding. Monteer de hoofdunit en de USB-kabel niet tijdens het schoonmaken.
- 2. HOUDING:** Zoek een rustige en comfortabele plek om te zitten. Gebruik indien nodig een voetsteun om een ontspannen, rechte houding aan te nemen. Voordat je gaat kolven, kun je je borsten zachtjes stimuleren met een warme handdoek om de melkstroom op gang te brengen.
- 3. GEBRUIK:** Plaats het siliconen borstschild in het midden van uw tepel en zorg ervoor dat het strak om uw borst aansluit, zonder luchtopeningen. Houd het borstschild voorzichtig vast met één hand en ondersteun de borst met de andere hand om deze stabiel te houden.

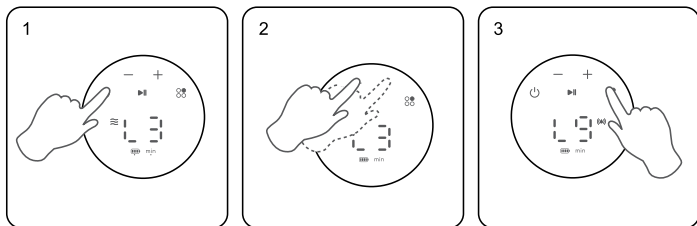

- 4. INSCHAKELLEN:** Houd de **(A1)**-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Het omgevingslampje gaat knipperen en op het scherm wordt het huidige zuigniveau weergegeven. De pomp begint in **de stimulatiefase**.
- 5. DE ZUIGKRACHT AANPASSEN:** Gebruik **(A2)** om de zuigkracht te verlagen en **(A3)** om deze te verhogen, op elk moment tijdens het gebruik.
- 6. VAN FASE WISSELEN:** Om de werkfase te wijzigen (Stimulatie, Afvoer, Anti-stasis, Correctie), drukt u op de knop **(A4)**. De fasen wisselen achtereenvolgens en de geselecteerde fase wordt aangegeven door het bijbehorende indicatielampje.
- 7. PAUZEREN/DOORGAAN:** Druk op de knop **(A5)** om de werking te pauzeren of te hervatten.
- 8. DE SESSIE BEËINDIGEN:** Als u klaar bent, houdt u de knop ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Koppel het apparaat los en begin met het schoonmaken.

OPMERKING: Het apparaat schakelt na 30 minuten automatisch uit. Het slaat de laatst gebruikte fase en zuigkracht op voor de volgende keer dat u het apparaat gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

A. VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Demonteer alle afwasbare onderdelen en maak ze grondig schoon (met uitzondering van het hoofdapparaat en de kabel).

B. NA ELK GEBRUIK

Demonteer alle onderdelen (met uitzondering van het hoofdapparaat) en spoel ze af onder koud water om melkresten te verwijderen.

Te reinigen onderdelen: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DAGELIJKSE DESINFECTIE

- Was eerst je handen.
- Haal alle relevante onderdelen uit elkaar.
- Steriliseer het gedurende **5 minuten** met kokend water of in een stoomsterilisator.
- Kook de onderdelen **(2, 5, 7, 9, 10) NIET**.
- Onderdelen **(3, 4, 8)** mogen geen contact maken met hete metalen oppervlakken.

BEWARING: Laat het product grondig aan de lucht drogen en bewaar het op een schone, droge plaats.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET SCHOONMAKEN

- Demonteer alle onderdelen die in contact komen met de borst of moedermelk. (met uitzondering van het hoofdapparaat)
- Reinig de onderdelen na gebruik onmiddellijk om melkresten en bacteriegroei te voorkomen.
- Zorg ervoor dat u elk accessoire volgens de montage-instructies monteert/demonteert.
- Zorg ervoor dat u bij het monteren en demonteren geen onderdelen kwijtraakt
- Alle siliconenonderdelen kunnen ter desinfectie in de sterilisator worden geplaatst (met uitzondering van het hoofdapparaat).
- **Voorzorgsmaatregelen bij het desinfecteren van kleppen:** Niet koken en niet langer dan 3 minuten met stoom desinfecteren.
- **Voorzorgsmaatregelen bij het desinfecteren van flessen:** Niet langer dan 5 minuten koken of met stoom desinfecteren.

PRODUCTSPECIFICATIE

Ingangsspanning:	5 V gelijkstroom
Nominaal vermogen:	6W
Bedrijfstemperatuur:	15–30 °C
Luchtvochtigheid tijdens gebruik:	50% - 80%
Inhoud van de verpakking:	11 onderdelen
Herkomst:	Volksrepubliek China

GARANTIE - ALGEMENE VOORWAARDEN

Op dit product geldt een garantie van 24 maanden voor fabricagefouten, ingaande op de aankoopdatum zoals blijkt uit het aankoopbewijs of de factuur. Bij aankoop op basis van een factuur wordt de wettelijke garantie beperkt tot 12 maanden. De garantie van 24 maanden **geldt niet voor** schade als gevolg van normale slijtage van het product, cosmetische schade, accessoires of verbruiksartikelen (zoals batterijen, opzetstukken of onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn). **Op batterijen geldt een garantie van 6 maanden.**

ONGELDIGE GARANTIE

De wettelijke garantie van 12/24 maanden vervalt in de volgende gevallen:

1. Het product is beschadigd door onjuist gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de handleiding.
2. Het product is aangepast, gemanipuleerd of geopend.
3. De storing wordt veroorzaakt door onvoldoende onderhoud van de onderdelen, accessoires of verbruiksartikelen (bijvoorbeeld oxidatie, onderdompeling van elektrische onderdelen in vloeistoffen, resten die de sensor verstoppert, het lekken van bijtende vloeistof uit de batterijen).

UITSLUITINGEN VAN DE GARANTIE

Het volgende valt buiten de wettelijke garantie van 24 maanden:

1. De kosten voor de vervanging of reparatie van slijtageonderdelen en de kosten in verband met het normale onderhoud van het product.
2. De kosten en risico's die gepaard gaan met het vervoer van het product van en naar het verkooppunt of het erkende centrum voor garantiebeheer.
3. Schade die het gevolg is van onjuiste installatie of oneigenlijk gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de handleiding.
4. Schade veroorzaakt door natuurrampen, vallen, onbedoelde stoten of omgevingsomstandigheden die niet geschikt zijn voor het product.
5. Gebreken die een verwaarloosbare invloed hebben op de prestaties van het product.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN:

De fabrikant, de distributeur en alle partijen die bij de verkoop van het product betrokken zijn, zijn niet aansprakelijk voor economische verliezen of schade die voortvloeit uit een storing van het product. Overeenkomstig de geldende wetgeving zijn zij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, inkomstenverlies, verlies van besparingen of andere gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen tot gebruik van het product en/of de bijbehorende documentatie (op papier of in elektronische vorm), met inbegrip van het uitblijven van service.

Voor meer informatie over de hulpdienst kunt u de verkoopvoorwaarden raadplegen op de website **www.nuvitababy.com**.

Faleminderit që keni blerë pompën elektrike të gjirit të veshshme Nuvita 1260W. Ju lutemi lexoni me kujdes manualin përpara përdorimit dhe ruajeni për referencë të ardhshme.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN TUAJ DHE TË FËMIJËVE TUAJ, TË GJITHË PËRMBAJTJA E KËTIJ PROJEKTI LIDHET ME SIGURINË. JU LUTEMI SIGUROHUNI T'I RESPEKTONI.

KUJDES

1. Mos përdorni pompën e gjirit gjatë dushit ose në mjedise të lagështa.
2. Mbajeni këtë produkt larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
3. Shmangni ekspozimin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe temperaturave të larta.
4. Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar dukshëm. Kontaktoni prodhuesin ose personelin e autorizuar për riparime.
5. Mbani pjesët e papërdorura larg arritjes së fëmijëve për të shmangur mbytjen ose aksidente të tjera.

RREZIK

1. Mos e karikoni ose përdorni produktin pranë flakëve të hapura ose në mjedise me temperaturë mbi 45°C.
2. Mos zhytni njësinë kryesore ose kabllon USB në ujë, pije ose lëngje të tjera.
3. Mos e djegni kurrë me zjarr ose mos e ekspozoni njësinë kryesore ndaj flakëve të hapura.
4. Mbani paketimin plastik larg fëmijëve për të shmangur rrezikun e mbytjes.

NJOFTIM

- Kariko pajisjen plotësisht para përdorimit të parë.
- Gjithmonë montoni komponentët duke ndjekur udhëzimet e montimit.
- Rregulloni forcën e thithjes bazuar në rehati dhe tolerancën personale.
- Mos e pjerrë ose mos e mbushni tepriçë kupën e mbledhjes së qumështit përtej kufirit të shënuar.
- Gjithmonë kontrolloni temperaturën e qumështit para ushqyerjes për të shmangur djegiet.
- Nëse keni furnizim të ulët me qumësht, përdorni produktin nën udhëzimin mjekësor.
- Mos e përdorni pompën tepër për të shmangur dëmtimin e thithave.
- Ndërprisni përdorimin dhe konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor nëse ndodh dhimbje ose irritim.
- Mos ndani me përdorues të tjerë komponentët e pajisjes që kontaktojnë qumështin.
- Mos e përdorni pompën gjatë shtatzënisë, pasi mund të shkaktojë kontraktime të mitrës.
- Ndalo pompimin nëse brenda 5 minutash nuk shprehet asnjë qumësht.
- Përdorni këtë produkt vetëm siç përshkruhet në manual.

Nuvita 1260W Materno Comfort është projektuar për të mbështetur nënat që ushqejnë me gji duke imituar ritmin natyral të thithjes së foshnjës. Kjo pompë elektrike e gjirit e veshshme është enjëzuar posaçërisht për t'i ndihmuar nënat të nxjerrin qumështin e gjirit në mënyrë efikase dhe komode gjatë lëvizjes, duke siguruar një përvojë pompimi pa dhimbje dhe të pandërprerë. Ajo ka 9 nivele intensiteti të rregullueshëm, funksionalitetin NipFit® dhe teknologjinë Careflo® me 3 faza.



KORRIGJIM

Modaliteti i korrigjimit ndihmon në trajtimin e thithave të kthyer mbrapsht ose të sheshta përmes cikleve të thithjes së butë.



MBROJTËSI

I GJIRIT ME SILIKON TË PLOTË, i butë dhe i përshtatshëm për lëkurën, ofron një përshtatje të butë dhe të rehatshme për thithje efektive.



SISTEMI

ANTI-RRJEDHJE MBRAPSH parandalon që qumështi të rrjedhë prapa në njësinë e motorit, duke siguruar higjienën dhe jetëgjatësinë e produktit.



TEKNOLOGJIA CAREFLO®:

Ndryshe nga pompat tradicionale të gjirit me dy faza, Careflo® prezanton një fazë të tretë të drenazhit anti-stazë përkrah fazave standarde të stimulimit dhe shprehjes. Kjo ndihmon të:

- Promovoni një furnizim më të qëndrueshëm me qumësht.
- Parandaloni bllokimin e kanaleve dhe mastitin.
- Lehtëson tensionin dhe mbushjen e gjoksit.
- Mbështet një rrugëtim më të lehtë dhe të pandërprerë të ushqyerjes me gji.



FUNKSIONI I NIPFIT®:

Korrigjimi i thithave të sheshta ose të kthyer mbrapsht.

Ky funksion është projektuar për të ndihmuar në korrigjimin e thithave të sheshta ose të kthyer mbrapsht dhe për të mbështetur nxjerrjen e qumështit përmes stimulimit të butë e progresiv:

- Ndihmon që thithi të dalë jashtë.
- Lehtëson kapjen e gjirit nga foshnja.
- Ai mbështet fillimin dhe vazhdimin e ushqyerjes me gji.

Mos përdorni veçorinë NipFit® nëse:

1. Keni plagë të hapura, çarje, lezime ose infeksione aktive në thith ose areolë.
2. Ju keni pasur së fundmi një operacion në gjoks.
3. Ju keni një gjendje të diagnostikuar të inversimit të thithave të shkaktuar nga sëmundje ose traumë, jo kongjenitale. Nëse ky është rasti, konsultohuni së pari me mjekun tuaj.
4. Ndjeni dhimbje të mprehtë që nga aplikimi i parë. Ndërprisni përdorimin menjëherë.
5. Keni lëkurë veçanërisht të ndjeshme ose vuani nga sëmundje lokale të lëkurës, si ekzema ose psoriaza.
6. Jeni shtatzënë. Aspirimi mund të stimulojë kontraksionet.



KËRCËNIM

Karakteristika NipFit® është e destinuar vetëm për përdorim pas lindjes. Mos e përdorni gjatë shtatzënisë.


PARALAJMËRIME GJATË PËRDORIMIT

- Gjithmonë filloni në nivelin më të ulët, Niveli 1. Mos e rrisni intensitetin derisa thithi të mos jetë përshtatur gradualisht, edhe nëse ndjesia është e rehatshme.
- Mos tejkaloni 5–10 minuta përdorim të vazhdueshëm të veçorisë NipFit® për seancë, veçanërisht gjatë disa javëve të para.
- Mos kryeni më shumë se 2 seanca korrigjimi në ditë. Përdorimi i tepruar mund të shkaktojë irritim, ënjtje ose mikro-çarje në thith.
- Ndërprisni menjëherë përdorimin nëse ndjeni dhimbje të mprehtë, skuqje të pazakontë, ënjtje të vazhdueshme, flluska ose rrjedhje të lëngut tjetër përveç qumështit.
- Ky pajisje nuk është një pajisje mjekësore e certifikuar për terapi klinike dhe nuk zëvendëson konsultimin me një mamie, mjek apo Konsulent Ndërkombëtar të Certifikuar për Laktacion (IBCLC).
- Një thithk i kthyer në klasën 3, shumë i ngjithshëm, kërkon vlerësim mjekësor para përdorimit të çdo pajisjeje korrigjuese.
- Përdorimi i zgjatur me intensitet të lartë mund të shkaktojë ënjtje të areolës, duke e bërë përkohësisht më të vështirë për foshnjën të kapet. Kjo mund të ketë efekt të kundërt me atë të dëshiruar.

UDHËZIME PËR PËRDORIM TË SIGURT:

- Sigurohuni që kupa prej silikoni të jetë në madhësinë e duhur, duke përfshirë flanaxhën 24 mm ose reduktuesit 20/22 mm, para aktivizimit të veçorisë NipFit®. Një kupë që është shumë e madhe mund të forcojë thithjen në areolë në mënyrë të pakontrolluar.
- Para seancës, aplikoni disa pika qumështi gjiri ose krem lanolinë të pastër për të zbutur zonën.
- Gjatë seancës NipFit®, thithi duhet të jetë i qendruar në kupë. Një pozicion i pasaktë mund të shkaktojë thithje asimetrike dhe irritim.
- Nëse nuk vëreni asnjë përmirësim pas 4-6 javësh përdorimi të duhur, konsultohuni me një profesionist të kujdesit shëndetësor.


PËRBËRËSIT E PRODUKTIT

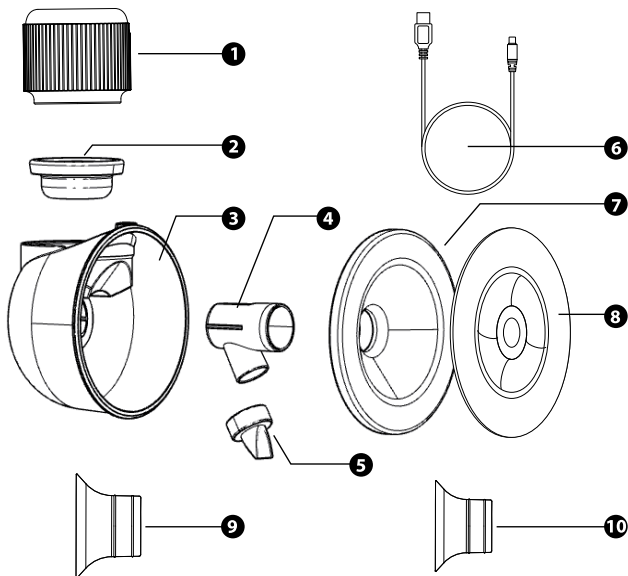

JO.	EMËR	Material	SASI
1	Njësia kryesore	\	1
2	Diafragmë silikon	Silikon	1
3	Trupi i kupës	Polipropileni	1
4	Lidhës	Polipropileni	1
5	Valvë	Silikon	1
6	Kablli USB	\	1
7	Mbrotjtëse silikon për gjinj	Silikon	1
8	Mbulesë e papërshkueshme nga pluhuri	Polipropileni	1
9	Futje silikon 22 mm	Silikon	1
10	Futje silikon 20 mm	Silikon	1

UDHËZIME PËR MONTIM


1. Futni valvulën në lidhës dhe sigurohuni që të përshtatet ngushtë.
2. Ngjitni lidhësin në trupin e gotës.
3. Vendosni diafragmën prej silikonit mbi trupin e kupës dhe shtypni poshtë derisa të mbyllet hermetikisht në të gjitha anët.
4. Vendosni mburojën e silikonit për gjinjë në mënyrë të sigurt mbi trupin e kupës.
5. Ngjitni njësinë kryesore në diafragmën prej silikonit derisa të dëgjohet klik.

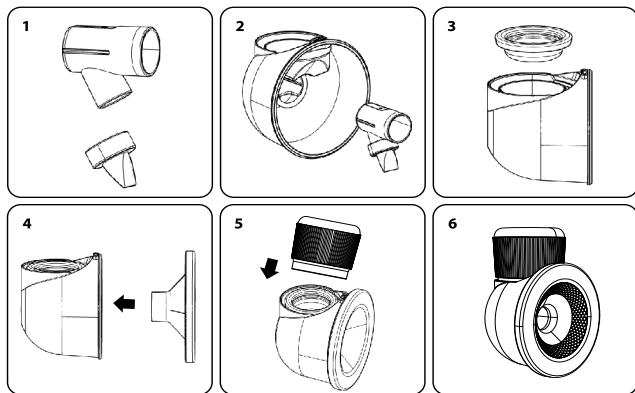

METODA E KARIKIMIT

PËRDORNI KABLLON USB TË FURNIZUAR PËR TË KARIKUAR POMPËN:

- Kompatibil me: portat USB të kompjuterit, adapterët e energjisë ose power bank-et.
- Përdorni vetëm power bank-e me dalje që nuk tejkalon **5V/3A**.
- Ikona e baterisë LED tregon gjendjen e karikimit:
 - Nëse simboli **(B6)** pulson, pajisja po karikohet.
 - Nëse simboli nuk pulson dhe ON, pajisja është plotësisht e karikuar.

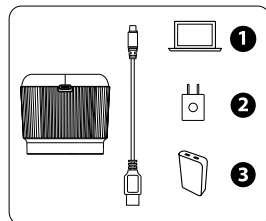

SHËNIM: Gjithmonë fikni pompën para karikimit.

PËRSHKRIMI I PANELIT

A1: Butoni i ndezjes (Shtypni dhe mbani të ndezur/fikur)

A2: Ulni nivelin e thithjes

A3: Rritni nivelin e thithjes

A4: Ndërrim faze (Stimulim / Shprehje / Anti-stazë / Korrigjim)

A5: Pushim/Vazhdim

B1: Treguesi i Fazës së Stimulimit

B2: Treguesi i Fazës së Shprehjes

B3: Treguesi i Fazës Anti-stazë


B4: Indikator i fazës së korrigjimit

B5: Niveli i punës / Shfaqja e kohës

B6: Treguesi i nivelit të baterisë

B7: Shfaqja e njësisë së kohës (minuta)

B1+B3: Funkzioni NipFit® aktivizuar

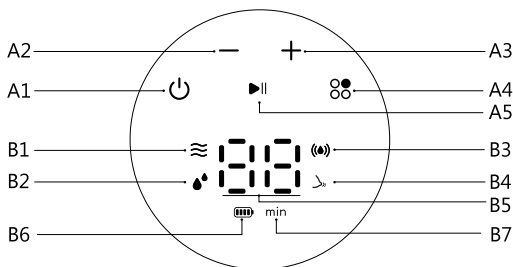

FAZA E STIMULIMIT (NIVELI 1~9): Në këtë fazë, pompa gjeneron një ritëm thithjeje relativisht të shpejtë me fuqi thithjeje të ulët. Ajo është projektuar për të stimuluar butësisht indin e gjurit dhe për të nxjerrë nxjerrjen e qumështit duke imituar sjelljen fillestare të thithjes së cekët të një foshnjeje. Rekomandohet të përdoret kjo fazë para se të kaloni në faza të tjera.


FAZA E SHPREHJES (NIVELI 1~9): Kjo fazë imiton ritmin më të thellë dhe më të ngadaltë të thithjes së një foshnje kur pi aktivisht qumësht. Forca e thithjes është më e lartë, dhe frekuenca është më e ngadaltë krahasuar me fazën e stimulimit. Ky rregullim synon të ndihmojë në nxjerrjen më efektive të qumështit sapo të ketë filluar refleksi i rrjedhjes së qumështit.

FAZA E THITHJES ANTI-STAZË (NIVELI 1~9): Kjo fazë ofron një model pulsues thithjeje që synon të heqë plotësisht qumështin e mbetur në gjoks pas shprehjes. Përdorimi i rregullt mund të ndihmojë në parandalimin e stazës së qumështit, reduktimin e rrezikut të bllokimit të kanaleve dhe ruajtjen e rrjedhjes së qumështit.

FUNKSIONI NIPFIT®: Për të aktivizuar funksionin e korrigjimit të thithave, shtypni butonin e modalitetit derisa ikonat (**B1**) dhe (**B3**) të fillojnë të pulsojnë. Ky funksion ka 3 nivele intensiteti.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

- 1. PËRGATITJE:** Para përdorimit të Nuvita 1260W Materno Comfort, lani duart plotësisht. Sigurohuni që të gjithë komponentët të jenë të pastër dhe të montuar siç duhet sipas Udhëzimeve të Asamblesë. Shmangni montimin e njësisë kryesore dhe kabllit USB gjatë pastrimit.
- 2. POZICIONIMI:** Gjeni një vend të qetë dhe të rehatshëm për t'u ulur. Përdorni një mbështetëse këmbësh nëse është e nevojshme për të ruajtur një qëndrim të relaksuar dhe të drejtë. Para pompimit, mund të stimuloni butësisht gjokset tuaja me një peshqir të ngrohtë për të nxitur rrjedhjen e qumështit.
- 3. APLIKIMI:** Qendrosni mburojën silikonit për gjoksin mbi thithin tuaj dhe sigurohuni që ajo të mbyllet ngushtë rreth gjoksit pa hapësira ajri. Mbani njësinë butësisht me njëren dorë dhe mbështetni gjoksin me tjetrën për ta mbajtur të qëndrueshëm.

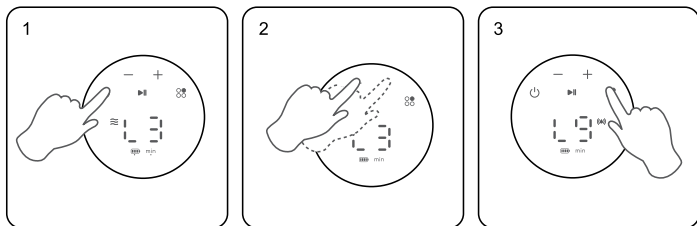

- 4. NDIZJA:** Shtypni dhe mbani të shtypur butonin **(A1)** për të ndezur pajisjen. Drita e ambientit do të pulsojë, dhe ekrani do të shfaqë nivelin aktual të thithjes. Pompa fillon në **Fazën e Stimulimit**.
 - 5. RREGULLIMI I INTENSITETIT:** Përdorni **(A2)** për të ulur dhe **(A3)** për të rritur nivelin e thithjes në çdo kohë gjatë funksionimit.
 - 6. NDRYSHIMI I FAZAVE:** Për të ndryshuar fazën e punës (Stimulim, Shprehje, Anti-stazë, Korrigjim), shtypni butonin **(A4)**. Faza do të ndryshojë në mënyrë radhore, dhe faza e zgjedhur konfirmohet nga drita tregtuese përkatëse.
 - 7. NDALO/VAZHDO:** Për të ndalur ose rifilluar funksionimin, shtypni butonin **(A5)**.
 - 8. MBYLLJA E SEANCËS:** Kur të keni përfunduar, shtypni dhe mbani të shtypur butonin për të fikur pajisjen. Shkëputni njësinë dhe filloni procedurat e pastrimit.
- SHËNIM:** Pajisja do të fiket automatikisht pas 30 minutash. Ajo ruan fazën dhe nivelin e thithjes së përdorur së fundmi për përdorimin tuaj të ardhshëm.

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

A. PARA PËRDORIMIT TË PARË

Çmontoni të gjitha pjesët e larges dhe pastroni mirë (përveç njësive kryesore dhe kabllit).

B. PAS ÇDO PËRDORIMI

Çmontoni dhe shpëljani të gjitha pjesët (përveç njësive kryesore) me ujë të ftohtë për të hequr mbetjet e qumështit.

Pjesët për t'u pastruar: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DEZINSEKTIM DITOR

- Lani duart së pari.
- Nxirni të gjitha pjesët e rëndësishme.
- Përdorni ujë të valuar ose sterilizues me avull për 5 **minuta**.
- **Mos i** ziej pjesët **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Pjesët **(3, 4, 8)** nuk duhet të prekin sipërfaqet metalike të nxehta.

Ruajtja: Thaheni plotësisht në ajër dhe ruajeni në një vend të pastër, të thatë.

PARAPRAKUJDESJET PËR PASTRIMIN

- Çmontoni të gjitha aksesoret që vijnë në kontakt me gjoksin ose qumështin e gjirit (përveç njësive kryesore).
- Pas përdorimit, pastroni pjesët menjëherë për të shmangur mbetjet e qumështit dhe rritjen e baktereve.
- Sigurohuni që të montoni/çmontoni secilin aksesor sipas udhëzimeve të montimit.
- Mos humbni asnjë nga pjesët gjatë montimit dhe çmontimit.
- Të gjithë komponentët prej silikoni mund të vendosen në sterilizator për dezinfektim (përveç njësive kryesore).
- **Masat paraprake për dezinfektimin e valvulës:** Mos e ziejni dhe mos e dezinfektoni me avull për më shumë se 3 minuta.
- **Paraprakujtjet për dezinfektimin e shishes:** Mos e ziejni dhe mos e dezinfektoni me avull për më shumë se 5 minuta.

SPECIFIKIMI I PRODUKTIT

Voltazhi i hyrjes:	DC 5V
Fuqia e vlerësuar:	6W
Temperatura e funksionimit:	15~30°C
Ullësia e funksionimit:	50% - 80%
Përmbajtja e paketës:	11 pjesë
Vendi i origjinës:	PRC

GARANCIA - KUSHTET DHE RREGULLAT

Ky produkt mbulohet nga një garanci 24-mujore për defekte prodhimi, duke filluar nga data e blerjes e provuar me faturë ose me kupon. Në rast blerjeje me faturë, garancia ligjore reduktohet në 12 muaj. Garancia 24-mujore **nuk përfshin** dëmtimet që rrjedhin nga konsumimi normal i produktit, dëmtimet estetike, aksesoret ose materialet e konsumit (p.sh. bateritë, kokat ose komponentët që i nënshtrohen konsumit). **Bateritë garantohen për një periudhë prej 6 muajsh.**

GARANCI E PAVLEFSHME

Garancia ligjore 12/24-mujore skadon në rastet e mëposhtme:

1. Produkti është dëmtuar për shkak të përdorimit të papërshtatshëm, jo në përputhje me udhëzimet në manual.
2. Produkti është modifikuar, manipuluar ose hapur.
3. Defekti shkaktohet nga mirëmbajtje e pamjaftueshme e komponentëve, aksesoreve ose furnizimeve (p.sh. oksidimi, zhytja e pjesëve elektrike në lëngje, mbetjet që bllokojnë sensorin, rrjedhja e lëngut korroziv nga bateritë).

PËRJASHTIMET E GARANCISË

Të mëposhtmet përjashtohen nga garancia ligjore 24-mujore:

1. Kostot për zëvendësimin ose riparimin e pjesëve që i nënshtrohen konsumit dhe ato që lidhen me mirëmbajtjen e zakonshme të produktit.
2. Kostot dhe reziqet e lidhura me transportimin e produktit nga dhe në pikën e shitjes ose në qendrën e autorizuar për menaxhimin e garancisë.
3. Dëmtimet që rezultojnë nga instalimi i gabuar ose përdorimi i papërshtatshëm, në kundërshtim me udhëzimet e manualit.
4. Dëmtimet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, rëniet, goditjet aksidentale ose kushtet mjedisore të papajtueshme me produktin.
5. Defektet që kanë një ndikim të parëndësishëm në performancën e produktit.

KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË:

Prodhuesi, shpërndarësi dhe të gjitha palët e përfshira në shitjen e produktit nuk janë përgjegjës për humbjet ekonomike ose dëmet që rrjedhin nga keqfunksionimi i produktit. Sipas legjisllacionit në fuqi, ata nuk janë përgjegjës për dëme të drejtpërdrejta, të tërthorta, humbje të të ardhurave, kursimeve ose pasoja të tjera që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur produktin dhe/ose dokumentacionin e lidhur (në letër ose elektronik), përfshirë mungesën e shërbimit.

Për detaje të mëtejshme mbi shërbimin e ndihmës, ju lutemi konsultohuni me Kushtet e Shitjes të disponueshme në faqen e internetit **www.nuvitababy.com**.

Köszönjük, hogy megvásárolta a Nuvita 1260 W-os hordható elektromos mellszívót. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

AZ ÖN ÉS GYERMEKEI BIZTONSÁGA ÉS EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN A PROJEKT MINDEN RENDELKEZÉSE A BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS. KÉRJÜK, FELTÉTLENÜL TARTSA BE AZOKAT.

FIGYELEM

1. Ne használja a mellszívót fürdés közben vagy nedves környezetben.
2. Ezt a terméket tartsa gyermekek és háziállatok elől elzárva.
3. Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet.
4. Ne használja a készüléket, ha láthatóan megsérült. A javítás érdekében vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a felhatalmazott szakemberrel.
5. A fel nem használt alkatrészeket tartsa gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a fulladásveszélyt vagy egyéb baleseteket.

VESZÉLY

1. Ne töltsse fel és ne használja a terméket nyílt láng közelében, illetve 45 °C feletti hőmérsékletű környezetben.
2. Ne merítse a készüléket vagy az USB-kábelt vízbe, italba vagy más folyadékba.
3. Soha ne égesse el a készüléket, és ne tegye ki nyílt lángnak.
4. A fulladásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag csomagolóanyagokat gyermekektől távol.

KÖZLEMÉNY

- Az első használat előtt töltsse fel teljesen a készüléket.
- Az alkatrészeket mindig az összeszerelési útmutató szerint szerelje össze.
- A szívóerőt a kényelem és az egyéni tűrőképesség alapján állítsa be.
- Ne döntse meg a tejgyűjtő poharat, és ne töltsse túl a jelzett határértéken.
- Az égési sérülések elkerülése érdekében etetés előtt mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét.
- Ha kevés a tejtermelése, a terméket orvosi utasítás alapján használja.
- Ne használja túl gyakran a szivattyút, hogy elkerülje a mellbimbó sérülését.
- Fájdalom vagy irritáció esetén hagyja abba a használatát, és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Ne osszák meg a felhasználók között azokat az eszközalkatrészeket, amelyek érintkezésbe kerülnek a tejjel.
- Terhesség alatt ne használja a pumpát, mivel méhösszehúzódásokat okozhat.
- Ha 5 percen belül nem jön ki tej, hagyja abba a szivattyúzást.
- Ezt a terméket kizárólag a használati útmutatóban leírtak szerint használja.

A Nuvita 1260W Materno Comfort készüléket úgy tervezték, hogy a csecsemő természetes szopási ritmusát utánozva támogassa a szoptató anyákat. Ezt a hordható elektromos mellszívót kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy az anyák útközben is hatékonyan és kényelmesen tudjanak anyatejet lefejni, biztosítva ezzel a zökkenőmentes és fájdalommentes szivattyúzási élményt. 9 állítható intenzitási szinttel, NipFit® funkcióval és 3-fázisú Careflo® technológiával rendelkezik.



KORREKCIÓ

A korrekciós mód gyengéd szívási ciklusok segítségével segít a behúzott vagy lapos mellbimbók kezelésében.



TELJESEN SZILIKONBÓL KÉSZÜLT MELLPAJZS

: bőrbarát és kíméletes a bőrrel, puha és kényelmes illeszkedést biztosít a hatékony szívóerő érdekében.



A VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ RENDSZER

megakadályozza, hogy a tej visszafolyjon a motoregységbe, így biztosítva a termék higiénikus állapotát és hosszú élettartamát.



CAREFLO® TECHNOLOGIA:

A hagyományos kétfázisú mellszívóktól eltérően a Careflo® a szokásos stimulációs és fejeési szakaszok mellett egy harmadik, a vérpangás megelőzését szolgáló üritési fázist is bevezet. Ez elősegíti:

- Segítse elő a tejtermelés egyenletesebb alakulását.
- Előzze meg a tejcsatornák eltömődését és a tőgygyulladást.
- Enyhíti a mell feszültségét és a tejtúlcsordulást.
- Segítsen abban, hogy a szoptatás zökkenőmentesebben, megszakítás nélkül zajljék.



A NIPFIT® FUNKCIÓJA:

Lapos vagy behúzott mellbimbók korrekciója.

Ez a funkció a lapos vagy behúzott mellbimbók korrekcióját hivatott elősegíteni, valamint gyengéd, fokozatos stimulációval támogatja a tejfejtést:

- Segít abban, hogy a mellbimbó kifelé álljon.
- Ez megkönnyíti a csecsemő mellre tapadását.
- Elősegíti a szoptatás megkezdését és folytatását.

Ne használja a NipFit® funkciót, ha:

1. A mellbimbón vagy a bimbóudvaron nyílt sebek, repedések, elváltozások vagy aktív fertőzések vannak.
2. Nemrégiben mellműtéten esett át.
3. Nálad betegség vagy sérülés következtében kialakult, nem pedig veleszületett mellbimbó-befordulást diagnosztizáltak. Ha ez a helyzet, először fordulj orvosodhoz.
4. Már az első alkalmazáskor éles fájdalmat érez. Azonnal hagyja abba a használatát.
5. Különösen érzékeny a bőre, vagy helyi bőrbetegségekben szenved, például ekcémában vagy pikkelysömörben.
6. Terhes vagy. A szívás megindíthatja a méhösszehúzódásokat.



FIGYELMEZTETÉS

A NipFit® funkció kizárólag szülés utáni használatra szolgál. Terhesség alatt ne használja!


HASZNÁLAT KÖZBENI FIGYELMEZTETÉSEK

- Mindig a legalacsonyabb szinttel, az 1. szinttel kezdje. Ne növelje az intenzitást, amíg a mellbimbó fokozatosan hozzá nem szokik, még akkor sem, ha az érzés kellemes.
- Egy-egy használati alkalommal ne haladja meg a NipFit® funkció 5–10 perces folyamatos használatát, különösen az első néhány hétben.
- Naponta legfeljebb 2 korrekciós kezelést végezzen. A túl gyakori használat irritációt, duzzanatot vagy a mellbimbó mikrosérüléseit okozhatja.
- Ha éles fájdalmat, rendellenes bőrpírt, tartós duzzanatot, hólyagokat vagy a tejtől eltérő folyadékot észlel, azonnal hagyja abba a használatát.
- Ez a készülék nem minősített orvosi eszköz klinikai kezelés céljára, és nem helyettesíti a szülésznővel, orvossal vagy nemzetközi tanúsítvánnyal rendelkező szoptatási tanácsadóval (IBCLC) folytatott konzultációt.
- A 3. fokozatú, súlyosan beékelődött, behúzódott mellbimbó esetében bármilyen korrekciós eszköz használata előtt orvosi vizsgálatra van szükség.
- A hosszan tartó, intenzív használat az areola duzzadását okozhatja, ami átmenetileg megnehezítheti a csecsemő számára a mellre tapadást. Ez a kívánt hatással ellentétes következményekkel járhat.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK:

- A NipFit® funkció aktiválása előtt győződjön meg arról, hogy a szilikonszésze mérete megfelelő, beleértve a 24 mm-es peremet vagy a 20/22 mm-es átmeneti darabokat is. A túl nagy csésze ellenőrizhetetlen módon fokozhatja a bimbóudvaron kifejtett szívóerőt.
- A kezelés előtt vigyen fel néhány csepp anyatejet vagy tiszta lanolinkrémet a területre, hogy lágyítsa azt.
- A NipFit® használata során a mellbimbót a kosár közepére kell helyezni. A helytelen elhelyezés aszimmetrikus szívóerőt és irritációt okozhat.
- Ha 4–6 hét megfelelő használat után sem tapasztal javulást, forduljon egészségügyi szakemberhez.


A TERMÉK ALKOTÓELEMEI

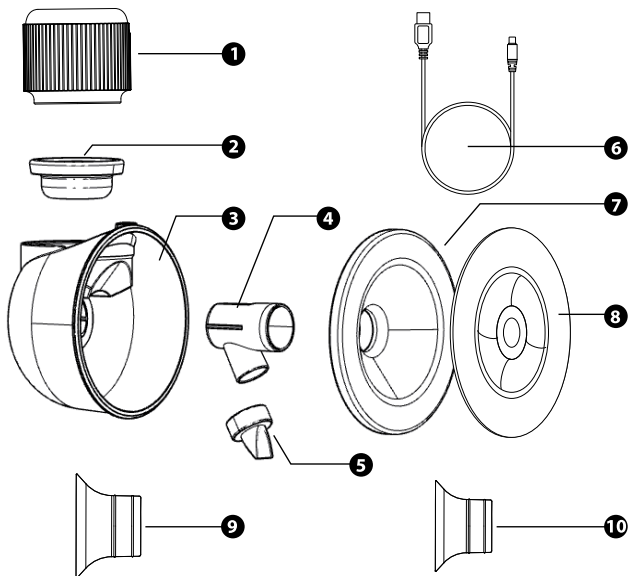

NEM.	NÉV	ANYAG	MENNYISÉG
1	Főegység	\	1
2	Szilikon membrán	Szilikon	1
3	A csésze teste	Polipropilén	1
4	Csatlakozó	Polipropilén	1
5	Szelep	Szilikon	1
6	USB-kábel	\	1
7	Szilikon mellpajzs	Szilikon	1
8	Porálló burkolat	Polipropilén	1
9	22 mm-es szilikonbetét	Szilikon	1
10	20 mm-es szilikonbetét	Szilikon	1

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


1. Helyezze be a szelepet a csatlakozóba, és győződjön meg arról, hogy szorosan illeszkedik.
2. Csatlakoztassa a csatlakozót a pohár testéhez.
3. Helyezze a szilikon membránt a csésze testére, és nyomja le, amíg minden oldalán szorosan illeszkedik.
4. Rögzítse szorosan a szilikon mellpajzsot a csésze testére.
5. Csatlakoztassa a főegységet a szilikon membránhoz, amíg kattánó hangot nem hall.

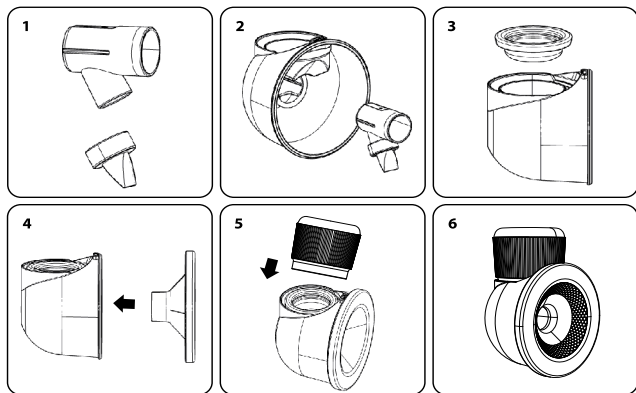

TÖLTÉSI MÓD

A SZIVATTYÚ FELTÖLTÉSÉHEZ HASZNÁLJA A MELLÉKELT USB-KÁBELT:

- Kompatibilis: számítógépek USB-csatlakozóival, hálózati adapterekkel vagy hordozható akkumulátorokkal.
- Kizárólag olyan hordozható akkumulátorokat használjon, amelyek kimeneti teljesítménye nem haladja meg az **5 V/3 A-t**.
- A LED-es akkumulátor-ikon jelzi a töltés állapotát:
 - Ha a **(B6)** jelzőfény villog, az azt jelzi, hogy a készülék töltődik
 - Ha a jelzőfény nem villog és BE van kapcsolva, akkor a készülék teljesen feltöltött.

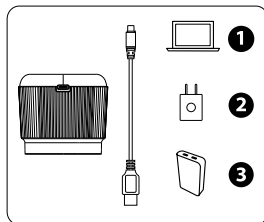

MEGJEGYZÉS: Töltés előtt mindig kapcsolja ki a szivattyút.

A PANEL LEÍRÁSA

A1: Bekapcsoló gomb (hosszan nyomva tartva be-/kikapcsolható)

A2: Csökkentse a szívási szintet

A3: A szívóerősség növelése

A4: Fázisváltó (Stimuláció / Kifejezés / Vérpangás elleni / Korrekció)

A5: Szünet / Folytatás

B1: Stimulációs fázis jelző

B2: Kifejeződési fázisjelző

B3: Állásgátló fázisjelző


B4: Korrekciós fázisjelző

B5: Működési szint / Idő kijelzése

B6: Akkumulátor-töltöttségi jelző

B7: Időegység kijelzése (perc)

B1+B3: NipFit® funkció aktiválva

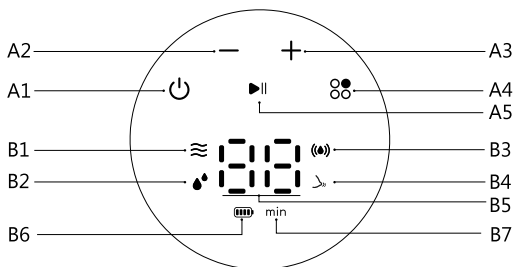

STIMULÁCIÓS FÁZIS (1–9. SZINT): Ebben a fázisban a szivattyú viszonylag gyors szívási ritmust generál alacsony szívóteljesítménnyel. Úgy tervezték, hogy gyengéden stimulálja a mellszövetet és elősegítse a tejkiadást azáltal, hogy utánozza a csecsemő kezdeti, sekély szopási viselkedését. Ajánlott ezt a fázist használni, mielőtt átváltana más fázisokra.




SZÍVÁSI FÁZIS (1–9. SZINT): Ez a fázis a csecsemő mélyebb és lassabb szívási ritmusát utánozza, amikor aktívan szopik. A szívóerő nagyobb, a frekvencia pedig alacsonyabb, mint a stimulációs fázisban. Ez a beállítás arra szolgál, hogy a tejleadó reflex beindulása után hatékonyabban lehessen lefejni a tejet.

PANGÁSGÁTLÓ SZÍVÁSI FÁZIS (1–9. SZINT): Ez a fázis pulzáló szívási mintát biztosít, amelynek célja a fejés után a mellben maradt tej alapos eltávolítása. Rendszeres használata segíthet megelőzni a tej pangását, csökkentheti a tejcsatornák eldugulásának kockázatát, és fenntarthatja a tejáramlást.

A NIPFIT® FUNKCIÓJA: A mellbimbó-korrekciós funkció aktiválásához nyomja meg az üzemmód gombot, amíg a **(B1)** és **(B3)** ikonok villogni nem kezdenek. A funkciónak 3 intenzitási szintje van.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1. ELŐKÉSZÍTÉS:** A Nuvita 1260W Materno Comfort használata előtt alaposan mossa meg a kezét. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész tiszta, és azokat az összeszerelési útmutató szerint helyesen szerelte össze. A tisztítás során ne szerelje össze a főegységet és az USB-kábelt.
- 2. TESTTARTÁS:** Keressen egy csendes és kényelmes helyet, ahol leülhet. Szükség esetén használjon lábtámaszt, hogy nyugodt, egyenes testtartást tudjon fenntartani. A szoptatás előtt meleg törülközővel finoman stimulálhatja a melleit, hogy elősegítse a tejáramlást.
- 3. HASZNÁLATA:** Helyezze a szilikon mellpajzsot a mellbimbó közepére, és ügyeljen arra, hogy szorosan illeszkedjen a melléhez, ne maradjon közöttük légrés. Egyik kezével óvatosan fogja meg a készüléket, a másikkal pedig támaszkodja alá a mellét, hogy stabil maradjon.

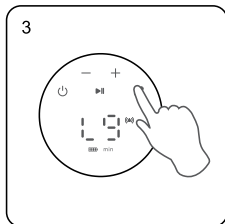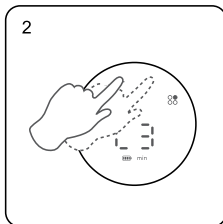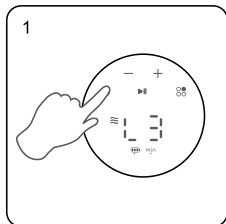

- 4. BEKAPCSOLÁS:** Tartsa lenyomva az **(A1)** gombot a készülék bekapcsolásához. A környezeti fény villogni kezd, a kijelzőn pedig megjelenik az aktuális szívási szint. A szivattyú a **stimulációs fázis**ban indul el.
 - 5. AZ ERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA:** Az **(A2)** gombbal bármikor a működés közben csökkentheti, az **(A3)** gombbal pedig növelheti a szívóerőt.
 - 6. FÁZISVÁLTÁS:** A működési fázis (Stimuláció, Laktáció, Vérpangásgátlás, Korrekció) megváltoztatásához nyomja meg az **(A4)** gombot. A fázisok egymás után váltakoznak, és a kiválasztott fázist a hozzá tartozó jelzőfény jelzi.
 - 7. SZÜNET/FOLYTATÁS:** A működés szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg az **(A5)** gombot.
 - 8. A MŰKÖDÉS BEFEJEZÉSE:** Ha befejezte a munkát, tartsa lenyomva a gombot a készülék kikapcsolásához. Válassza le a készüléket, majd kezdje meg a tisztítási műveleteket.
- MEGJEGYZÉS:** A készülék 30 perc elteltével automatikusan kikapcsol. A következő használat alkalmára elmenti az utoljára beállított fázist és a szívóteljesítményt.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Szerelje szét az összes mosható alkatrészt, és alaposan tisztítsa meg őket (a főegység és a kábel kivételével).

B. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN

Szerelje szét az összes alkatrészt (a főegységet kivéve), és öblítse le hideg vízzel, hogy eltávolítsa a tejmaradványokat.

Tisztítandó alkatrészek: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. NAPI FERTŐTLENÍTÉS

- Először moss kezet!
- Válasszuk szét az összes érintett alkatrészt.
- Forró vízben vagy gőzsterilizálóban 5 percig sterilizálja.
- **A (2, 5, 7, 9, 10) alkatrészeket NE forralja!**
- A **(3, 4, 8)** alkatrészek nem érintkezhetnek forró fémfelületekkel.

TÁROLÁS: Alaposan szárítsa meg a levegőn, majd tiszta, száraz helyen tárolja.

A TISZTÍTÁS SZORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Szerelje szét az összes olyan tartozékot, amely érintkezésbe kerül a mellet vagy anyatejjel. (a főegység kivételével)
- Használat után azonnal tisztítsa meg az alkatrészeket, hogy elkerülje a tejmaradványok kialakulását és a baktériumok szaporodását.
- Győződjön meg arról, hogy minden tartozékot az összeszerelési útmutató szerint szerelje össze, illetve szerelje szét.
- Az összeszerelés és szétszerelés során ügyeljen arra, hogy egyetlen alkatrész se vesszen el.
- Minden szilikon alkatrész (a főegység kivételével) sterilizálható a sterilizálóban.
- **A szelep fertőtlenítésével kapcsolatos óvintézkedések:** Ne forralja, és gőzzel történő fertőtlenítése ne haladja meg a 3 percet.
- **A cumisüvegek fertőtlenítésével kapcsolatos óvintézkedések:** Ne forralja, és gőzzel történő fertőtlenítése ne haladja meg az 5 percet.

TERMÉKLEÍRÁS

Bemeneti feszültség:	5 V egyenáram
Névleges teljesítmény:	6W
Üzemi hőmérséklet:	15–30 °C
Működési páratartalom:	50% - 80%
A csomag tartalma:	11 rész
Származási hely:	Kínai Népköztársaság

GARANCIA – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Erre a termékre 24 hónapos garancia vonatkozik a gyártási hibákra, amely a vásárlási bizonylat vagy számla alapján igazolt vásárlás napjától kezdődik. Számla alapján történő vásárlás esetén a törvényes garancia időtartama 12 hónapra csökken. A 24 hónapos garancia **nem terjed ki** a termék rendes elhasználódásából eredő károkra, esztétikai károkra, valamint a kiegészítőkre és a fogyóeszközökre (például akkumulátorokra, fejekre vagy kopásnak kitett alkatrészekre). **Az akkumulátorokra 6 hónapos garancia vonatkozik.**

ÉRVÉNYTELEN GYÁRTÓI GARANCIA

A 12/24 hónapos törvényes jótállás az alábbi esetekben szűnik meg:

1. A termék a használati útmutatóban szereplő utasításoktól eltérő, nem megfelelő használat következtében megsérült.
2. A terméket módosították, meghamisították vagy kinyitották.
3. A meghibásodást az alkatrészek, tartozékok vagy fogyóeszközök nem megfelelő karbantartása okozza (pl. oxidáció, elektromos alkatrészek folyadékba merítése, az érzékelőt eltömítő lerakódások, az akkumulátorokból szivárgó maró hatású folyadék).

A GARANCIA KIZÁRÁSAI

A 24 hónapos törvényes jótállásból a következők nem tartoznak bele:

1. A kopásnak kitett alkatrészek cseréjével vagy javításával kapcsolatos költségek, valamint a termék szokásos karbantartásával kapcsolatos költségek.
2. A terméknek az értékesítési helyre vagy a garanciakezeléssel megbízott központba történő szállításával, illetve onnan történő visszaszállításával járó költségek és kockázatok.
3. A helytelen beszerelésből vagy a használati útmutatóban szereplő utasításoknak nem megfelelő használatból eredő károk.
4. A természeti katasztrófák, esések, véletlen ütközések vagy a termékkel összeférhetetlen környezeti feltételek által okozott károk.
5. Olyan hibák, amelyek elhanyagolható hatással vannak a termék teljesítményére.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSAI:

A gyártó, a forgalmazó és a termék értékesítésében részt vevő valamennyi fél nem vállal felelősséget a termék meghibásodásából eredő gazdasági veszteségeért vagy károkért.

A hatályos jogszabályoknak megfelelően nem vállalnak felelősséget a termék és/vagy a kapcsolódó dokumentáció (papír vagy elektronikus formában) használatából vagy használhatatlanságából eredő közvetlen, közvetett veszteségeért, jövedelemkiesésért, megtakarítások elvesztéséért vagy egyéb következményekért, ideértve a szervizelés elmaradását is.

A támogatási szolgáltatással kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el az **www.nuvitababy.com** weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeket.

Děkujeme vám za zakoupení přenosné elektrické odsávačky mateřského mléka Nuvita 1260 W. Před použitím si prosím pečlivě přečtete návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

V ZÁJMU BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ VÁS I VAŠICH DĚTÍ SE VEŠKERÉ INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO PROJEKTU TÝKAJÍ BEZPEČNOSTI. PROSÍM, DODRŽUJTE JE.

UPOZORNĚNÍ

1. Odsávačku nepoužívejte při koupání ani ve vlhkém prostředí.
2. Tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
3. Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
4. Pokud je zařízení viditelně poškozené, nepoužívejte ho. Ohledně opravy se obraťte na výrobce nebo autorizovaný servis.
5. Nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení nebo jiným nehodám.

NEBEZPEČÍ

1. Produkt nenabíjejte ani nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně nebo v prostředí s teplotou vyšší než 45 °C.
2. Hlavní jednotku ani USB kabel neponořujte do vody, nápojů ani jiných tekutin.
3. Hlavní jednotku nikdy nespalujte ani nevystavujte otevřenému ohni.
4. Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k udušení.

OZNÁMENÍ

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte.
- Součásti vždy sestavujte podle montážního návodu.
- Sílu sání nastavte podle toho, co je pro vás pohodlné a co snášíte.
- Nesklánějte nádobku na mléko a nenaplňujte ji nad vyznačenou hranici.
- Před krmením vždy zkontrolujte teplotu mléka, abyste předešli popáleninám.
- Pokud máte nedostatek mléka, používejte tento přípravek pod lékařským dohledem.
- Čerpadlo nepoužívejte příliš často, abyste předešli poranění bradavky.
- V případě bolesti nebo podráždění přestaňte přípravek používat a poradte se s lékařem.
- Nesdílejte mezi uživateli části zařízení, které přicházejí do styku s mlékem.
- Během těhotenství čerpadlo nepoužívejte, protože by mohlo vyvolat děložní kontrakce.
- Pokud se do 5 minut nevysaje žádné mléko, přestaňte odsávat.
- Tento výrobek použijte výhradně v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.

Elektrická odsávačka Nuvita 1260W Materno Comfort je navržena tak, aby podporovala kojící matky napodobováním přirozeného rytmu sání dítěte. Tato nositelná elektrická odsávačka je speciálně vyvinuta tak, aby maminkám pomáhala efektivně a pohodlně odsávat mateřské mléko i na cestách a zajišťovala plynulý a bezbolestný proces odsávání. Disponuje 9 nastavitelnými úrovněmi intenzity, funkcí NipFit® a třífázovou technologií Careflo®.



KOREKCE

Režim korekce pomáhá řešit problém vpáčených nebo plochých bradavek pomocí cyklů jemného sání.



PRSNÍ KLOBOUČEK

VYROBENÝ VÝHRADNĚ ZE SILIKONU – je šetrný k pokožce a jemný, zajišťuje měkké a pohodlné přilnutí pro účinné sání.



SYSTÉM

PROTI ZPĚTNÉMU TOKU zabraňuje zpětnému toku mléka do motorové jednotky, čímž zajišťuje hygienu a dlouhou životnost výrobku.



TECHNOLOGIE CAREFLO®:

Na rozdíl od tradičních dvoufázových odsávaček mléka zavádí Careflo® kromě standardních fází stimulace a odsávání ještě třetí fázi odvodnění zabraňující stagnaci mléka. To pomáhá:

- Podporuje rovnoměrnější tvorbu mléka.
- Zabraňuje ucpání mlékovodů a mastitidě.
- Uleví od napětí a nalití prsou.
- Podpoří hladší a nepřerušovaný průběh kojení.



FUNKCE NIPFIT®:

Korekce plochých nebo vpáčených bradavek.

Tato funkce je určena k nápravě plochých nebo vpáčených bradavek a k podpoře odsávání mléka prostřednictvím jemné, postupné stimulace:

- Pomáhá bradavce vyčnívat ven.
- Usnadňuje to přisátí dítěte k prsu.
- Podporuje zahájení a pokračování kojení.

KONTRAINDIKACE

Funkci NipFit® nepoužívejte, pokud:

1. Na bradavce nebo dvorci máte otevřené rány, praskliny, léze nebo aktivní infekce.
2. Nedávno jste podstoupila operaci prsu.
3. Bylo vám diagnostikováno vtáhnutí bradavky způsobené onemocněním nebo úrazem, nikoli vrozené. Pokud je tomu tak, nejprve se poraďte se svým lékařem.
4. Již při prvním použití pocítíte ostrou bolest. Okamžitě přestaňte přípravek používat.
5. Máte obzvláště citlivou pokožku nebo trpíte místními kožními onemocněními, jako je ekzém nebo psoriáza.
6. Jste těhotná. Odsávání může vyvolat kontrakce.



VAROVÁNÍ

Funkce NipFit® je určena výhradně k použití po porodu. Nepoužívejte ji během těhotenství.


UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Vždy začněte na nejnižší úrovni, tedy na úrovni 1. Nezvyšujte intenzitu, dokud se bradavka postupně nepřizpůsobí, i když je pocit příjemný.
- Délka nepřetržitého používání funkce NipFit® by neměla překročit 5–10 minut na jedno sezení, zejména v prvních několika týdnech.
- Neprovádějte více než 2 korekční sezení denně. Nadměrné používání může způsobit podráždění, otok nebo mikrotrhliny na bradavce.
- Pokud se u vás objeví ostrá bolest, neobvyklé zarudnutí, přetrvávající otok, puchýře nebo výtok jiné tekutiny než mateřského mléka, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Toto zařízení není certifikovaným zdravotnickým prostředkem určeným pro klinickou terapii a nenahrazuje konzultaci s porodní asistentkou, lékařem nebo mezinárodně certifikovaným laktačním poradcem (IBCLC).
- V případě inverzní bradavky 3. stupně s výrazným srůstem je před použitím jakéhokoli korekčního prostředku nutné podstoupit lékařské vyšetření.
- Dlouhodobé a intenzivní používání může způsobit otok dvorce, což dočasně zkomplikuje přísátí dítěte. To může mít opačný účinek, než je žádoucí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ:

- Před aktivací funkce NipFit® se ujistěte, že silikonová miska má správnou velikost, včetně příruby o průměru 24 mm nebo redukci 20/22 mm. Příliš velká miska může nekontrolovatelně zesílit sání na dvorci.
- Před procedurou naneste na danou oblast několik kapek mateřského mléka nebo čistého lanolinového krému, aby se pokožka změkčila.
- Během sezení s NipFit® by měla být bradavka umístěna uprostřed košíčku. Nesprávné umístění může způsobit nerovnoměrné sání a podráždění.
- Pokud po 4–6 týdnech správného používání nezaznamenáte žádné zlepšení, poraďte se s lékařem.


SOUČÁSTI PRODUKTU

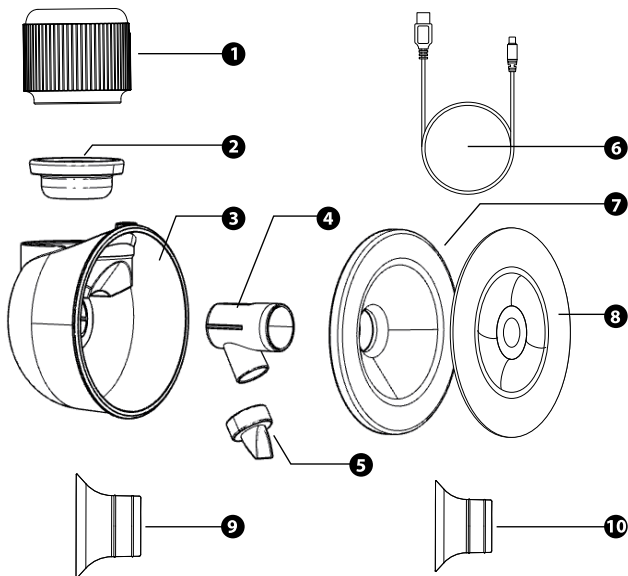

NE.	NÁZEV	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ
1	Hlavní jednotka	\	1
2	Silikonová membrána	Silikon	1
3	Tělo šálku	Polypropylen	1
4	Konektor	Polypropylen	1
5	Ventil	Silikon	1
6	USB kabel	\	1
7	Silikonová prsní vložka	Silikon	1
8	Kryt chránící před prachem	Polypropylen	1
9	22mm silikonová vložka	Silikon	1
10	20mm silikonová vložka	Silikon	1

NÁVOD K MONTÁŽI

1. Zasuňte ventil do konektoru a ujistěte se, že je pevně usazen.
2. Připojte konektor k tělu kelímku.
3. Položte silikonovou membránu na tělo kalíšku a přitlačte ji, dokud nebude po všech stranách těsně přiléhající.
4. Silikonový prsní štít pevně nasadte na tělo košíčku.
5. Připevněte hlavní jednotku k silikonové membráně, dokud neuslyšíte cvaknutí.

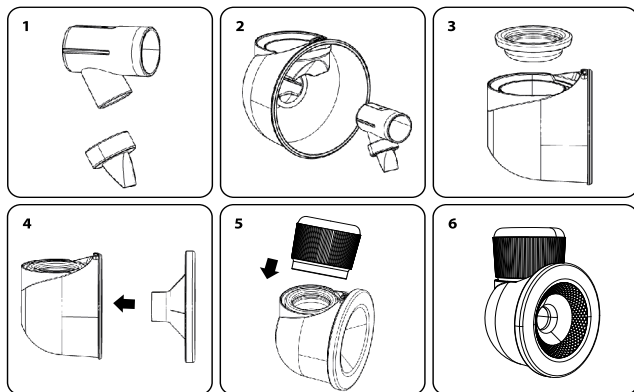


ZPŮSOB NABÍJENÍ

K NABÍJENÍ ČERPADLA POUŽIJTE DODANÝ USB KABEL:

- Kompatibilní s: USB porty počítače, napájecími adaptéry nebo powerbankami.
- Používejte pouze powerbanky s výstupním proudem nepřesahujícím **5 V/3 A**.
- Ikona baterie s LED diodou signalizuje stav nabíjení:
 - Pokud symbol **(B6)** bliká, zařízení se nabíjí
 - Pokud symbol neblíká a svítí, je zařízení plně nabitě.

POZNÁMKA: Před nabíjením vždy vypněte čerpadlo.

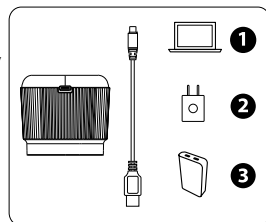

POPIS PANELU

A1: Tlačítko napájení (podržte stisknuté pro zapnutí/vypnutí)

A2: Snížit úroveň sání

A3: Zvýšit úroveň sání

A4: Přepínač fází (stimulace / exprese / prevence stagnace / korekce)

A5: Pozastavit/Pokračovat

B1: Indikátor stimulační fáze

B2: Indikátor fáze exprese

B3: Indikátor fáze proti stagnaci


B4: Indikátor fáze korekce

B5: Pracovní úroveň / Zobrazení času

B6: Ukazatel stavu baterie

B7: Zobrazení časové jednotky (minuty)

B1+B3: Funkce NipFit® aktivována

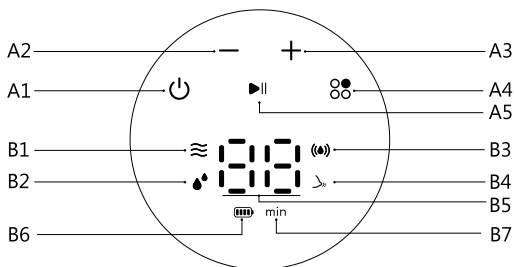

STIMULAČNÍ FÁZE (ÚROVEŇ 1–9): V této fázi čerpadlo vytváří relativně rychlý rytmus sání s nízkým sacím výkonem. Je určena k jemné stimulaci prsní tkáně a podpoře uvolňování mléka napodobováním počátečního mělkého sání dítěte. Doporučuje se použít tuto fázi před přechodem na jiné fáze.




FÁZE SÁNÍ (ÚROVEŇ 1–9): Tato fáze napodobuje hlubší a pomalejší rytmus sání kojence při aktivním pití mléka. Sací síla je vyšší a frekvence nižší než ve stimulační fázi. Toto nastavení má pomoci k účinnějšímu odsávání mléka po spuštění reflexu spouštění mléka.

FÁZE ODSÁVÁNÍ PROTI STAGNACI MLÉKA (ÚROVEŇ 1–9): Tato fáze nabízí pulzující režim odsávání, jehož cílem je důkladné odstranění zbytků mléka z prsu po odsátí. Pravidelné používání může pomoci předcházet stagnaci mléka, snížit riziko ucpání mlékovodů a udržet tok mléka.

FUNKCE NIPFIT®: Chcete-li aktivovat funkci korekce bradavek, stiskněte tlačítko režimu, dokud nezačnou blikat ikony (B1) a (B3). Funkce má 3 úrovně intenzity.

NÁVOD K OBSLUZE

- 1. PŘÍPRAVA:** Před použitím přístroje Nuvita 1260W Materno Comfort si důkladně umyjte ruce. Ujistěte se, že jsou všechny součásti čisté a správně smontované v souladu s montážním návodem. Při čištění se vyhněte montáži hlavní jednotky a USB kabelu.
- 2. POLOHA:** Najděte si klidné a pohodlné místo k sezení. V případě potřeby použijte podnožku, abyste si udržela uvolněné a vzpřímené držení těla. Před odsáváním můžete prsa jemně stimulovat teplým ručníkem, abyste podpořila tok mléka.
- 3. POUŽITÍ:** Umístěte silikonový prsní štít doprostřed bradavky a ujistěte se, že těsně přiléhá k prsu a nevznikají žádné vzduchové mezery. Jednou rukou jemně přidržte přístroj a druhou rukou podepřete prs, aby zůstal v klidu.

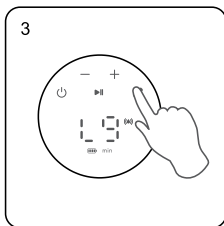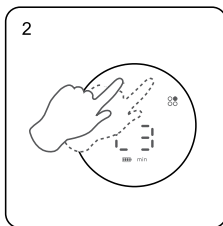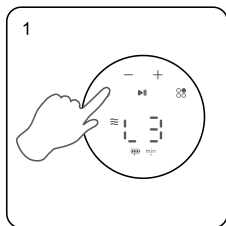

- 4. ZAPNUTÍ:** Stiskněte a podržte tlačítko **(A1)** pro spuštění zařízení. Kontrolka okolního osvětlení začne blikat a na displeji se zobrazí aktuální úroveň sání. Čerpadlo se spustí ve **stimulační fázi**.
- 5. NASTAVENÍ INTENZITY:** Pomocí tlačítka **(A2)** můžete kdykoli během provozu snížit a pomocí tlačítka **(A3)** zvýšit sílu sání.
- 6. PŘEPÍNÁNÍ FÁZÍ:** Chcete-li změnit pracovní fázi (Stimulace, Odčerpání, Prevence stagnace, Korekce), stiskněte tlačítko **(A4)**. Fáze se budou postupně přepínat a vybraná fáze se potvrdí rozsvícením příslušné kontrolky.
- 7. POZASTAVIT/POKRAČOVAT:** Chcete-li provoz pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **(A5)**.
- 8. UKONČENÍ PROVOZU:** Po dokončení práce stiskněte a podržte tlačítko, aby se zařízení vypnulo. Odpojte přístroj a proveďte úklid.

POZNÁMKA: Zařízení se po 30 minutách automaticky vypne. Pro příští použití si uložte naposledy použitou fázi a úroveň sání.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

A. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Demontujte všechny omyvatelné části a důkladně je vyčistěte (s výjimkou hlavní jednotky a kabelu).

B. PO KAŽDÉM POUŽITÍ

Všechny součásti (kromě hlavní jednotky) rozmontujte a opláchněte ve studené vodě, abyste odstranili zbytky mléka.

Části, které je třeba vyčistit: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DENNÍ DEZINFEKCE

- Nejprve si umyjte ruce.
- Oddělte všechny příslušné části.
- Sterilizujte v vroucí vodě nebo v parním sterilizátoru po dobu **5 minut**.
- Části **(2, 5, 7, 9, 10) NEVARTE**.
- Součásti **(3, 4, 8)** se nesmí dotýkat horkých kovových povrchů.

SKLADOVÁNÍ: Nechte důkladně vyschnout na vzduchu a skladujte na čistém a suchém místě.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

- Rozmontujte veškeré příslušenství, které přichází do styku s prsem nebo mateřským mlékem. (kromě hlavní jednotky)
- Po použití díly ihned vyčistěte, abyste zabránili usazování zbytků mléka a množení bakterií.
- Ujistěte se, že každé příslušenství sestavíte/rozmontujete podle montážního návodu.
- Při montáži a demontáži neztraťte žádnou z částí
- Všechny silikonové součásti lze vložit do sterilizátoru za účelem dezinfekce (s výjimkou hlavní jednotky).
- **Bezpečnostní pokyny pro dezinfekci ventilu:** Nevarujte a neprovádějte parní dezinfekci déle než 3 minuty.
- **Bezpečnostní pokyny pro dezinfekci lahví:** Nevarujte a neprovádějte parní dezinfekci déle než 5 minut.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Vstupní napětí:	5 V stejnosměrného proudu
Jmenovitý výkon:	6W
Provozní teplota:	15–30 °C
Provozní vlhkost:	50% - 80%
Obsah balení:	11 částí
Místo původu:	ČLR

ZÁRUKA – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Na tento výrobek se vztahuje 24měsíční záruka na výrobní vady, počínaje datem nákupu doloženým účtenkou nebo fakturou. V případě nákupu s fakturou se zákonná záruka zkracuje na 12 měsíců. 24měsíční záruka **se nevztahuje na** poškození způsobené běžným opotřebením výrobku, kosmetická poškození, příslušenství ani spotřební materiál (například baterie, hlavice nebo součásti podléhající opotřebením). **Na baterie se vztahuje záruka v délce 6 měsíců.**

NEPLATNÁ ZÁRUKA

Zákonná záruka v délce 12/24 měsíců zaniká v následujících případech:

1. Výrobek byl poškozen v důsledku nesprávného používání, které nebylo v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
2. Výrobek byl upraven, poškozen nebo otevřen.
3. Porucha je způsobena nedostatečnou údržbou součástí, příslušenství nebo spotřebního materiálu (např. oxidace, ponoření elektrických součástí do kapalin, nečistoty ucpávající snímač, únik korozivní kapaliny z baterií).

VÝLUKY ZÁRUKY

Z 24měsíční zákonné záruky jsou vyloučeny následující položky:

1. Náklady na výměnu nebo opravu opotřebitelných dílů a náklady související s běžnou údržbou výrobku.
2. Náklady a rizika spojené s přepravou výrobku do a z prodejního místa nebo do autorizovaného servisu pro vyřizování záruk.
3. Škody způsobené nesprávnou instalací nebo nevhodným používáním, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití.
4. Škody způsobené přírodními katastrofami, pády, náhodnými nárazy nebo podmínkami prostředí, které nejsou pro výrobek vhodné.
5. Vady, které mají zanedbatelný vliv na funkčnost výrobku.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

Výrobce, distributor a všechny strany podílející se na prodeji výrobku nenesou odpovědnost za ekonomické ztráty ani škody vyplývající z nesprávné funkce výrobku. V souladu s platnými právními předpisy neodpovídají za přímé ani nepřímé škody, ztrátu příjmů, úspor ani za jiné důsledky vyplývající z používání nebo nemožnosti používání výrobku a/nebo související dokumentace (v tištěné či elektronické podobě), včetně neposkytnutí servisu.

Další informace o asistenční službě naleznete v prodejních podmínkách, které jsou k dispozici na webových stránkách **www.nuvitababy.com**.

Zahvaljujemo se vam za nakup nosljive električne prsne črpalke Nuvita 1260W. Pred uporabo prosimo, da natančno preberete navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

ZARADI VARNOSTI IN ZDRAVJA VAS IN VAŠIH OTROK SE VSA NAVODILA V TEM PROJEKTU NANAŠAJO NA VARNOST. PROSIMO, DA JIH NUJNO UPOŠTEVATE.

OPOZORILO

1. Prsne črpalke ne uporabljajte med kopanjem ali v vlažnem okolju.
2. Ta izdelek hranite izven dosega otrok in hišnih živali.
3. Izogibajte se izpostavljanju neposredni sončni svetlobi in visokim temperaturam.
4. Naprave ne uporabljajte, če je vidno poškodovana. Za popravilo se obrnite na proizvajalca ali pooblaščen osebje.
5. Neuporabljene dele hranite izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve ali druge nesreče.

NEVARNOST

1. Izdelka ne polnite in ga ne uporabljajte v bližini odprtega ognja ali v okolju, kjer je temperatura višja od 45 °C.
2. Glavne enote ali USB-kabla ne potaplajte v vodo, pijače ali druge tekočine.
3. Glavne enote nikoli ne sežigajte in je ne izpostavljajte odprtemu ognju.
4. Plastično embalažo hranite izven dosega otrok, da se izognete nevarnosti zadušitve.

OBVESTILO

- Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite.
- Komponente vedno sestavljajte v skladu z navodili za sestavo.
- Moč sesanja prilagodite glede na udobje in lastno prenašanje.
- Posode za zbiranje mleka ne nagibajte in je ne napolnite preveč, da ne presežete označene meje.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo mleka, da se izognete opeklinam.
- Če imate premalo mleka, izdelek uporabljajte pod zdravniškim nadzorom.
- Črpalke ne uporabljajte preveč, da ne poškodujete bradavice.
- V primeru bolečine ali draženja prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravstvenim delavcem.
- Komponent naprave, ki pridejo v stik z mlekom, ne smete deliti med uporabniki.
- Črpalke ne uporabljajte med nosečnostjo, saj lahko povzroči maternične kontrakcije.
- Prenehajte s črpanjem, če se v 5 minutah ne izčrpa nobeno mleko.
- Ta izdelek uporabljajte izključno v skladu z navodili v priročniku.

Nuvita 1260W Materno Comfort je zasnovana za podporo doječim materam, saj posnema naravni ritem dojenja dojenčka. Ta električna prsna črpalka za nošenje je posebej zasnovana, da mamam pomaga učinkovito in udobno odčrpavati materino mleko tudi na poti, pri čemer zagotavlja nemoteno in neboleče črpanje. Ima 9 nastavljivih stopenj intenzivnosti, funkcijo NipFit® in trifazno tehnologijo Careflo®.



KOREKCIJA

Način korekcije pomaga pri reševanju problema vdratih ali ploščatih bradavic s cikli nežnega sesanja.



PRSNİ ŠČIT

IZ 100 % SILIKONA: prijazen do kože in nežen, zagotavlja mehko in udobno prileganje za učinkovito sesanje.



SISTEM

PROTI POVRATNEMU TOKU preprečuje, da bi mleko stekalo nazaj v motorno enoto, s čimer zagotavlja higieno in dolgo življenjsko dobo izdelka.



TEHNOLOGIJA CAREFLO®:

Za razliko od tradicionalnih dvofaznih prsnih črpalk Careflo® poleg standardnih faz stimulacije in izčrpavanja uvaža še tretjo fazo drenaže proti zastoju. To pomaga pri:

- Spodbujajte bolj enakomerno proizvodnjo mleka.
- Preprečite zamašene mlečne žleze in mastitis.
- Lajšajte napetost in nabreklost prsi.
- Podprite nemoteno in brez težav pot do dojenja.



FUNKCIJA NIPFIT®:

Korekcija ploščatih ali vdratih bradavic.

Ta funkcija je namenjena popravljanju ploščatih ali vdratih bradavic ter spodbujanju izčrpavanja mleka z nežno, postopno stimulacijo:

- To pomaga, da se bradavica izboči navzven.
- To olajša dojenčku prisesanje na prsi.
- Spodbuja začetek in nadaljevanje dojenja.

KONTRAINDIKACIJE

Funkcije NipFit® ne uporabljajte, če:

1. Na bradavici ali areoli imate odprte rane, razpoke, poškodbe ali aktivne okužbe.
2. Pred kratkim ste se podvrgli operaciji prsi.
3. Pri vas je bila ugotovljena vrta bradavica, ki je posledica bolezni ali poškodbe, ne pa prirojena. Če je tako, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.
4. Že ob prvem nanosu občutite ostro bolečino. Takoj prenehajte z uporabo.
5. Imate posebej občutljivo kožo ali trpite zaradi lokalnih dermatoloških težav, kot sta ekcem ali luskavica.
6. Noseča ste. Sesanje lahko sproži popadke.



OPOZORILO

Funkcija NipFit® je namenjena izključno uporabi po porodu. Ne uporabljajte je med nosečnostjo.


OPOZORILA MED UPORABO

- Vedno začnite na najnižji stopnji, stopnji 1. Ne povečujte intenzivnosti, dokler se bradavica ne prilagodi postopoma, tudi če je občutek prijeten.
- Ne presegajte 5–10 minut neprekinjene uporabe funkcije NipFit® na eno sejo, še posebej v prvih nekaj tednih.
- Na dan ne izvajajte več kot 2 korekcijski postopka. Prekomerna uporaba lahko povzroči draženje, oteklino ali mikroskopske raztrganine na bradavici.
- Takoj prenehajte z uporabo, če se pojavijo ostre bolečine, nenormalno rdečica, vztrajna oteklina, mehurji ali izcedek tekočine, ki ni mleko.
- Ta naprava ni certificirana medicinska naprava za klinično terapijo in ne nadomešča posvetovanja s porodniško sestro, zdravnikom ali mednarodno certificiranim svetovalcem za dojenje (IBCLC).
- Pri 3. stopnji, ko je bradavica močno prilepljena in obrnjena navznoter, je pred uporabo kakršne koli korekcijske naprave potrebna zdravniška ocena.
- Dolgotrajna uporaba z visoko intenzivnostjo lahko povzroči oteklino prsnega kolobarja, zaradi česar se dojenček začasno težje prisesa. To lahko ima nasprotni učinek od želenega.

NAVODILA ZA VARNO UPORABO:

- Preden aktivirate funkcijo NipFit®, se prepričajte, da je silikonska skodelica prave velikosti, vključno s 24-milimetrskim prirobnikom ali reduktorji 20/22 mm. Prevelika skodelica lahko na nenadzorovan način okrepi sesanje na prsnem kolobarju.
- Pred postopkom nanesite nekaj kapljic materinega mleka ali kreme iz čistega lanolina, da se območje zmehča.
- Med uporabo NipFit® mora biti bradavica poravnana s sredino košarice. Nepravilen položaj lahko povzroči asimetrično sesanje in draženje.
- Če po 4–6 tednih pravilne uporabe ne opazite nobenega izboljšanja, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.


SESTAVNI DELI IZDELKA

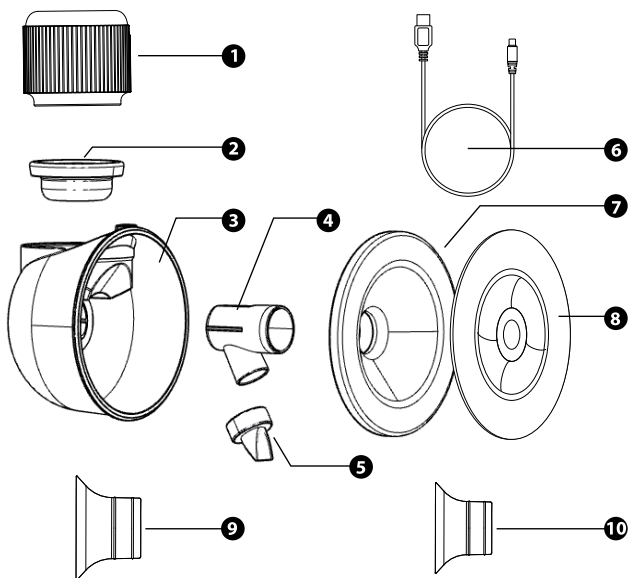

NE.	IME	MATERIAL	KOLIČINA
1	Glavna enota	\	1
2	Silikonska membrana	Silikon	1
3	Telo skodelice	Polipropilen	1
4	Priključek	Polipropilen	1
5	Ventil	Silikon	1
6	USB-kabel	\	1
7	Silikonski prsni ščit	Silikon	1
8	Pokrov, odporen proti prahu	Polipropilen	1
9	22-milimetrski silikonski vložek	Silikon	1
10	20-milimetrski silikonski vložek	Silikon	1

NAVODILA ZA SESTAVO


1. Vstavite ventil v priključek in poskrbite, da je dobro pritrjen.
2. Priključek pritrdite na ohišje skodelice.
3. Silikonsko membrano položite na telo skodelice in jo pritisnite navzdol, dokler se ne prilepa po vseh straneh.
4. Silikonski prsni ščit trdno namestite na telo košarice.
5. Glavno enoto pritrdite na silikonsko membrano, dokler ne zaskoči.

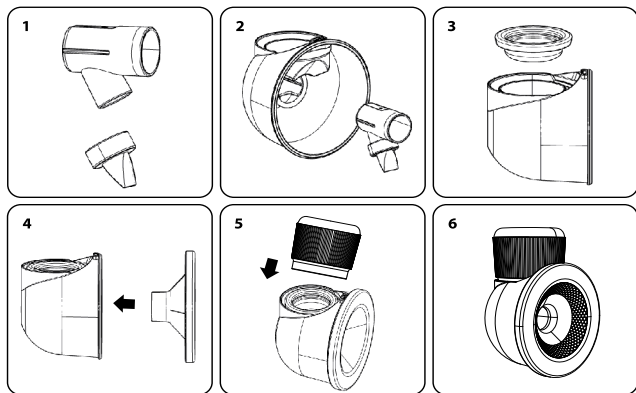

NAČIN POLNJENJA

ZA POLNJENJE ČRPALKE UPORABITE PRILOŽENI USB-KABEL:

- Združljivo z: USB-vtičnicami na računalniku, napajalniki ali prenosnimi polnilniki.
- Uporabljajte izključno prenosne napajalnike z izhodno močjo, ki ne presega **5 V/3 A**.
- Ikona LED-a v obliki baterije prikazuje stanje polnjenja:
 - Če simbol **(B6)** utripa, se naprava polni
 - Če simbol ne utripa in je prižgan, je naprava popolnoma napolnjena.

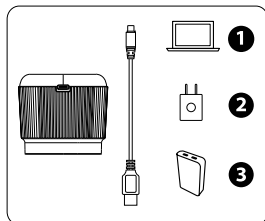

OPOMBA: Pred polnjenjem vedno izklopite črpalco.

OPIS PLOŠČE

A1: Gumb za vklop (pritisnite in držite, da napravo vklopite/izklopite)

A2: Zmanjšajte stopnjo sesanja

A3: Povečajte stopnjo sesanja

A4: Preklop med fazami (stimulacija / iztiskanje / preprečevanje zastoja / korekcija)

A5: Pavza/Nadaljevanje

B1: Kazalnik faze stimulacije

B2: Kazalnik faze izražanja

B3: Kazalnik faze proti zastoju


B4: Kazalnik faze korekcije

B5: Delovna raven / Prikaz časa

B6: Kazalnik stanja baterije

B7: Prikaz časovne enote (minute)

B1+B3: Funkcija NipFit® je aktivirana

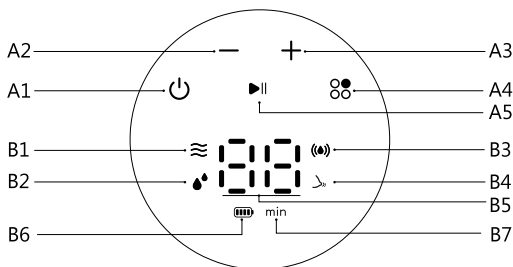

FAZA STIMULACIJE (STOPNJA 1-9): V tej fazi črpalka ustvarja razmeroma hiter ritem sesanja z nizko sesalno močjo. Njen namen je nežno stimulirati prsno tkivo in spodbuditi iztiskanje mleka s posnemanjem začetnega plitkega sesanja dojenčka. Priporočljivo je, da to fazo uporabite, preden preidete na druge faze.




FAZA IZTISKANJA (STOPNJA 1-9): Ta faza posnema globlji in počasnejši ritem sesanja dojenčka, ko aktivno pije mleko. Sila sesanja je večja, frekvenca pa počasnejša v primerjavi s stimulacijsko fazo. Ta nastavitev je namenjena učinkovitejšemu iztiskanju mleka, ko se sproži refleks iztiskanja mleka.

FAZA SESANJA PROTI ZASTOJU MLEKA (STOPNJA 1-9): Ta faza zagotavlja pulzirajoč vzorec sesanja, katerega namen je temeljito odstraniti preostalo mleko iz prsi po izčrpanju. Redna uporaba lahko pomaga preprečiti zastoj mleka, zmanjšati tveganje za zamašene mlečne kanale in ohraniti pretok mleka.

FUNKCIJA NIPFIT®: Za vklop funkcije korekcije bradavic pritisnite gumb za izbiro načina, dokler ne začneta utripati ikoni (B1) in (B3). Funkcija ima 3 stopnje intenzivnosti.

NAVODILA ZA UPORABO

- 1. PRIPRAVA:** Pred uporabo naprave Nuvita 1260W Materno Comfort si temeljito umijte roke. Prepričajte se, da so vsi sestavni deli čisti in pravilno sestavljeni v skladu z navodili za sestavo. Med čiščenjem ne sestavljajte glavne enote in USB-kabla.
- 2. POLOŽAJ:** Poiščite miren in udoben prostor za sedenje. Po potrebi uporabite podnožje, da ohranite sproščeno, pokončno držo. Pred črpanjem lahko prsi nežno stimulirate s toplo brisačo, da spodbudite pretok mleka.
- 3. UPORABA:** Silikonski prsni ščit namestite na bradavico tako, da je poravnan s sredino, in poskrbite, da tesno prilega okoli prsi brez zračnih vrzeli. Napravo nežno držite z eno roko, z drugo pa podprite prsi, da ostanejo stabilne.

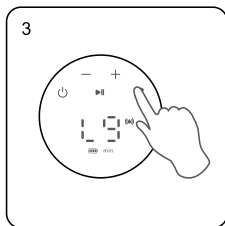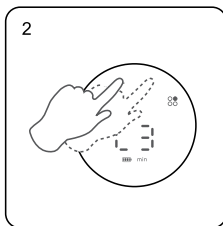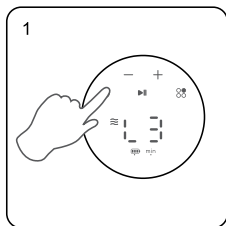

- 4. VKLOP:** Za vklop naprave pritisnite in pridržite gumb **(A1)**. Lučka za osvetlitev prostora bo utripala, na zaslonu pa se bo prikazala trenutna stopnja sesanja. Črpalka se zažene v **stimulacijski fazi**.
 - 5. NASTAVITEV MOČI:** S tipko **(A2)** lahko kadarkoli med delovanjem zmanjšate, s tipko **(A3)** pa povečate moč sesanja.
 - 6. PREKLAPLJANJE MED FAZAMI:** Za spremembo delovne faze (stimulacija, iztiskanje, preprečevanje zastoja, korekcija) pritisnite gumb **(A4)**. Faze se bodo zaporedno menjavale, izbrana faza pa se potrdi z ustrezno kontrolno lučko.
 - 7. ZAUSTAVITEV/NADALJEVANJE:** Če želite zaustaviti ali nadaljevati delovanje, pritisnite gumb **(A5)**.
 - 8. ZAKLJUČEK DELOVANJA:** Ko končate, pritisnite in pridržite gumb, da napravo izklopite. Odklopite napravo in začnite s postopki čiščenja.
- OPOMBA:** Naprava se bo po 30 minutah samodejno izklopila. Za naslednjo uporabo shrani zadnjo izbrano fazo in stopnjo sesalne moči.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

A. PRED PRVO UPORABO

Razstavite vse dele, ki jih je mogoče oprati, in jih temeljito očistite (razen glavne enote in kabla).

B. PO VSAKI UPORABI

Razstavite in sperite vse dele (razen glavne enote) v hladni vodi, da odstranite ostanke mleka.

Deli, ki jih je treba očistiti: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DNEVNA DEZINFEKCIJA

- Najprej si umijte roke.
- Ločite vse pomembne dele.
- Uporabite vrelo vodo ali parni sterilizator za 5 **minut**.
- Delov **(2, 5, 7, 9, 10)** **NE smete** kuhati.
- Deli **(3, 4, 8)** se ne smejo dotikati vročih kovinskih površin.

SHRANJEVANJE: Izdelek temeljito posušite na zraku in ga shranite na čistem, suhem mestu.

VARNOSTNI UKREPI PRI ČIŠČENJU

- Razstavite vse dodatke, ki pridejo v stik z dojko ali materinim mlekom. (razen glavne enote)
- Po uporabi takoj očistite dele, da preprečite nastanek ostankov mleka in razvoj bakterij.
- Poskrbite, da vsak dodatek sestavite oziroma razstavite v skladu z navodili za sestavo.
- Pri sestavljanju in razstavljanju ne izgubite nobenega dela
- Vse silikonske sestavne dele je mogoče za razkuževanje dati v sterilizator (razen glavne enote).
- **Varnostni ukrepi pri razkuževanju ventilov:** Ne razkužujte s kuhanjem ali paro dlje kot 3 minute.
- **Varnostni ukrepi pri razkuževanju stekleničk:** Ne kuhajte jih in ne razkužujte s paro dlje kot 5 minut.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

Vhodna napetost:	5 V enosmerne napetosti
Nazivna moč:	6W
Delovna temperatura:	15–30 °C
Delovna vlažnost:	50% - 80%
Vsebina paketa:	11 delov
Kraj porekla:	LRK

GARANCIJA – POGOJI IN DOLOČILA

Za ta izdelek velja 24-mesečna garancija za proizvodne napake, ki se začne z datumom nakupa, dokazanega z računom ali fakturo. V primeru nakupa z fakturo se zakonska garancija skrajša na 12 mesecev. 24-mesečna garancija **ne vključuje** poškodb, ki so posledica običajne obrabe izdelka, estetskih poškodb, dodatkov ali potrošnega materiala (na primer baterij, glav ali sestavnih delov, ki so podvrženi obrabi). **Za baterije velja 6-mesečna garancija.**

NEVELJAVNA GARANCIJA

12- ali 24-mesečna zakonska garancija preneha veljati v naslednjih primerih:

1. Izdelek je bil poškodovan zaradi nepravilne uporabe, ki ni bila v skladu z navodili iz priročnika.
2. Izdelek je bil spremenjen, poškodovan ali odprt.
3. Okvara je posledica nezadostnega vzdrževanja sestavnih delov, dodatne opreme ali potrošnega materiala (npr. oksidacija, potopitev električnih delov v tekočine, ostanki, ki zamašijo senzor, iztekanje korozivne tekočine iz baterij).

IZKLJUČITVE IZ GARANCIJE

Iz 24-mesečne zakonske garancije so izključeni naslednji izdelki:

1. Stroški zamenjave ali popravila delov, ki so izpostavljeni obrabi, ter stroški, povezani z rednim vzdrževanjem izdelka.
2. Stroški in tveganja, povezana s prevozom izdelka do prodajnega mesta ali pooblaščenega centra za obravnavo garancijskih zahtevkov ter nazaj.
3. Škoda, ki nastane zaradi nepravilne namestitve ali nepravilne uporabe, ki ni v skladu z navodili iz priročnika.
4. Poškodbe, ki jih povzročijo naravne nesreče, padci, naključni udarci ali okoljske razmere, ki niso primerne za izdelek.
5. Napake, ki imajo zanemarljiv vpliv na delovanje izdelka.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI:

Proizvajalec, distributer in vse stranke, vključene v prodajo izdelka, ne odgovarjajo za gospodarske izgube ali škodo, ki izhaja iz nepravilnega delovanja izdelka. V skladu z veljavno zakonodajo ne odgovarjajo za neposredne ali posredne škode, izgubo prihodkov, prihrankov ali druge posledice, ki izhajajo iz uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka in/ali pripadajoče dokumentacije (v papirni ali elektronski obliki), vključno z nezmožnostjo zagotavljanja storitev.

Za več podrobnosti o storitvi pomoči si oglejte Pogoje prodaje, ki so na voljo na spletni strani **www.nuvitababy.com**.

Благодарим Ви, че закупихте преносимата електрическа помпа за кърма Nuvita 1260W. Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба преди да започнете да я използвате и го запазете за бъдеща справка.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ЗА ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, КАКТО И ЗА ТЕЗИ НА ВАШИТЕ ДЕЦА, ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ В ТОЗИ ПРОЕКТ СА СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА. МОЛЯ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ГИ СПАЗВАЙТЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Не използвайте помпата за кърма по време на къпане или в мокри помещения.
2. Дръжте този продукт извън достъпа на деца и домашни любимци.
3. Избягвайте излагането на пряка слънчева светлина и високи температури.
4. Не използвайте устройството, ако има видими повреди. Свържете се с производителя или с упълномощен персонал за ремонт.
5. Дръжте неизползваните части извън обсега на децата, за да избегнете задушаване или други инциденти.

ОПАСНОСТ

1. Не зареждайте и не използвайте продукта в близост до открит огън или в среда с температура над 45 °C.
2. Не потапяйте основното устройство или USB кабела във вода, напитки или други течности.
3. Никога не изгаряйте и не излагайте основното устройство на открит огън.
4. Дръжте пластмасовите опаковки далеч от деца, за да избегнете риска от задушаване.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Преди първата употреба заредете устройството докрай.
- Винаги сглобявайте компонентите, като следвате инструкциите за сглобяване.
- Регулирайте силата на всмукване според вашия комфорт и личната ви поносимост.
- Не накланяйте чашата за събиране на мляко и не я препълвайте над отбелязаната граница.
- Винаги проверявайте температурата на млякото преди хранене, за да избегнете изгаряния.
- Ако имате ниско производство на кърма, използвайте продукта под лекарско наблюдение.
- Не използвайте помпата прекалено често, за да избегнете нараняване на зърното.
- Преустановете употребата и се консултирайте с медицински специалист, ако възникне болка или дразнене.
- Не споделяйте между потребителите частите на устройството, които влизат в контакт с млякото.
- Не използвайте помпата по време на бременност, тъй като това може да предизвика маточни контракции.
- Спрете изцеждането, ако в рамките на 5 минути не се изцеди мляко.
- Използвайте този продукт само според указанията в ръководството.

Nuvita 1260W Materno Comfort е създадена, за да подпомага кърмещите майки, като имитира естествения ритъм на кърмене на бебето. Тази електрическа помпа за кърма, която може да се носи върху тялото, е специално проектирана да помага на майките да изцеждат кърма ефективно и удобно, докато са в движение, като осигурява безпроблемно и безболезнено изцеждане. Тя разполага с 9 регулируеми нива на интензивност, функцията NipFit® и 3-фазната технология Careflo®.



КОРЕКЦИЯ

Режимът за корекция помага при обърнати или вдлъбнати зърна чрез цикли на леко засмукване.



ИЗЦЯЛО СИЛИКОНОВА НАКЛАДКА

ЗА ГЪРДИ – нежна към кожата, осигурява меко и удобно прилягане за ефективно засмукване.



СИСТЕМАТА

ПРОТИВ ОБРАТНОТО ТЕЧЕНИЕ предотвратява обратното вливане на мляко в моторния блок, като по този начин гарантира хигиената и дългия експлоатационен живот на продукта.



ТЕХНОЛОГИЯ CAREFLO®:

За разлика от традиционните двуфазни помпи за кърма, Careflo® въвежда трета фаза на дренаж срещу застой, в допълнение към стандартните етапи на стимулация и изцеждане. Това спомага за:

- Спомага за по-стабилно производство на мляко.
- Предотвратете запушването на млечните канали и мастита.
- Облекчава напрежението и препълването на гърдите.
- Подпомогнете по-гладкото и безпроблемно кърмене.



ФУНКЦИЯ НА NIPFIT®:

Корекция на плоски или обърнати зърна.

Тази функция е предназначена да спомогне за коригирането на плоски или вдлъбнати зърна и да подпомогне изцеждането на мляко чрез нежна, постепенна стимулация:

- Това помага на зърното да изпъкне навън.
- Това улеснява захващането на бебето към гърдата.
- То подпомага започването и продължаването на кърменето.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не използвайте функцията NipFit®, ако:

1. Имате отворени рани, пукнатини, лезии или активни инфекции по зърното или ареолата.
2. Наскоро сте претърпели операция на гърдите.
3. При вас е диагностицирано състояние на вдлъбнати зърна, причинено от заболяване или травма, а не вродено. Ако това е случаят, първо се консултирайте с вашия лекар.
4. Още при първото нанасяне изпитвате остра болка. Преустановете употребата незабавно.
5. Имате особено чувствителна кожа или страдате от локални дерматологични заболявания, като екзема или псориазис.
6. Бременна сте. Аспирацията може да предизвика контракции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията NipFit® е предназначена единствено за употреба след раждането. Не я използвайте по време на бременност.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

- Винаги започвайте от най-ниското ниво – ниво 1. Не увеличавайте интензивността, докато зърното не се приспособи постепенно, дори ако усещането е приятно.
- Не превишавайте 5–10 минути непрекъсната употреба на функцията NipFit® на сесия, особено през първите няколко седмици.
- Не провеждайте повече от 2 сесии за корекция на ден. Прекомерната употреба може да доведе до дразнене, подуване или микроразкъсвания на зърното.
- Преустановете употребата незабавно, ако почувствате остра болка, необичайно зачервяване, продължително подуване, мехури или изтичане на течност, различна от мляко.
- Това устройство не е сертифицирано медицинско изделие за клинично лечение и не замества консултацията с акушерка, лекар или сертифициран от Международния съвет консултант по кърмене (IBCLC).
- При инвертирана зърна от 3-та степен с силно прилепване е необходимо медицинско изследване, преди да се използва каквото и да е устройство за корекция.
- Продължителната употреба с висока интензивност може да доведе до подуване на ареолата, което временно да затрудни засукването на бебето. Това може да има ефект, противоположен на желанието.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ:

- Уверете се, че силиконовата чашка е с подходящ размер, включително с фланец от 24 мм или редуктори 20/22 мм, преди да активирате функцията NipFit®. Прекалено голяма чашка може да засили неконтролирано всмукването върху ареолата.
- Преди процедурата нанесете няколко капки кърма или крем с чист ланолин, за да омекотите кожата в тази зона.
- По време на сесията с NipFit® зърното трябва да бъде разположено в центъра на чашката. Неправилното му разположение може да доведе до асиметрично засмукване и дразнене.
- Ако след 4–6 седмици правилна употреба не забележите никакво подобрене, обърнете се към медицински специалист.


КОМПОНЕНТИ НА ПРОДУКТА

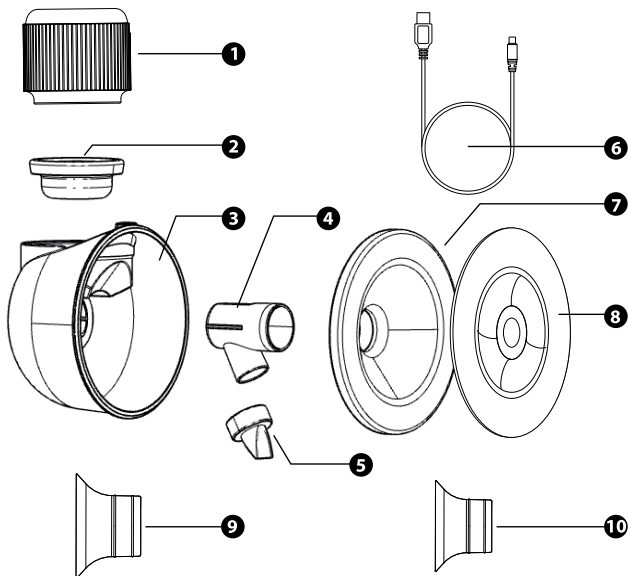

НЕ.	ИМЕ	МАТЕРИАЛ	КОЛИЧЕСТВО
1	Основен модул	\	1
2	Силиконова мембрана	Силикон	1
3	Корпус на чашата	Полипропилен	1
4	Съединител	Полипропилен	1
5	Клапан	Силикон	1
6	USB кабел	\	1
7	Силиконов нагръдник	Силикон	1
8	Прахустойчив капак	Полипропилен	1
9	22 мм силиконова вложка	Силикон	1
10	20 мм силиконова вложка	Силикон	1

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ


1. Поставете клапана в съединителя и се уверете, че е плътно закрепен.
2. Закрепете съединителя към корпуса на чашата.
3. Поставете силиконовата мембрана върху корпуса на чашката и натиснете надолу, докато се прилепи плътно от всички страни.
4. Закрепете добре силиконовия накрайник за гърдата към корпуса на чашката.
5. Закрепете основното тяло към силиконовата мембрана, докато се чуе щракване.

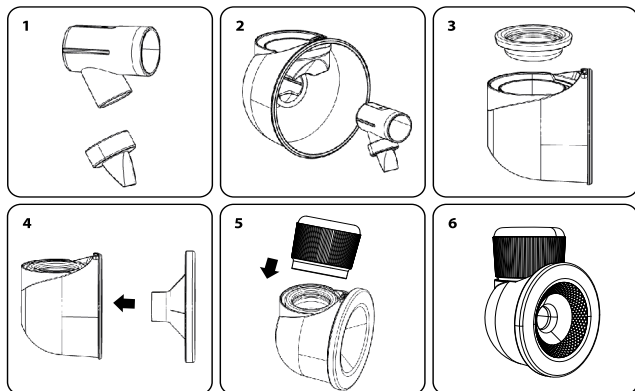

НАЧИН НА ЗАРЕЖДАНЕ

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРЕДОСТАВЕНИЯ USB КАБЕЛ, ЗА ДА ЗАРЕДИТЕ ПОМПАТА:

- Съвместимо с: USB портове на компютър, захранващи адаптери или преносими зарядни устройства.
- Използвайте само преносими зарядни устройства с изходна мощност, която не надвишава **5 V/3 A**.
- Иконата на LED батерията показва състоянието на зареждането:
 - Ако символът **(B6)** мига, това означава, че устройството се зарежда
 - Ако индикаторът не мига и свети, това означава, че устройството е напълно заредено

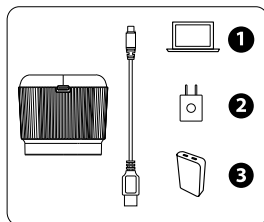

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги изключвайте помпата преди зареждане.

ОПИСАНИЕ НА ПАНЕЛА

A1: Бутон за включване/ изключване (натиснете и задръжте, за да включите/изключите)

A2: Намаляване на нивото на всмукване

A3: Увеличаване на нивото на всмукване

A4: Превключвател на фазите (Стимулация / Изразяване / Противозастой / Корекция)

A5: Пауза/Продължи

B1: Индикатор за фазата на стимулация

B2: Индикатор за фазата на експресия

B3: Индикатор за фазата на антистаза


B4: Индикатор за фазата на корекция

B5: Работно ниво / Показване на времето

B6: Индикатор за нивото на заряда на батерията

B7: Показване на единицата за време (минути)

B1+B3: Функцията NipFit® е активирана

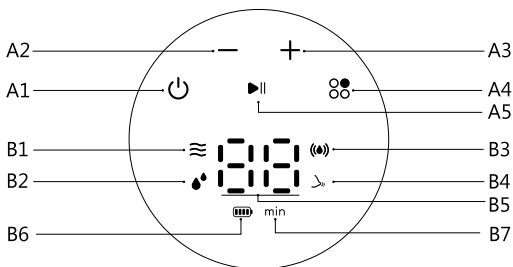

ФАЗА НА СТИМУЛАЦИЯ (НИВА 1–9): В тази фаза помпата създава сравнително бърз ритъм на изсмукване с ниска сила на изсмукване. Тя е предназначена да стимулира нежно гръдната тъкан и да подпомогне изтласкването на млякото, като имитира първоначалното повърхностно сучене на бебето. Препоръчва се да използвате тази фаза, преди да преминете към други фази.


ФАЗА НА ИЗЦЕЖДАНЕ (НИВА 1–9): Тази фаза имитира по-дълбокия и по-бавен ритъм на сучене на бебето, когато то активно суче мляко. Силата на сучене е по-голяма, а честотата е по-ниска в сравнение с фазата на стимулация. Тази настройка има за цел да спомогне за по-ефективното изцеждане на мляко, след като рефлексът на изпускане на млякото е започнал.

ФАЗА НА ИЗСМУКВАНЕ СРЕЩУ ЗАСТОЙ (НИВА 1–9): Тази фаза осигурява пулсиращ режим на изсмукване, чиято цел е да се отстрани напълно останалото мляко в гърдата след изцеждане. Редовната употреба може да спомогне за предотвратяване на застой на млякото, да намали риска от запушване на млечните канали и да поддържа потока на млякото.

ФУНКЦИЯ NIPFIT®: За да активирате функцията за корекция на зърната, натиснете бутона за режим, докато иконите (B1) и (B3) започнат да мигат. Функцията има 3 нива на интензивност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- 1. ПОДГОТОВКА:** Преди да използвате Nuvita 1260W Materno Comfort, измийте добре ръцете си. Уверете се, че всички компоненти са чисти и сглобени правилно, съгласно инструкциите за сглобяване. Избягвайте да сглобявате основното устройство и USB кабела по време на почистването.
- 2. ПОЗИЦИЯ:** Намерете тихо и удобно място, където да седнете. Ако е необходимо, използвайте подложка за крака, за да поддържате отпусната, изправена стойка. Преди изцеждането можете леко да стимулирате гърдите си с топла кърпа, за да улесните притока на мляко.
- 3. НАЧИН НА УПОТРЕБА:** Поставете силиконовия накрайник за кърмене в центъра на зърното и се уверете, че прилепва плътно около гърдата, без да остават въздушни междини. Дръжте устройството леко с едната ръка, а с другата подпрете гърдата, за да я стабилизирате.

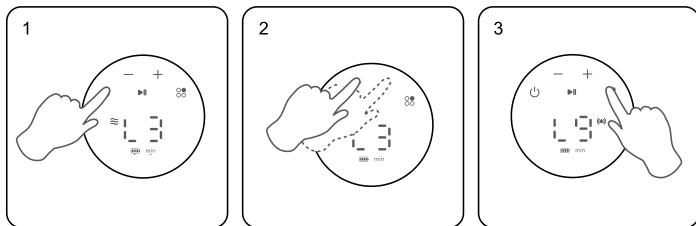

- 4. ВКЛЮЧВАНЕ:** Натиснете и задръжте бутона **(A1)**, за да включите устройството. Индикаторът за осветеност ще замига, а на екрана ще се покаже текущото ниво на всмукване. Помпата започва да работи във **фаза „Стимулация“**.
- 5. РЕГУЛИРАНЕ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА:** Използвайте **(A2)**, за да намалите, и **(A3)**, за да увеличите нивото на всмукване по всяко време по време на работа.
- 6. СМЯНА НА ФАЗИТЕ:** За да промените работната фаза (Стимулация, Изцеждане, Противозастой, Корекция), натиснете бутона **(A4)**. Фазите ще се сменят последователно, а избраната фаза се потвърждава от съответния индикатор.
- 7. ПАУЗА/ПРОДЪЛЖИ:** За да спрете временно или да възобновите работата, натиснете бутона **(A5)**.
- 8. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО:** Когато приключите, натиснете и задръжте бутона, за да изключите устройството. Изключете устройството от захранването и започнете процедурите по почистване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството ще се изключи автоматично след 30 минути. То запазва последната използвана фаза и степен на всмукване за следващото ви ползване.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

А. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Разгледете всички части, които могат да се мият, и ги почистете добре (с изключение на основния блок и кабела).

В. СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

Разгледете и изплакнете всички части (с изключение на основния блок) в студена вода, за да премахнете остатъците от мляко.

Части, които трябва да се почистят: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

С. ЕЖЕДНЕВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Първо си измийте ръцете.
- Разделете всички съответни части.
- Използвайте вряща вода или стерилизатор с пара в продължение на **5 минути**.
- **НЕ** варете частите **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Частите **(3, 4, 8)** не трябва да докосват горещи метални повърхности.

СЪХРАНЕНИЕ: Изсушете добре на въздух и съхранявайте на чисто и сухо място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ

- Разгледете всички приставки, които влизат в контакт с гърдите или кърмата. (с изключение на основното устройство)
- След употреба почистете частите незабавно, за да избегнете остатъци от мляко и размножаване на бактерии.
- Уверете се, че сглобявате/разглобявате всеки аксесоар в съответствие с инструкциите за сглобяване.
- Не изгубвайте нито една от частите при сглобяването и разглобяването
- Всички силиконови части могат да се поставят в стерилизатора за дезинфекция (с изключение на основното тяло).
- **Предпазни мерки при дезинфекцията на клапата:** Не я кипвайте и не я дезинфекцирайте с пара за повече от 3 минути.
- **Предпазни мерки при дезинфекцията на бутилките:** Не ги варете и не ги дезинфекцирайте с пара по-дълго от 5 минути.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Входно напрежение:	5 V постоянен ток
Номинална мощност:	6W
Работна температура:	15–30 °C
Работна влажност:	50% - 80%
Съдържание на опаковката:	11 части
Място на произход:	KHP

ГАРАНЦИЯ – УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

За този продукт се предоставя 24-месечна гаранция за производствени дефекти, считано от датата на покупката, доказана с касова бележка или фактура. При покупка с фактура законната гаранция се съкращава до 12 месеца. 24-месечната гаранция **не обхваща** повреди, произтичащи от нормалното износване на продукта, естетически дефекти, аксесоари или консумативи (например батерии, глави или компоненти, подложени на износване). **За батериите се предоставя гаранция за срок от 6 месеца.**

НЕВАЛИДНА ГАРАНЦИЯ

12- или 24-месечната законна гаранция се анулира в следните случаи:

1. Продуктът е повреден в резултат на неправилна употреба, която не съответства на указанията в ръководството.
2. Продуктът е бил модифициран, подправен или отворен.
3. Неизправността се дължи на недостатъчна поддръжка на компонентите, принадлежностите или консумативите (например окисляване, потапяне на електрически части в течности, остатъци, запушващи сензора, изтичане на корозивна течност от батериите).

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА

От 24-месечната законна гаранция са изключени следните случаи:

1. Разходите за подмяна или ремонт на части, подложени на износване, както и разходите, свързани с обичайната поддръжка на продукта.
2. Разходите и рисковете, свързани с транспортирането на продукта до и от мястото на продажба или до оторизирания център за обслужване по гаранция.
3. Щети, причинени от неправилен монтаж или неправилна употреба, която не съответства на указанията в ръководството.
4. Щети, причинени от природни бедствия, падания, случайни удари или условия на околната среда, които не са съвместими с продукта.
5. Дефекти, които оказват незначително влияние върху експлоатационните характеристики на продукта.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Производителят, дистрибуторът и всички страни, участващи в продажбата на продукта, не носят отговорност за икономически загуби или щети, произтичащи от неизправност на продукта. В съответствие с действащото законодателство те не носят отговорност за преки или косвени щети, загуба на доходи, спестявания или други последствия, произтичащи от използването или невъзможността за използване на продукта и/или свързаната с него документация (на хартиен или електронен носител), включително липсата на сервизно обслужване.

За повече информация относно услугата за поддръжка, моля, запознайте се с Условието за продажба, достъпни на уебсайта **www.nuvitababy.com**.

Ďakujeme vám za zakúpenie prenosnej elektrickej odsávačky mlieka Nuvita 1260 W. Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V ZÁUJME VAŠEJ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA, AKO AJ ZDRAVIA VAŠICH DETÍ, SA CELÝ OBSAH TOHTO PROJEKTU TÝKA BEZPEČNOSTI. NEZABUDNITE TIETO POKYNY DODRŽIAVAŤ.

UPOZORNENIE

1. Odsávačku mlieka nepoužívajte počas kúpania ani vo vlhkom prostredí.
2. Tento výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
3. Vyhnite sa vystaveniu priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.
4. Zariadenie nepoužívajte, ak je viditeľne poškodené. V prípade potreby opravy kontaktujte výrobcu alebo autorizovaný servis.
5. Nepoužívané časti uchovávajte mimo dosahu detí, aby nedošlo k zaduseniu alebo iným úrazom.

NEBEZPEČENSTVO

1. Produkt nenabíjajte ani nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo v prostredí s teplotou nad 45 °C.
2. Hlavnú jednotku ani USB kábel neponárajte do vody, nápojov ani iných tekutín.
3. Hlavnú jednotku nikdy nespálujte ani nevystavujte otvorenému ohňu.
4. Plastové obaly uchovávajte mimo dosahu detí, aby sa predišlo riziku udusenía.

OZNÁMENIE

- Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite.
- Súčiastky vždy montujte podľa montážnych pokynov.
- Nastavte intenzitu sania podľa toho, čo je pre vás pohodlné, a podľa vašej osobnej tolerancie.
- Nenakláňajte nádobu na zber mlieka a nenapíňajte ju nad označenú hranicu.
- Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu mlieka, aby ste predišli popáleninám.
- Ak máte nízku produkciu mlieka, používajte tento výrobok pod dohľadom lekára.
- Čerpadlo nepoužívajte príliš často, aby ste predišli poraneniu bradaviek.
- V prípade bolesti alebo podráždenia prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.
- Nesmiete medzi používateľmi zdieľať časti zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s mliekom.
- Počas tehotenstva nepoužívajte pumpu, pretože môže vyvolať kontrakcie maternice.
- Ak sa do 5 minút neodčerpá žiadne mlieko, prestaňte odsávať.
- Tento výrobok používajte výlučne podľa pokynov uvedených v návode.

Elektrická odsávačka Nuvita 1260W Materno Comfort je navrhnutá tak, aby podporovala dojčiace matky napodobňovaním prirodzeného rytmu dojčenia dieťaťa. Táto prenosná elektrická odsávačka je špeciálne navrhnutá tak, aby pomáhala mamičkám efektívne a pohodlne odsávať materské mlieko kdekoľvek, čím zaisťuje plynulý a bezbolestný proces odsávania. Disponuje 9 nastaviteľnými úrovňami intenzity, funkciou NipFit® a 3-fázovou technológiou Careflo®.



KOREKCIA

Režim korekcie pomáha riešiť problém s vpáčenými alebo plochými bradavkami prostredníctvom cyklov jemného odsávania.



PRSNÝ ŠTÍT

VYROBENÝ VÝLUČNE ZO SILIKÓNU – je šetrný k pokožke a jemný, zaručuje mäkké a pohodlné nosenie pre účinné odsávanie.



SYSTÉM

PROTI SPÄTNÉMU TOKU zabraňuje spätnému toku mlieka do motorovej jednotky, čím zabezpečuje hygienu a dlhú životnosť výrobku.



TECHNOLÓGIA CAREFLO®:

Na rozdiel od tradičných dvojfázových odsávačiek mlieka systém Careflo® okrem štandardných fáz stimulácie a odsávania zavádza aj tretiu fázu drenáže zabraňujúcu stagnácii. To pomáha:

- Podporuje rovnomernejšiu tvorbu mlieka.
- Predchádzajte upchatiu mliekovodov a mastitíde.
- Zmierňuje napätie v prsiach a ich nahromadenie mlieka.
- Podporuje hladší a neprerušovaný priebeh dojčenia.



FUNKCIA NIPFIT®:

Korekcia plochých alebo vtiahnutých bradaviek.

Táto funkcia je určená na korekciu plochých alebo vtiahnutých bradaviek a na podporu odsávania mlieka prostredníctvom jemnej, postupnej stimulácie:

- Pomáha bradavke vyčnievať smerom von.
- Uľahčuje dieťaťu prisatie sa k prsu.
- Podporuje začatie a pokračovanie dojčenia.

KONTRAINDIKÁCIE

Funkciu NipFit® nepoužívajte, ak:

1. Na bradavke alebo dvorci máte otvorené rany, praskliny, lézie alebo aktívne infekcie.
2. Nedávno ste podstúpili operáciu prsníka.
3. Bola vám diagnostikovaná vpáčená bradavka spôsobená ochorením alebo úrazom, nie vrodená. Ak je to tak, najskôr sa poraďte so svojim lekárom.
4. Už pri prvom použití pocítite ostrú bolesť. Okamžite prestaňte výrobok používať.
5. Máte obzvlášť citlivú pokožku alebo trpíte lokálnymi kožnými ochoreniami, ako je ekzém alebo psoriáza.
6. Ste tehotná. Odsávanie môže vyvolať kontrakcie.



VAROVANIE

Funkcia NipFit® je určená výhradne na použitie po pôrode. Nepoužívajte ju počas tehotenstva.


UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA

- Vždy začínajte na najnižšej úrovni, úrovni 1. Nezvyšujte intenzitu, kým sa bradavka postupne neprispôsobí, aj keby bol pocit príjemný.
- Dĺžka nepretržitého používania funkcie NipFit® by nemala presiahnuť 5–10 minút na jedno použitie, najmä počas prvých niekoľkých týždňov.
- Nevykonaвайте viac ako 2 korekčné sedenia za deň. Nadmerné používanie môže spôsobiť podráždenie, opuch alebo mikrotrhliny na bradavke.
- Ak pocítite ostrú bolesť, nezvyčajné začervenanie, pretrvávajúci opuch, pľuzgiere alebo výtok inej tekutiny ako mlieka, okamžite prestaňte výrobok používať.
- Toto zariadenie nie je certifikovaným zdravotníckym zariadením určeným na klinickú liečbu a nenahrádza konzultáciu s pôrodnou asistentkou, lekárom ani certifikovaným medzinárodným laktančným poradcom (IBCLC).
- V prípade 3. stupňa, teda silne vtiahnutej bradavky, je pred použitím akejkoľvek korekčnej pomôcky potrebné lekárske vyšetrenie.
- Dlhodobé používanie s vysokou intenzitou môže spôsobiť opuch dvorca, čo dočasne sťaží dieťaťu prisatie. To môže mať opačný účinok, ako je žiadany.

POKYNY NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE:

- Pred aktiváciou funkcie NipFit® sa uistite, že silikónová miska má správnu veľkosť, vrátane 24 mm príruby alebo redukčných krúžkov 20/22 mm. Príliš veľká miska môže nekontrolovateľne zvýšiť sací tlak na dvorce.
- Pred procedúrou naneste na danú oblasť niekoľko kvapiek materského mlieka alebo čistého lanolínového krému, aby sa pokožka zmäkčila.
- Počas používania NipFit® by mal byť bradavka umiestnená uprostred košíčka. Nesprávna poloha môže spôsobiť nerovnomerné sanie a podráždenie.
- Ak po 4–6 týždňoch správneho používania nezaznamenáte žiadne zlepšenie, poraďte sa s lekárom.


SÚČASTI VÝROBKU

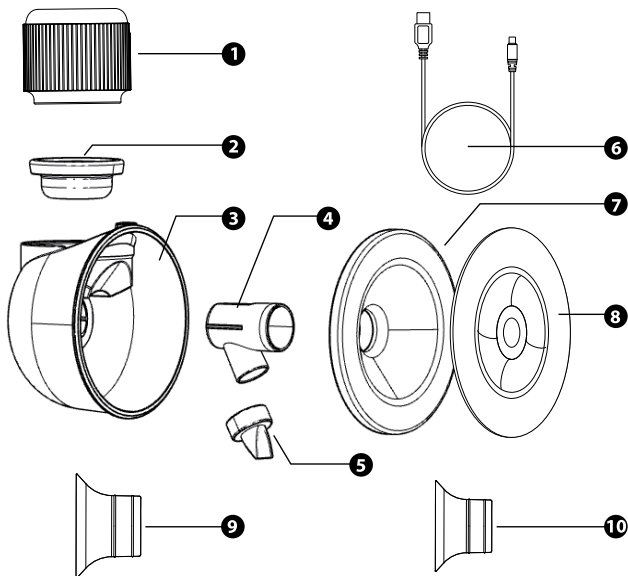

Č.	NÁZOV	MATERIÁL	POČET
1	Hlavná jednotka	\	1
2	Silikónová membrána	Silikón	1
3	Telo pohára	Polypropylén	1
4	Konektor	Polypropylén	1
5	Ventil	Silikón	1
6	USB kábel	\	1
7	Silikónový prsný štít	Silikón	1
8	Kryt odolný proti prachu	Polypropylén	1
9	22 mm silikónová vložka	Silikón	1
10	20 mm silikónová vložka	Silikón	1

NÁVOD NA MONTÁŽ


1. Zasuňte ventil do konektora a uistite sa, že je pevne usadený.
2. Pripevnite konektor k telu pohárika.
3. Silikónovú membránu položte na telo pohárika a pritlačte ju, až sa zo všetkých strán tesne prilieha.
4. Silikónový prsný štít pevne nasuňte na telo košíka.
5. Pripevnite hlavnú jednotku k silikónovej membráne, až kým nezačujete cvaknutie.

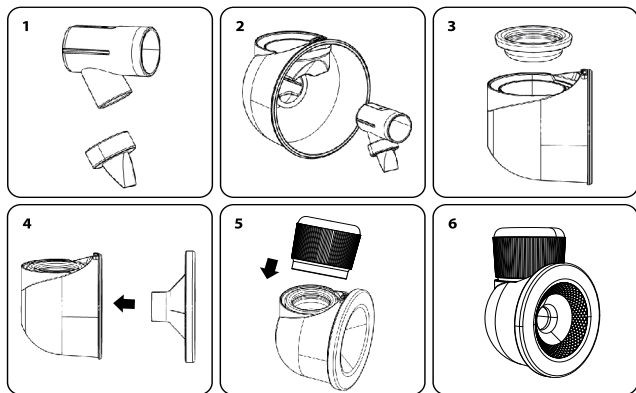

SPÔSOB NABÍJANIA

NA NABÍJANIE ČERPADLA POUŽITE PRILOŽENÝ USB KÁBEL:

- Kompatibilné s: USB portmi počítača, napájacími adaptérmi alebo powerbankami.
- Používajte iba powerbanky s výstupným napätím a prúdom nepresahujúcim **5 V/3 A**.
- Ikona LED batérie označuje stav nabíjania:
 - Ak symbol **(B6)** bliká, zariadenie sa nabíja
 - Ak symbol neblinká a svieti, zariadenie je úplne nabité

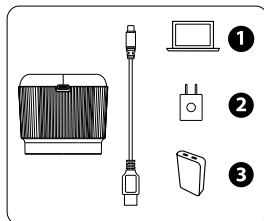

POZNÁMKA: Pred nabíjaním vždy vypnite čerpadlo.

POPIS PANELA

A1: Tlačidlo napájania (stlačte a podržte na zapnutie/vypnutie)

A2: Zníženie úrovne sania

A3: Zvýšiť úroveň sania

A4: Prepínač fáz (Stimulácia / Expresia / Proti stagnácii / Korekcia)

A5: Pozastaviť/Pokračovať

B1: Indikátor fázy stimulácie

B2: Indikátor fázy expresie

B3: Indikátor fázy proti stagnácii


B4: Indikátor fázy korekcie

B5: Pracovná úroveň / Zobrazenie času

B6: Indikátor stavu batérie

B7: Zobrazenie časovej jednotky (minúty)

B1+B3: Funkcia NipFit® je aktivovaná

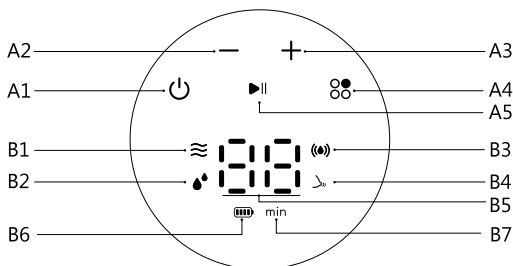

STIMULAČNÁ FÁZA (ÚROVEŇ 1–9): V tejto fáze odsávačka vytvára pomerne rýchly rytmus odsávania s nízkym sacím výkonom. Je navrhnutá tak, aby jemne stimulovala prsné tkanivo a podporovala vylučovanie mlieka napodobňovaním počiatočného plytkého sania dieťaťa. Odporúča sa používať túto fázu pred prechodom na iné fázy.




FÁZA ODSÁVANIA (ÚROVEŇ 1–9): Táto fáza napodobňuje hlbší a pomalší rytmus sania dieťaťa pri aktívnom pití mlieka. Sila sania je vyššia a frekvencia je nižšia v porovnaní so stimulačnou fázou. Toto nastavenie má pomôcť účinnejšie odsávať mlieko po spustení reflexu spúšťania mlieka.

FÁZA ODSÁVANIA PROTI STAGNÁCII MLIEKA (ÚROVEŇ 1–9): Táto fáza ponúka pulzujúci režim odsávania, ktorého cieľom je dôkladné odstránenie zvyšného mlieka z prsníka po odsávaní. Pravidelné používanie môže pomôcť predchádzať stagnácii mlieka, znížiť riziko upchania mliekovodov a udržať tok mlieka.

FUNKCIA NIPFIT®: Ak chcete aktivovať funkciu korekcie bradaviek, stlačte tlačidlo režimu, kým ikony (B1) a (B3) nezačnú blikať. Funkcia má 3 úrovne intenzity.

NÁVOD NA OBSLUHU

- 1. PRÍPRAVA:** Pred použitím zariadenia Nuvita 1260W Materno Comfort si dôkladne umyte ruky. Uistite sa, že všetky súčasti sú čisté a správne zmontované podľa montážneho návodu. Pri čistení sa vyhnite montáži hlavnej jednotky a USB kábla.
- 2. POLOHA:** Nájdite si tiché a pohodlné miesto na sedenie. Ak je to potrebné, použite podnožku, aby ste si udržali uvoľnené a vzpriamené držanie tela. Pred odsávaním môžete prsia jemne stimulovať teplým uterákom, aby ste podporili tok mlieka.
- 3. POUŽITIE:** Umiestnite silikónový prsný štít na bradavku a uistite sa, že tesne prilieha k prsu bez vzduchových medzier. Jednou rukou jemne pridržiajte prístroj a druhou podoprite prs, aby zostal stabilný.

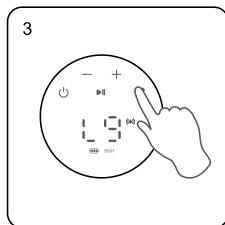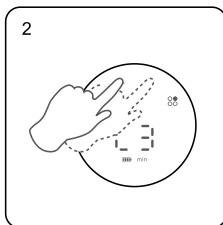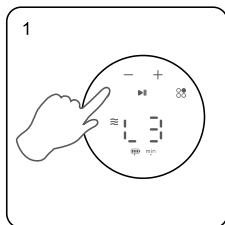

- 4. ZAPNUTIE:** Stlačte a podržte tlačidlo **(A1)**, aby ste zariadenie zapli. Kontrolka okolitého osvetlenia začne blikať a na displeji sa zobrazí aktuálna úroveň sania. Čerpadlo sa spustí vo fáze stimulácie.
- 5. NASTAVENIE INTENZITY:** Pomocou tlačidla **(A2)** môžete kedykoľvek počas prevádzky znížiť a pomocou tlačidla **(A3)** zvýšiť úroveň sania.
- 6. PREPÍNANIE FÁZ:** Ak chcete zmeniť pracovnú fázu (Stimulácia, Odčerpávanie, Proti-stáza, Korekcia), stlačte tlačidlo **(A4)**. Fázy sa budú postupne prepínať a zvolená fáza sa potvrdí rozsvietením príslušného kontrolného svetla.
- 7. POZASTAVIŤ/POKRAČOVAŤ:** Ak chcete prevádzku pozastaviť alebo obnoviť, stlačte tlačidlo **(A5)**.
- 8. UKONČENIE PREVÁDZKY:** Po dokončení stlačte a podržte tlačidlo, aby sa zariadenie vyplo. Odpojte zariadenie a začnite s čistením.

POZNÁMKA: Zariadenie sa po 30 minútach automaticky vypne. Pre ďalšie použitie si uloží naposledy použitú fázu a úroveň sania.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

A. PRED PRVÝM POUŽITÍM

Všetky umývateľné časti rozmontujte a dôkladne vyčistite (s výnimkou hlavnej jednotky a kábla).

B. PO KAŽDOM POUŽITÍ

Všetky časti (okrem hlavnej jednotky) rozmontujte a opláchnite v studenej vode, aby ste odstránili zvyšky mlieka.

Časti, ktoré treba vyčistiť: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. KAŽDODENNÁ DEZINFEKCIA

- Najprv si umyte ruky.
- Oddeľte všetky príslušné časti.
- Sterilizujte v vriacej vode alebo v parnom sterilizátore po dobu 5 **minút**.
- Časti **(2, 5, 7, 9, 10)** **NEVARTE**.
- Súčiastky **(3, 4, 8)** sa nesmú dotýkať horúcich kovových povrchov.

SKLADOVANIE: Nechajte dôkladne vyschnúť na vzduchu a skladujte na čistom a suchom mieste.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ČISTENIE

- Rozmontujte všetko príslušenstvo, ktoré prichádza do kontaktu s prsami alebo materským mliekom. (okrem hlavnej jednotky)
- Po použití diely ihneď vyčistite, aby sa zabránilo usadzovaniu zvyškov mlieka a množeniu baktérií.
- Uistite sa, že každé príslušenstvo zmontujete/demontujete podľa montážneho návodu.
- Pri montáži a demontáži nezabudnite na žiadnu súčiastku
- Všetky silikónové súčasti je možné vložiť do sterilizátora na dezinfekciu (s výnimkou hlavnej jednotky).
- **Bezpečnostné pokyny pre dezinfekciu ventilu:** Nevarujte a nedezinfikujte parou dlhšie ako 3 minúty.
- **Bezpečnostné pokyny pre dezinfekciu fliaš:** Nevarujte a nedezinfikujte parou dlhšie ako 5 minút.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Vstupné napätie:	5 V jednosmerného prúdu
Menovitý výkon:	6W
Prevádzková teplota:	15–30 °C
Prevádzková vlhkosť:	50% - 80%
Obsah balenia:	11 častí
Miesto pôvodu:	ČĽR

ZÁRUKA – OBCHODNÉ PODMIENKY

Na tento výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka na výrobné vady, počítaná od dátumu nákupu preukázaného pokladničným blokom alebo faktúrou. V prípade nákupu s faktúrou sa zákonná záruka skraca na 12 mesiacov. 24-mesačná záruka **sa nevzťahuje na** poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebenia výrobku, estetické poškodenia, príslušenstvo ani spotrebný materiál (napríklad batérie, hlavice alebo súčiastky podliehajúce opotrebeniu). **Na batérie sa vzťahuje záruka v trvaní 6 mesiacov.**

NEPLATNÁ ZÁRUKA

12- alebo 24-mesačná zákonná záruka zaniká v týchto prípadoch:

1. Výrobok bol poškodený v dôsledku nesprávneho používania, ktoré nebolo v súlade s pokynmi uvedenými v návode.
2. Produkt bol upravený, poškodený alebo otvorený.
3. Porucha je spôsobená nedostatočnou údržbou komponentov, príslušenstva alebo spotrebného materiálu (napr. oxidácia, ponorenie elektrických častí do kvapalín, usadeniny upchávajúce snímač, únik korozívnej kvapaliny z batérií).

VÝNIMKY Z ZÁRUKY

Z 24-mesačnej zákonnej záruky sú vylúčené nasledujúce položky:

1. Náklady na výmenu alebo opravu dielov podliehajúcich opotrebeniu a náklady súvisiace s bežnou údržbou výrobku.
2. Náklady a riziká spojené s prepravou výrobku do a z predajného miesta alebo autorizovaného strediska na vybavovanie záruk.
3. Poškodenie spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo nesprávnym používaním, ktoré nie je v súlade s pokynmi uvedenými v návode.
4. Poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami, pádmi, náhodnými nárazmi alebo podmienkami prostredia, ktoré nie sú kompatibilné s výrobkom.
5. Vady, ktoré majú zanedbateľný vplyv na funkčnosť výrobku.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI:

Výrobca, distribútor a všetky strany podieľajúce sa na predaji výrobku nenesú zodpovednosť za ekonomické straty ani škody vyplývajúce z nesprávnej funkcie výrobku. V súlade s platnými právnymi predpismi nenesú zodpovednosť za priame ani nepriame škody, ušlý zisk, stratu úspor ani iné dôsledky vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania výrobku a/alebo súvisiacej dokumentácie (v papierovej alebo elektronickej forme), vrátane neposkytnutia servisu.

Ďalšie informácie o asistenčnej službe nájdete v Obchodných podmienkach, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke **www.nuvitababy.com**.

Vă mulțumim că ați achiziționat pompa electrică de sân portabilă Nuvita de 1260 W. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de utilizare și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

PENTRU SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA DUMNEAVOASTRĂ ȘI A COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ, TOATE INFORMAȚIILE DIN CADRUL ACESTUI PROIECT SE REFERĂ LA SIGURANȚĂ. VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ LE RESPECTAȚI.

AVERTISMENT

1. Nu folosiți pompa de sân în timpul băii sau în medii umede.
2. Păstrați acest produs la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
3. Evitați expunerea la lumina directă a soarelui și la temperaturi ridicate.
4. Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă semne vizibile de deteriorare. Pentru reparații, contactați producătorul sau personalul autorizat.
5. Păstrați piesele neutilizate la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare sau alte accidente.

PERICOL

1. Nu încălcați și nu utilizați produsul în apropierea flăcărilor deschise sau în medii cu temperaturi mai mari de 45 °C.
2. Nu scufundați unitatea principală sau cablul USB în apă, băuturi sau alte lichide.
3. Nu incinerati niciodată unitatea principală și nu o expuneți la flăcări deschise.
4. Țineți ambalajele din plastic la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.

ANUNȚ

- Încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Asamblați întotdeauna componentele respectând instrucțiunile de asamblare.
- Reglați intensitatea aspirației în funcție de confort și de toleranța personală.
- Nu înclinați și nu umpleți excesiv recipientul de colectare a laptelui peste limita marcată.
- Verificați întotdeauna temperatura laptelui înainte de a-l da copilului, pentru a evita arsurile.
- Dacă aveți o producție scăzută de lapte, utilizați produsul sub supraveghere medicală.
- Nu folosiți pompa în exces pentru a evita rănirea mamelonului.
- Întrerupeți utilizarea și consultați un specialist din domeniul sănătății dacă apar dureri sau iritații.
- Nu folosiți în comun între utilizatori componentele dispozitivului care intră în contact cu laptele.
- Nu utilizați pompa în timpul sarcinii, deoarece aceasta poate provoca contracții uterine.
- Opriti pomparea dacă nu se extrage lapte în decurs de 5 minute.
- Utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manual.

Pompa de sân Nuvita 1260W Materno Comfort este concepută pentru a veni în sprijinul mamelor care alăptează, imitând ritmul natural de alăptare al bebelușului. Această pompă de sân electrică portabilă este special concepută pentru a ajuta mamele să extragă laptele matern în mod eficient și confortabil, chiar și atunci când sunt în deplasare, asigurând o experiență de extragere fără probleme și fără durere. Dispune de 9 niveluri de intensitate reglabile, funcționalitatea NipFit® și tehnologia Careflo® în 3 faze.



CORECȚIE

Modul de corecție ajută la remedierea problemelor legate de mameloanele inversate sau plate prin cicluri de aspirație ușoară.



PROTECTOR

MAMAR INTEGRAL DIN SILICON: prietenos cu pielea și delicat, asigură o potrivire moale și confortabilă pentru o aspirație eficientă.



SISTEMUL

ANTI-REFLUX împiedică revenirea laptelui în unitatea motorului, asigurând igiena și durata de viață a produsului.



TEHNOLOGIA CAREFLO®:

Spre deosebire de pompele de sân tradiționale în două faze, Careflo® introduce o a treia fază de drenaj anti-stază, pe lângă etapele standard de stimulare și extragere. Acest lucru contribuie la:

- Să favorizeze o producție de lapte mai constantă.
- Preveniți înfundarea canalelor lactifere și mastita.
- Ameliorează tensiunea și congestia mamară.
- Contribuie la o experiență de alăptare mai lină și fără întreruperi.



FUNCȚIA NIPFIT®:

Corectarea mameloanelor plate sau inversate.

Această funcție este concepută pentru a ajuta la corectarea mameloanelor plate sau inversate și pentru a facilita extragerea laptelui prin stimulare blândă și progresivă:

- Ajută la proeminența mamelonului spre exterior.
- Ajută bebelușul să se prindă mai ușor de sân.
- Acesta sprijină începerea și continuarea alăptării.

CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați funcția NipFit® dacă:

1. Aveți răni deschise, crăpături, leziuni sau infecții active la nivelul mamelonului sau al areolei.
2. Ați suferit recent o intervenție chirurgicală la sân.
3. Vi s-a diagnosticat o inversiune a mamelonului cauzată de o afecțiune sau un traumatism, nu una congenitală. În acest caz, consultați mai întâi medicul dumneavoastră.
4. Simțiți o durere ascuțită încă de la prima aplicare. Încetați imediat utilizarea.
5. Aveți pielea deosebit de sensibilă sau suferiți de afecțiuni dermatologice locale, precum eczema sau psoriazisul.
6. Ești însărcinată. Aspirația poate stimula contracțiile.



AVERTISMENT

Funcția NipFit® este destinată exclusiv utilizării în perioada postpartum. A nu se utiliza în timpul sarcinii.


AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA

- Începeți întotdeauna de la nivelul cel mai scăzut, Nivelul 1. Nu măriți intensitatea până când sfârșul nu s-a adaptat treptat, chiar dacă senzația este plăcută.
- Nu depășiți 5-10 minute de utilizare continuă a funcției NipFit® pe sesiune, în special în primele câteva săptămâni.
- Nu efectuați mai mult de 2 sesiuni de corecție pe zi. Utilizarea excesivă poate provoca iritații, umflături sau micro-rupturi la nivelul mamelonului.
- Încetați imediat utilizarea dacă simțiți o durere ascuțită, o înroșire neobișnuită, umflături persistente, bășici sau scurgeri de lichid, altele decât laptele.
- Acest dispozitiv nu este un dispozitiv medical certificat pentru terapie clinică și nu înlocuiește consultarea unei moașe, a unui medic sau a unui consultant în alăptare certificat de Consiliul Internațional (IBCLC).
- Un mamelon inversat de gradul 3, cu aderență severă, necesită o evaluare medicală înainte de utilizarea oricărui dispozitiv de corecție.
- Utilizarea prelungită și intensă poate provoca umflarea areolei, ceea ce poate îngreuna temporar prinderea sânelui de către bebeluș. Acest lucru poate avea un efect contrar celui dorit.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că cupa din silicon are dimensiunea corectă, inclusiv flanșa de 24 mm sau reductoarele de 20/22 mm, înainte de a activa funcția NipFit®. O cupă prea mare poate amplifica aspirația asupra areolei într-un mod necontrolat.
- Înainte de ședință, aplicați câteva picături de lapte matern sau cremă cu lanolină pură pentru a înmuia zona.
- În timpul sesiunii NipFit®, mamelonul trebuie să fie centrat în cupă. O poziție incorectă poate provoca o aspirație asimetrică și iritații.
- Dacă nu observați nicio îmbunătățire după 4-6 săptămâni de utilizare corectă, consultați un specialist din domeniul sănătății.


COMPONENTELE PRODUSULUI

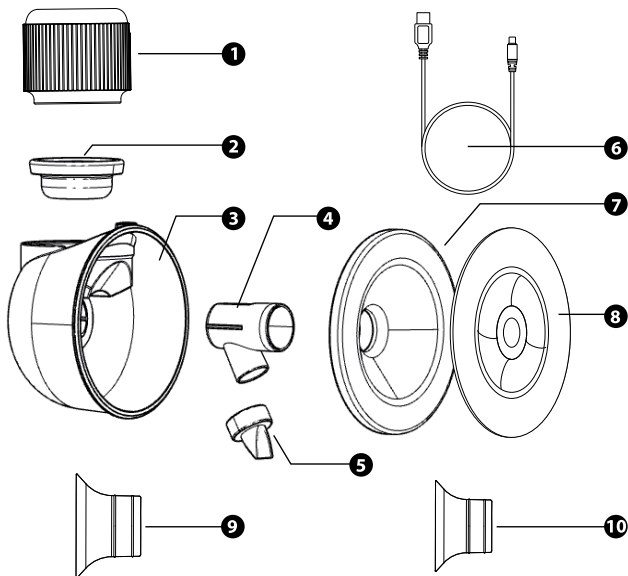

NU.	NUME	MATERIAL	CANTITATE
1	Unitatea principală	\	1
2	Diafragmă din silicon	Silicon	1
3	Corpul cupei	Polipropilenă	1
4	Conector	Polipropilenă	1
5	Valvă	Silicon	1
6	Cablu USB	\	1
7	Căptușeală pentru sân din silicon	Silicon	1
8	Husă rezistentă la praf	Polipropilenă	1
9	Insertie din silicon de 22 mm	Silicon	1
10	Insertie din silicon de 20 mm	Silicon	1

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE


1. Introduceți supapa în racord și asigurați-vă că este bine fixată.
2. Fixați conectorul pe corpul paharului.
3. Așezați diafragma din silicon deasupra corpului cupei și apăsați până când se fixează etanș pe toate laturile.
4. Fixați bine protecția din silicon pentru sân pe corpul cupei.
5. Fixați unitatea principală pe diafragma din silicon până când se aude un clic.

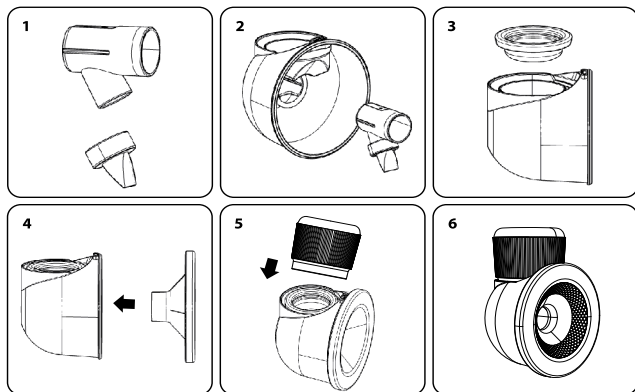

METODA DE ÎNCĂRCARE

FOLOSIȚI CABLUL USB FURNIZAT PENTRU A ÎNCĂRCA POMPA:

- Compatibil cu: porturile USB ale computerului, adaptoarele de alimentare sau bateriile externe.
- Folosiți numai baterii externe cu o tensiune de ieșire care să nu depășească **5 V/3 A**.
- Pictograma LED a bateriei indică starea de încărcare:
 - Dacă simbolul **(B6)** clipește, înseamnă că dispozitivul se încarcă
 - Dacă simbolul nu clipește și este aprins, înseamnă că dispozitivul este complet încărcat

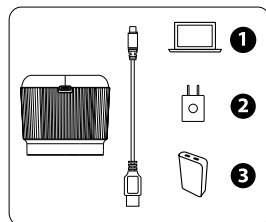

NOTĂ: Opriți întotdeauna pompa înainte de încărcare.

DESCRIEREA PANOULUI

A1: Butonul de pornire (apăsați și țineți apăsat pentru a porni/opri)

A2: Reducerea nivelului de aspirație

A3: Creșterea nivelului de aspirație

A4: Comutator de fază (Stimulare / Expresie / Antistază / Corecție)

A5: Pauză/Continuare

B1: Indicatorul fazei de stimulare

B2: Indicatorul fazei de expresie

B3: Indicator de fază anti-stază


B4: Indicatorul fazei de corecție

B5: Nivel de funcționare / Afișarea timpului

B6: Indicatorul nivelului bateriei

B7: Afișarea unității de timp (minute)

B1+B3: Funcția NipFit® activată

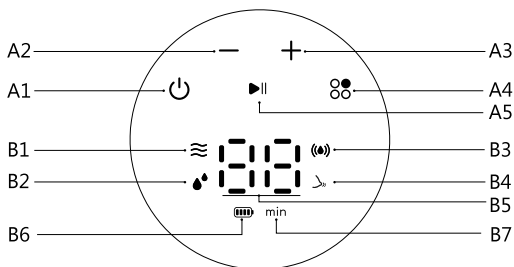

FAZA DE STIMULARE (NIVELURILE 1–9): În această fază, pompa generează un ritm de aspirație relativ rapid, cu o putere de aspirație redusă. Aceasta este concepută pentru a stimula ușor țesutul mamar și a favoriza ejecția laptelui, imitând comportamentul inițial de supt superficial al unui bebeluș. Se recomandă utilizarea acestei faze înainte de a trece la alte faze.




FAZA DE EXPRIMARE (NIVELUL 1–9): Această fază imită ritmul de supt mai profund și mai lent al unui bebeluș atunci când sugă activ laptele. Forța de supt este mai mare, iar frecvența este mai redusă în comparație cu faza de stimulare. Această setare are rolul de a ajuta la extragerea mai eficientă a laptelui odată ce reflexul de ejecție a început.

FAZA DE ASPIRAȚIE ANTI-STAZĂ (NIVELUL 1–9): Această fază oferă un model de aspirație pulsatoriu menit să îndepărteze complet laptele rămas în sân după extragere. Utilizarea regulată poate contribui la prevenirea stazei de lapte, la reducerea riscului de blocare a canalelor lactifere și la menținerea fluxului de lapte.

FUNCȚIA NIPFIT®: Pentru a activa funcția de corectare a sfârcurilor, apăsați butonul de mod până când pictogramele (B1) și (B3) încep să clipească. Funcția are 3 niveluri de intensitate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- 1. PREGĂTIRE:** Înainte de a utiliza aparatul Nuvita 1260W Materno Comfort, spălați-vă bine pe mâini. Asigurați-vă că toate componentele sunt curate și asamblate corect, conform instrucțiunilor de asamblare. Evitați să asamblați unitatea principală și cablul USB în timpul curățării.
- 2. POZIȚIA:** Găsiți un loc liniștit și confortabil unde să vă așezați. Folosiți un suport pentru picioare, dacă este necesar, pentru a menține o postură relaxată și dreaptă. Înainte de a pompa, puteți stimula ușor sânii cu un prosop cald pentru a stimula fluxul de lapte.
- 3. MOD DE UTILIZARE:** Centrați protecția mamară din silikon pe mamelon și asigurați-vă că se mulează perfect în jurul sânelui, fără spații de aer. Țineți ușor dispozitivul cu o mână și susțineți sânul cu cealaltă pentru a-l menține nemișcat.

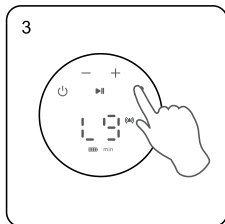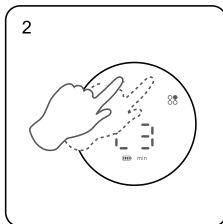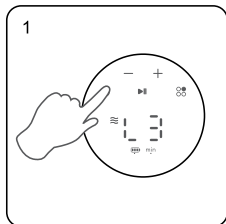

- 4. PORNIREA:** Apăsați și mențineți apăsat butonul **(A1)** pentru a porni dispozitivul. Lumina ambientală va clipi, iar pe ecran va apărea nivelul actual de aspirație. Pompa pornește în **faza de stimulare**.
- 5. REGLAREA INTENSITĂȚII:** Folosiți butonul **(A2)** pentru a reduce și butonul **(A3)** pentru a crește nivelul de aspirație în orice moment pe durata funcționării.
- 6. SCHIMBAREA FAZELOR:** Pentru a schimba faza de funcționare (Stimulare, Expresie, Antistază, Corecție), apăsați butonul **(A4)**. Fazele se vor schimba în ordine, iar faza selectată este confirmată de indicatorul luminos corespunzător.
- 7. PAUZĂ/CONTINUARE:** Pentru a întrerupe sau a relua funcționarea, apăsați butonul **(A5)**.
- 8. OPRIREA SESIUNII:** Când ați terminat, apăsați și țineți apăsat butonul pentru a opri dispozitivul. Deconectați aparatul și începeți procedurile de curățare.

NOTĂ: Dispozitivul se va opri automat după 30 de minute. Acesta memorează ultima fază și ultimul nivel de aspirație utilizate pentru următoarea utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE

A. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Demontați toate piesele care pot fi spălate și curățați-le temeinic (cu excepția unității principale și a cablului).

B. DUPĂ FIECARE UTILIZARE

Demontați și clătiți toate piesele (cu excepția unității principale) în apă rece pentru a îndepărta resturile de lapte.

Piese care trebuie curățate: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DEZINFECTAREA ZILNICĂ

- Mai întâi spală-te pe mâini.
- Separați toate piesele relevante.
- Folosiți apă clocotită sau un sterilizator cu abur timp de **5 minute**.
- **NU** fierbeți piesele **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Piesele **(3, 4, 8)** nu trebuie să intre în contact cu suprafețele metalice fierbinți.

DEPOZITARE: Se lasă să se usuce complet la aer și se păstrează într-un loc curat și uscat.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU CURĂȚARE

- Demontați toate accesoriile care intră în contact cu sânul sau cu laptele matern (cu excepția unității principale).
- După utilizare, curățați imediat componentele pentru a evita acumularea de reziduuri de lapte și dezvoltarea bacteriilor.
- Asigurați-vă că montați/demontați fiecare accesoriu conform instrucțiunilor de asamblare.
- Aveți grijă să nu pierdeți nicio piesă în timpul asamblării și dezasamblării
- Toate componentele din silicon pot fi introduse în sterilizator pentru dezinfectare (cu excepția unității principale).
- **Măsuri de precauție pentru dezinfectarea supapelor:** Nu fierbeți și nu dezinfectați cu abur mai mult de 3 minute.
- **Măsuri de precauție pentru dezinfectarea biberoanelor:** Nu le fierbeți și nu le dezinfectați cu abur mai mult de 5 minute.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Tensiune de intrare:	5 V c.c.
Putere nominală:	6W
Temperatura de funcționare:	15–30 °C
Umiditatea de funcționare:	50% - 80%
Conținutul pachetului:	11 părți
Locul de origine:	RPC

GARANȚIE – TERMENI ȘI CONDIȚII

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni pentru defecte de fabricație, începând de la data achiziției, dovedită prin chitanță sau factură. În cazul achiziției pe bază de factură, garanția legală se reduce la 12 luni. Garanția de 24 de luni **nu acoperă** daunele rezultate din uzura normală a produsului, defectele estetice, accesoriile sau consumabilele (de exemplu, bateriile, capetele de imprimare sau componentele supuse uzurii). **Bateriile beneficiază de o garanție de 6 luni.**

GARANȚIE NULĂ

Garanția legală de 12/24 de luni încetează în următoarele cazuri:

1. Produsul a fost deteriorat din cauza unei utilizări necorespunzătoare, care nu respectă instrucțiunile din manual.
2. Produsul a fost modificat, alterat sau deschis.
3. Defecțiunea este cauzată de întreținerea insuficientă a componentelor, accesoriilor sau consumabilelor (de exemplu, oxidarea, scufundarea pieselor electrice în lichide, reziduuri care blochează senzorul, scurgerea de lichid coroziv din baterii).

EXCLUDERI DIN GARANȚIE

Următoarele sunt excluse din garanția legală de 24 de luni:

1. Costurile pentru înlocuirea sau repararea pieselor supuse uzurii, precum și cele legate de întreținerea curentă a produsului.
2. Costurile și riscurile asociate transportului produsului către și de la punctul de vânzare sau de la centrul autorizat pentru gestionarea garanției.
3. Daune rezultate din instalarea incorectă sau utilizarea necorespunzătoare, care nu respectă instrucțiunile din manual.
4. Daune cauzate de dezastre naturale, căderi, lovituri accidentale sau condiții de mediu incompatibile cu produsul.
5. Defecte care au un impact neglijabil asupra performanței produsului.

LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE:

Producătorul, distribuitorul și toate părțile implicate în vânzarea produsului nu sunt responsabile pentru pierderile economice sau daunele rezultate din funcționarea defectuoasă a produsului. În conformitate cu legislația în vigoare, aceștia nu sunt răspunzători pentru pierderile directe, indirecte, pierderea veniturilor, a economiilor sau pentru alte consecințe rezultate din utilizarea sau imposibilitatea de a utiliza produsul și/sau documentația aferentă (pe suport de hârtie sau electronic), inclusiv lipsa serviciilor de asistență.

Pentru mai multe detalii privind serviciul de asistență, vă rugăm să consultați Condițiile de vânzare disponibile pe site-ul **www.nuvitababy.com**.

Hvala vam što ste kupili Nuvita 1260W nosivi električni izdajnik za dojke. Molimo pročitajte upute pažljivo prije upotrebe i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE VAS I VAŠE DJECE, SAV SADRŽAJ OVOG PROJEKTA ODNOSI SE NA SIGURNOST. MOLIMO VAS DA IH SE PRIDRŽAVATE.

UPOZORENJE

1. Ne koristite izdajalicu za mlijeko tijekom kupanja ili u mokrim uvjetima.
2. Držite ovaj proizvod izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca.
3. Izbjegavajte izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti i visokim temperaturama.
4. Ne koristite uređaj ako je vidljivo oštećen. Za popravke kontaktirajte proizvođača ili ovlašteno osoblje.
5. Držite neiskorištene dijelove izvan dosega djece kako biste spriječili gušenje ili druge nezgode.

OPASNOST

1. Ne puniti niti koristite proizvod u blizini otvorenih plamenova ili u okruženjima s temperaturom višom od 45 °C.
2. Ne uranjajte glavnu jedinicu ili USB kabel u vodu, pića ili druge tekućine.
3. Nikada ne spaljujte niti izlažite glavnu jedinicu otvorenim plamenovima.
4. Držite plastičnu ambalažu podalje od djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.

OBAVIJEST

- Puniti uređaj potpuno prije prvog korištenja.
- Uvijek sastavljajte komponente prema uputama za sastavljanje.
- Podesite snagu usisavanja prema udobnosti i osobnoj toleranciji.
- Ne nagnite i ne puniti posudu za prikupljanje mlijeka iznad označene granice.
- Uvijek provjerite temperaturu mlijeka prije hranjenja kako biste izbjegli opekline.
- Ako imate nedovoljnu opskrbu mlijekom, koristite proizvod pod medicinskim nadzorom.
- Nemojte pretjerano koristiti pumpu kako biste izbjegli ozljedu bradavica.
- Prekinite upotrebu i posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom ako se pojavi bol ili iritacija.
- Ne dijelite komponente uređaja koje dolaze u kontakt s mlijekom među korisnicima.
- Ne koristite pumpu tijekom trudnoće jer može izazvati kontrakcije maternice.
- Prestani pumpati ako se u roku od 5 minuta ne izdoji nijedna kap mlijeka.
- Koristite ovaj proizvod samo prema uputama iz priručnika.

Nuvita 1260W Materno Comfort dizajniran je za podršku majkama koje doje tako da oponaša prirodni ritam dojenja djeteta. Ovaj nosivi električni izdajnik za mlijeko posebno je osmišljen da pomogne majkama da učinkovito i udobno izdaju majčino mlijeko u pokretu, osiguravajući neometano i bezbolno iskustvo izdavanja. Ima 9 podesivih razina intenziteta, NipFit® funkcionalnost i Careflo® tehnologiju u tri faze.



KOREKCIJA

Način korekcije pomaže ispraviti obrnute ili ravne bradavice kroz cikluse nježnog usisavanja.



POTPUNO SILIKONSKI ŠTIT

ZA DOJKE, nježan prema koži i blag prema koži, nudi mekan i udoban pristajanje za učinkovito usisavanje.



SUSTAV

PROTIV POVRATNOG TOKA sprječava povratak mlijeka u motorni blok, osiguravajući higijenu i dugovječnost proizvoda.



CAREFLO® TEHNOLOGIJA:

Za razliku od tradicionalnih dvofaznih pumpi za dojenje, Careflo® uvodi treću fazu drenaže protiv staze uz standardne faze stimulacije i izdavanja. To pomaže:

- Promovirajte dosljedniju opskrbu mlijekom.
- Spriječite začepljene kanale i mastitis.
- Ublažite napetost i nadutost dojki.
- Podržite glađi, neprekinuti put dojenja.



NIPFIT® FUNKCIJA:

Korekcija ravnih ili uvlačenih bradavica.

Ova je funkcija osmišljena za ispravljanje ravnih ili uvlačenih bradavica i podršku izdavanja mlijeka nježnom, postupnom stimulacijom:

- Pomaže da bradavica viri prema van.
- Omogućuje bebi da se pravilno prikači na dojkę.
- Podržava početak i nastavak dojenja.

KONTRAINDIKACIJE

Nemojte koristiti značajku NipFit® ako:

1. Imate otvorene rane, pukotine, lezije ili aktivne infekcije na bradavici ili areoli.
2. Nedavno ste imali operaciju dojke.
3. Imate dijagnosticirano stanje uvlačenja bradavica uzrokovano bolešću ili traumom, a ne urođeno. Ako je to slučaj, prvo se posavjetujte sa svojim liječnikom.
4. Od prve primjene osjećate oštru bol. Odmah prestanite s upotrebom.
5. Imate posebno osjetljivu kožu ili patite od lokalnih dermatoloških stanja, poput ekcema ili psorijaze.
6. Trudna ste. Usisavanje može potaknuti kontrakcije.



UPOZORENJE

NipFit® značajka namijenjena je samo za upotrebu nakon poroda. Ne koristiti tijekom trudnoće.


UPOZORENJA TIJEKOM UPORABE

- Uvijek započnite na najnižoj razini, razini 1. Nemojte povećavati intenzitet dok se bradavica postupno ne prilagodi, čak i ako je osjećaj ugodan.
- Ne prekoračite 5–10 minuta neprekidne upotrebe NipFit® značajke po sesiji, osobito u prvih nekoliko tjedana.
- Ne izvodite više od 2 korekcijske sesije dnevno. Prekomjerna upotreba može uzrokovati iritaciju, oticanje ili mikro-pukotine na bradavici.
- Odmah prestanite s upotrebom ako osjetite oštru bol, neuobičajeno crvenilo, trajni oticanje, mjehure ili iscjedak tekućine koja nije mlijeko.
- Ovaj uređaj nije certificirani medicinski uređaj za kliničku terapiju i ne zamjenjuje savjetovanje s primaljom, liječnikom ili međunarodno certificiranim savjetnikom za dojenje (IBCLC).
- Invertirana bradavica trećeg stupnja, ozbiljno prirastala, zahtijeva medicinsku procjenu prije upotrebe bilo kojeg uređaja za korekciju.
- Dugotrajna upotreba visokog intenziteta može uzrokovati oticanje areole, što privremeno otežava bebi da se prikači. To može imati suprotan učinak od željenog.

UPUTE ZA SIGURNO KORIŠTENJE:

- Provjerite je li silikonska čašica odgovarajuće veličine, uključujući prirubnicu od 24 mm ili reduktore od 20/22 mm, prije aktiviranja NipFit® značajke. Prevelika čašica može nekontrolirano pojačati usis na areoli.
- Prije sesije nanosite nekoliko kapi majčinog mlijeka ili čistu lanolin kremu kako biste omekšali područje.
- Tijekom NipFit® sesije bradavica bi trebala biti centrirana u košarici. Neispravan položaj može uzrokovati asimetrično usisavanje i iritaciju.
- Ako ne primijetite nikakvo poboljšanje nakon 4-6 tjedana pravilne upotrebe, posavjetujte se sa zdravstvenim djelatnikom.


SASTAVCI PROIZVODA

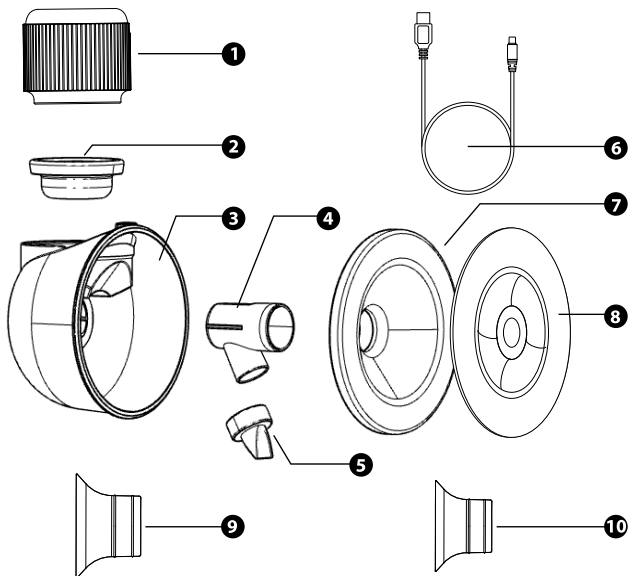

NE.	IME	MATERIJAL	KOLIČINA
1	Glavna jedinica	\	1
2	Silikonska dijafragma	Silikon	1
3	Tijelo šalice	polipropilen	1
4	Poveznik	polipropilen	1
5	Ventil	Silikon	1
6	USB kabel	\	1
7	Silikonska zaštita za dojke	Silikon	1
8	Zaštita od prašine	polipropilen	1
9	22 mm silikonski umetak	Silikon	1
10	20 mm silikonski umetak	Silikon	1

UPUTE ZA SASTAVLJANJE


1. Umetnite ventil u priključak i osigurajte čvrsto pristajanje.
2. Prikačite konektor na tijelo šalice.
3. Postavite silikonsku dijafragmu na tijelo čaše i pritisnite dok ne bude zapečaćena sa svih strana.
4. Čvrsto pričvrstite silikonsku zaštitu za grudi na tijelo košarice.
5. Prikačite glavnu jedinicu na silikonsku dijafragmu dok ne klikne.

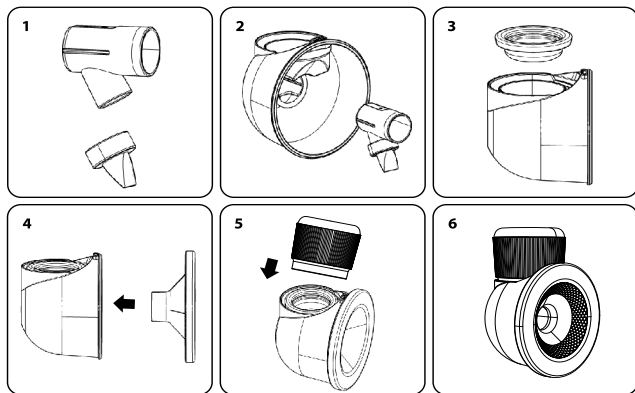

METODA NAPLATE

KORISTITE PRILOŽENI USB KABEL ZA PUNJENJE PUMPE:

- Kompatibilno s: USB priključcima računala, adapterima za napajanje ili power bankama.
- Koristite samo power banke s izlaznom snagom koja ne prelazi **5 V/3 A**.
- LED ikona baterije označava status punjenja:
 - Ako simbol **(B6)** treperi, uređaj se puni.
 - Ako simbol ne treperi i je ON, uređaj je potpuno napunjen.

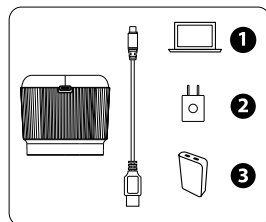

NAPOMENA: Uvijek isključite pumpu prije punjenja.

OPIS PANELA

A1: Tipka za uključivanje/isključivanje (pritisnite i držite za uključivanje/isključivanje)

A2: Smanjite razinu usisavanja

A3: Povećanje razine usisavanja

A4: Fazni prekidač (Stimulacija / Izražavanje / Protustaza / Korekcija)

A5: Pauza/Nastavi

B1: Indikator faze stimulacije

B2: Indikator faze ekspresije

B3: Indikator faze protiv staze


B4: Indikator faze korekcije

B5: Radna razina / Prikaz vremena

B6: Indikator razine baterije

B7: Prikaz jedinice vremena (minute)

B1+B3: NipFit® funkcija aktivirana

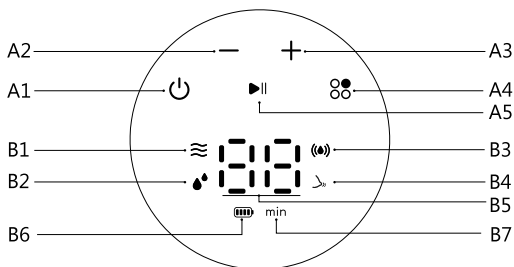

FAZA STIMULACIJE (RAZINA 1–9): U ovoj fazi pumpa stvara relativno brz ritam usisavanja s malom usisnom snagom. Dizajnirana je za nježno stimuliranje tkiva dojke i poticanje izbacivanja mlijeka oponašanjem početnog plitkog sisanja bebe. Preporučuje se koristiti ovu fazu prije prelaska na druge faze.




FAZA EKSPRESIJE (RAZINA 1–9): Ova faza oponaša dublji i sporiji ritam sisanja bebe tijekom aktivnog pijenja mlijeka. Sila sisanja je veća, a frekvencija sporija u usporedbi s fazom stimulacije. Ova je postavka namijenjena učinkovitijem izdvajanju mlijeka nakon što se pokrene refleks otpuštanja mlijeka.

FAZA USISAVANJA PROTIV ZASTOJA (RAZINA 1–9): Ova faza pruža pulsirajući obrazac usisavanja namijenjen temeljitom uklanjanju preostalog mlijeka iz dojke nakon izdavanja. Redovita upotreba može pomoći u sprječavanju zastoja mlijeka, smanjenju rizika od začepljenih mliječnih kanala i održavanju protoka mlijeka.

NIPFIT® FUNKCIJA: Za aktivaciju funkcije korekcije bradavica pritisnite gumb načina rada dok ikone (**B1**) i (**B3**) ne počnu treptati. Funkcija ima 3 razine intenziteta.

UPUTE ZA UPORABU

- 1. PRIPREMA:** Prije upotrebe Nuvita 1260W Materno Comfort temeljito operite ruke. Provjerite jesu li sve komponente čiste i pravilno sastavljene prema uputama za montažu. Prilikom čišćenja izbjegavajte sastavljanje glavne jedinice i USB kabela.
- 2. POZICIONIRANJE:** Pronađite mirno i udobno mjesto za sjedenje. Po potrebi upotrijebite naslon za noge kako biste održali opušten i uspravan položaj. Prije dojenja možete nježno stimulirati grudi toplim ručnikom kako biste potaknuli protok mlijeka.
- 3. PRIMJENA:** Centrirajte silikonski štitič za bradavice na bradavici i osigurajte da čvrsto prianja uz dojkicu bez zračnih praznina. Jednom rukom nježno držite uređaj, a drugom poduprite dojkicu kako bi ostala stabilna.

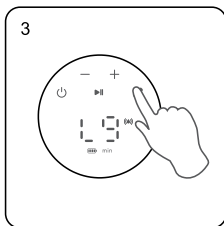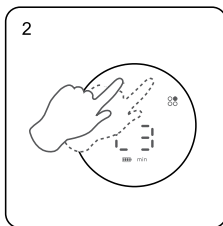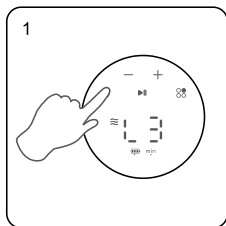

- 4. UKLJUČIVANJE:** Pritisnite i držite tipku **(A1)** za uključivanje uređaja. Ambijentalno svjetlo će treptati, a na zaslonu će se prikazati trenutna razina usisavanja. Pumpa započinje u **fazi stimulacije**.
- 5. PODEŠAVANJE INTENZITETA:** Koristite **(A2)** za smanjenje i **(A3)** za povećanje razine usisavanja u bilo kojem trenutku tijekom rada.
- 6. PROMJENA FAZA:** Da biste promijenili radnu fazu (Stimulacija, Izražavanje, Protuzastoj, Korekcija), pritisnite tipku **(A4)**. Faza će se izmjenjivati redom, a odabrana faza potvrđuje se odgovarajućim indikatorom.
- 7. PAUZA/NASTAVAK:** Za zaustavljanje ili nastavak rada pritisnite tipku **(A5)**.
- 8. ZAVRŠETAK SESIJE:** Kada završite, pritisnite i držite gumb za isključivanje uređaja. Odspojite jedinicu i započnite postupke čišćenja.

NAPOMENA: Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta. Pohranjuje posljednju korištenu fazu i razinu usisavanja za sljedeću upotrebu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

A. PRIJE PRVE UPORABE

Rastavite sve perive dijelove i temeljito ih očistite (osim glavne jedinice i kabela).

B. NAKON SVAKE UPOTREBE

Rastavite i isperite sve dijelove (osim glavne jedinice) u hladnoj vodi kako biste uklonili ostatke mlijeka. Dijelovi za čišćenje: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DNEVNA DEZINFEKCIJA

- Prvo operite ruke.
- Odvojite sve relevantne dijelove.
- Koristite kipuću vodu ili parni sterilizator 5 **minuta**.
- **Ne** kuhajte dijelove **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Dijelovi **(3, 4, 8)** ne smiju dodirivati vruće metalne površine.

SKLADIŠTENJE: Potpuno osušite na zraku i čuvajte na čistom, suhom mjestu.

MJERE OPREZA PRI ČIŠĆENJU

- Rastavite sve dodatke koji dolaze u kontakt s dojkom ili majčinim mlijekom (osim glavne jedinice).
- Nakon upotrebe odmah očistite dijelove kako biste spriječili ostanke mlijeka i rast bakterija.
- Pobrinite se da sastavite/razmontirate svaki dodatak prema uputama za sastavljanje.
- Prilikom sastavljanja i rastavljanja nemojte izgubiti nijedan dio.
- Sve silikonske komponente mogu se staviti u sterilizator radi dezinfekcije (osim glavne jedinice).
- **Mjere opreza pri dezinfekciji ventila:** Ne kuhajte i ne sterilizirajte parom dulje od 3 minute.
- **Mjere opreza pri dezinfekciji bočice:** Ne kuhajte i ne sterilizirajte parom dulje od 5 minuta.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Ulazni napon:	DC 5V
Nominalna snaga:	6W
Radna temperatura:	15~30°C
Radna vlažnost:	50% - 80%
Sadržaj pakiranja:	11 dijelova
Mjesto podrijetla:	PRC

GARANCIJA - UVJETI I ODREDBE

Ovaj proizvod pokriva jamstvo od 24 mjeseca na tvorničke nedostatke, počevši od datuma kupnje dokazanog računom ili fakturom. U slučaju kupnje s fakturom, zakonsko jamstvo skraćuje se na 12 mjeseci. Jamstvo od 24 mjeseca **ne uključuje** oštećenja nastala normalnim trošenjem proizvoda, estetska oštećenja, dodatke ili potrošni materijal (na primjer baterije, glave ili komponente podložne trošenju). **Baterije su zajamčene na razdoblje od 6 mjeseci.**

NEVALJANI JAMSTVENI LIST

12/24-mjesečno zakonsko jamstvo prestaje u sljedećim slučajevima:

1. Proizvod je oštećen zbog nepravilne upotrebe koja nije u skladu s uputama iz priručnika.
2. Proizvod je izmijenjen, neovlašteno otvoren ili otvoren.
3. Neispravnost je uzrokovana nedovoljnim održavanjem komponenti, dodataka ili potrošnog materijala (npr. oksidacija, uranjanje električnih dijelova u tekućine, ostaci koji blokiraju senzor, curenje korozivne tekućine iz baterija).

IZUZETCI IZ GARANCIJE

Sljedeće su isključene iz 24-mjesečnog zakonskog jamstva:

1. Troškovi zamjene ili popravka dijelova podložnih habanju i troškovi redovnog održavanja proizvoda.
2. Troškovi i rizici povezani s prijevozom proizvoda do prodajnog mjesta ili ovlaštenog centra za upravljanje jamstvom.
3. Oštećenja nastala nepravilnom ugradnjom ili nepravilnom uporabom suprotnom uputama iz priručnika.
4. Oštećenja uzrokovana prirodnim katastrofama, padovima, slučajnim udarcima ili uvjetima okoline koji su nekompatibilni s proizvodom.
5. Defekti koji imaju zanemariv utjecaj na performanse proizvoda.

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI:

Proizvođač, distributer i sve strane uključene u prodaju proizvoda ne odgovaraju za ekonomske gubitke ili štetu nastalu zbog neispravnosti proizvoda. U skladu s važećim zakonodavstvom, oni ne odgovaraju za izravnu, neizravnu štetu, gubitak prihoda, ušteda ili druge posljedice koje proizlaze iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda i/ili pripadajuće dokumentacije (papirnatu ili elektroničku), uključujući nedostatak usluge.

Za daljnje detalje o usluzi pomoći, molimo pogledajte Uvjete prodaje dostupne na web-stranici **www.nuvitababy.com**.

Dėkojame, kad įsigijote „Nuvita“ 1260 W nešiojamą elektrinį krūtų siurbį. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

SIEKIANČI UŽTIKRINTI JŪSŲ IR JŪSŲ VAIKŲ SAUGĄ BEI SVEIKATĄ, VISI ŠIO PROJEKTO REIKALAVIMAI YRA SUSIJĘ SU SAUGA. PRAŠOME JŲ GRIEŽTAI LAIKYTIS.

ĮSPĖJIMAS

1. Nenaudokite krūtų siurblio maudantis ar drėgnoje aplinkoje.
2. Šį produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
3. Venkite tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros.
4. Nenaudokite prietaiso, jei jis yra akivaizdžiai pažeistas. Dėl remonto kreipkitės į gamintoją arba įgaliotus specialistus.
5. Nenaudojamas detales laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte užspringimo ar kitų nelaimingų atsitikimų.

PAVOJUS

1. Nekraukite ir nenaudokite šio gaminio šalia atviros ugnies arba aplinkoje, kurioje temperatūra viršija 45 °C.
2. Negalima panardinti pagrindinio įrenginio ar USB laido į vandenį, gėrimus ar kitus skysčius.
3. Niekada nedeginkite pagrindinio įrenginio ir neleiskite, kad jis patektų į atvirą ugnį.
4. Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte uždegimo pavojaus.

PRANEŠIMAS

- Prieš pirmąjį naudojimą įrenginį reikia visiškai įkrauti.
- Visada surinkite detales laikydamiesi surinkimo instrukcijų.
- Reguliuokite siurbimo stiprumą atsižvelgdami į patogumą ir asmeninį jautrumą.
- Negalima pakreipti pieno surinkimo puodelio ir jo nepripildyti virš pažymėtos ribos.
- Prieš maitindami visada patikrinkite pieno temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų.
- Jei turite mažą pieno kiekį, šį produktą vartokite tik pasikonsultavusi su gydytoju.
- Nenaudokite siurblio pernelyg dažnai, kad išvengtumėte spenelių sužalojimo.
- Jei pasireiškia skausmas ar sudirginimas, nustokite naudoti produktą ir kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
- Negalima dalytis prietaiso dalimis, kurios liečiasi su pienu, tarp skirtingų naudotojų.
- Nenaudokite siurblio nėštumo metu, nes tai gali sukelti gimdos susitraukimus.
- Jei per 5 minutes nepavyksta išspausti pieno, nustokite pumpuoti.
- Šį gaminį naudokite tik taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

„Nuvita 1260W Materno Comfort“ sukurta siekiant padėti krūtimi maitinančioms motinoms, imituojant natūralų kūdikio žindymo ritmą. Šis nešiojamas elektrinis krūties siurblys specialiai suprojektuotas padėti mamoms efektyviai ir patogiai išsiurbti motinos pieną bet kur, užtikrinant sklandų ir neskausmingą siurbimo procesą. Jis turi 9 reguliuojamus intensyvumo lygius, „NipFit“ funkciją ir 3 fazių „Careflo“ technologiją.



KOREKCIJA

• Korekcijos režimas padeda ištaisyti įdubusius arba plokščius spenelius, taikant švelnaus siurbimo ciklus.



VISIŠKAI SILIKONINIS KRŪTIES APSAUGALAS

– nekenkia odai ir yra švelnus, užtikrina minkštą bei patogų prigludimą, leidžiantį veiksmingai siurbti pieną.



ATSIGRĘŽIMO PREVENCIJOS SISTEMA

neleidžia pienui atgal tekėti į variklio bloką, taip užtikrinant gaminio higieną ir ilgaamžiškumą.



„CAREFLO“ TECHNOLOGIJA:

Skirtingai nuo tradicinių dvifazių krūties siurbių, „Careflo“ be standartinių stimuliacijos ir pieno išsiurbimo etapų siūlo trečiąjį – stazės prevencijos drenažo etapą. Tai padeda:

- Skatinti nuoseklesnį pieno gamybos procesą.
- Apsaugokite nuo pieno latakų užsikimšimo ir mastito.
- Sumažina krūtų įtampą ir prisipildymą.
- Padėkite užtikrinti sklandesnį ir nepertraukiamą žindymo procesą.



„NIPFIT“ FUNKCIJA:

Plokščių arba įdubusių spenelių korekcija.

Ši funkcija skirta padėti ištaisyti plokščias arba įdubusias speneles ir palengvinti pieno išsiskyrimą švelniai ir palaipsniui stimuliuojant:

- Tai padeda speneliui išsikišti į išorę.
- Tai palengvina kūdikio prisisiurbimą prie krūties.
- Tai padeda pradėti ir tęsti maitinimą krūtimi.

KONTRAINDIKACIJOS

Nenaudokite „NipFit®“ funkcijos, jei:

1. Ant spenelių ar areolės yra atvirų žaizdų, įtrūkimų, pažeidimų arba aktyvių infekcijų.
2. Jums neseniai buvo atlikta krūties operacija.
3. Jums diagnozuota spenelių įtraukimo būklė, kurią sukėlė liga ar trauma, o ne įgimta. Jei taip yra, pirmiausia pasikonsultuokite su gydytoju.
4. Jau po pirmojo naudojimo pajuntate stiprų skausmą. Nedelsdami nustokite naudoti.
5. Jūsų oda yra ypač jautri arba kenčiate nuo vietinių odos ligų, pavyzdžiui, egzemos ar psoriazės.
6. Jūs esate nėščia. Siurbimas gali sukelti gimdos susitraukimus.



ĮSPĖJIMAS

„NipFit®“ funkcija skirta naudoti tik po gimdymo. Nenaudokite nėštumo metu.


ĮSPĖJIMAI NAUDOJIMO METU

- Visada pradėkite nuo žemiausio lygio – 1 lygio. Nedidinkite intensyvumo, kol spenelis palaipsniui neprisitaikys, net jei pojūtis yra malonus.
- Vienos sesijos metu „NipFit®“ funkciją naudokite ne ilgiau kaip 5–10 minučių iš eilės, ypač per pirmąsias kelias savaites.
- Per dieną atlikite ne daugiau kaip 2 koregavimo seansus. Per dažnas naudojimas gali sukelti spenelių sudirginimą, patinimą arba mikroįtrūkimus.
- Jei pajusite staigų skausmą, neįprastą paraudimą, ilgai neišnykstantį patinimą, pūsleles arba išskyras, kurios nėra pienas, nedelsdami nustokite naudoti šį produktą.
- Šis prietaisas nėra sertifikuotas medicinos prietaisas, skirtas klinikiniam gydymui, ir nepakeičia konsultacijos su akušere, gydytoju ar Tarptautinės tarybos sertifikuotu laktacijos konsultantu (IBCLC).
- Prieš pradėdami naudoti bet kokį korekcinį prietaisą, būtina atlikti medicininę 3 laipsnio, stipriai prisitvirtinusio įdubusio spenelio apžiūrą.
- Ilgainiui, intensyvus naudojimas gali sukelti spenelių areolės patinimą, dėl kurio kūdikiui laikinai gali būti sunkiau prisisiurbti. Tai gali turėti priešingą nei pageidaujamą poveikį.

SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS:

- Prieš įjungdami „NipFit®“ funkciją, įsitikinkite, kad silikoninis įdėklas yra tinkamo dydžio, įskaitant 24 mm flanšą arba 20/22 mm reduktorius. Per didelis įdėklas gali nekontroliuojamai sustiprinti siurbimą ant spenelių areolės.
- Prieš procedūrą užtepkite kelis lašus motinos pieno arba gryno lanolino kreml, kad oda taptų minkštesnė.
- NipFit® procedūros metu spenelis turi būti išdėstytas kaušelio centre. Netinkama padėtis gali sukelti asimetrišką siurbimą ir sudirginimą.
- Jei po 4–6 savaičių tinkamo vartojimo nepastebėsite jokio pagerėjimo, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.


PRODUKTO SUDEDAMOSIOS DALYS

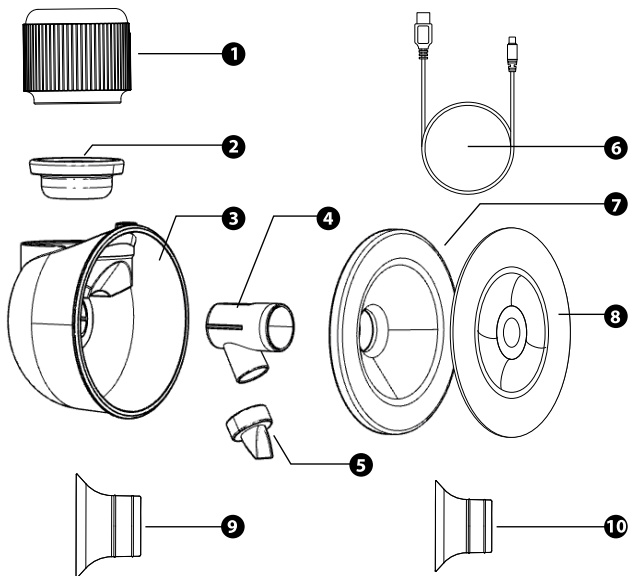

NE.	PAVADINIMAS	MEDŽIAGA	KIEKIS
1	Pagrindinis blokas	\	1
2	Silikoninė diafragma	Silikonas	1
3	Kubelio korpusas	Polipropilenas	1
4	Jungtis	Polipropilenas	1
5	Vožtuvas	Silikonas	1
6	USB laidas	\	1
7	Silikoninis krūties apsaugas	Silikonas	1
8	Apsauga nuo dulkių	Polipropilenas	1
9	22 mm silikoninis įdėklas	Silikonas	1
10	20 mm silikoninis įdėklas	Silikonas	1

SURINKIMO INSTRUKCIJOS

1. Įkiškite vožtuvą į jungtį ir įsitikinkite, kad jis tvirtai prigludęs.
2. Pritvirtinkite jungtį prie puodelio korpuso.
3. Uždėkite silikoninę diafragmą ant puodelio korpuso ir nuspaudkite, kol ji visais kraštais prigluds.
4. Tvirtai pritvirtinkite silikoninį krūties apsaugą prie kaušelio korpuso.
5. Pritvirtinkite pagrindinį bloką prie silikoninės diafragmos, kol išgirsite spragtelėjimą.

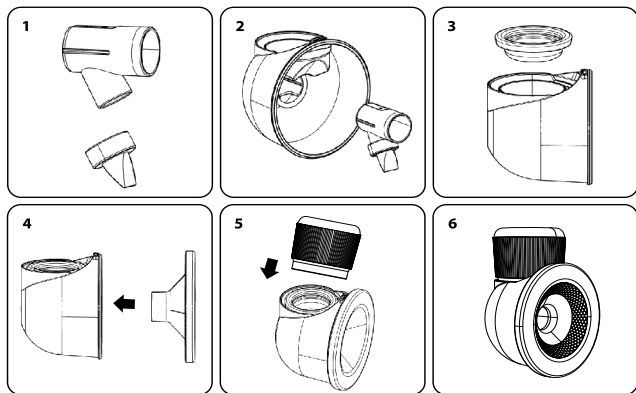


ĮKROVIMO BŪDAS

NAUDOKITE PRIDEDAMĄ USB LAIDĄ, KAD ĮKRAUTUMĖTE SIURBLĮ:

- Suderinamas su: kompiuterio USB prievadais, maitinimo adapteriais arba išoriniais akumulatoriais.
- Naudokite tik išorinius akumulatorius, kurių išejimo galia neviršija **5 V/3 A**.
- LED baterijos piktograma rodo įkrovimo būseną:
 - Jei simbolis **(B6)** mirksi, prietaisas įkraunamas
 - Jei simbolis nemirga ir dega, tai reiškia, kad įrenginys yra visiškai įkrautas

PASTABA: prieš įkraunant visada išjunkite siurblį.

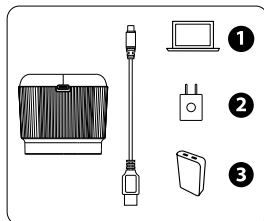

SKYDO APRAŠYMAS

A1: Įjungimo mygtukas (paspauskite ir laikykite nuspaudę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte)

A2: Sumažinti siurbimo lygį

A3: Padidinti siurbimo galingumą

A4: Fazės perjungiklis (stimuliacija / išraiška / stazės prevencija / korekcija)

A5: Sustabdyti/Tęsti

B1: Stimuliacijos fazės indikatorius

B2: Ekspresijos fazės indikatorius

B3: Antistazės fazės indikatorius


B4: Koregavimo etapo indikatorius

B5: Darbinis lygis / Laiko rodymas

B6: Akumulatoriaus įkrovos lygio indikatorius

B7: Laiko vienetų rodymas (minutės)

B1+B3: Įjungta „NipFit®“ funkcija

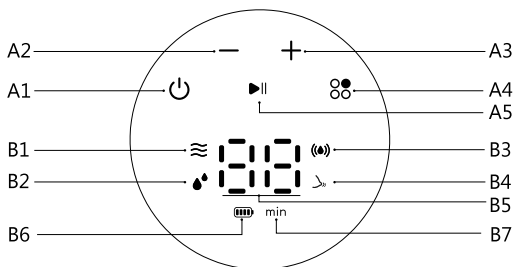

STIMULIACIJOS ETAPAS (1–9 LYGIS): Šiame etape siurblys sukuria palyginti greitą siurbimo ritmą su maža siurbimo galia. Jis skirtas švelniai stimuliuoti krūties audinius ir skatinti pieno išsiskyrimą, imituojant pradinį kūdikio paviršutinišką čiulpimą. Rekomenduojama naudoti šį etapą prieš pereinant prie kitų etapų.




IŠSISKYRIMO FAZĖ (1–9 LYGIS): Ši fazė imituoja gilesnį ir lėtesnį kūdikio čiulpimo ritmą, kai jis aktyviai geria pieną. Čiulpimo jėga yra didesnė, o dažnis – mažesnis, palyginti su stimuliacijos faze. Šis nustatymas skirtas padėti efektyviau išgauti pieną, kai prasideda pieno išsiskyrimo refleksas.

ANTISTAZĖS SIURBIMO ETAPAS (1–9 LYGIAI): Šiame etape taikomas pulsuojantis siurbimo režimas, skirtas kruopščiai pašalinti po pieno išspaudimo krūtyje likusį pieną. Reguliarus naudojimas gali padėti išvengti pieno stazės, sumažinti pieno latakų užsikimšimo riziką ir palaikyti pieno tekėjimą.

„NIPFIT®“ FUNKCIJA: Norėdami įjungti spenelių koregavimo funkciją, spauskite režimo mygtuką, kol piktogramos (**B1**) ir (**B3**) pradės mirgėti. Funkcija turi 3 intensyvumo lygius.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- PASIRENGIMAS:** Prieš naudodami „Nuvita 1260W Materno Comfort“, kruopščiai nusiplaukite rankas. Įsitinkinkite, kad visos dalys yra švarios ir teisingai surinktos pagal surinkimo instrukcijas. Valydami venkite surinkti pagrindinį įrenginį ir USB laidą.
- PADĖTIS:** Raskite ramią ir patogią vietą, kur galėtumėte atsisėsti. Jei reikia, naudokite kojų atramą, kad išlaikytumėte atsipalaidavusią, tiesią laikyseną. Prieš pradėdami pumpuoti, galite švelniai stimuliuoti krūtis šiltu rankšluosčiu, kad paskatintumėte pieno tekėjimą.
- NAUDOJIMAS:** Silikoninį krūties apsaugą uždėkite ant spenelio vidurio ir įsitinkinkite, kad jis tvirtai priglundą prie krūties, nepalikdamas oro tarpų. Viena ranka švelniai laikykite prietaisą, o kita – palaikykite krūtį, kad ji nesislinkstų.

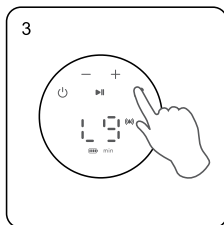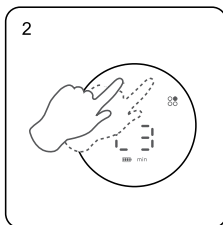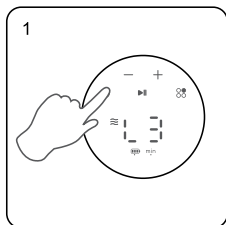

- JUNGIMAS:** Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **(A1)**. Aplinkos šviesos indikatorius pradės mirgėti, o ekrane bus rodomas dabartinis siurbimo lygis. Siurblys pradeda veikti **stimuliacijos fazėje**.
- INTENSIVUMO REGULIAVIMAS:** Naudokite mygtuką **(A2)**, kad sumažintumėte, ir mygtuką **(A3)**, kad padidintumėte siurbimo stiprumą bet kuriuo veikimo metu.
- FAZĖS PERJUNGIMAS:** Norėdami pakeisti darbo fazę („Stimuliacija“, „Išspaudimas“, „Antistazė“, „Korekcija“), paspauskite mygtuką **(A4)**. Fazės keisis paeiliui, o pasirinktą fazę patvirtins atitinkama indikatoriaus lemputė.
- PAUZĖ/TĖSTI:** Norėdami sustabdyti arba tęsti veikimą, paspauskite mygtuką **(A5)**.
- SESIJOS UŽBAIGIMAS:** Baigę darbą, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį. Atjunkite įrenginį ir pradėkite valymo procedūras.

PASTABA: Prietaisas automatiškai išsijungs po 30 minučių. Jis išsaugo paskutinį naudotą režimą ir siurbimo stiprumą, kad galėtumėte juos naudoti kitą kartą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

A. PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ

Išardykite visas plaunamas dalis ir kruopščiai jas išvalykite (išskyrus pagrindinį įrenginį ir laidą).

B. PO KIEKVIENO NAUDOJIMO

Išardykite ir nuplaukite visas dalis (išskyrus pagrindinį bloką) šaltu vandeniu, kad pašalintumėte pieno likučius.

Valytinos dalys: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. KASDIENĖ DEZINFEKCIJA

- Pirmiausia nusiplaukite rankas.
- Išskirkite visas reikiamas dalis.
- Sterilizuokite verdančiu vandeniu arba garų sterilizatoriumi **5 minutes**.
- **NEVIRINKITE** šių dalių **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Dalys **(3, 4, 8)** neturi liestis su karštais metaliniais paviršiais.

LAIKYMAS: Gera išdžiovinkite natūraliai ir laikykite švarioje, sausoje vietoje.

VALYMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Išardykite visus priedus, kurie liečiasi su krūtimi arba motinos pienu (išskyrus pagrindinį įrenginį).
- Po naudojimo nedelsiant nuvalykite detales, kad išvengtumėte pieno likučių susidarymo ir bakterijų dauginimosi.
- Įsitikinkite, kad kiekvieną priedą surinkite ir išardykite laikydamiesi surinkimo instrukcijų.
- Montuodami ir išardydami nepraraskite nė vienos detalės
- Visas silikonines dalis galima įdėti į sterilizatorių dezinfekuoti (išskyrus pagrindinį įrenginį).
- **Atsargumo priemonės, taikytinos dezinfekuojant vožtuvą:** Nevirinkite ir nedezinfekuokite garu ilgiau nei 3 minutes.
- **Butelių dezinfekavimo atsargumo priemonės:** Nevirinkite ir nedezinfekuokite garu ilgiau nei 5 minutes.

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

Įėjimo įtampa:	5 V nuolatinė srovė
Nominali galia:	6W
Darbinė temperatūra:	15–30 °C
Darbinė drėgmė:	50% - 80%
Pakuotės turinys:	11 dalių
Kilmės vieta:	Kinijos Liaudies Respublika

GARANTIJA – SĄLYGOS IR NUOSTATOS

Šiam gaminiui suteikiama 24 mėnesių garantija dėl gamybos defektų, skaičiuojama nuo pirkimo datos, patvirtintos kasos kvitu arba sąskaita-faktūra. Jei pirkimas buvo atliktas su sąskaita-faktūra, įstatyminė garantija sutrumpinama iki 12 mėnesių. 24 mėnesių garantija **neapima** žalos, atsiradusios dėl įprasto gaminio nusidėvėjimo, estетinių pažeidimų, priedų ar vartojimo reikmenų (pavyzdžiui, baterijų, galvučių ar nusidėvinčių dalių). **Baterijoms suteikiama 6 mėnesių garantija.**

NEGALIOJANČIA GARANTIJA

12/24 mėnesių įstatyminė garantija nustoja galioti šiais atvejais:

1. Produktas buvo sugadintas dėl netinkamo naudojimo, nesilaikant naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
2. Produktas buvo modifikuotas, sugadintas arba atidarytas.
3. Gedimą sukelia nepakankama komponentų, priedų ar eksploatacinių medžiagų priežiūra (pvz., oksidacija, elektrinių dalių panardinimas į skysčius, jutiklį užkimšantys likučiai, ęsdinančio skysčio išsiliejimas iš baterijų).

GARANTIJOS IŠIMTYS

24 mėnesių įstatyminė garantija netaikoma šiems atvejams:

1. Išlaidos, susijusios su susidėvėjusių dalių keitimu ar remontu, taip pat su įprastine produkto technine priežiūra.
2. Išlaidos ir rizika, susijusios su produkto gabenimu į pardavimo vietą ar įgaliotą garantinio aptarnavimo centrą ir atgal.
3. Žala, atsiradusi dėl netinkamo montavimo arba netinkamo naudojimo, nesilaikant naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų.
4. Žala, padaryta dėl stichinių nelaimių, kritimo, atsitiktinių smūgių arba gaminiui netinkamų aplinkos sąlygų.
5. Defektai, kurie turi nereikšmingą poveikį produkto veikimui.

ATSAKOMYBĖS APIBRĖŽIMAI:

Gamintojas, platintojas ir visos su produkto pardavimu susijusios šalys neatsako už ekonominius nuostolius ar žalą, kilusią dėl produkto gedimo. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, jie neatsako už tiesioginius, netiesioginius nuostolius, pajamų ar santaupų praradimą ar kitas pasekmes, kylančias dėl produkto ir (arba) susijusios dokumentacijos (popierinės ar elektroninės) naudojimo ar negalėjimo juos naudoti, įskaitant paslaugų nesuteikimą.

Daugiau informacijos apie pagalbos paslaugą rasite pardavimo sąlygose, paskelbtose interneto svetainėje **www.nuvitababy.com**.

Dziękujemy za zakup przenośnego elektrycznego laktatora Nuvita o mocy 1260 W. Przed użyciem prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

**W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PAŃSTWA ORAZ PAŃSTWA DZIECI
WSZYSTKIE WYTYPY ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE DOTYCZĄ
BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ICH ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE.**

OSTRZEŻENIE

1. Nie należy używać laktatora podczas kąpieli ani w wilgotnym otoczeniu.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
3. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur.
4. Nie należy używać urządzenia, jeśli nosi ono widoczne ślady uszkodzeń. W celu naprawy należy skontaktować się z producentem lub upoważnionym personelem.
5. Niewykorzystane części należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia się lub innym wypadkom.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

1. Nie należy ładować ani używać produktu w pobliżu otwartego ognia ani w otoczeniu, w którym temperatura przekracza 45°C.
2. Nie należy zanurzać urządzenia głównego ani kabla USB w wodzie, napojach ani innych płynach.
3. Nigdy nie należy spalać urządzenia głównego ani wystawiać go na działanie otwartego ognia.
4. Opakowania z tworzyw sztucznych należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.

OGŁOSZENIE

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
- Elementy należy zawsze montować zgodnie z instrukcją montażu.
- Dostosuj siłę ssania w zależności od komfortu i indywidualnej tolerancji.
- Nie należy przechylać kubka na mleko ani napełniać go powyżej zaznaczonego poziomu.
- Przed karmieniem zawsze sprawdzaj temperaturę mleka, aby uniknąć poparzeń.
- Jeśli masz mało mleka, stosuj ten produkt pod nadzorem lekarza.
- Nie należy nadużywać pompy, aby uniknąć urazów brodawek sutkowych.
- W przypadku wystąpienia bólu lub podrażnienia należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy udostępniać innym użytkownikom elementów urządzenia mających kontakt z mlekiem.
- Nie należy używać pompy w czasie ciąży, ponieważ może to wywołać skurcze macicy.
- Jeśli w ciągu 5 minut nie uda się odciągnąć mleka, należy przerwać odciąganie.
- Z tego produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.

Laktator Nuvita 1260W Materno Comfort został zaprojektowany z myślą o wsparciu matek karmiących piersią poprzez naśladowanie naturalnego rytmu ssania dziecka. Ten elektryczny laktator do noszenia na ciele został specjalnie skonstruowany, aby pomóc mamom w wydajnym i wygodnym odciąganiu mleka w dowolnym miejscu, zapewniając płynny i bezbolesny proces odciągania. Urządzenie oferuje 9 regulowanych poziomów intensywności, funkcję NipFit® oraz 3-fazową technologię Careflo®.



KOREKCJA

Tryb korekcji pomaga skorygować wklęsłe lub płaskie brodawki sutkowe poprzez cykle delikatnego ssania.



SILIKONOWA OSŁONA

PIERSI – przyjazna dla skóry i delikatna w dotyku, zapewnia miękkie i wygodne dopasowanie, umożliwiające skuteczne ssanie.



SYSTEM

ZAPOBIEGAJĄCY COFANIU SIĘ PŁYNU zapobiega cofaniu się mleka do jednostki silnikowej, zapewniając higienę i długą żywotność produktu.



TECHNOLOGIA CAREFLO®:

W odróżnieniu od tradycyjnych laktatorów dwufazowych, Careflo® wprowadza trzecią fazę drenażu zapobiegającą zastojom, która uzupełnia standardowe etapy stymulacji i odciągania. Pomaga to:

- Wspomaga bardziej stabilną produkcję mleka.
- Zapobiega zatykaniu się przewodów mlecznych i zapaleniu gruczołu sutkowego.
- Łagodzi napięcie piersi i obrzęk piersi.
- Pomóż zapewnić płynniejszy i niezakłócony przebieg karmienia piersią.



FUNKCJA NIPFIT®:

Korekcja płaskich lub wklęsłych sutków.

Ta funkcja została zaprojektowana, aby pomóc w korekcji płaskich lub wklęsłych brodawek sutkowych oraz wspomóc odciąganie mleka poprzez delikatną, stopniową stymulację:

- Pomaga to sutkowi wystawać na zewnątrz.
- Ułatwia to dziecku uchwycenie piersi.
- Pomaga w rozpoczęciu i kontynuowaniu karmienia piersią.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy korzystać z funkcji NipFit®, jeśli:

1. Na sutku lub otoczcze masz otwarte rany, pęknięcia, zmiany chorobowe lub aktywne infekcje.
2. Niedawno przeszła Pani operację piersi.
3. Zdiagnozowano u Ciebie włóknistość brodawki sutkowej spowodowaną chorobą lub urazem, a nie wrodzoną. Jeśli tak jest, najpierw skonsultuj się z lekarzem.
4. Już po pierwszym zastosowaniu odczuwasz ostry ból. Należy natychmiast zaprzestać stosowania.
5. Masz szczególnie wrażliwą skórę lub cierpisz na miejscowe schorzenia dermatologiczne, takie jak egzema czy łuszczyca.
6. Jesteś w ciąży. Zabieg odsysania może wywołać skurcze.



OSTRZEŻENIE

Funkcja NipFit® jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w okresie poporodowym. Nie należy jej używać w czasie ciąży.


OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu, czyli poziomu 1. Nie zwiększaj intensywności, dopóki sutek nie przyzwyczai się stopniowo, nawet jeśli odczucia są przyjemne.
- Nie należy przekraczać 5–10 minut ciągłego korzystania z funkcji NipFit® podczas jednej sesji, zwłaszcza w pierwszych kilku tygodniach.
- Nie należy wykonywać więcej niż 2 sesje korekcyjne dziennie. Nadmierne stosowanie może powodować podrażnienie, obrzęk lub mikrouszkodzenia brodawki sutkowej.
- Należy natychmiast zaprzestać stosowania, jeśli wystąpi ostry ból, nadmierne zaczerwienienie, utrzymujący się obrzęk, pęcherze lub wydzielina inna niż mleko.
- Urządzenie to nie jest certyfikowanym wyrobem medycznym przeznaczonym do terapii klinicznej i nie zastępuje konsultacji z położną, lekarzem ani certyfikowanym międzynarodowym konsultantem laktacyjnym (IBCLC).
- W przypadku brodawki sutkowej typu 3, silnie wciągniętej i przylegającej do skóry, przed zastosowaniem jakiegokolwiek urządzenia korygującego konieczna jest konsultacja lekarska.
- Długotrwałe karmienie z dużą intensywnością może powodować obrzęk otoczki sutkowej, co chwilowo utrudnia dziecku uchwycenie piersi. Może to przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Przed uruchomieniem funkcji NipFit® należy upewnić się, że silikonowy kołnierz ma odpowiedni rozmiar, uwzględniając kołnierz o średnicy 24 mm lub reduktory 20/22 mm. Zbyt duży kołnierz może w niekontrolowany sposób wzmocnić ssanie na otoczcze sutka.
- Przed zabiegiem nałóż kilka kropli mleka matki lub czystego kremu z lanoliną, aby zmiękczyć skórę w tym miejscu.
- Podczas sesji z urządzeniem NipFit® sutek powinien znajdować się pośrodku miseczki. Nieprawidłowe ułożenie może powodować nierównomierne ssanie i podrażnienia.
- Jeśli po 4–6 tygodniach prawidłowego stosowania nie zauważysz żadnej poprawy, skonsultuj się z lekarzem.


ELEMENTY PRODUKTU

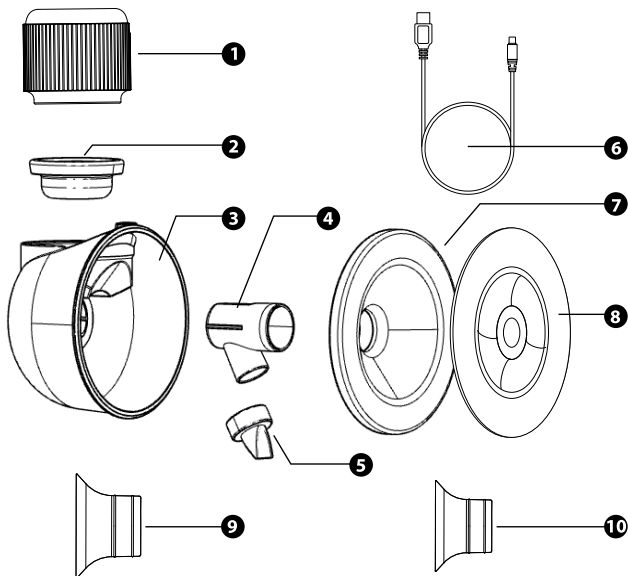

NIE.	NAZWA	MATERIAŁ	IŁOŚĆ
1	Jednostka główna	\	1
2	Membrana silikonowa	Silikon	1
3	Korpus kubka	Polipropylen	1
4	Złącze	Polipropylen	1
5	Zawór	Silikon	1
6	Kabel USB	\	1
7	Silikonowa osłodka na pierś	Silikon	1
8	Ostona przeciwpyłowa	Polipropylen	1
9	Wkładka silikonowa 22 mm	Silikon	1
10	Wkładka silikonowa 20 mm	Silikon	1

INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Włóż zawór do złącza i upewnij się, że jest dobrze osadzony.
2. Przymocuj złącze do korpusu kubka.
3. Umieść silikonową membranę na korpusie kubeczka i dociśnij ją, aż przylega szczelnie ze wszystkich stron.
4. Należy solidnie zamocować silikonową osłonkę na korpusie miseczki.
5. Przymocuj jednostkę główną do silikonowej membrany, aż usłyszysz kliknięcie.

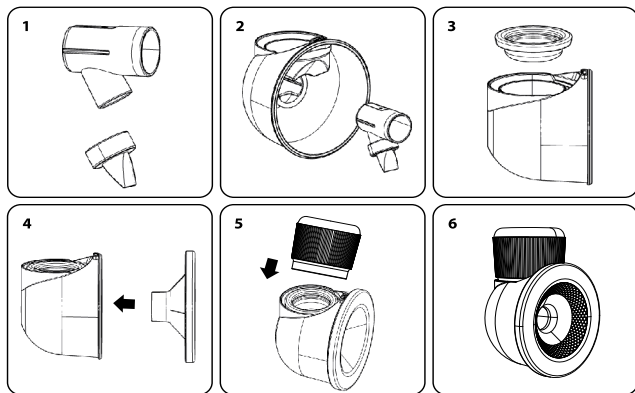

SPOSÓB ŁADOWANIA

ABY NAŁADOWAĆ POMPE, UŻYJ DOŁĄCZONEGO KABLA USB:

- Kompatybilne z: portami USB w komputerach, zasilaczami lub powerbankami.
- Należy używać wyłącznie powerbanków o parametrach wyjściowych nieprzekraczających **5 V/3 A**.
- Ikona baterii LED wskazuje stan ładowania:
 - Jeśli symbol **(B6)** miga, oznacza to, że urządzenie się ładuje
 - Jeśli symbol nie miga i świeci się na stałe, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane

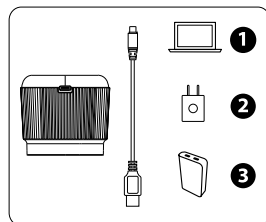

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania należy zawsze wyłączyć pompę.

OPIS PANELU

A1: Przycisk zasilania (naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć)

A2: Zmniejszyć poziom ssania

A3: Zwiększenie poziomu ssania

A4: Przełącznik fazowy (stymulacja / ekspresja / zapobieganie zastojowi / korekcja)

A5: Wstrzymaj/Kontynuuj

B1: Wskaźnik fazy stymulacji

B2: Wskaźnik fazy ekspresji

B3: Wskaźnik fazy przeciwwastajowej


B4: Wskaźnik fazy korekcji

B5: Poziom pracy / Wyświetlacz czasu

B6: Wskaźnik poziomu naładowania baterii

B7: Wyświetlanie jednostki czasu (minuty)

B1+B3: Funkcja NipFit® włączona

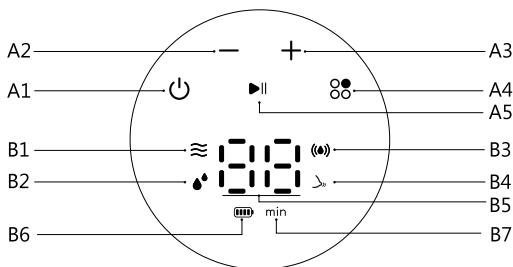




FAZA STYMULACJI (POZIOMY 1-9): W tej fazie pompa generuje stosunkowo szybki rytm ssania przy niskiej sile ssania. Ma to na celu delikatną stymulację tkanki piersiowej i wspomaganie wypływu mleka poprzez naśladowanie początkowego, płytkiego ssania niemowlęcia. Zaleca się stosowanie tej fazy przed przejściem do innych faz.

FAZA EKSPRESJI (POZIOM 1-9): Faza ta naśladuje głębszy i wolniejszy rytm ssania niemowlęcia podczas aktywnego picia mleka. Siła ssania jest większa, a częstotliwość mniejsza w porównaniu z fazą stymulacji. Ustawienie to ma na celu skuteczniejsze odciąganie mleka po wystąpieniu odruchu wypływu mleka.

FAZA SSANIA ZAPOBIEGAJĄCA ZASTOJOM MLEKA (POZIOMY 1-9): Faza ta zapewnia pulsujący tryb ssania, którego celem jest dokładne usunięcie mleka pozostałego w piersi po odciąganiu. Regularne stosowanie może pomóc w zapobieganiu zastojom mleka, zmniejszyć ryzyko zatkania przewodów mlecznych oraz utrzymać przepływ mleka.

FUNKCJA NIPFIT®: Aby włączyć funkcję korekcji sutków, należy naciskać przycisk trybu, aż ikony (B1) i (B3) zaczną migać. Funkcja posiada 3 poziomy intensywności.

- 1. PRZYGOTOWANIE:** Przed użyciem urządzenia Nuvita 1260W Materno Comfort należy dokładnie umyć ręce. Należy upewnić się, że wszystkie elementy są czyste i prawidłowo zmontowane zgodnie z instrukcją montażu. Podczas czyszczenia należy unikać montażu jednostki głównej i kabla USB.
- 2. POZYCJA:** Znajdź ciche i wygodne miejsce do siedzenia. W razie potrzeby skorzystaj z podnóżka, aby zachować zrelaksowaną, wyprostowaną postawę. Przed odciąganiem mleka możesz delikatnie pobudzić piersi ciepłym ręcznikiem, aby stymulować przepływ mleka.
- 3. SPOSÓB UŻYCIA:** Umieść silikonową osłonkę na sutku i upewnij się, że ściśle przylega do piersi, nie pozostawiając żadnych szczelin powietrznych. Delikatnie przytrzymaj urządzenie jedną ręką, a drugą podtrzymaj pierś, aby zapewnić jej stabilność.

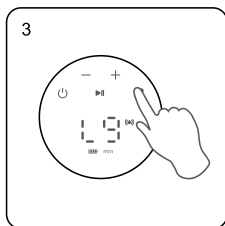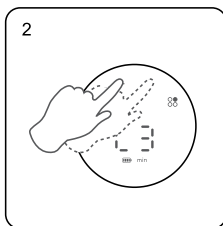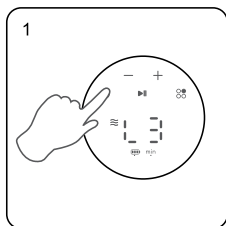

- 4. WŁĄCZANIE:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(A1)**, aby uruchomić urządzenie. Wskaźnik oświetlenia otoczenia zacznie migać, a na ekranie pojawi się aktualny poziom ssania. Pompa rozpocznie pracę w **fazie stymulacji**.
- 5. REGULACJA SIŁY** ssania: W dowolnym momencie pracy urządzenia użyj przycisku **(A2)**, aby zmniejszyć siłę ssania, a przycisku **(A3)**, aby ją zwiększyć.
- 6. ZMIANA FAZY:** Aby zmienić fazę pracy (stymulacja, ekspresja, przeciwdziałanie zastojowi, korekcja), należy nacisnąć przycisk **(A4)**. Fazy będą się zmieniać kolejno, a wybrana faza zostanie potwierdzona przez odpowiednią kontrolkę.
- 7. WSTRZYMAJ/WZNÓW:** Aby wstrzymać lub wznowić działanie, naciśnij przycisk **(A5)**.
- 8. ZAKOŃCZENIE SESJI:** Po zakończeniu naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyłączyć urządzenie. Odłącz urządzenie i przystąp do czyszczenia.

UWAGA: Urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 minutach. Zapamiętuje ostatnio używaną fazę i poziom ssania na następne użycie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

A. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Zdemontuj wszystkie części nadające się do mycia i dokładnie je wyczyść (z wyjątkiem jednostki głównej i kabla).

B. PO KAŻDYM UŻYCIU

Rozmontuj i opłucz wszystkie części (z wyjątkiem urządzenia głównego) w zimnej wodzie, aby usunąć pozostałości mleka.

Części do wyczyszczenia: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. CODZIENNA DEZYNFEKCJA

- Najpierw umyj ręce.
- Rozdziel wszystkie istotne części.
- Sterylizować we wrzącej wodzie lub w sterylizatorze parowym przez **5 minut**.
- **NIEWOLNO** gotować części **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Części **(3, 4, 8)** nie mogą stykać się z gorącymi metalowymi powierzchniami.

PRZECHOWYWANIE: Dokładnie wysuszyć na powietrzu i przechowywać w czystym, suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Zdemontuj wszystkie elementy, które mają kontakt z piersią lub mlekiem matki (z wyjątkiem urządzenia głównego).
- Po użyciu należy natychmiast wyczyścić elementy, aby zapobiec gromadzeniu się resztek mleka i rozwojowi bakterii.
- Należy upewnić się, że każdy element wyposażenia jest montowany/demontowany zgodnie z instrukcją montażu.
- Podczas montażu i demontażu należy uważać, aby nie zgubić żadnej z części.
- Wszystkie elementy silikonowe można umieścić w sterylizatorze w celu dezynfekcji (z wyjątkiem urządzenia głównego).
- **Środki ostrożności dotyczące dezynfekcji zaworów:** Nie należy dezynfekować zaworów przez gotowanie ani parą przez okres dłuższy niż 3 minuty.
- **Środki ostrożności dotyczące dezynfekcji butelek:** Nie należy gotować ani dezynfekować parą dłużej niż 5 minut.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Napięcie wejściowe:	5 V prądu stałego
Moc znamionowa:	6W
Temperatura pracy:	15–30 °C
Wilgotność robocza:	50% - 80%
Zawartość opakowania:	11 części
Miejsce pochodzenia:	CHRL

GWARANCJA – WARUNKI

Na ten produkt udzielana jest 24-miesięczna gwarancja na wady produkcyjne, liczona od daty zakupu potwierdzonej paragonem lub fakturą. W przypadku zakupu na podstawie faktury okres gwarancji ustawowej skraca się do 12 miesięcy. 24-miesięczna gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia produktu, uszkodzeń estetycznych, akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych (np. baterii, głowic lub elementów podlegających zużyciu). **Na baterie udzielana jest 6-miesięczna gwarancja.**

NIEWAŻNA GWARANCJA

12- lub 24-miesięczna gwarancja ustawowa wygasa w następujących przypadkach:

1. Produkt uległ uszkodzeniu w wyniku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.
2. Produkt został zmodyfikowany, naruszony lub otwarty.
3. Usterka wynika z niewystarczającej konserwacji elementów, akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych (np. utlenianie, zanurzenie części elektrycznych w cieczach, osady blokujące czujnik, wyciek żrącej cieczy z akumulatorów).

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

Z 24-miesięcznej gwarancji ustawowej wyłączone są następujące elementy:

1. Koszty wymiany lub naprawy części podlegających zużyciu oraz koszty związane ze zwykłą konserwacją produktu.
2. Koszty i ryzyko związane z transportem produktu do punktu sprzedaży lub autoryzowanego centrum obsługi gwarancyjnej oraz z powrotem.
3. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu lub niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcjami zawartymi w podręczniku.
4. Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi, upadkami, przypadkowymi uderzeniami lub warunkami środowiskowymi niezgodnymi z przeznaczeniem produktu.
5. Wady, które mają znikomy wpływ na działanie produktu.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Producent, dystrybutor oraz wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż produktu nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe ani szkody wynikające z nieprawidłowego działania produktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ponoszą oni odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, utratę dochodów, oszczędności ani inne konsekwencje wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu i/lub powiązanej dokumentacji (w formie papierowej lub elektronicznej), w tym z braku obsługi serwisowej.

Więcej informacji na temat usług pomocy technicznej można znaleźć w Warunkach sprzedaży dostępnych na stronie internetowej **www.nuvitababy.com**.

Хвала вам што сте купили преносиву електричну пумпу за дојење Nuvita 1260W. Молимо вас да пажљиво прочитате упутство пре употребе и сачувате га за будућу употребу.

ВАЖНЕ БЕЗБЕДНОСНЕ УПУТСТВА

ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ВАС И ВАШЕ ДЕЦЕ, САВ САДРЖАЈ ОВОГ ПРОЈЕКТА ОДНОСИ СЕ НА БЕЗБЕДНОСТ. МОЛИМО ВАС ДА ИХ ПОШТУЈЕТЕ.

УПОЗОРЕЊЕ

1. Не користите издојавач током купања или у влажним условима.
2. Држите овај производ ван домаћаја деце и кућних љубимаца.
3. Избегавајте излагање директној сунчевој светлости и високим температурама.
4. Не користите уређај ако је видљиво оштећен. Обратите се произвођачу или овлашћеном особљу ради поправке.
5. Држите неискоришћене делове ван домаћаја деце како бисте избегли гушење или друге незгоде.

ОПАСНОСТ

1. Не пуњајте или користите производ у близини отворених пламена или у окружењима са температуром изнад 45°C.
2. Не урањајте главни уређај или USB кабл у воду, пића или друге течности.
3. Никада не спаљивајте нити излажите главни уређај отвореним пламеновима.
4. Чувајте пластичну амбалажу далеко од деце како бисте избегли ризик од гушења.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Потпуно напуните уређај пре прве употребе.
- Увек склапајте компоненте према упутствима за монтажу.
- Прилагодите јачину усисавања у складу са удобношћу и личном толеранцијом.
- Не нагињите и не препуњавајте чашу за прикупљање млека изнад означене границе.
- Увек проверите температуру млека пре храњења како бисте избегли опекотине.
- Ако имате мали ниво лактације, користите производ под медицинским надзором.
- Не претерано користите пумпу како бисте избегли повреду брадавица.
- Прекините употребу и консултујте се са здравственим радником ако дође до бола или иритације.
- Не делите компоненте уређаја које долазе у контакт са млеком између корисника.
- Не користите пумпу током трудноће јер може изазвати контракције материце.
- Прекините пумпање ако се у року од 5 минута не издвоји млеко.
- Користите овај производ само онако како је описано у упутству.

Nuvita 1260W Materno Comfort је дизајниран да подржи мајке које доје имитирајући природни ритам дојења бебе. Овај носни електрични уређај за изражавање мајчиног млека посебно је осмишљен да помогне мамама да ефикасно и удобно изражавају млеко у покрету, обезбеђујући непрекидан и безболан процес изражавања. Има 9 подесивих нивоа интензитета, NipFit® функционалност и Careflo® технологију у три фазе.



КОРЕКЦИЈА

Режим корекције помаже у лечењу преврнутих или равних брадавица кроз циклусе нежног усисавања.



АЛЛ-СИЛИКОНСКИ ШТИТНИК

ЗА ГРУДИ, пријатељски према кожи и нежан према кожи, пружа мекану и удобну примену за ефикасно усисавање.



СИСТЕМ

ПРОТИВ ПОВРАТНОГ ТОКА спречава повратак млека у моторну јединицу, обезбеђујући хигијену и дуг век трајања производа.



CAREFLO® ТЕХНОЛОГИЈА:

За разлику од традиционалних двофазних пумпи за дојење, Careflo® уводи трећу фазу дренаже против стазе поред стандардних фаза стимулације и изражавања. Ово помаже да:

- Промовишите доследнију понуду млека.
- Спречите запушене млечне канале и маститис.
- Ублажите напетост и надувеност дојки.
- Подржите глатки и непрекидан ток дојења.



NIPFIT® ФУНКЦИЈА:

Корекција равних или увучених брадавица.

Ова функција је дизајнирана да помогне у исправљању равних или увучених брадавица и подржи издвајање млека кроз нежну, постепену стимулацију:

- Помаже да брадавица испуни напоље.
- То олакшава беби да се прикачи на дојку.
- Подржава започињање и настављање дојења.

КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ

Не користите функцију NipFit® ако:

1. Имате отворене ране, пукотине, лезије или активне инфекције на брадавици или ареоли.
2. Недавно сте имали операцију дојке.
3. Имате дијагностиковано стање увртања брадавица изазвано болешћу или траумом, а не урођено. У том случају, прво се консултујте са својим лекаром.
4. Од прве примене осећате оштар бол. Одмах прекините употребу.
5. Имате посебно осетљиву кожу или патите од локалних дерматолошких стања, као што су екцем или псоријаза.
6. Ви сте трудница. Аспирација може да изазове контракције.



УПОЗОРЕЊЕ

NipFit® функција је намењена само за употребу након порођаја. Не користите током трудноће.


УПОЗОРЕЊА ТОКОМ УПОТРЕБЕ

- Увек почињите на најнижем нивоу, нивоу 1. Не повећавајте интензитет док се брадавица постепено не прилагоди, чак и ако је осећај пријатан.
- Не прелазите 5–10 минута непрекидне употребе NipFit® функције по сеанси, посебно у првих неколико недеља.
- Не изводите више од две корекционе сесије дневно. Прекомерна употреба може изазвати иритацију, оток или микроруптуре на брадавици.
- Одмах прекините употребу ако осетите оштар бол, ненормално црвенило, упорни оток, пликове или исцедак течности осим млека.
- Овај уређај није сертификован медицински уређај за клиничку терапију и не замењује консултацију са бабицом, лекаром или међународно сертификованим консултантом за лактацију (IBCLC).
- Трећи степен инверзног брадавице са јаком адхезијом захтева медицинску процену пре коришћења било ког уређаја за корекцију.
- Продужена употреба високог интензитета може изазвати оток ареоле, што привремено отежава беби да се прикачи. Ово може имати супротан ефекат од жељеног.

УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНУ УПОТРЕБУ:

- Уверите се да је силиконска чаша одговарајуће величине, укључујући фланцу од 24 мм или редукторе 20/22 мм, пре активирања NipFit® функције. Превелика чаша може неконтролисано појачати усисавање на ареоли.
- Пре сесије нанесите неколико капи мајчиног млека или чисту ланолинску крему да омекшате подручје.
- Током NipFit® сесије, брадавица треба да буде центрирана у чашици. Неправилан положај може изазвати асиметрично усисавање и иритацију.
- Ако не приметите никакво побољшање након 4–6 недеља правилног коришћења, консултујте здравственог радника.


САСТОЈЦИ ПРОИЗВОДА

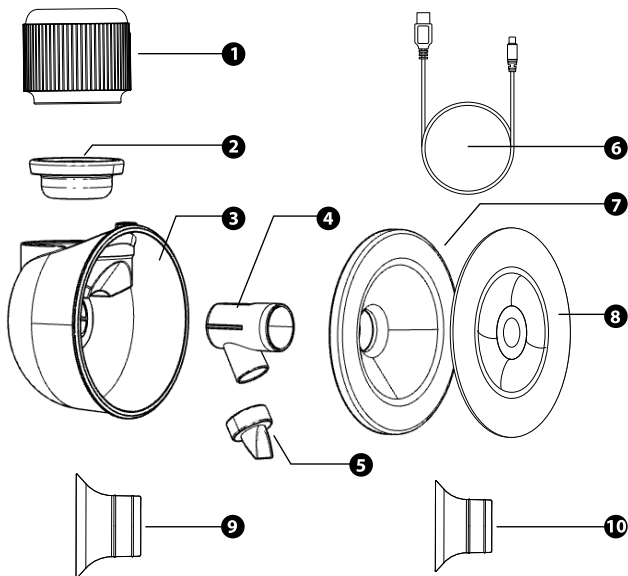

НЕ.	ИМЕ	МАТЕРИЈАЛ	Количина
1	Главна јединица	\	1
2	Силиконска мембрана	силикон	1
3	Тело чаше	Полипропилен	1
4	Повезивач	Полипропилен	1
5	Вентил	силикон	1
6	USB кабл	\	1
7	Силиконски штитник за груди	силикон	1
8	Заштитна навлака	Полипропилен	1
9	22 мм силиконски уметак	силикон	1
10	20 мм силиконски уметак	силикон	1

УПУТСТВА ЗА МОНТАЖУ


1. Убаците вентил у конектор и уверите се да је чврсто прилагођен.
2. Причврстите конектор на тело чаше.
3. Поставите силиконску мембрану на тело чаше и притисните док не запечати са свих страна.
4. Чврсто причврстите силиконску штитницу за груди на тело чаше.
5. Причврстите главни уређај на силиконску мембрану док не кликне.

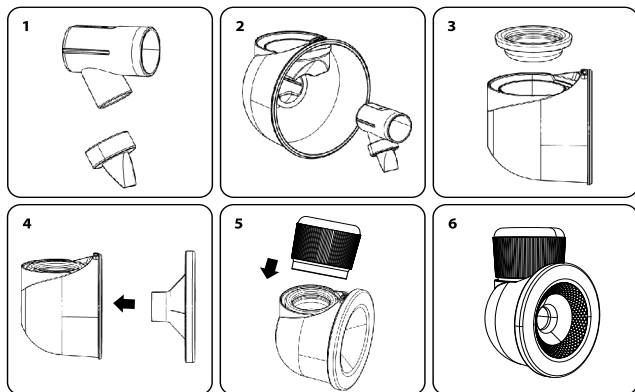

МЕТОД ПУЊЕЊА

КОРИСТИТЕ ПРИЛОЖЕНИ USB КАБЛ ЗА ПУЊЕЊЕ ПУМПЕ:

- Компатибилно са: USB портовима на рачунару, адаптерима за напајање или батеријама за напајање.
- Користите само пауер банке чији излаз не прелази **5V/3A**.
- Икона батерије са ЛЕД-ом показује статус пуњења:
 - Ако симбол **(B6)** трепери, уређај се пуни.
 - Ако симбол не трепери и је укључен, уређај је потпуно напуњен.

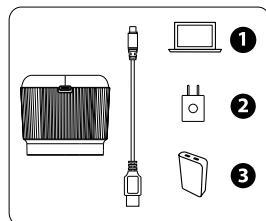

НАПОМЕНА: Увек искључите пумпу пре пуњења.

ОПИС ПАНЕЛА

A1: Дугме за укључивање/искључивање (притисните и држите да бисте укључили/искључили)

A2: Смањите ниво усисавања

A3: Повећајте ниво усисавања

A4: Фазна прекључица (стимулација / експресија / анти-стаза / корекција)

A5: Пауза/Наставак

B1: Индикатор фазе стимулације

B2: Индикатор фазе експресије

B3: Индикатор фазе анти-стазе


B4: Индикатор фазе корекције

B5: Радни ниво / Приказ времена

B6: Индикатор нивоа батерије

B7: Приказ јединице времена (минуте)

B1+B3: Функција NipFit® активирана

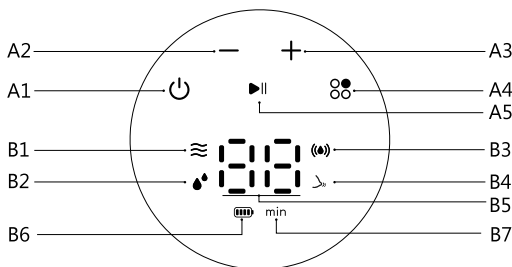

ФАЗА СТИМУЛАЦИЈЕ (НИВО 1–9): У овој фази пумпа генерише релативно брз ритам усисавања са ниском снагом усисавања. Она је дизајнирана да нежно стимулише ткиво дојке и подстакне избацавање млека имитирајући почетно плитко понашање усисавања бебе. Препоручује се коришћење ове фазе пре преласка на друге фазе.




ФАЗА ЕКСПРЕСИЈЕ (НИВО 1–9): Ова фаза имитира дубљи и спорији ритам усисавања бебе када активно сиса млеко. Сила усисавања је већа, а учесталост спорија у поређењу са фазом стимулације. Ова поставка је намењена да помогне у ефикаснијем издвајању млека након што се покрене рефлекс изливања млека.

ФАЗА УСИСАВАЊА ПРОТИВ СТАЗЕ (НИВО 1–9): Ова фаза обезбеђује пулсирајући образац усисавања који има за циљ темељно уклањање преосталог млека из груди након изражавања. Редовна употреба може помоћи у спречавању стазе млека, смањењу ризика од запушених канала и одржавању протока млека.

NIPFIT® ФУНКЦИЈА: Да бисте активирали функцију корекције брадавица, притисните дугме за режим док иконе (**B1**) и (**B3**) не почну да трепере. Функција има 3 нивоа интензитета.

УПУТСТВА ЗА РАД

- 1. ПРИПРЕМА:** Пре коришћења Nuvita 1260W Materno Comfort, темељно оперите руке. Уверите се да су све компоненте чисте и правилно склопљене према упутствима за монтажу. Избегавајте растављање главне јединице и USB кабла приликом чишћења.
- 2. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ:** Пронађите тихо и удобно место за седење. Потребно је да користите ослон за ноге ако је потребно да бисте одржали опуштено, усправно држање. Пре дојења можете нежно стимулисати груди топлим пешкиром како бисте подстакли проток млека.
- 3. ПРИМЕНА:** Центрирајте силиконски штитник за груди преко брадавице и уверите се да чврсто прилеже око груди без ваздушних празнина. Нежно држите уређај једном руком и другом ослоните груди да бисте их држали стабилним.

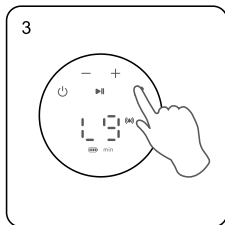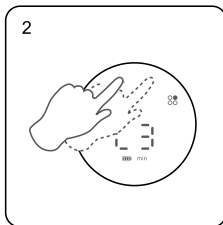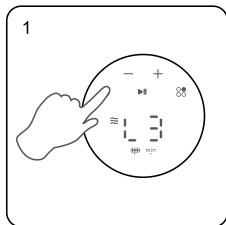

- 4. УКЉУЧИВАЊЕ:** Притисните и држите дугме **(A1)** да бисте укључили уређај. Индикатор амбијенталног светла ће трептати, а на екрану ће се приказати тренутни ниво усисавања. Пумпа почиње у **фази стимулације**.
- 5. ПОДЕШАВАЊЕ ИНТЕНЗИТЕТА:** користите **(A2)** за смањење и **(A3)** за повећање нивоа усисавања у било ком тренутку током рада.
- 6. ПРОМЕНА ФАЗА:** Да бисте променили радну фазу (стимулација, експресија, анти-стаза, корекција), притисните дугме **(A4)**. Фаза ће се смењивати по редоследу, а изабрана фаза се потврђује одговарајућим индикаторским светлом.
- 7. ПАУЗА/НАСТАВАК:** Да бисте паузирали или наставили рад, притисните дугме **(A5)**.
- 8. ЗАВРШЕТАК СЕСИЈЕ:** Када завршите, притисните и држите дугме да бисте искључили уређај. Искључите јединицу и започните процедуре чишћења.

НАПОМЕНА: Уређај ће се аутоматски искључити након 30 минута. Он памти последњу коришћену фазу и ниво усисавања за ваш следећи пут коришћења.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

А. ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

Раставите све делове који се могу прати и темељно их очистите (осим главног уређаја и кабла).

В. НАКОН СВАКЕ УПОТРЕБЕ

Раставите све делове (осим главне јединице) и испирајте их у хладној води како бисте уклонили остатке млека.

Делови за чишћење: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

С. ДНЕВНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА

- Прво оперите руке.
- Одвојите све релевантне делове.
- Користите кључалу воду или парни стерилизатор пет **минута**.
- **Не** кувајте делове **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Делови **(3, 4, 8)** не смеју да додирују вруће металне површине.

ЧУВАЊЕ: Добро осушите на ваздуху и чувајте на чистом, сувом месту.

МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ ПРИ ЧИШЋЕЊУ

- Раставите све прибор који долази у контакт са грудима или мајчиним млеком (осим главног уређаја).
- Након употребе одмах очистите делове како бисте избегли остатке млека и раст бактерија.
- Уверите се да склапате/распакујете сваки додатак у складу са упутствима за склапање.
- При склапању и растављању не изгубите ниједан део.
- Све силиконске компоненте могу се ставити у стерилизатор ради дезинфекције (осим главног уређаја).
- **Мере предострожности при дезинфекцији вентила:** Не кувати и не стерилисати паром дуже од 3 минута.
- **Мере предострожности при дезинфекцији боца:** Не кувајте и не дезинфикујте паром дуже од 5 минута.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА

Улазни напон:	ДЦ 5В
Номинална снага:	6W
Радна температура:	15~30°C
Радна влажност:	50% - 80%
Садржај паковања:	11 делова
Место порекла:	НР Кина

ГАРАНЦИЈА - УСЛОВИ И ОДРЕДБЕ

Овај производ је покривен гаранцијом од 24 месеца на фабричке недостатке, која почиње да тече од датума куповине потврђеног рачуном или фактуром. У случају куповине са фактуром, законска гаранција се скраћује на 12 месеци. Гаранција од 24 месеца **не обухвата** оштећења настала услед нормалног хабања производа, естетска оштећења, додатке или потрошни материјал (на пример батерије, главице или компоненте подложне хабању). **Батерије су гарантоване у периоду од 6 месеци.**

НЕВАЖЕЋА ГАРАНЦИЈА

12/24-месечна законска гаранција истиче у следећим случајевима:

1. Производ је оштећен због неправилне употребе, супротне упутствима у приручнику.
2. Производ је измењен, неовлашћено отворан или отворен.
3. Неисправност је изазвана недовољним одржавањем компоненти, прибора или потрошног материјала (нпр. оксидација, урањање електричних делова у течности, остаци који блокирају сензор, цурење корозивне течности из батерија).

ИСКЛУЧЕЊА ИЗ ГАРАНЦИЈЕ

Следеће је искључено из 24-месечне законске гаранције:

1. Трошкови замене или поправке потрошних делова и трошкови редовног одржавања производа.
2. Трошкови и ризици повезани са превозом производа до и од места продаје или овлашћеног центра за гарантно одржавање.
3. Оштећења настала неправилном уградњом или неправилном употребом која није у складу са упутствима из приручника.
4. Оштећења изазвана природним катастрофама, падовима, случајним ударима или условима окружења који нису компатибилни са производом.
5. Недостаци који имају занемарив утицај на перформансе производа.

ОГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ:

Произвођач, дистрибутер и све стране укључене у продају производа нису одговорни за економске губитке или штету насталу услед неисправности производа. У складу са важећим законодавством, они не одговарају за директну или индиректну штету, губитак прихода, уштеде или друге последице које произлазе из коришћења или немогућности коришћења производа и/или пратеће документације (у папирном или електронском облику), укључујући недостатак услуге.

За додатне детаље о услузи помоћи, молимо вас да погледате Условe продаје доступне на веб-сајту **www.nuvitababy.com**.

გმადლობთ Nuvita 1260W-ის ტარებადი ელექტრო მკერდის ასაწოვი პომპის შეძენისთვის. გთხოვთ, გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხოთ ინსტრუქცია და შეინახოთ მომავალი საჭიროებისთვის.

განიხილეთ უსაფრთხოების ინსტრუქციები

თქვენი და თქვენი შვილების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობისთვის, ამ პროექტის ყველა შინაარსი უსაფრთხოებას ეხება. გთხოვთ, აუცილებლად დაიცავით ისინი. გაფრთხილება

1. არ გამოიყენოთ რძის გამწოვი აპარატი ბანაობისას ან ნესტიან გარემოში.
2. შეინახეთ ეს პროდუქტი ბავშვებისა და შინაური ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
3. მოერიდეთ პირდაპირ მზის სხივებსა და მაღალ ტემპერატურას.
4. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის ვიზუალურად დაზიანებულია. შეკეთებისთვის დაუკავშირდით მწარმოებელს ან უფლებამოსილ პერსონალს.
5. გამოყენებული ნაწილები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დახრჩობის ან სხვა უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.

საშიშროება

1. არ დატენოთ და არ გამოიყენოთ პროდუქტი ღია ცეცხლის მახლობლად ან 45°C-ზე მაღალ ტემპერატურულ გარემოში.
2. არ ჩაუშვათ ძირითადი მოწყობილობა ან USB კაბელი წყალში, სასმელებში ან სხვა სითხეებში.
3. არასდროს დაწვით ან მთავარი მოწყობილობა ღია ცეცხლთან ახლოს არ მიიტანოთ.
4. პლასტმასის შეფუთვა შორს დააყენეთ ბავშვებისგან, გაგუდვის რისკის თავიდან ასაცილებლად.

განიხილეთ

- პირველი გამოყენებამდე სრულად დატენეთ მოწყობილობა.
- ყოველთვის დააწყვეთ კომპონენტები აწყობის ინსტრუქციის მიხედვით.
- მორგეთ წოვის ინტენსივობა კომფორტისა და პირადი შემწყნარებლობის მიხედვით.
- არ დახაროთ ან არ აავსოთ რძის შემგროვებელი ჭიქა მონიშნულ ნიშნულზე მეტად.
- დაწვით თავიდან ასაცილებლად, კვების წინ ყოველთვის შეამოწმეთ რძის ტემპერატურა.
- თუ რძის მარაგი დაბალი გაქვთ, გამოიყენეთ პროდუქტი ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ.
- არ გამოიყენოთ ტუმბო ზედმეტად ხშირად, რათა თავიდან აიცილოთ მკერდის თავის დაზიანება.
- გამოყენების შეწყვეტა და ექიმთან კონსულტაცია საჭიროა ტკივილის ან გაღიზიანების შემთხვევაში.
- არ გაუზიაროთ სხვა მომხმარებლებს რძესთან შეხების მქონე მოწყობილობის კომპონენტები.
- არ გამოიყენოთ პომპა ორსულობის დროს, რადგან მან შეიძლება გამოიწვიოს საშვილოსნოს შეკუმშვები.
- შეწყვიტეთ რძის გამოწველა, თუ 5 წუთის განმავლობაში რძე არ გამოვიდა.
- გამოიყენეთ ეს პროდუქტი მხოლოდ ინსტრუქციაში აღწერილი წესით.

Nuvita 1260W Materno Comfort შექმნილია მეძუძური დედების მხარდასაჭერად და ბავშვის ძუძუთი კვების ბუნებრივი რიტმის იმიტაციისთვის. ეს ტარებადი ელექტრო რძის გამწველი სპეციალურად არის შექმნილი, რათა დაეხმაროს დედებს რძის ეფექტურად და კომფორტულად გამოწველაში მოძრაობაში, რაც უზრუნველყოფს მარტივ და უმტკივნეულო გამოწვევის პროცესს. მას აქვს ინტენსივობის 9 რეგულირებადი დონე, NipFit® ფუნქციონალი და 3-ფაზიანი Careflo® ტექნოლოგია.



კორექცია

კორექციის რეჟიმი ეხმარება შებრუნებული ან ბრტყელი მკერდის თავების პრობლემის მოგვარებას ნაზი შეწოვის ციკლების მეშვეობით.



მთლიანად სილიკონის მკერდის დამცავი

. კანისთვის უსაფრთხო და ნაზი, უზრუნველყოფს რბილ და კომფორტულ მორგებას ეფექტური შეწოვისთვის.



უკუნძულის საინალაზმად სისტემა

ხელს უშლის რძის უკან, ძრავის ბლოკში დაბრუნებას, რაც უზრუნველყოფს ჰიგიენასა და პროდუქტის ხანგრძლივ ექსპლუატაციას.



CAREFLO® ტექნოლოგია:

ტრადიციული ორფაზიანი რძის ამოწმვის აპარატებისგან განსხვავებით, Careflo® სტანდარტულ სტიმულაციის და გამოწვევის ეტაპებთან ერთად მესამე, ანტისთაზის დრენაჟის ფაზას წარმოადგენს. ეს ხელს უწყობს:

- ნაახალისეთ რძის უფრო სტაბილური მიწოდება.
- თავიდან აიცილეთ სარძევე არხების დახშობა და მასტიტი.
- შეამსუბუქეთ ძუძუს დაჭიმულობა და შეშუპება.
- მხარი დაუჭირეთ ძუძუთი კვების უფრო მარტივ და უწყვეტ პროცესს.



NIPFIT®-ის ფუნქცია:

ბრტყელი ან შექცეული მკერდის თავების კორექცია.

ეს ფუნქცია შექმნილია ბრტყელი ან შეტრიალებული მკერდის თავების გასასწორებლად და რძის გამოყოფის ხელშესაწყობად ნაზი, პროგრესული სტიმულაციის მეშვეობით:

- ის მკერდის თავის გარეთ გამოწვევაში ეხმარება.
- ის აადვილებს ბავშვის სწორად მიმაგრებას მკერდზე.
- ის ხელს უწყობს ძუძუთი კვების დანერგვასა და გაგრძელებას.

არ გამოიყენოთ NipFit® ფუნქცია, თუ:

1. თქვენს მკერდის თავსა თუ არეოლაზე გაქვთ ღია წრილობები, ბზარები, დაზიანებები ან აქტიური ინფექცია.
2. თქვენ ახლახან გაიკეთეთ ოპერაცია მკერდზე.
3. თქვენ აღენიშნებათ ფიჭის შეჭეჭყვა, რომელიც გამოწვეულია დაავადებით ან ტრავმით და არა თანდაყოლილია. ასეთ შემთხვევაში, პირველ რიგში, გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან.
4. პირველივე გამოყენებისას მწვავე ტკივილს გრძნობთ. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება.
5. თქვენ გაქვთ განსაკუთრებით მგრძნობიარე კანი ან გაწუხებთ ლოკალური დერმატოლოგიური დაავადებები, როგორიცაა ეგზემა ან ფსორიაზი.
6. თქვენ ორსულად ხართ. ასპირაციამ შეიძლება შეტევები გააღვიანოს.



გაფრთხილება


NipFit®-ის ფუნქცია განკუთვნილია მხოლოდ მშობიარობის შემდგომი გამოყენებისთვის. არ გამოიყენოთ ორსულობის დროს.

გაფრთხილებაში გამოყენების დროს

- ყოველთვის დაიწყეთ ყველაზე დაბალი დონიდან, დონე 1. არ გაზარდოთ ინტენსივობა, სანამ მკერდის თავი თანდათან არ შეეჩვევა, თუნდაც შეგრძნება კომფორტული იყოს.
- ერთ სეანსზე არ გადააჭარბოთ NipFit® ფუნქციის უწყვეტად გამოყენების 5-10 წუთს, განსაკუთრებით პირველი რამდენიმე კვირის განმავლობაში.
- დღეში 2-ზე მეტი კორექციის სეანსი არ ჩაატაროთ. ჭარბმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მკერდის თავის გაღვიანება, შეშუპება ან მიკროდარტყმები.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ იგრძნობთ მწვავე ტკივილს, უჩვეულო სინთლეს, მუდმივ შეშუპებას, ბუბულებს ან რძის გარდა სხვა სითხის გამოყოფას.
- ეს მოწყობილობა არ არის სერტიფიცირებული სამედიცინო მოწყობილობა კლინიკური თერაპიისთვის და არ ცვლის კონსულტაციას ბეზიპალთან, ექიმთან ან საერთაშორისო საბჭოს მიერ სერტიფიცირებულ ლაქტაციის კონსულტანტთან (IBCLC).
- მე-3 ხარისხის, ძლიერად ჩაზრული ძუძუს თავი ნებისმიერი გამასწორებელი მოწყობილობის გამოყენებამდე საჭიროებს სამედიცინო შემოწმებას.
- ხანგრძლივმა, მაღალი ინტენსივობის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს არეოლას შეშუპება, რაც დროებით გაართულებს ბავშვის სწორად მიკრებას. ამან შეიძლება სასურველის საპირისპირო ეფექტი გამოიწვიოს.


უსაფრთხო გამოყენების ინსტრუქცია:

- NipFit® ფუნქციის გააქტიურებამდე დარწმუნდით, რომ სილიკონის თასი სწორი ზომისაა, 24 მმ-იანი ფლანგის ან 20/22 მმ-იანი გადამყვანების ჩათვლით. ზედმეტად დიდი თასმა შეიძლება უკონტროლოდ გააძლიეროს მწვავე ძალა არეოლაზე.
- პროცედურის წინ, არეოლის დასაბრბილებლად წაისვით რამდენიმე წვეთი ძუძუთი რძე ან სუფთა ლანოლინის კრემი.
- NipFit®-ის სესიის დროს, მკერდის თავი ჭიქის ცენტრში უნდა იყოს განლაგებული. არასწორმა პოზიციამ შეიძლება გამოიწვიოს ასიმეტრიული შეწოვა და გაღვიანება.
- თუ 4-6 კვირის სწორი გამოყენების შემდეგ გაუმჯობესებას ვერ აღნიშნავთ, გაიარეთ კონსულტაცია ჯანდაცვის პროფესიონალთან.

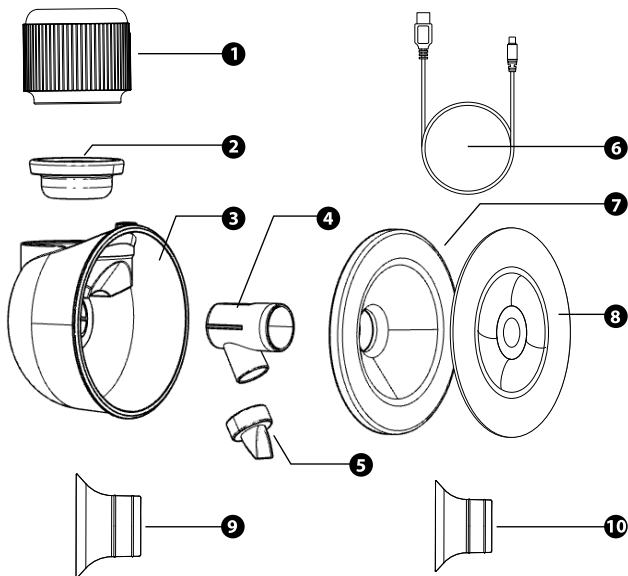

არა	სახელი	მასალა	რაოდენობა
1	მთავარი ერთეული	\	1
2	სილიკონის დიაფრაგმა	სილიკონი	1
3	თასის სხეული	პოლიპროპილენი	1
4	დამაკავშირებელი	პოლიპროპილენი	1
5	სარქველი	სილიკონი	1
6	USB კაბელი	\	1
7	სილიკონის მკერდის დამცავი ფარი	სილიკონი	1
8	მტვერგამუტარი საფარი	პოლიპროპილენი	1
9	22მმ სილიკონის ჩანართი	სილიკონი	1
10	20მმ სილიკონის ჩანართი	სილიკონი	1

1. ჩასვით სარქველი კონექტორში და დარწმუნდით, რომ მჭიდროდ არის ჩასმული.
2. დაამაგრეთ კონექტორი ჭიქის კორპუსზე.
3. მოათავსეთ სილიკონის დიაფრაგმა ფიალითის სხეულზე და დააწეით, სანამ ყველა მხრიდან ჰერმეტიკად არ დაილუქება.
4. მყარად დაამაგრეთ სილიკონის მკერდის დამცავი ჩანართი კოპის ძირზე.
5. მიამაგრეთ ძირითადი ბლოკი სილიკონის დიაფრაგმას დაჭერამდე.

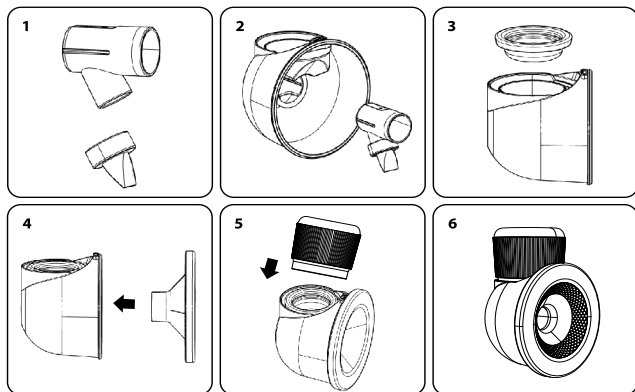


დაუხმების მეთოდი

ისარგებლეთ თანდართული USB კაბელით ბუბოს დასატენად:

- თავსებადია: კომპიუტერის USB პორტებთან, კვების ადაპტერებთან ან პაუერბანკებთან.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ის პაუერბანკები, რომელთა გამომავალი ძაბვა არ აღემატება 5V/3A-ს.
- ელემენტის LED ხატულა აჩვენებს დატენვის სტატუსს:
 - თუ სიმბოლო **(B6)** ციმციმებს, მოწყობილობა იტენება.
 - თუ სიმბოლო არ ანათებს და ჩართულია, მოწყობილობა სრულად დატენილია.

შენიშვნა: დატენვამდე ყოველთვის გამორთეთ ტუმბო.

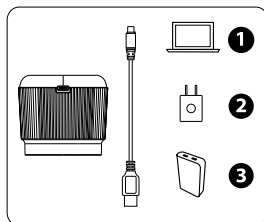

A1: ჩართვა/გამორთვის ღილაკი
(დააჭირეთ და გააჩერეთ
ჩასართავად/გასამორთად)

A2: შეწოვის დონის შემცირება

A3: შეწოვის დონის გაზრდა

A4: ფაზური გადამრთველი
(სტიმულაცია / გამოხატვა / ანტი-
სტაზი / კორექცია)

A5: შეჩერება/გაგრძელება

B1: სტიმულაციის ფაზის ინდიკატორი

B2: გამოსახვის ფაზის ინდიკატორი

B3: ანტისტაზის ფაზის ინდიკატორი


B4: კორექციის ფაზის ინდიკატორი

B5: სამუშაო დონე / დროის ჩვენება

B6: ელემენტის დონის ინდიკატორი

B7: დროის ერთეულის ჩვენება (წუთები)

B1+B3: NipFit®-ის ფუნქცია გააქტიურებულია

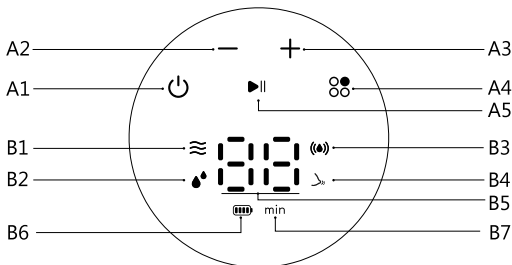




სტიმულაციის ფაზა (დონე 1~9): ამ ფაზაში პომპა ქმნის შედარებით სწრაფი შეწოვის რიტმს დაბალი შეწოვის ძალით. ის შექმნილია მკერდის ქსოვილის ნაზად სტიმულირებისა და რძის გამოტყორცნის ხელშეწყობისთვის, ბავშვის სანყისი ზედაპირული შეწოვის ქცევის იმიტაციით. რეკომენდებულია ამ ფაზის გამოყენება სხვა ფაზებზე გადასვლამდე.

გამოსახვის ფაზა (1~9 დონე): ეს ფაზა ბავშვის რძის აქტიური წოვის უფრო ღრმა და ნელი რიტმის იმიტაციას ახდენს. წოვის ძალა და სიხშირე სტიმულაციის ფაზასთან შედარებით უფრო მაღალი და ნელია. ეს რეჟიმი განკუთვნილია რძის უფრო ეფექტურად გამოწვევის ხელშესაწყობად, მას შემდეგ, რაც რძის გამოყოფის რეფლექსი დაიწყება.

ანტი-სტაზის შეწოვის ფაზა (დონე 1~9): ეს ფაზა უზრუნველყოფს პულსირებად შეწოვის რეჟიმს, რომელიც მიზნად ისახავს რძის ნარჩენების საფუძვლიანად მოცილებას მკერდიდან გამოწვევის შემდეგ. რეგულარულ გამოყენებას შეუძლია ხელი შეუწყოს რძის სტაზის პრევენციას, შეამციროს სადინარების დახშობის რისკი და შეინარჩუნოს რძის ნაკადი.

NIPFIT®-ის ფუნქცია: მკერდის თავის კორექციის ფუნქციის გასააქტიურებლად, დააჭირეთ რეჟიმის ღილაკს, სანამ (B1) და (B3) ხატულები არ დაიწყებს მოციმციმეს. ფუნქციას აქვს ინტენსივობის 3 დონე.

- 1. მოზადება:** Nuvita 1260W Materno Comfort-ის გამოყენებამდე კარგად დაიბანეთ ხელები. დარწმუნდით, რომ ყველა კომპონენტი სუფთაა და აწყობილია სწორად, აწყობის ინსტრუქციის შესაბამისად. განმენდისას თავი შეიკავეთ ძირითადი ბლოკისა და USB კაბელის აწყობისგან.
- 2. პოზიციის შერჩევა:** იპოვეთ წყნარი და კომფორტული ადგილი დასაჯდომად. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ ფეხის საყრდენი, რათა შეინარჩუნოთ მოდუნებული, გამართული პოზა. რძის გამოწველამდე შეგიძლიათ რძის ნაკადის სტიმულირებისთვის მკერდი ფრთხილად მასაჟი გაუკეთოთ თბილი პირსახოცით.
- 3. გამოყენება:** სილიკონის მკერდის დამცავი დააყენეთ მკერდის თავზე ცენტრალურად და დარწმუნდით, რომ ის მჭიდროდ ერგება მკერდს, ჰაერის შუაღედების გარეშე. ერთი ხელით ფრთხილად დაიჭირეთ მოწყობილობა, მეორეთი კი დაეყრდნით მკერდს მისი სტაბილურობისთვის.

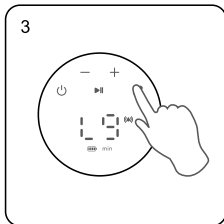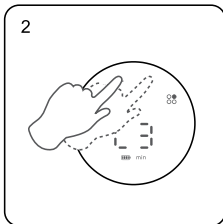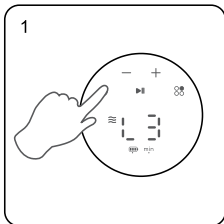

- 4. ჩართვა:** დააჭირეთ და გააჩერეთ **(A1)** ლილავს მოწყობილობის ჩასართავად. გარემო სინათლე აინთება-ჩაინთება, ეკრანზე კი მიმდინარე შენთვის დონე გამოჩნდება. ტუმბო იწყებს **სტიმულაციის** ფაზით.
- 5. ინტენსივობის რეგულირება:** მუშაობის ნებისმიერ დროს, საწორო დონის შესამცირებლად გამოიყენეთ **(A2)**, ხოლო გასაზრდელად **(A3)**.
- 6. ფაზების გადართვა:** სამუშაო ფაზის (სტიმულაცია, ექსპრესია, ანტი-სტაზი, კორექცია) შესაცვლელად, დააჭირეთ **(A4)** ლილავს. ფაზა თანმიმდევრობით გადაირთვება, ხოლო არჩეულ ფაზას დაადასტურებს შესაბამისი ინდიკატორი.
- 7. შერჩევა/გაგრძელება:** ოპერაციის შესაჩერებლად ან განახლებისთვის დააჭირეთ **(A5)** ლილავს.
- 8. სასიის დასრულება:** როდესაც დაასრულებთ, დააჭირეთ და დააყენეთ ლილავს მოწყობილობის გამორთვისთვის. გამოაერთეთ მოწყობილობა და დაიწყეთ განმენდის პროცედურები.

შენიშვნა: მოწყობილობა ავტომატურად გამორთვას 30 წუთის შემდეგ. ის ინახავს ბოლო გამოყენებული ფაზასა და შენთვის დონეს თქვენი შემდეგი გამოყენებისთვის.

განმეცხადი და მოვლა

A. პირველ გამოყენებაზე

დაშალეთ ყველა სარეცხი ნაწილი და კარგად გაწმინდეთ (გარდა ძირითადი ბლოკისა და კაბელისა).

B. ყოველი გამოყენების შემდეგ

დაშალეთ და გარეცხეთ ყველა ნაწილი (მთავარი ბლოკის გარდა) ცივ წყალში რძის ნარჩენების მოსაშორებლად.

საწმენდი ნაწილები: (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10).

C. ყოველდღიური დეზინფექცია

- პირველ რიგში დაიბანეთ ხელები.
- განაცალკევეთ ყველა შესაბამისი ნაწილი.
- გამოიყენეთ მდლურე წყალი ან ორთქლის სტერილიზატორი 5 წუთის განმავლობაში.
- არ მოხარშოთ ნაწილები (2, 5, 7, 9, 10).
- ნაწილები (3, 4, 8) არ უნდა ეხებოდეს ცხელ ლითონის ზედაპირებს.

შენახვა: კარგად გააშრეთ ჰაერზე და შეინახეთ სუფთა, მშრალ ადგილას.

სიფრთხილის ზომები დასუფთავებისას

- დაშალეთ ყველა აქსესუარი, რომელიც მკერდთან ან ძუძუთი რძესთან შედის კონტაქტში (მთავარი მონყობილობის გარდა).
- გამოყენების შემდეგ, დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ ნაწილები რძის ნარჩენებისა და ბაქტერიების ზრდის თავიდან ასაცილებლად.
- დარწმუნდით, რომ თითოეულ აქსესუარს აწყობთ/შლით აწყობის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- აწყობისა და დაშლისას ნაწილები არ დაკარგოთ.
- ყველა სილიკონის კომპონენტის მოთავსება შესაძლებელია სტერილიზატორში დეზინფექციისთვის (მთავარი ბლოკის გარდა).
- ფრთხილება სარქველის დეზინფექციისას: არ მოხარშოთ და ორთქლზე არ გააცხელოთ 3 წუთზე მეტხანს.
- ბოთლის დეზინფექციისას სიფრთხილის ზომები: არ მოხარშოთ და ორთქლზე გაასუფთავოთ 5 წუთზე მეტხანს.

პროდუქტის სპეციფიკაცია

შემავალი ძაბვა:	DC 5V
დასახელებული სიმძლავრე:	6W
სამუშაო ტემპერატურა:	15~30°C
სამუშაო ტენიანობა:	50% - 80%
პაკეტის შიგთავსი:	11 ნაწილი
წარმოშობის ადგილი:	პეკინის რესპუბლიკა

ამ პროდუქტზე ვრცელდება 24-თვიანი გარანტია მწარმოებლის დეფექტებზე, რომელიც იწყება შეძენის თარიღიდან და დასტურდება ქვითრით ან ინვოისით. ინვოისით შეძენის შემთხვევაში, კანონით გათვალისწინებული გარანტია შემცირებულია 12 თვემდე. 24-თვიანი გარანტია არ მოიცავს პროდუქტის ჩვეულებრივი ცვეთით გამოწვეულ დაზიანებას, ესთეტიკურ დაზიანებას, აქსესუარებს ან მოხმარებადი ნივთებს (მაგალითად, ელემენტები, თავაკები ან ცვეთადი კომპონენტები). ელემენტებზე გარანტია ვრცელდება 6 თვის განმავლობაში.

ბათილი გარანტია

12/24-თვიანი იურიდიული გარანტია ძალას კარგავს შემდეგ შემთხვევებში:

1. პროდუქტი დაზიანდა არასწორი გამოყენების გამო, ინსტრუქციის წესების დარღვევით.
2. პროდუქტი შეცვლილია, გატეხილია ან გახსნილია.
3. ავარია გამოწვეულია კომპონენტების, აქსესუარების ან მასალების არასათანადო მომსახურებით (მაგ., ჯანგვა, ელექტრონული ნაწილების სითხეში ჩაძირვა, სენსორის დამაბლოკავი ნარჩენები, ელემენტებიდან კოროზიული სითხის გაჟონვა).

გარანტიის გამორიცხვები

24-თვიანი იურიდიული გარანტიით არ იფარება:

1. ცვეთადი ნაწილების შეცვლის ან შეკეთების, და პროდუქტის ჩვეულებრივი ტექნიკური მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2. პროდუქტის საგარანტიო მომსახურების პუნქტამდე ან ავტორიზებულ ცენტრამდე და უკან გადაზიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები და რისკები.
3. ზიანი, რომელიც გამოწვეულია არასწორი მონტაჟით ან ინსტრუქციის შესაბამისად არასწორი გამოყენებით.
4. ბუნებრივი კატასტროფებით, დაცემით, შემთხვევითი დარტყმებით ან პროდუქტისთვის შეუფერებელი გარემო პირობებით გამოწვეული ზიანი.
5. დეფექტები, რომლებიც უმნიშვნელო გავლენას ახდენენ პროდუქტის მუშაობაზე.

პასუხისმგებლობის შივთვალეები:

მწარმოებელი, დისტრიბუტორი და პროდუქტის გაყიდვასთან დაკავშირებული ყველა მხარე არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის არასწორი მუშაობით გამოწვეულ ეკონომიკურ ზარალზე ან დანაკარგზე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ისინი არ იღებენ პასუხისმგებლობას პირდაპირ, არაპირდაპირ, შემოსავლის ან დანაზოგის დაკარგვაზე ან სხვა შედეგებზე, რომლებიც გამოწვეულია პროდუქტის და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის (ქაღალდის ან ელექტრონული) გამოყენებით ან გამოყენების შეუძლებლობით, მათ შორის, მომსახურების მიუწოდებლობით.

დახმარების სერვისის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, გაეცნოთ გაყიდვის პირობებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.nuvitababy.com.

Tack för att du har köpt den bärbara elektriska bröstpumpen Nuvita 1260W. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten och spara den för framtida bruk.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

FÖR DIN OCH DINA BARN SÄKERHET OCH HÄLSA HANDLAR ALLT INNEHÅLL I DETTA PROJEKT OM SÄKERHET. SE TILL ATT FÖLJA ANVISNINGARNA.

VARNING

1. Använd inte bröstpumpen när du badar eller i fuktiga miljöer.
2. Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och husdjur.
3. Undvik direkt solljus och höga temperaturer.
4. Använd inte enheten om den uppvisar synliga skador. Kontakta tillverkaren eller behörig personal för reparation.
5. Förvara oanvända delar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk eller andra olyckor.

FARA

1. Ladda eller använd inte produkten i närheten av öppen eld eller i miljöer där temperaturen överstiger 45 °C.
2. Sänk inte ner huvudenheten eller USB-kabeln i vatten, drycker eller andra vätskor.
3. Förbränn aldrig huvudenheten och utsätt den inte för öppen eld.
4. Förvara plastförpackningar utom räckhåll för barn för att undvika kvävningsrisk.

MEDDELANDE

- Ladda enheten helt innan du använder den för första gången.
- Montera alltid komponenterna enligt monteringsanvisningarna.
- Justera sugkraften utifrån vad som känns bekvämt och vad du tål.
- Luta inte mjölkuppsamlingskoppen och fyll den inte över den markerade gränsen.
- Kontrollera alltid mjölkens temperatur innan du matar barnet för att undvika brännskador.
- Om du har låg mjölkproduktion bör du använda produkten under läkares övervakning.
- Använd inte pumpen för mycket för att undvika skador på bröstvårtan.
- Avbryt användningen och kontakta sjukvårdspersonal om smärta eller irritation uppstår.
- Del inte de delar av enheten som kommer i kontakt med mjölk mellan olika användare.
- Använd inte pumpen under graviditeten, eftersom den kan orsaka livmodersammandragningar.
- Sluta pumpa om ingen mjölk kommer ut inom 5 minuter.
- Använd denna produkt endast enligt anvisningarna i bruksanvisningen.

INFORMATION

Nuvita 1260W Materno Comfort är utformad för att underlätta för ammande mammor genom att efterlikna barnets naturliga amningsrytm. Denna bärbara elektriska bröstpump är särskilt utvecklad för att hjälpa mammor att pumpa ut bröstmjolk effektivt och bekvämt när de är på språng, vilket garanterar en smidig och smärtfri pumpupplevelse. Den har 9 justerbara intensitetsnivåer, NipFit®-funktion och 3-fas Careflo®-teknik.



KORRIGERING

Korrigeringsläget hjälper till att åtgärda inverterade eller platta bröstvårtor genom cykler av mild sugkraft.



BRÖSTSKYDD

HELT I SILIKON – hudvänligt och skonsamt mot huden, ger en mjuk och bekväm passform för effektiv sugkraft.



ETT SYSTEM

SOM FÖRHINDRAR ÅTERFLÖDE ser till att mjölken inte rinner tillbaka in i motorenheten, vilket garanterar god hygien och produktens långa livslängd.



CAREFLO®-TEKNIK:

Till skillnad från traditionella tvåfasiga bröstpumpar inför Careflo® en tredje dräneringsfas som motverkar stillastående vätska, utöver de vanliga stimulerings- och utpumpningsfaserna. Detta bidrar till att:

- Främja en mer jämn mjölkproduktion.
- Förhindra tilltäppta mjölkgångar och mastit.
- Lindra spänningar och svullnad i bröstet.
- Hjälper till att göra amningsperioden smidigare och utan avbrott.



NIPFIT®-FUNKTION:

Korrigerer av platta eller inåtvända bröstvårtor.

Denna funktion är utformad för att hjälpa till att korrigera platta eller inåtvända bröstvårtor och underlätta mjölkuttag genom mild, gradvis stimulering:

- Det gör att bröstvårtan sticker ut.
- Det underlättar för barnet att få ett bra grepp om bröstet.
- Det främjar både inledningen och fortsättningen av amningen.

KONTRAINDIKATIONER

Använd inte NipFit®-funktionen om:

1. Du har öppna sår, sprickor, skador eller aktiva infektioner på bröstvårtan eller vårtgården.
2. Du har nyligen genomgått en bröstoperation.
3. Du har fått diagnosen inåtvänd bröstvårta som orsakats av sjukdom eller trauma, inte medfödd. Om så är fallet bör du först rådfråga din läkare.
4. Du känner en skarp smärta redan vid den första appliceringen. Avbryt användningen omedelbart.
5. Du har särskilt känslig hud eller lider av lokala hudåkommor, såsom eksem eller psoriasis.
6. Du är gravid. Sugning kan framkalla sammandragningar.



VARNING

NipFit®-funktionen är endast avsedd för användning efter förlossningen. Använd inte under graviditeten.


VARNINGAR VID ANVÄNDNING

- Börja alltid på den lägsta nivån, nivå 1. Öka inte intensiteten förrän bröstvårtan gradvis har vant sig, även om känslan är behaglig.
- Använd inte NipFit®-funktionen i mer än 5–10 minuter i sträck per tillfälle, särskilt under de första veckorna.
- Utför inte fler än två korrigeringsessioner per dag. Överdriven användning kan orsaka irritation, svullnad eller mikroskador på bröstvårtan.
- Avbryt användningen omedelbart om du upplever skarp smärta, onormal rodnad, ihållande svullnad, blåsor eller utsöndring av annan vätska än mjölk.
- Denna produkt är inte en certifierad medicinteknisk produkt avsedd för klinisk behandling och ersätter inte rådgivning från en barnmorska, läkare eller en internationellt certifierad amningsrådgivare (IBCLC).
- En inåtvänd bröstvårta av grad 3 med kraftigt sammanväxt måste undersökas av läkare innan någon korrigeringsanordning används.
- Långvarig användning med hög intensitet kan orsaka svullnad i bröstvårtgården, vilket tillfälligt kan göra det svårare för barnet att få tag. Detta kan leda till motsatt effekt än den önskade.

ANVISNINGAR FÖR SÄKER ANVÄNDNING:

- Se till att silikonkoppen har rätt storlek, inklusive 24 mm-flänsen eller 20/22 mm-reduceringsrören, innan du aktiverar NipFit®-funktionen. En för stor kopp kan förstärka sugkraften på bröstvårtan på ett okontrollerat sätt.
- Innan behandlingen bör du applicera några droppar bröstmjölk eller ren lanolinkräm för att mjuka upp området.
- Under NipFit®-behandlingen ska bröstvårtan placeras mitt i kupan. En felaktig placering kan leda till ojämnt sug och irritation.
- Om du inte märker någon förbättring efter 4–6 veckors korrekt användning bör du vända dig till vårdpersonal.


PRODUKTKOMPONENTER

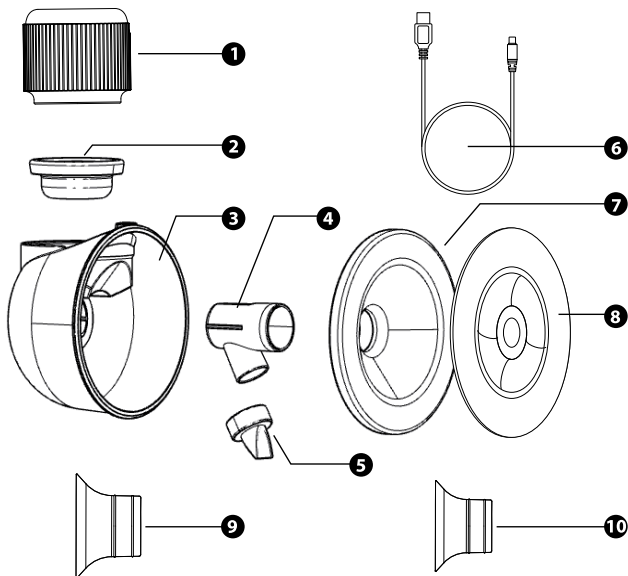

NEJ.	NAMN	MATERIAL	ANTAL
1	Huvudenhet	\	1
2	Silikonmembran	Silikon	1
3	Koppkropp	Polypropylen	1
4	Anslutning	Polypropylen	1
5	Ventil	Silikon	1
6	USB-kabel	\	1
7	Bröstskydd av silikon	Silikon	1
8	Dammtätt skydd	Polypropylen	1
9	22 mm silikoninsats	Silikon	1
10	20 mm silikoninsats	Silikon	1

MONTERINGSANVISNINGAR


1. Sätt in ventilen i kopplingen och se till att den sitter ordentligt fast.
2. Fäst kopplingen på koppers kropp.
3. Placera silikonmembranet ovanpå koppers kropp och tryck ner det tills det sitter tätt runt alla sidor.
4. Sätt fast silikonbröstkölden ordentligt på koppers kropp.
5. Fäst huvudenheten på silikonmembranet tills det hörs ett klick.

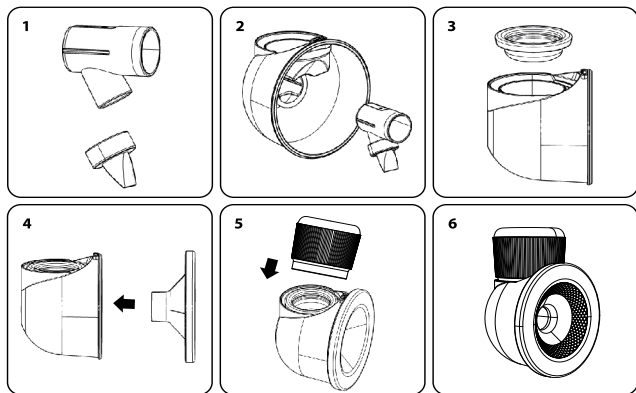

LADDNINGSMETOD

ANVÄND DEN MEDFÖLJANDE USB-KABELN FÖR ATT LADDA PUMPEN:

- Kompatibel med: USB-portar på datorer, nätdaptrar eller powerbanker.
- Använd endast powerbanker med en utgångseffekt som inte överstiger **5 V/3 A**.
- LED-batterisymbolen visar laddningsstatus:
 - Om symbolen **(B6)** blinkar laddas enheten
 - Om symbolen inte blinkar och lyser med fast sken är enheten fulladdad

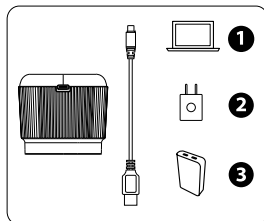

OBS! Stäng alltid av pumpen innan du laddar den.

BESKRIVNING AV PANELEN

A1: Strömknapp (Håll intryckt för att slå på/stänga av)

A2: Sänk sugnivån

A3: Öka sugtrycket

A4: Fasomkopplare (Stimulering / Uttryck / Antistasis / Korrigering)

A5: Paus/Fortsätt

B1: Indikator för stimuleringsfasen

B2: Indikator för uttrycksfas

B3: Indikator för antistasefas


B4: Indikator för korrigeringsfas

B5: Arbetsnivå / Tidsvisning

B6: Batterinivåindikator

B7: Visning av tidsenhet (minuter)

B1+B3: NipFit®-funktionen aktiverad

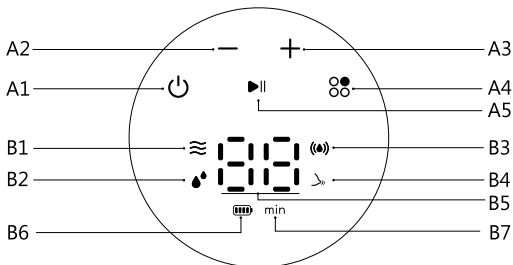

STIMULERINGSFAS (NIVÅ 1–9): I denna fas genererar pumpen en relativt snabb sugrytm med låg sugkraft. Den är utformad för att försiktigt stimulera bröstvävnaden och främja mjölkutflödet genom att efterlikna ett spädbarns inledande, ytliga sugande. Det rekommenderas att använda denna fas innan man övergår till andra faser.




UTTRYCKSFAS (NIVÅ 1–9): Denna fas efterliknar den djupare och långsammare sugrytmen hos ett spädbarn när det aktivt dricker mjölk. Sugkraften är högre och frekvensen lägre jämfört med stimuleringsfasen. Denna inställning är avsedd att underlätta en effektivare mjölkutvinning när mjölkflödesreflexen har satts igång.

SUGFAS MOT MJÖLKSTOCKNING (NIVÅ 1–9): Denna fas ger ett pulserande sugmönster som syftar till att noggrant avlägsna kvarvarande mjölk i bröstet efter utpumpning. Regelbunden användning kan bidra till att förebygga mjölkstockning, minska risken för tilltäppta mjölkgångar och upprätthålla mjölkflödet.

NIPFIT®-FUNKTION: För att aktivera bröstvårtskorrigeringsfunktionen trycker du på lägesknappen tills ikonerna **(B1)** och **(B3)** börjar blinka. Funktionen har tre intensitetsnivåer.

BRUKSANVISNING

- 1. FÖRBEREDELSE:** Tvätta händerna noggrant innan du använder Nuvita 1260W Materno Comfort. Se till att alla delar är rena och monterade korrekt enligt monteringsanvisningarna. Undvik att montera huvudenheten och USB-kabeln när du rengör den.
- 2. SITSTÄLLNING:** Hitta en lugn och bekväm plats att sitta på. Använd gärna ett fotstöd om det behövs för att hålla en avslappnad och upprätt sittställning. Innan du börjar pumpa kan du försiktigt värma bröstet med en varm handduk för att stimulera mjölkflödet.
- 3. ANVÄNDNING:** Placera silikonbröstsölden mitt på bröstvårtan och se till att den sluter tätt runt bröstet utan luftfickor. Håll enheten försiktigt med ena handen och stöd bröstet med den andra för att hålla det stilla.

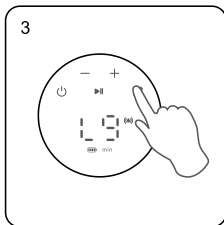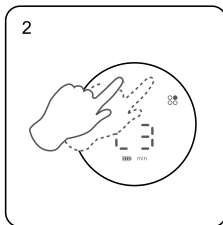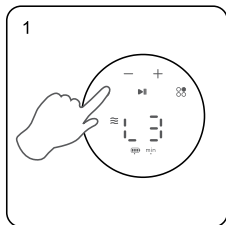

- 4. STARTA ENHETEN:** Håll knappen **(A1)** intryckt för att starta enheten. Omgivningslampan blinkar och skärmen visar den aktuella sugstyrkan. Pumpen startar i **stimuleringsfasen**.
- 5. JUSTERING AV SUGSTYRKAN:** Använd **(A2)** för att minska och **(A3)** för att öka sugstyrkan när som helst under drift.
- 6. BYTA FAS:** För att byta arbetsfas (Stimulering, Uttryck, Antistasis, Korrigering) trycker du på knappen **(A4)**. Faserna växlar i tur och ordning, och den valda fasen bekräftas av motsvarande indikatorlampa.
- 7. PAUS/FORTSÄTT:** Tryck på knappen **(A5)** för att pausa eller återuppta driften.
- 8. AVSLUTA SESSIONEN:** När du är klar håller du knappen intryckt för att stänga av enheten. Koppla bort enheten och påbörja rengöringen.

OBS! Enheten stängs av automatiskt efter 30 minuter. Den sparar den senast använda fasen och sugstyrkan inför nästa användningstillfälle.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

A. INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Ta isär alla delar som går att tvätta och rengör dem noggrant (med undantag för huvudenheten och kabeln).

B. EFTER VARJE ANVÄNDNING

Ta isär och skölj alla delar (utom huvudenheten) i kallt vatten för att ta bort mjölkrester.

Delar som ska rengöras: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. DAGLIG DESINFEKTION

- Tvätta händerna först.
- Ta isär alla relevanta delar.
- Sterilisera i kokande vatten eller med ångsterilisator i **5 minuter**.
- Koka INTE delarna **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Delarna **(3, 4, 8)** får inte komma i kontakt med heta metallytor.

FÖRVARING: Låt torka ordentligt i luften och förvara på en ren, torr plats.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID RENGÖRING

- Ta isär alla tillbehör som kommer i kontakt med bröstet eller bröstmjölken. (med undantag för huvudenheten)
- Rengör delarna omedelbart efter användning för att undvika mjölkrester och bakterietillväxt.
- Se till att du monterar/demonterar varje tillbehör enligt monteringsanvisningarna.
- Se till att inga delar går förlorade vid montering och demontering
- Alla silikonkomponenter kan placeras i sterilisatorn för desinfektion (med undantag för huvudenheten).
- **Försiktighetsåtgärder vid desinfektion av ventiler:** Koka inte och ångdesinficera inte i mer än 3 minuter.
- **Försiktighetsåtgärder vid desinfektion av flaskor:** Koka inte och ångdesinficera inte i mer än 5 minuter.

PRODUKTSPECIFIKATION

Ingångsspänning:	5 V likström
Nominell effekt:	6W
Driftstemperatur:	15–30 °C
Driftsfuktighet:	50% - 80%
Förpackningens innehåll:	11 delar
Ursprungsor:	Kina

GARANTI – VILLKOR

Denna produkt omfattas av en 24-månadersgaranti mot tillverkningsfel, räknat från inköpsdatumet som styrks av kvitto eller faktura. Vid köp mot faktura förkortas den lagstadgade garantin till 12 månader. Den 24-månadersgarantin **omfattar inte** skador som beror på normalt slitage av produkten, kosmetiska skador, tillbehör eller förbrukningsvaror (till exempel batterier, skrivhuvuden eller slitagedelar). **Batterierna omfattas av en garanti på 6 månader.**

OGILTIG GARANTI

Den lagstadgade garantin på 12/24 månader upphör att gälla i följande fall:

1. Produkten har skadats på grund av felaktig användning som inte följer anvisningarna i bruksanvisningen.
2. Produkten har modifierats, manipulerats eller öppnats.
3. Felet beror på bristfälligt underhåll av komponenter, tillbehör eller förbrukningsmaterial (t.ex. oxidation, att elektriska delar har hamnat i vätska, rester som blockerar sensorn, läckage av frätande vätska från batterierna).

UNDANTAG FRÅN GARANTIE

Följande omfattas inte av den lagstadgade garantin på 24 månader:

1. Kostnaderna för utbyte eller reparation av slitagedelar samt kostnader i samband med normalt underhåll av produkten.
2. Kostnaderna och riskerna i samband med transporten av produkten till och från försäljningsstället eller den auktoriserade servicestationen för garantihantering.
3. Skador som uppstår till följd av felaktig installation eller felaktig användning som inte följer anvisningarna i bruksanvisningen.
4. Skador orsakade av naturkatastrofer, fall, oavsiktliga stötar eller miljöförhållanden som inte är förenliga med produkten.
5. Fel som har en försumbar inverkan på produktens prestanda.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR:

Tillverkaren, distributören och alla parter som är involverade i försäljningen av produkten ansvarar inte för ekonomiska förluster eller skador som uppstår till följd av att produkten inte fungerar som den ska. I enlighet med gällande lagstiftning är de inte ansvariga för direkta eller indirekta skador, inkomstbortfall, förlorade besparingar eller andra konsekvenser som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda produkten och/eller tillhörande dokumentation (i pappersform eller elektronisk form), inklusive brist på service.

För mer information om supporttjänsten, se försäljningsvillkoren som finns tillgängliga på webbplatsen **www.nuvitababy.com**.

Kiitos, että olet hankkinut Nuvita 1260W -mallisen puettavan sähköisen rintapumpun. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempäa tarvetta varten.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

SINUN JA LASTESI TURVALLISUUDEN JA TERVEYDEN VUOKSI KAIKKI TÄMÄN HANKKEEN OHJEET LIITTYVÄT TURVALLISUUTEEN. NOUDATA NIITÄ EHDOTTOMASTI.

VAROITUS

1. Älä käytä rintapumppua kylvyn aikana tai märissä tiloissa.
2. Säilytä tämä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
3. Vältä suoraa auringonvaloa ja korkeita lämpötiloja.
4. Älä käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita. Ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltohenkilöstöön korjausta varten.
5. Pidä käyttämättömät osat lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran tai muiden onnettomuuksien välttämiseksi.

VAARA

1. Älä lataa tai käytä tuotetta avotulen lähellä tai yli 45 °C:n lämpötilassa.
2. Älä upota pääyksikköä tai USB-kaapelia veteen, juomiin tai muihin nesteisiin.
3. Älä koskaan polta pääyksikköä tai altista sitä avotulelle.
4. Pidä muovipakkaukset lasten ulottumattomissa tukehtumisvaaran välttämiseksi.

ILMOITUS

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Asenna osat aina asennusohjeiden mukaisesti.
- Säädä imuvoimaa mukavuuden ja henkilökohtaisen sietokyvyn mukaan.
- Älä kallista maitokeräyskuppia tai täytä sitä merkittyä rajaa pidemmälle.
- Tarkista aina maidon lämpötila ennen ruokintaa palovammojen välttämiseksi.
- Jos maitotuotantosi on vähäistä, käytä tuotetta lääkärin ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä pumppua liikaa, jotta vältät nännin vahingoittumisen.
- Lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, jos kipua tai ärsytystä ilmenee.
- Älä jaa käyttäjien kesken laitteen osia, jotka joutuvat kosketuksiin maidon kanssa.
- Älä käytä pumppua raskauden aikana, sillä se voi aiheuttaa kohdun supistuksia.
- Lopeta pumppaaminen, jos maitoa ei tule 5 minuutin kuluessa.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Nuvita 1260W Materno Comfort on suunniteltu tukemaan imettäviä äitejä jäljittelemällä vauvan luonnollista imetysrytmiä. Tämä päälle puettava sähköinen rintapumppu on kehitetty erityisesti auttamaan äitejä pumppaamaan rintamaitoa tehokkaasti ja mukavasti liikkeellä ollessaan, mikä takaa sujuvan ja kivuttoman pumppauskokemuksen. Siinä on 9 säädettävää voimakkuustasoa, NipFit®-toiminto ja 3-vaiheinen Careflo®-tekniikka.



KORJAUS

Korjausmoodi auttaa korjaamaan sisäänpäin kääntyneitä tai litteitä nännejä lempeän imun avulla.



TÄYSIN SILIKONISTA VALMISTETTU RINTAKUPPI

: ihoystävällinen ja hellävarainen iholle, tarjoaa pehmeän ja mukavan istuvuuden tehokasta imua varten.



TAKAISINVIRTAUKSEN ESTOJÄRJESTELMÄ

estää maidon virtaamisen takaisin moottoriyksikköön, mikä takaa tuotteen hygienian ja pitkän käyttöiän.



CAREFLO®-TEKNIikka:

Toisin kuin perinteiset kaksivaiheiset rintapumput, Careflo®-mallissa on tavallisten stimulaatio- ja maidonpoistovaiheiden lisäksi kolmas, verenkierron pysähtymistä estävä tyhjennysvaihe. Tämä auttaa:

- Edistää tasaisempaa maidontuotantoa.
- Estä maitokanavien tukkeutuminen ja utaretulehdus.
- Lievittää rintojen jännitystä ja maitotukosta.
- Tue sujuvampaa ja keskeytyksetöntä imetysmatkaa.



NIPFIT®-TOIMINTO:

Litteiden tai sisäänpäin kääntyneiden nännien korjaus.

Tämä toiminto on suunniteltu auttamaan litteiden tai sisäänpäin kääntyneiden nännien korjaamisessa sekä tukemaan maidonpoistoa hellävaraisen, asteittaisen stimulaation avulla:

- Se auttaa nänniä työntymään ulospäin.
- Se helpottaa vauvan imemisen aloittamista rinnasta.
- Se tukee imetyksen aloittamista ja jatkamista.

Älä käytä NipFit®-ominaisuutta, jos:

1. Nännissäsi tai nännipihassasi on avoimia haavoja, halkeamia, vaurioita tai aktiivisia tulehduksia.
2. Sinulle on äskettäin tehty rintaleikkaus.
3. Sinulla on diagnosoitu nännin sisäänvetäytyminen, joka johtuu sairaudesta tai vammasta, eikä se ole synnynnäinen. Jos tilanne on tämä, ota ensin yhteyttä lääkäriisi.
4. Tunnet terävää kipua jo ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien. Lopeta käyttö välittömästi.
5. Sinulla on erityisen herkkä iho tai sinulla on paikallisia ihosairauksia, kuten ekseema tai psoriasis.
6. Olet raskaana. Imuhoito voi laukaista supistuksia.



VAROITUS

NipFit®-ominaisuus on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan synnytyksen jälkeen. Älä käytä sitä raskauden aikana.


KÄYTÖN AIKAiset VAROITUKSET

- Aloita aina alimmalta tasolta, tasolta 1. Älä lisää voimakkuutta, ennen kuin nänni on vähitellen sopeutunut, vaikka tunne olisikin miellyttävä.
- Älä käytä NipFit®-ominaisuutta yhtäjaksoisesti yli 5–10 minuuttia kerrallaan, etenkin ensimmäisten viikkojen aikana.
- Älä tee enempää kuin 2 korjaushoitoa päivässä. Liiallinen käyttö voi aiheuttaa ärsytystä, turvotusta tai mikrorepeämiä nänniin.
- Lopeta käyttö välittömästi, jos tunnet terävää kipua, epänormaalia punoitusta, jatkuvaa turvotusta, rakkuloita tai muuta nestevuotoa kuin maitoa.
- Tämä laite ei ole kliiniseen hoitoon tarkoitettu sertifioitu lääkinnällinen laite, eikä se korvaa kättilön, lääkärin tai kansainvälisesti sertifoidun imetysneuvojan (IBCLC) konsultointia.
- 3. asteen vakava sisäänpäin kääntynyt nänni, jossa on voimakasta kiinnittymistä, vaatii lääkärin arvioinnin ennen minkään korjausvälineen käyttöä.
- Pitkäkestoinen ja voimakas käyttö voi aiheuttaa nännipihan turpoamista, mikä voi tilapäisesti vaikeuttaa vauvan imemisen aloittamista. Tämä voi johtaa toivottuun päivastaiseen tulokseen.

OHJEET TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN:

- Varmista, että silikonikuppi on oikean kokoinen, mukaan lukien 24 mm:n laippa tai 20/22 mm:n supistimet, ennen kuin otat NipFit®-toiminnon käyttöön. Liian suuri kuppi voi vahvistaa imua nännipiirissä hallitsemattomalla tavalla.
- Levitä ennen hoitoa muutama tippa rintamaitoa tai puhdasta lanoliinivoidetta alueen pehmentämiseksi.
- NipFit®-istunnon aikana nänni tulee sijoittaa kupin keskelle. Väärä asento voi aiheuttaa epäsymmetristä imua ja ärsytystä.
- Jos et huomaa mitään parannusta 4–6 viikon asianmukaisen käytön jälkeen, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.


TUOTTEEN OSAT

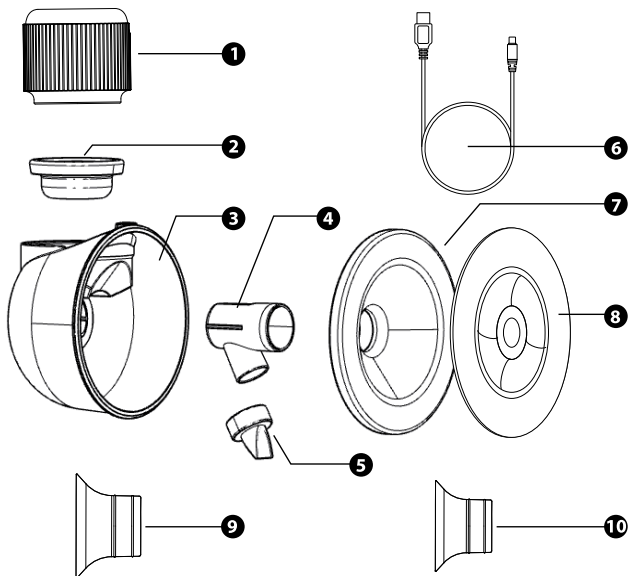

EL.	NIMI	AINE	MÄÄRÄ
1	Pääyksikkö	\	1
2	Silikonikalvo	Silikoni	1
3	Kupin runko	Polypropeeni	1
4	Liitin	Polypropeeni	1
5	Venttiili	Silikoni	1
6	USB-kaapeli	\	1
7	Silikoninen rintakuppi	Silikoni	1
8	Pölytiivis suojus	Polypropeeni	1
9	22 mm:n silikonisisäosa	Silikoni	1
10	20 mm:n silikonisisäosa	Silikoni	1

ASENNUSOHJEET


1. Aseta venttiili liittimeen ja varmista, että se istuu tiukasti paikallaan.
2. Kiinnitä liitin kupin runkoon.
3. Aseta silikonikalvo kupin rungon päälle ja paina sitä alaspäin, kunnes se on tiiviisti kiinni kaikilta sivuilta.
4. Kiinnitä silikoninen rintakuppi tukevasti kupin runkoon.
5. Kiinnitä pääyksikkö silikonikalvoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.

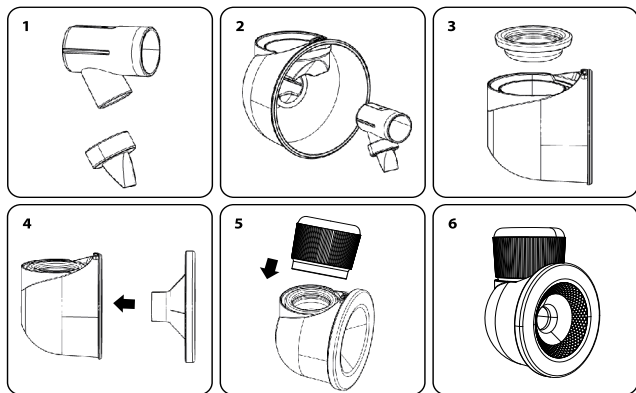

LATAUSMENETELMÄ

LATAA PUMPPU MUKANA TOIMITETULLA USB-KAAPELILLA:

- Yhteensopiva seuraavien kanssa: tietokoneen USB-portit, virtalähteet tai varavirtalähteet.
- Käytä vain sellaisia varavirtalähteitä, joiden lähtöteho on enintään **5 V/3 A**.
- LED-akkuikoni ilmaisee lataustilan:
 - Jos symboli **(B6)** vilkkuu, laite latautuu
 - Jos symboli ei vilku ja on päällä, laite on täysin ladattu

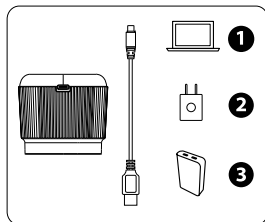

HUOMAUTUS: Sammuta pumppu aina ennen lataamista.

PANEELIN KUVAUS

A1: Virtapainike (paina ja pidä painettuna käynnistääksesi tai sammuttaaksesi laitteen)

A2: Pienennä imutasoa

A3: Nosta imutasoa

A4: Vaihekytkin (stimulaatio / ilmaisu / pysähtymisen estäminen / korjaus)

A5: Tauko/Jatka

B1: Stimulaatiovaiheen ilmaisin

B2: Ilmentymisvaiheen ilmaisin

B3: Staasinestovaiheen ilmaisin


B4: Korjausvaiheen ilmaisin

B5: Toimintataso / Ajanäyttö

B6: Akun varaustason ilmaisin

B7: Aikayksikön näyttö (minuuttia)

B1+B3: NipFit®-toiminto aktivoitu

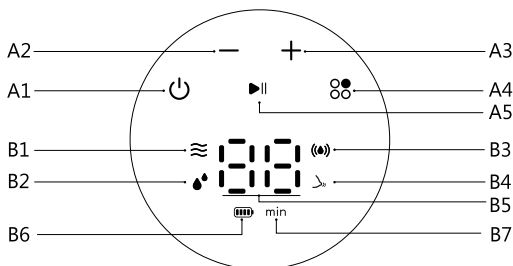

STIMULAATIOVAIHE (TASO 1–9): Tässä vaiheessa pumppu tuottaa suhteellisen nopean imurytmin, jossa imuvoima on heikko. Sen tarkoituksena on stimuloida rintakudosta hellävaraisesti ja edistää maidon erittymistä jäljittelemällä vauvan alkuvaiheen pinnallista imemistä. On suositeltavaa käyttää tätä vaihetta ennen siirtymistä muihin vaiheisiin.




IMUVAIHE (TASO 1–9): Tämä vaihe jäljittelee vauvan syvempää ja hitaampaa imurytmiä, kun vauva juo aktiivisesti maitoa. Imuvoima on suurempi ja taajuus hitaampi kuin stimulaatiovaiheessa. Tämän asetuksen tarkoituksena on auttaa maidon pumppaamisessa tehokkaammin, kun maidonlaskurefleksit alkavat.

PYSÄHTYMISEN ESTÄVÄ IMUVAIHE (TASO 1–9): Tässä vaiheessa imu tapahtuu sykkivällä tavalla, jonka tarkoituksena on poistaa perusteellisesti rintasta jäljelle jäänyt maito pumppauksen jälkeen. Säännöllinen käyttö voi auttaa ehkäisemään maidon kertymistä, vähentämään maitokanavien tukkeutumisen riskiä ja ylläpitämään maidon virtausta.

NIPFIT®-TOIMINTO: Aktivoi nännien korjaustoiminto painamalla tilapainiketta, kunnes (B1)- ja (B3)-kuvakkeet alkavat vilkkua. Toiminnossa on 3 voimakkuustasoa.

KÄYTTÖOHJEET

- 1. VALMISTELUT:** Pese kädet huolellisesti ennen Nuvita 1260W Materno Comfort -laitteen käyttöä. Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja koottu oikein asennusohjeiden mukaisesti. Älä koota pääyksikköä ja USB-kaapelia puhdistuksen aikana.
- 2. ASENTO:** Etsi rauhallinen ja mukava paikka istua. Käytä tarvittaessa jalkatukea, jotta pystyt säilyttämään rennon ja ryhdikkään asennon. Ennen pumppaamista voit hellästi hieroa rintojasi lämpimällä pyyhkeellä maidon virtauksen edistämiseksi.
- 3. KÄYTTÖOHJE:** Aseta silikoninen rintakuppi nännin keskelle ja varmista, että se tiivistyy tiukasti rinnan ympärille ilman ilmarakoja. Pidä laitetta varovasti kiinni yhdellä kädellä ja tue rintaa toisella kädellä, jotta se pysyy vakaana.

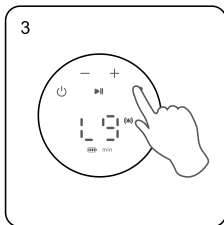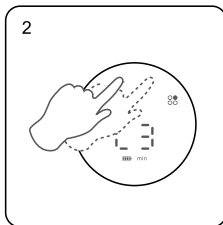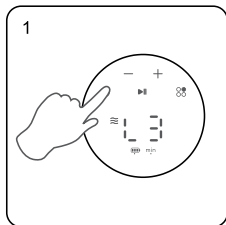

- 4. KÄYNNISTÄMINEN:** Käynnistä laite painamalla **(A1)**-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Ympäristövalo vilkkuu, ja näytöllä näkyy nykyinen imuteho. Pumppu käynnistyy stimulaatiovaiheessa.
- 5. IMUTEHON SÄÄTÄMINEN:** Käytä painiketta **(A2)** imutehon pienentämiseen ja **painiketta (A3)** sen suurentamiseen milloin tahansa laitteen käytön aikana.
- 6. VAIHEEN VAIHTAMINEN:** Voit vaihtaa toimintavaihetta (stimulaatio, tyhjennys, verenkierron edistäminen, korjaus) painamalla **(A4)**-painiketta. Vaiheet vaihtuvat järjestyksessä, ja valittu vaihe vahvistetaan vastaavalla merkkivalolla.
- 7. TAUKO/JATKA:** Voit keskeyttää tai jatkaa toimintaa painamalla **(A5)**-painiketta.
- 8. ISTUNNON LOPETTAMINEN:** Kun olet valmis, sammuta laite painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Irrota laite ja aloita puhdistustoimenpiteet.

HUOMAUTUS: Laite sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Se tallentaa viimeksi käytetyn vaiheen ja imutehon seuraavaa käyttökertaa varten.

PUHDISTUS JA HUOLTO

A. ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Irrota kaikki pestävät osat ja puhdista ne huolellisesti (lukuun ottamatta pääyksikköä ja johtoa).

B. JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN

Pura kaikki osat (pääyksikköä lukuun ottamatta) ja huuhtelee ne kylmällä vedellä maitojäämien poistamiseksi.

Puhdistettavat osat: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. PÄIVITTÄINEN DESINFIOINTI

- Pese ensin kädet.
- Irrota kaikki tarvittavat osat.
- Käytä kiehuva vettä tai höyrysterilointilaitetta **5 minuutin** ajan.
- **ÄLÄ** keitä osia **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Osat **(3, 4, 8)** eivät saa koskettaa kuumia metallipintoja.

SÄILYTYKSI: Anna kuivua huolellisesti ilmassa ja säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa.

PUHDISTUSTA KOSKEVAT VAROTOIMET

- Pura kaikki lisälaitteet, jotka joutuvat kosketuksiin rinnan tai rintamaidon kanssa. (pääyksikköä lukuun ottamatta)
- Puhdista osat käytön jälkeen välittömästi, jotta vältät maitojäämät ja bakteerien lisääntymisen.
- Varmista, että asennat ja irrotat jokaisen lisävarusteen asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä hukkaa mitään osia laitteen kokoamisen ja purkamisen yhteydessä
- Kaikki silikoniosat voidaan laittaa sterilointilaitteeseen desinfiotavaksi (pääyksikköä lukuun ottamatta).
- **Venttiilin desinfointia koskevat varotoimet:** Älä keitä tai höyrydesinfiointi venttiiliä yli 3 minuuttia.
- **Pullojen desinfointia koskevat varotoimet:** Älä keitä pulloja eikä desinfiointi niitä höyryllä yli 5 minuuttia.

TUOTETIEDOT

Syöttöjännite:	5 V DC
Nimellisteho:	6W
Käyttölämpötila:	15–30 °C
Käyttökosteus:	50% - 80%
Pakkauksen sisältö:	11 osaa
Alkuperäpaikka:	Kiina

TAKU - EHDOT JA MÄÄRÄYKSET

Tälle tuotteelle myönnetään 24 kuukauden takuu valmistusvirheiden varalta, ja takuu alkaa ostopäivästä, joka on todistettava kuitilla tai laskulla. Jos ostos on tehty laskulla, lakisääteinen takuu aika lyhenee 12 kuukauteen. 24 kuukauden takuu **ei kata** tuotteen normaalista kulumisesta johtuvia vaurioita, ulkonäöllisiä vaurioita, lisävarusteita tai kulutustarvikkeita (kuten paristoja, päitä tai kuluvia osia). **Paristoille myönnetään 6 kuukauden takuu.**

TAKUU EI OLE VOIMASSA

12/24 kuukauden lakisääteinen takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:

1. Tuote on vaurioitunut, koska sitä on käytetty väärin, käyttöohjeiden vastaisesti.
2. Tuotetta on muutettu, siihen on puututtu tai se on avattu.
3. Vika johtuu komponenttien, lisälaitteiden tai tarvikkeiden puutteellisesta huollosta (esim. hapettuminen, sähköosien upottaminen nesteisiin, anturia tukkivat jäämät, syövyttävän nesteen vuotaminen akuista).

TAKUUN POISSULKEMISET

Seuraavat tuotteet eivät kuulu 24 kuukauden lakisääteisen takuun piiriin:

1. Kuluvien osien vaihto- tai korjauskustannukset sekä tuotteen tavanomaiseen huoltoon liittyvät kustannukset.
2. Tuotteen kuljettamisesta myyntipisteeseen tai valtuutettuun takuukorjauskeskukseen ja sieltä takaisin aiheutuvat kustannukset ja riskit.
3. Vahingot, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä.
4. Luonnonkatastrofien, putoamisten, tahattomien iskujen tai tuotteen kanssa yhteensopimattomien ympäristöolosuhteiden aiheuttamat vauriot.
5. Viat, joilla on merkityksellinen vaikutus tuotteen suorituskykyyn.

VASTUUN RAJOITUKSET:

Valmistaja, jakelija ja kaikki tuotteen myyntiin osallistuvat osapuolet eivät ole vastuussa tuotteen toimintahäiriöstä johtuvista taloudellisista menetyksistä tai vahingoista. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ne eivät ole vastuussa suorista tai epäsuorista menetyksistä, tulojen tai säästöjen menetyksistä tai muista seurauksista, jotka johtuvat tuotteen ja/tai siihen liittyvän dokumentaation (paperisen tai sähköisen) käytöstä tai käyttämättömyydestä, mukaan lukien huoltopalvelujen puuttuminen.

Lisätietoja tukipalvelusta löytyy myyntiehtoista, jotka ovat saatavilla verkkosivustolla **www.nuvitababy.com**.

Täname, et ostsite Nuvita 1260 W kantava elektrilise rinnapumba. Palun lugege kasutusjuhendit enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspidiseks kasutamiseks.

OLULISED OHUTUSJUHISED

TEIE JA TEIE LASTE OHUTUSE JA TERVISE HUVIDES ON KOGU KÄESOLEVA PROJEKTI SISU SEOTUD OHUTUSEGA. PALUN JÄRGIGE NEID KINDLASTI.

HOIATUS

1. Ärge kasutage rinnapumpa vannis ega niiskes keskkonnas.
2. Hoidke seda toodet laste ja lemmikloomade käeulatuses eemal.
3. Vältige otsese päikesevalguse ja kõrge temperatuuri mõju.
4. Ärge kasutage seadet, kui see on silmaga nähtavalt kahjustatud. Remondi osas pöörduge tootja või volitatud personali poole.
5. Hoidke kasutamata osad laste käeulatuses eemal, et vältida lämbumist või muid õnnetusi.

OHT

1. Ärge laadige ega kasutage toodet lahtise tule läheduses või keskkonnas, mille temperatuur ületab 45 °C.
2. Ärge kastke põhiseadet ega USB-kaablit vette, jookidesse ega muudesse vedelikesse.
3. Ärge kunagi põletage põhiseadet ega hoidke seda lahtise tule läheduses.
4. Hoidke plastpakendid laste käeulatuses eemal, et vältida lämbumisohtu.

TEADE

- Laadige seade enne esimest kasutamist täielikult üles.
- Komponente tuleb alati kokku panna vastavalt kokkupanekujuhendile.
- Reguleerige imemisjõudu vastavalt mugavusele ja isiklikule taluvusele.
- Ärge kallutage piimakogumiskruusi ega täitke seda üle märgitud piiri.
- Enne toitmist kontrollige alati piima temperatuuri, et vältida põletusi.
- Kui teil on piima vähe, kasutage toodet arsti juhendamisel.
- Ärge kasutage pumpa liiga palju, et vältida nibu vigastamist.
- Kui tekib valu või ärritus, lõpetage toote kasutamine ja pöörduge tervishoiutöötaja poole.
- Ärge jagage kasutajate vahel seadme osi, mis puutuvad kokku piimaga.
- Ärge kasutage pumpa raseduse ajal, kuna see võib põhjustada emaka kokkutõmbeid.
- Lõpetage pumpamine, kui 5 minuti jooksul ei tule piima välja.
- Kasutage seda toodet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Nuvita 1260W Materno Comfort on loodud imetavate emade toetamiseks, jälgendades lapse loomulikke imetamisrütmi. See kantav elektriline rinnapump on spetsiaalselt välja töötatud, et aidata emadel väljapumpata rinnapiima tõhusalt ja mugavalt ka väljaspool kodu, tagades sujuva ja valutut pumpamiskogemuse. Seadmel on 9 reguleeritavat intensiivsustaset, NipFit®-funktsioon ja 3-faasiline Careflo®-tehnoloogia.



KORREKTSIOON

Korrektsoonirežiim aitab õrnade imetsüklite abil parandada sissepoole pööratud või lamedaid nibusid.



TÄISSILIKOONIST RINNAKAITSE

– nahasõbralik ja nahale õrn, tagab pehme ja mugava istuvuse, mis võimaldab tõhusat imemist.



TAGASIVOOLU TAKISTAV SÜSTEEM

hoiab ära piima tagasivoolu mootorploki, tagades toote hügieenilisuse ja pika kasutusaja.



CAREFLO®-TEHNOLOOGIA:

Erinevalt traditsioonilistest kahefaasilistest rinnapumpadest lisab Careflo® tavapäraste stimuleerimis- ja väljapumpamisetappide kõrvale kolmanda, staasi vältiva drenaažifaasi. See aitab:

- Soodustada piima tootmise ühtlasemat kulgu.
- Vältige piimakanalite ummistumist ja mastitiiti.
- Leevendab rindade pinget ja piimakogunemist.
- Toeta sujuvat ja takistusteta imetamiskogemust.



NIPFIT® FUNKTSIOON:

Lame- või sissepoole pööratud nibude korrigeerimine.

See funktsioon on mõeldud lameda või sissepoole pööratud nibu korrigeerimiseks ning piima väljutamise toetamiseks õrna ja järkjärgulise stimuleerimise abil:

- See aitab nibul väljapoole eenduda.
- See hõlbustab lapse rinnale haaramist.
- See toetab imetamise alustamist ja jätkamist.

Ärge kasutage NipFit®-funktsiooni, kui:

1. Teil on nibul või areoolil avatud haavandid, praod, kahjustused või aktiivsed nakkused.
2. Teil on hiljuti tehtud rindade operatsioon.
3. Teil on diagnoositud haigusest või traumast tingitud nibu sisepoole pöörumine, mis ei ole kaasasündinud. Sellisel juhul pöörduge esmalt oma arsti poole.
4. Juba esimesest kasutamisest alates tunnete teravat valu. Lõpetage toote kasutamine viivitamatult.
5. Teil on eriti tundlik nahk või teil esinevad kohalikud nahahaigused, nagu ekseem või psoriaas.
6. Olete rase. Imemine võib esile kutsuda sünnitusvalusid.



HOIATUS

NipFit®-funktsioon on mõeldud kasutamiseks ainult sünnitusjärgsel perioodil. Ärge kasutage seda raseduse ajal.


KASUTAMISE AJAL JÄRGITAVAD HOIATUSED

- Alusta alati madalaimast tasemest, tasemest 1. Ära suurenda intensiivsust enne, kui nibu on järk-järgult kohanenud, isegi kui tunne on meeldiv.
- NipFit®-funktsiooni pidev kasutamine ei tohi ühe seansi jooksul ületada 5–10 minutit, eriti esimestel nädalatel.
- Ärge tehke päevas rohkem kui 2 korrigeerimissessiooni. Liigne kasutamine võib põhjustada nibu ärritust, turseid või mikro-rebendeid.
- Lõpetage kasutamine viivitamatult, kui tekib terav valu, ebatavaline punetus, püsiv turse, villid või muu vedeliku eritumine peale piima.
- Käesolev seade ei ole kliiniliseks raviks sertifitseeritud meditsiiniseade ega asenda konsulteerimist ämmaemanda, arsti või rahvusvahelise sertifikaadiga imetamishõustajaga (IBCLC).
- 3. astme tõsise kleepumisega sisepoole pööratud nibu puhul on enne mis tahes korrigeerimisvahendi kasutamist vaja läbida arstlik läbivaatus.
- Pikaajaline ja intensiivne kasutamine võib põhjustada rinnanibu turseid, mis ajutiselt raskendavad imiku rinnale haaramist. See võib avaldada soovitud efektile vastupidist mõju.

OHUTU KASUTAMISE JUHISED:

- Enne NipFit®-funktsiooni aktiveerimist veenduge, et silikoonkauss on õige suurusega, arvestades ka 24 mm äärikut või 20/22 mm üleminekutükke. Liiga suur kauss võib suurendada areooli imemisjõudu kontrollimatult.
- Enne protseduuri kanna piirkonnale mõned tilgad rinnapiima või puhast lanoliinikreemi, et seda pehendada.
- NipFit®-seansi ajal peaks nibu olema rinnakupis keskel. Vale asend võib põhjustada ebaühtlast imemist ja ärritust.
- Kui 4–6 nädala jooksul nõuetekohase kasutamise järel ei märka te mingit paranemist, pöörduge tervishoiutöötaja poole.


TOOTE KOMPONENDID

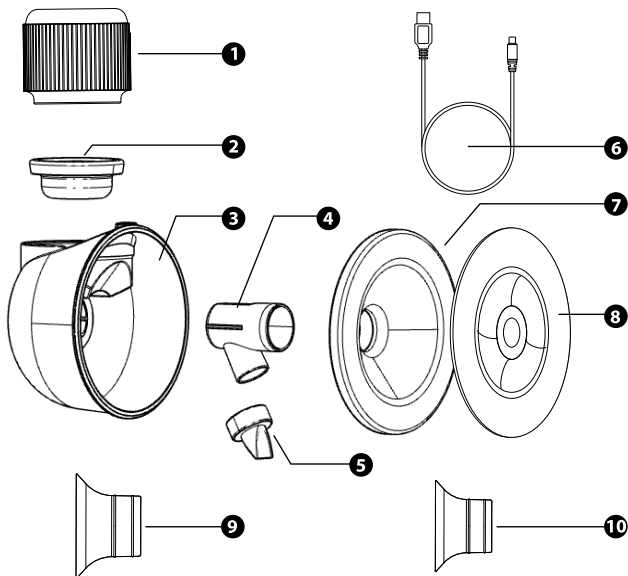

EL.	NIMI	MATERJAL	KOGUS
1	Põhiseade	\	1
2	Silikoonmembraan	Silikoon	1
3	Kausi korpus	Polüpropüleen	1
4	Ühendusdetail	Polüpropüleen	1
5	Klapp	Silikoon	1
6	USB-kaabel	\	1
7	Silikoonist rinnakaitse	Silikoon	1
8	Tolmukindel kate	Polüpropüleen	1
9	22 mm silikoonist sisetükk	Silikoon	1
10	20 mm silikoonist sisetükk	Silikoon	1

PAIGALDUSJUHE


1. Paigaldage ventiil ühendusosasse ja veenduge, et see oleks kindlalt paigas.
2. Kinnitage ühendusdetail tassi korpusele.
3. Aseta silikoonmembran tassi korpuse peale ja suru alla, kuni see on kõikidelt külgedelt tihedalt kinni.
4. Kinnitage silikoonist rinnakaitse kindlalt rinnakaitse korpusele.
5. Kinnitage põhiseade silikoonmembraanile, kuni kostab klõpsatus.

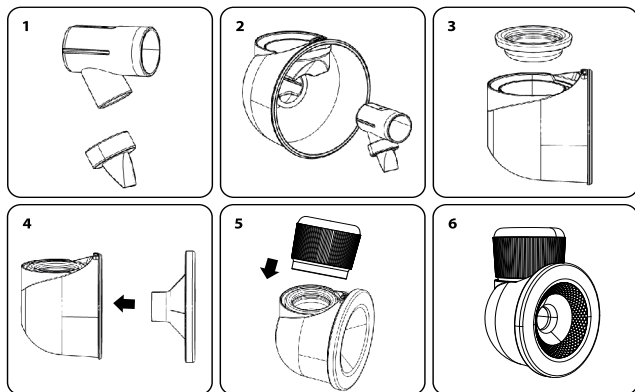

LAADIMISVIIS

KASUTAGE PUMBA LAADIMISEKS KAASASOLEVAT USB-KAABLI:

- Sobib kasutamiseks: arvuti USB-pordidega, toiteadapteritega või varutoiteallikatega.
- Kasutage ainult selliseid akupankasid, mille väljundvõimsus ei ületa **5 V/3 A**.
- LED-akuikoon näitab laadimisolekut:
 - Kui sümbol **(B6)** vilgub, laadib seade
 - Kui sümbol ei vilgu ja on sisse lülitatud, on seade täielikult laetud

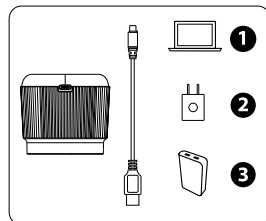

MÄRKUS: Lülitage pump enne laadimist alati välja.

PANEELI KIRJELDUS

A1: Toitenupp (hoidke all, et seade sisse või välja lülitada)

A2: Imemisvõimsuse vähendamine

A3: Suurendage imemisvõimsust

A4: Faasilüliti (stimulatsioon / väljendamine / staasi vältimine / korrigeerimine)

A5: Peata/Jätka

B1: Stimulatsiooni faasi indikaator

B2: Ekspressioonifaasi indikaator

B3: Staasi vältimise faasi indikaator


B4: Korrigeerimisfaasi indikaator

B5: Töötasand / aja kuvamine

B6: Aku laetuse näidik

B7: Ajaühiku kuvamine (minutid)

B1+B3: NipFit®-funktsioon aktiveeritud

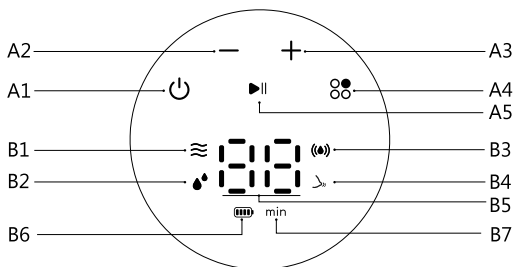




STIMULATSIOONIFAAS (TASE 1–9): Selles faasis tekitab pump suhteliselt kiire imemisrütmi madala imemisjõuga. See on mõeldud rinnakoe õrnaks stimuleerimiseks ja piima väljutamise soodustamiseks, jäljendades imiku esialgset pindmist imemist. Soovitav on kasutada seda faasi enne teistele faasidele üleminekut.

IMEMISFAAS (TASE 1–9): See faas jäljendab imiku sügavat ja aeglasemat imemisrütmi, kui ta aktiivselt piima joob. Imemisjõud on suurem ja sagedus aeglasem võrreldes stimuleerimisfaasiga. See seade on mõeldud piima tõhusamaks väljapumpamiseks pärast piimaeritusrefleksi algust.

STAASI VÄLTIMISE IMEMISFAAS (TASE 1–9): Selles faasis kasutatakse pulseerivat imemisrežiimi, mille eesmärk on eemaldada pärast väljapumpamist rinnast põhjalikult järelejäänud piim. Regulaarne kasutamine võib aidata vältida piima stasi tekkimist, vähendada piimakanalite ummistumise ohtu ja säilitada piimavoolu.

NIPFIT®-FUNKTSIOON: Nibu korrigeerimisfunktsiooni aktiveerimiseks vajuta režiiminuppu, kuni ikoonid (**B1**) ja (**B3**) hakkavad vilkuma. Funktsioonil on 3 intensiivsustaset.

- 1. ETTEVALMISTUS:** Enne Nuvita 1260W Materno Comforti kasutamist peske käed põhjalikult. Veenduge, et kõik osad oleksid puhtad ja õigesti kokku pandud vastavalt paigaldusjuhendile. Vältige põhiseadme ja USB-kaabli kokkupanemist puhastamise ajal.
- 2. ASEND:** Leidke vaikne ja mugav koht, kus istuda. Kasutage vajaduse korral jalatoet, et säilitada lõdvestunud ja sirge kehahoiak. Enne pumbamist võite rindu õrnalt soojendada sooja rätikuga, et soodustada piima voolu.
- 3. KASUTAMINE:** Asetage silikoonist rinnakaitse nibu keskele ja veenduge, et see sulguks tihedalt ümber rinda, jättes õhupiludeta. Hoidke seadet ühe käega õrnalt kinni ja toetage teisega rinda, et see püsiks paigal.

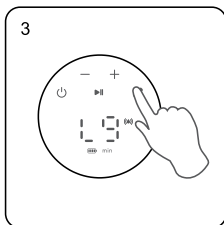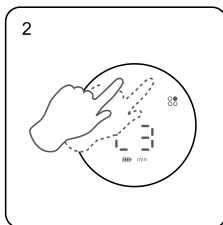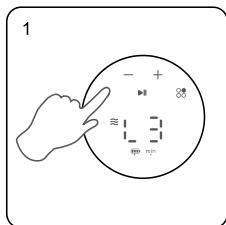

- 4. SISSELÜLITAMINE:** Seadme käivitamiseks hoidke nuppu **(A1)** all. Ümbritseva valguse indikaator hakkab vilkuma ja ekraanile kuvatakse praegune imemisvõimsus. Pump alustab tööd **stimuleerimisetapis**.
- 5. INTENSIIVSUSE REGULEERIMINE:** Kasutage nuppu **(A2)** imemisvõimsuse vähendamiseks ja nuppu **(A3)** selle suurendamiseks igal ajal seadme töötamise ajal.
- 6. FAASIDE VAHETAMINE:** Tööfaasi (stimulatsioon, väljutamine, staasi vältimine, korrigeerimine) muutmiseks vajutage nuppu **(A4)**. Faasid vahelduvad järjestikku ning valitud faas kinnitatakse vastava märgutulel.
- 7. PEATAMINE/JÄTKAMINE:** Töö peatamiseks või jätkamiseks vajutage nuppu **(A5)**.
- 8. SEANSI LÕPETAMINE:** Kui olete valmis, hoidke nuppu all, et seade välja lülitada. Ühendage seade vooluvõrgust lahti ja alustage puhastamist.

MÄRKUS: Seade lülitub 30 minuti pärast automaatselt välja. Seade salvestab viimati kasutatud faasi ja imemisvõimsuse järgmiseks kasutamiseks.

PUHASTUS JA HOOLDUS

A. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

Eemaldage kõik pestavad osad ja puhastage need põhjalikult (välja arvatud põhiseade ja kaabel).

B. PÄRAST IGA KASUTAMIST

Lahutage kõik osad (välja arvatud põhiseade) ja loputage neid külmas vees, et eemaldada piimajäägid.

Puhastatavad osad: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)**.

C. IGAPÄEVANE DESINFITSEERIMINE

- Pese kõigepealt käed.
- Eraldage kõik asjakohased osad.
- Steriliseerige keeva veega või aurusterilisaatoris **5 minutit**.
- **ÄRGE** keetke osi **(2, 5, 7, 9, 10)**.
- Osad **(3, 4, 8)** ei tohi puutuda kokku kuumade metallpindadega.

SÄILITAMINE: Laske tootel õhu käes põhjalikult kuivada ja hoidke seda puhtas, kuivas kohas.

PUHASTAMISEL JÄRGITAVAD ETTEVAATUSABINÕUD

- Laadige lahti kõik lisaseadmed, mis puutuvad kokku rinnaga või rinnapiimaga. (välja arvatud põhiseade)
- Pärast kasutamist puhastage osad kohe, et vältida piimajääkide tekkimist ja bakterite paljunemist.
- Veenduge, et paigaldate ja demonteerite iga lisaseadme vastavalt paigaldusjuhendile.
- Ärge laske kokkupaneku ja lahtivõtmise käigus ühtegi osa kaduma minna
- Kõik silikoonosad (välja arvatud põhiseade) võib desinfitseerimiseks panna sterilisaatorisse.
- **Ventiili desinfitseerimise ettevaatusabinõud:** Ärge keetke ega desinfitseerige auruga kauem kui 3 minutit.
- **Pudelite desinfitseerimise ettevaatusabinõud:** Ärge keetke ega desinfitseerige auruga kauem kui 5 minutit.

TOOTE SPETSIFIKATSIOON

Sisendpinge:	5 V alalisvool
Nimivõimsus:	6W
Töötemperatuur:	15–30 °C
Töökeskkonna niiskus:	50% - 80%
Pakendi sisu:	11 osa
Päritolukoht:	Hiina Rahvavabariik

GARANTII – TINGIMUSED

Sellele tootele kehtib 24-kuuline garantii tootmisvigade suhtes, mis algab ostukviitungi või arve alusel tõendatud ostukuupäevast. Arve alusel ostmise korral lüheneb seadusjärgne garantii 12 kuuni. 24-kuuline garantii **ei hõlma** kahjustusi, mis on tekkinud toote tavapärase kulumise tagajärjel, esteetilisi kahjustusi, lisaseadmeid ega tarbekaupu (näiteks akusid, pead või kuluivad osad). **Akudele kehtib 6-kuuline garantii.**

KEHTETU GARANTII

12/24-kuuline seadusjärgne garantii kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:

1. Toode on kahjustunud ebaõige kasutamise tõttu, mis ei vasta kasutusjuhendis esitatud juhiste.
2. Toodet on muudetud, sellega on manipuleeritud või see on avatud.
3. Rikke põhjuseks on komponentide, lisaseadmete või tarvikute ebapiisav hooldus (nt oksüdeerumine, elektriliste osade vedelikku kastumine, andurit ummistavad jäägid, korrosiivse vedeliku lekkimine akudest).

GARANTII VÄLISTUSED

24-kuulisest seadusjärgsest garantiist on välja jäetud järgmised asjad:

1. Kulumisele alluvate osade asendamise või remondiga seotud kulud ning toote tavapärase hooldusega seotud kulud.
2. Kulud ja riskid, mis on seotud toote transportimisega müügikohta või volitatud garantiiteeninduskeskusesse ning sealt tagasi.
3. Kahjustused, mis on tekkinud valest paigaldamisest või ebaõigest kasutamisest, mis ei vasta kasutusjuhendis esitatud juhistele.
4. Loodusõnnetuste, kukkumiste, juhuslike kokkupõrgete või tootega kokkusobimatute keskkonnatingimuste põhjustatud kahjustused.
5. Vigad, mille mõju toote toimivusele on tühine.

VASTUTUSE PIIRANGUD:

Tootja, turustaja ja kõik toote müügiga seotud osapooled ei vastuta toote rikke tagajärjel tekkinud majanduslike kahjude või kahjude eest. Kehtivate õigusaktide kohaselt ei vastuta nad otseste ega kaudsete kahjude, sissetuleku või säästude kaotuse ega muude tagajärgede eest, mis tulenevad toote ja/või sellega seotud dokumentatsiooni (paberkandjal või elektroonilisel kujul) kasutamisest või kasutamatast, sealhulgas teenuse puudumisest.

Abi teenuse kohta leiate täpsemat teavet müügingimustest, mis on kättesaadavad veebilehel **www.nuvitababy.com**.

Paldies, ka iegādājāties Nuvita 1260 W valkājamo elektrisko krūts sūkni. Lūdzu, pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai izmantošanai.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

JŪSU UN JŪSU BĒRNU DROŠĪBAS UN VESELĪBAS LABAD VISS ŠAJĀ PROJEKTĀ IEKLAUTAIS ATTIECAS UZ DROŠĪBU. LŪDZU, NOTEIKTI IEVĒROJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.

BRĪDINĀJUMS

1. Nelietojiet krūts sūkni vannā vai mitrā vidē.
2. Šo produktu glabāiet bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
3. Izvairieties no tiešas saules gaismas un augstām temperatūrām.
4. Nelietojiet ierīci, ja tai ir redzami bojājumi. Remonta veikšanai sazinieties ar ražotāju vai pilnvarotu personālu.
5. Neizmantojot detaļas glabāiet bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu aizrīšanās risku vai citus negadījumus.

BRIESMAS

1. Nelādējiet un nelietojiet izstrādājumu atklātas liesmas tuvumā vai vidē, kuras temperatūra pārsniedz 45 °C.
2. Galveno ierīci vai USB kabeli nedrīkst iegremdēt ūdenī, dzērienos vai citos šķidrumos.
3. Nekādā gadījumā nedrīkst sadedzināt galveno ierīci vai pakļaut to atklātai liesmai.
4. Plastmasas iepakojumu turiet bērniem nepieejamā vietā, lai novērstu nosmakšanas risku.

PAZIŅOJUMS

- Pirms pirmās lietošanas ierīci pilnībā uzlādējiet.
- Vienmēr montējiet detaļas, ievērojot montāžas instrukcijas.
- Pielāgojiet sūkšanas spēku atbilstoši savam komfortam un individuālajai izturībai.
- Nenovietojiet piena savākšanas kausiņu slīpi un nepiepildiet to pāri atzīmētajai robežai.
- Pirms barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru, lai izvairītos no apdegumiem.
- Ja jums ir nepietiekama piena izdalīšanās, lietojiet šo produktu pēc ārsta norādījumiem.
- Nelietojiet sūkni pārāk bieži, lai izvairītos no krūtsgala traumām.
- Ja rodas sāpes vai kairinājums, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
- Nelietojiet vienu un to pašu ierīces daļu, kas nonāk saskarē ar pienu, vairākiem lietotājiem.
- Grūtniecības laikā sūkni nelietojiet, jo tas var izraisīt dzemdes kontrakcijas.
- Pārtrauciet sūkt, ja 5 minūšu laikā nav izsūkts piens.
- Šo produktu lietojiet tikai saskaņā ar lietošanas pamācībā sniegto aprakstu.

INFORMĀCIJA

Nuvita 1260W Materno Comfort ir izstrādāts, lai atbalstītu zīdīšanas posmā esošas mātes, imitējot mazuļa dabisko zīdīšanas ritmu. Šis valkājams elektriskais krūts sūknis ir īpaši izstrādāts, lai palīdzētu māmiņām efektīvi un ērti sūkt krūts pienu, atrodoties ceļā, nodrošinot nevainojamu un nesāpīgu sūkšanas pieredzi. Tam ir 9 regulējami intensitātes līmeņi, NipFit® funkcija un 3-fāzu Careflo® tehnoloģija.



KOREKCIJA

Korekcijas režīms palīdz novērst ievēlktus vai plakanus krūšu galu, izmantojot maigu sūkšanas ciklu.



PILNĪBĀ NO SILIKONA IZGATAVOTS KRŪŠU UZGALIS

— ādai draudzīgs un maigs, nodrošina mikstu un ērtu piegulšanu, kas garantē efektīvu sūkšanu.



PRETATPLŪDES SISTĒMA

neļauj pienam atplūst atpakaļ motorā, nodrošinot izstrādājuma higiēnu un ilgmūžību.



CAREFLO® TEHNOLOĢIJA:

Atšķirībā no tradicionālajiem divfāzu krūts sūkņiem, Careflo® papildus standarta stimulācijas un izsūknēšanas posmiem ievieš trešo – pretstāzes drenāžas fāzi. Tas palīdz:

- Veicināt vienmērīgāku piena pieplūdi.
- Novēršiet piena kanālu aizsprostošanos un mastītu.
- Atvieglo krūšu sasprindzinājumu un piepūšanos.
- Palīdziet nodrošināt vienmērīgāku un netraucētu zīdīšanas procesu.



NIPFIT® FUNKCIJA:

Plakano vai ievēlktu krūšu galu korekcija.

Šī funkcija ir paredzēta, lai palīdzētu iztaisnot plakanus vai ievēlktus krūšu galu un veicinātu piena izsūknēšanu, izmantojot maigu, pakāpenisku stimulāciju:

- Tas palīdz krūtsgala izvīrīties uz āru.
- Tas atvieglo mazuļa piesūkšanos pie krūts.
- Tas veicina zīdīšanas uzsākšanu un turpināšanu.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietojiet NipFit® funkciju, ja:

1. Jums uz krūtsgala vai areolas ir atvērtas čūlas, plisumi, bojājumi vai aktīvas infekcijas.
2. Jums nesen ir veikta krūšu operācija.
3. Jums ir diagnosticēta krūtsgala ievēlšanās, ko izraisījis slimība vai trauma, nevis iedzimta patoloģija. Ja tas tā ir, vispirms konsultējieties ar ārstu.
4. Jūs izjūtat asas sāpes jau pēc pirmās lietošanas reizes. Nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
5. Jums ir īpaši jutīga āda vai arī Jūs ciešat no lokāliem dermatoloģiskiem traucējumiem, piemēram, ekzēmas vai psoriāzes.
6. Jūs esat grūtniece. Aspirācija var izraisīt dzemdes kontrakcijas.



BRĪDINĀJUMS

NipFit® funkcija ir paredzēta lietošanai tikai pēc dzemdībām. Nelietojiet grūtniecības laikā.


BRĪDINĀJUMI LIETOŠANAS LAIKĀ

- Vienmēr sāciet ar zemāko līmeni — 1. līmeni. Nepalieliniet intensitāti, kamēr krūtsgals nav pakāpeniski pieradis, pat ja sajūta ir patīkama.
- Vienā lietošanas reizē nepārsniedziet 5–10 minūtes nepārtrauktas NipFit® funkcijas lietošanas, it īpaši pirmajās pāris nedēļās.
- Dienā neveiciet vairāk kā 2 korekcijas seansus. Pārmērīga lietošana var izraisīt krūtsgala kairinājumu, pietūkumu vai mikroplisumus.
- Nekavējoties pārtrauciet lietošanu, ja rodas asas sāpes, neparasts apsārtums, ilgstošs pietūkums, pūslīši vai šķidruma izdalīšanās, kas nav piens.
- Šī ierīce nav sertificēta medicīnas ierīce klīniskai terapijai un neaizstāj konsultāciju ar vecmāti, ārstu vai Starptautiskās padomes sertificētu laktācijas konsultantu (IBCLC).
- 3. pakāpes, stipri pielīpušs ievēlts krūtsgals ir jāizvērtē ārstam, pirms tiek izmantota jebkāda korekcijas ierīce.
- Ilgstoša, intensīva lietošana var izraisīt areolas pietūkumu, kas uz laiku apgrūtinā zīdaiņa piesūkšanos. Tas var radīt pretēju efektu nekā vēlamais.

NORĀDĪJUMI PAR DROŠU LIETOŠANU:

- Pirms NipFit® funkcijas aktivizēšanas pārliecinieties, ka silikona kausiņš ir pareizā izmērā, ņemot vērā 24 mm atloku vai 20/22 mm reduktorus. Pārāk liels kausiņš var nekontrolēti pastiprināt sūkšanas spēku uz areolu.
- Pirms procedūras uzklājiet dažus pilienus mātes piena vai tīra lanolīna krēma, lai mikstinātu šo zonu.
- NipFit® lietošanas laikā krūtsgals jānovieto kausa centrā. Nepareiza novietojuma gadījumā var rasties asimetriska sūkšana un kairinājums.
- Ja pēc 4–6 nedēļām, pareizi lietojot šo līdzekli, neievērojat nekādu uzlabojumu, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.


PRODUKTA SASTĀVDAĻAS

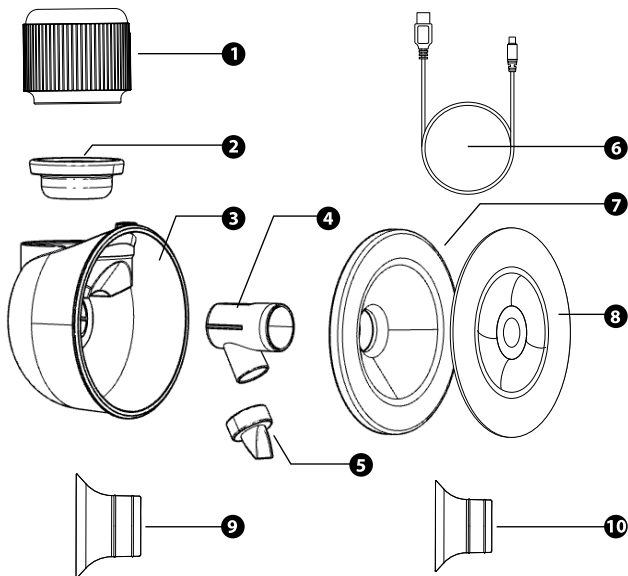

NĒ.	NOSAUKUMS	MATERIĀLS	DAUDZUMS
1	Galvenā vienība	\	1
2	Silikona diafragma	Silikons	1
3	Kausa korpus	Polipropilēns	1
4	Savienotājs	Polipropilēns	1
5	Vārsts	Silikons	1
6	USB kabelis	\	1
7	Silikona krūšu uzgaļi	Silikons	1
8	Putekļus necaurlaidīgs pārklājs	Polipropilēns	1
9	22 mm silikona ieliktnis	Silikons	1
10	20 mm silikona ieliktnis	Silikons	1

MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS


1. Ievietojiet vārstu savienotājā un pārļiecinieties, ka tas ir cieši piestiprināts.
2. Pievienojiet savienotāju kausa korpusam.
3. Uzlieciet silikona diafragmu uz kausa korpusa un nospiediet to, līdz tā visās malās cieši piekļaujas.
4. Cietīgi piestipriniet silikona krūšu uzgaļu pie krūstura korpusa.
5. Pievienojiet galveno vienību silikona diafragmai, līdz izdzirdat klikšķi.

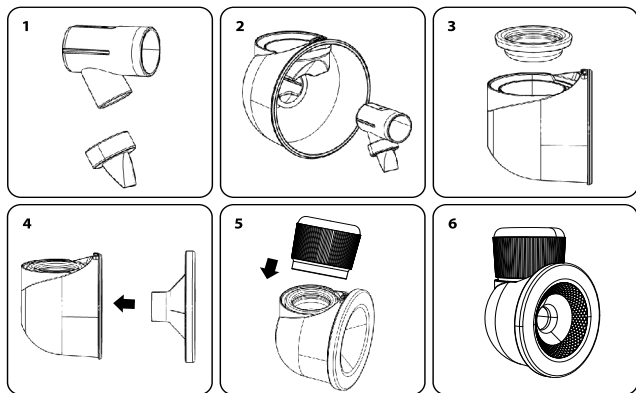

UZLĀDES VEIDS

LAI UZLĀDĒTU SŪKNI, IZMANTOJIET KOMPLEKTĀ IEKĻAUTO USB KABELI:

- Savietojams ar: datoru USB portiem, strāvas adapteriem vai ārējiem akumulatoriem.
- Izmantojiet tikai ārējās baterijas, kuru izejas jauda nepārsniedz **5 V/3 A**.
- LED akumulatora ikona norāda uz uzlādes statusu:
 - Ja simbols **(B6)** mirgo, ierīce tiek uzlādēta
 - Ja simbols nemirgo un ir ieslēgts, ierīce ir pilnībā uzlādēta

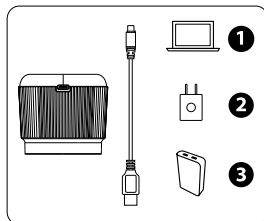

PIEZĪME: Pirms uzlādēšanas vienmēr izslēdziet sūkni.

PANEĻA APRAKSTS

A1: Ieslēgšanas poga (nospiediet un turiet nospiektu, lai ieslēgtu/izslēgtu)

A2: Samazināt sūkšanas līmeni

A3: Palielināt sūkšanas jaudu

A4: Fāzes slēdzis (stimulācija / izsūkņēšana / pretstāzes / korekcija)

A5: Pārtraukt/Turpināt

B1: Stimulācijas fāzes indikators

B2: Ekspresijas fāzes indikators

B3: Antistāzes fāzes indikators


B4: Korekcijas fāzes indikators

B5: Darba līmenis / Laika rādītājs

B6: Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

B7: Laika vienības attēlojums (minūtes)

B1+B3: NipFit® funkcija ir ieslēgta

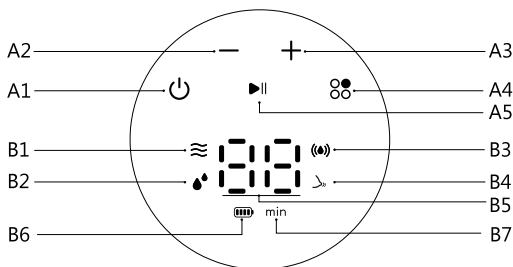

STIMULĀCIJAS FĀZE (1.–9. LĪMENIS): Šajā fāzē sūknis rada salīdzinoši ātru sūkšanas ritmu ar nelielu sūkšanas jaudu. Tā ir paredzēta, lai maigi stimulētu krūšu audus un veicinātu piena izdalīšanos, imitējot mazuļa sākotnējo seklo sūkšanas ritmu. Ieteicams izmantot šo fāzi, pirms pāriet uz citām fāzēm.




PIENA IZSŪKNĒŠANAS FĀZE (1.–9. LĪMENIS): Šī fāze imitē dziļāku un lēnāku zīdaiņa sūkšanas ritmu, kad tas aktīvi dzer pienu. Salīdzinājumā ar stimulācijas fāzi sūkšanas spēks ir lielāks, bet frekvence — zemāka. Šis iestatījums ir paredzēts, lai palīdzētu efektīvāk izsūknēt pienu, kad ir sācies piena izdalīšanās reflekss.

PRETSTĀZES SŪKŠANAS FĀZE (1.–9. LĪMENIS): Šī fāze nodrošina pulsējošu sūkšanas režīmu, kura mērķis ir pilnībā izsūkt no krūts pēc sūkšanas palikušo pienu. Regulāra lietošana var palīdzēt novērst piena stāzi, samazināt piena kanālu aizsprostošanās risku un uzturēt piena plūsmu.

NIPFIT® FUNKCIJA: Lai ieslēgtu krūtsgala korekcijas funkciju, nospiediet režīma pogu, līdz ikonai (**B1**) un (**B3**) sāk mirgot. Funkcijai ir 3 intensitātes līmeņi.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- 1. SAGATAVOŠANĀS:** Pirms Nuvita 1260W Materno Comfort lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas. Pārļiecinieties, ka visas detaļas ir tīras un pareizi samontētas saskaņā ar montāžas instrukcijām. Tīrīšanas laikā neuzstādiet galveno vienību un USB kabeli.
- 2. ĶERMEŅA POZĪCIJA:** Atrodiet klusu un ērtu vietu, kur apsēsties. Ja nepieciešams, izmantojiet kāju atbalstu, lai saglabātu atbīvotu, taisnu stāju. Pirms sūkņēšanas varat viegli stimulēt krūtis ar siltu dvieļi, lai veicinātu piena plūsmu.
- 3. LIETOŠANA:** Novietojiet silikona krūts uzgaļu uz krūtsgala vidū un pārļiecinieties, ka tas cieši piekļaujas krūts virsmai, neveidojot gaisa spraugas. Vienu roku viegli turiet ierīci, bet ar otru atbalstiet krūti, lai tā paliktu nekustīga.

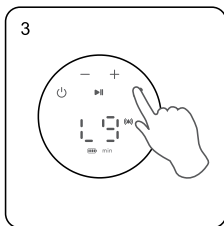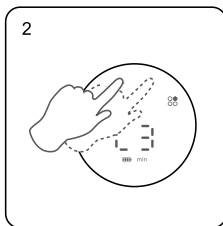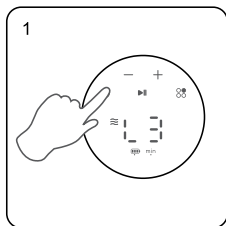

- 4. IESLĒGŠANA:** Nospiediet un turiet nospiešu pogu **(A1)**, lai ieslēgtu ierīci. Apgaismojums sāks mirgot, un ekrānā parādīsies pašreizējais sūkšanas līmenis. Sūknis sāk darboties stimulācijas fāzē.
 - 5. INTENSITĀTES REGULĒŠANA:** jebkurā brīdī darbības laikā izmantojiet pogu **(A2)**, lai samazinātu, un pogu **(A3)**, lai palielinātu sūkšanas intensitāti.
 - 6. FĀŽU PĀRSLĒGŠANA:** Lai mainītu darba fāzi (stimulācija, izsūkņēšana, pretstāzes, korekcija), nospiediet pogu **(A4)**. Fāzes mainīsies secīgi, un izvēlēto fāzi apstiprinās atbilstošais indikatorgaismas signāls.
 - 7. PAUZE/TURPINĀT:** Lai apturētu vai atsāktu darbību, nospiediet pogu **(A5)**.
 - 8. SESIJAS PĀRTRAUKŠANA:** Kad esat pabeidzis, nospiediet un turiet nospiešu pogu, lai izslēgtu ierīci. Atvienojiet ierīci un sāciet tīrīšanas procedūras.
- PIEZĪME:** Ierīce automātiski izslēgsies pēc 30 minūtēm. Tā saglabā pēdējo izmantoto režīmu un sūkšanas intensitāti, lai tos varētu izmantot nākamajā reizē.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

A. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

Izjauciet visas mazgājamas detaļas un rūpīgi tās iztīriet (izņemot galveno bloku un kabeli).

B. PĒC KATRAS LIETOŠANAS REIZES

Izjauciet un noskalojiet visas detaļas (izņemot galveno bloku) aukstā ūdenī, lai noņemtu piena atliekas.

Tīrāmās detaļas: **(2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10).**

C. IKDIENAS DEZINFEKCIJA

- Vāpirms nomazgājiet rokas.
- Atdaliet visas attiecīgās detaļas.
- Sterilizējiet verdošā ūdenī vai tvaika sterilizatorā **5 minūtes**.
- **NEVĀRĪJIET** detaļas **(2, 5, 7, 9, 10).**
- Detālām **(3, 4, 8)** nedrīkst pieskarties karstām metāla virsmām.

UZGLABĀŠANA: Rūpīgi izžāvējiet gaisā un uzglabājiet tīrā, sausā vietā.

TĪRĪŠANAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Izjauciet visus piederumus, kas nonāk saskarē ar krūti vai mātes pienu. (izņemot galveno ierīci)
- Pēc lietošanas nekavējoties iztīriet detaļas, lai novērstu piena atlieku palikšanu un baktēriju vairošanos.
- Pārliecinieties, ka katru piederumu samontējat/demontējat saskaņā ar montāžas instrukcijām.
- Montāžas un demontāžas laikā nezaudējiet nevienu detaļu
- Visas silikona detaļas var ievietot sterilizatorā dezinfekcijai (izņemot galveno vienību).
- **Piesardzības pasākumi vārsta dezinfekcijai:** Nevāriet un nedezinfekcijiet ar tvaiku ilgāk par 3 minūtēm.
- **Piesardzības pasākumi pudelišu dezinfekcijai:** Nevāriet un nedezinfekcijiet ar tvaiku ilgāk par 5 minūtēm.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Ieejas spriegums:	5 V līdzstrāva
Nominālā jauda:	6W
Darbības temperatūra:	15–30 °C
Darbības mitrums:	50% - 80%
Iepakojuma saturs:	11 daļas
Izcelsmes vieta:	Ķīnas Tautas Republika

GARANTIJA – NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Šim produktam ir 24 mēnešu garantija pret ražošanas defektiem, sākot no pirkuma datuma, ko apliecina čeks vai rēķins. Ja pirkums veikts ar rēķinu, likumā noteiktā garantija tiek saīsināta līdz 12 mēnešiem. 24 mēnešu garantija **neattiecas uz** bojājumiem, kas radušies produkta normālas nolietojšanās rezultātā, estētiskiem bojājumiem, piederumiem vai patēriņa materiāliem (piemēram, baterijām, galviņām vai detaļām, kas pakļautas nolietojšanās procesam). **Baterijām garantija ir spēkā 6 mēnešus.**

NEPIEMĒROJAMA GARANTIJA

12/24 mēnešu likumā noteiktā garantija zaudē spēku šādos gadījumos:

1. Produkts ir bojāts nepareizas lietošanas dēļ, kas neatbilst lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.
2. Produkts ir pārveidots, ar to ir manipulēts vai tas ir atvērts.
3. Kļūmi izraisa nepietiekama komponentu, piederumu vai paligmateriālu apkope (piemēram, oksidēšanās, elektrisko detaļu iegremdēšana šķidrums, sensoru bloķējoši nogulsējumi, korozīva šķidruma noplūde no baterijām).

GARANTIJAS IZŅĒMUMI

No 24 mēnešu likumā noteiktās garantijas ir izslēgti šādi gadījumi:

1. Izmaksas par nolietojamajām detaļām vai to remontu, kā arī izmaksas, kas saistītas ar izstrādājuma ikdienas apkopi.
2. Izmaksas un riski, kas saistīti ar produkta transportēšanu uz un no pārdošanas vietas vai pilnvarotā garantijas apkalpošanas centra.
3. Zaudējumi, kas radušies nepareizas uzstādīšanas vai neatbilstošas lietošanas dēļ, neievērojot lietošanas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
4. Bojājumi, ko izraisījušas dabas katastrofas, krišana, nejauši triecieni vai izstrādājumam neatbilstoši vides apstākļi.
5. Defekti, kasniecīgi ietekmē izstrādājuma darbības rādītājus.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI:

Ražotājs, izplatītājs un visas puses, kas iesaistītas produkta pārdošanā, nav atbildīgas par ekonomiskiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radušies produkta darbības traucējumu dēļ. Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem tie nav atbildīgi par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, ienākumu vai ietaupījumu zaudējumiem vai citām sekām, kas radušās produkta un/vai ar to saistītās dokumentācijas (papīra vai elektroniskā formā) lietošanas vai nespējas to lietot dēļ, tostarp par apkalpošanas trūkumu.

Lai uzzinātu vairāk par palīdzības pakalpojumu, lūdzu, iepazīstieties ar Pārdošanas noteikumiem, kas pieejami tīmekļa vietnē **www.nuvitababy.com**.



IT: Scarica o consulta online il manuale di istruzioni nella tua lingua preferita. **ES:** Descargue/vea el manual de instrucciones en línea en su idioma preferido. **EN:** Download/view the instruction manual online in your preferred language. **FR:** Téléchargez/consultez le manuel d'instructions en ligne dans la langue de votre choix. **DE:** Laden Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer bevorzugten Sprache online herunter/lesen Sie sie online. **PT:** Acesse o manual de instruções online no idioma de sua preferência. **GR:** Κατεβάστε ή δείτε το εγχειρίδιο οδηγιών στη γλώσσα που προτιμάτε. **NO:** Last ned eller se bruksanvisningen på nett på ditt foretrukne språk. **DA:** Hent eller læs brugsanvisningen online på dit foretrukne sprog. **AL:** Shkarkoni ose shikoni manualin e udhëzimeve në internet në gjuhën tuaj të preferuar. **HU:** Töltse le vagy tekintse meg online a használati útmutatót az Ön által választott nyelven. **CZ:** Stáhněte si nebo prohlédněte návod k použití online ve vašem preferovaném jazyce. **SI:** Prenesite ali si oglejte navodila za uporabo na spletu v želenem jeziku. **BG:** Изтеглете или прегледайте ръководството за употреба онлайн на предпочитания от вас език. **SK:** Stiahnite si alebo pozrite si návod na použitie online vo vašom preferovanom jazyku. **RO:** Descărcați sau vizualizați manualul de instrucțiuni online în limba preferată.



www.nuvitababy.com

info@nuvitababy.com

IMPORTED / DISTRIBUTED BY

Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020 Gwardamangia
Malta - Europe

All rights reserved

1260W_26_Manual_v2.0.1